



R82[®]

R82 Heron

En multifunktionell dusch- och toalettstol

R82 Heron

R82 Heron är en av de mest funktionella dusch- och toalettstolarna på marknaden. Bakom den rena och enkla designen döljer sig många funktionella egenskaper, som förbättrar upplevelsen för såväl hjälparen som användaren.

Smart design ger bättre sittkomfort

Heron sätter nya standarder för användare med särskilda positioneringsbehov. Stolen är ergonomiskt utformad vilket innebär att sitsen kan tiltas och ryggstödet kan vinklas för användning utan kompromisser.

Heron kan användas fristående med ett bäcken, över toaletten eller som en duschstol. De enkla höjd- och vinklingsfunktionerna säkerställer optimala arbetsförhållanden för hjälparen.

Heron är utrustad med fyra låsbara hjul och levereras med ett smalt ryggstöd för ökad rörelsefrihet. För ytterligare stöd och komfort kan den utrustas med mjukdyna för rygg och sits, sidosvängbara bålstöd eller sidodelar med mjukdyna som stödjer axlarna. Heron finns i en storlek.




Heron med hydraulik och mjukdynor

Detaljer



Enkel höjjustering

Heron kan höjjusteras med hydraulik från 51 till 78 cm, alternativt med el från 56 till 78 cm. Höjjusteringen underlättar förflyttning till och från stolen och erbjuder optimala arbetsförhållanden för hjälparen.

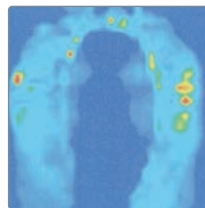

Sitskomfort

Heron har utformats med hjälp av tryckmätning för att säkra ett minimalt tryck, samt förbättra sitskomforten för användaren, även vid användning under längre tid.



Optimal positionering

Heron har lättåtkomliga handtag för sitstiltning (-5° till 25°) och ryggvinkling (0° till 30°), vilket ger optimala möjligheter för en bra positionering. (Silstiltning via handkontroll på Heron med el).



Fullt stöd i sittande läge

Heron kan kompletteras med ett brett tillbehörssortiment för att ge användaren anpassat stöd, vare sig behovet av stöd är stort eller litet.

Standardutförande

Produkt	Art.nr
Hygienstol Heron	31880505-01
Hygienstol Heron EL inkl. armstöd	31880505-11ELK
Chassi	
Stålrör, höjreglerbart, vitt	
Hjul	
125 mm låsbara.	
Körhandtag	
Fasta, integrerade i ryggchassit	
Sits	
Tiltbar (-5° - 25°)	
Rygg	
Höjd- och vinkelreglerbar (vinkel -10° -30°)	
Stänkskydd	
Nedre inkl hållare.	



Heron med el

Inställningar

Heron är optimal både för användaren och hjälparen. Stolen kan enkelt tiltas samtidigt som ryggstödet vinklas och bibehåller höftens position. Allt för bästa sittkomfort.

Heron kan höjjusteras med hydraulik alternativt med el. Höjjusteringen underlättar förflyttning till och från stolen och erbjuder optimala arbetsförhållanden för hjälparen.

Höjjustering

Höjjustering med hydraulik från 51 till 78 cm.

Höjjustering med el från 56 till 78 cm.



Sitstilt – tilt in space

Sitsen kan tiltas från -5° till 25°.



Fler detaljer

Lättåtkomliga handtag

De ergonomiskt designade handtagen gör det enkelt att tilla sitsen och vinkla ryggen.



Olåst



Låst

Lättrullade hjul

De stora hjulen gör det lätt att manövrera och använda Heron. Alla hjul är utrustade med bromsar för ökad säkerhet och stabil förflyttning.



Olåst



Låst

Mjuka och formade dynor

Heron dynor är anatomiskt formade och uppnår därmed en optimal tryckfördelning.




Anatomiskt formade dynor

Multifunktionell

Heron kan användas över en toalett, fristående med bäcken, eller i duschen. Den kan även tillas över ett badkar vid exempelvis schamponering.



Över toalett med stänkskydd (std)

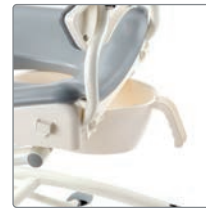

Fristående med potta (tillbehör)



Duschstol

Heron – På toaletten eller i duschen

Heron kan användas över toaletten, fristående med ett bäcken eller i duschen.



Heron över toaletten



Heron som duschstol

Tillbehör



Mjukdyna

Sits och rygg, komplett sats.
Rekommenderas.

One size	31880507-01
Sits	31117005
One size	31101204



Bord

Monteras på armstöd. Kan användas för att säkerställa ett naturligt utgångsläge för toalettbesök, särskilt om användaren har nedsatt bål och huvudkontroll.

44x19 BxD cm	31880508-04
--------------	-------------



Sidodelar rygg

Skapar stöd och stabilitet för bålen och skulderpartiet.

10x36 BxH cm	31880508-01
--------------	-------------

(Ryggstödsbredd, ovsida: 48 cm)



Höftstöd

Ger stöd för bäckenet och justering av sitsbredden. Sitsbredd=35-49 cm

21x10 BxH cm	31880508-02
--------------	-------------



Mjukdyna sidodelar rygg

För extra komfort.

10x36 BxH cm	31880507-04
--------------	-------------



Adapter rygg för sitsdjupsreducering

Monteras mellan ryggplattan och chassit. Minskar sitsdjupet med 5 cm.


One size	31880508-06
----------	-------------



Huvudstöd

För korrekt placering och stöd av huvudet vid tiltning. Turtlestag 11.5 alt 25 cm, rostfritt.

Nr 3 dusch	11.5 cm	319905145-00
Nr 3 dusch	25 cm	319905146-00
Nr 4 dusch	11.5 cm	319906145-00
Nr 4 dusch	25 cm	319906146-00

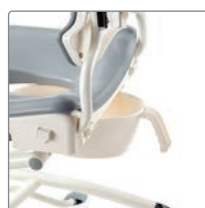

Potta

Gör det möjligt att använda Heron som fristående toalettstol.

20x34x12.5 BxDxH cm	31880130
---------------------	----------



Bålstöd, sidosvängbara

För positionering av bålen.

Mellan dyna 7x17 cm	3183016-262
Stor dyna 9x19 cm	3183016-162



Stänkskydd

Kan även användas för att hålla benen i rätt position och kontrollera adduktion

8x13.5 BxH cm	31880508-05
---------------	-------------



Bålstöd, fasta

För positionering av bålen.

Typ 5, 15x15 cm	31880508-09
-----------------	-------------



Stänkskydd, lågt

One size	31880508-07
----------	-------------



Armstöd

Uppfällbara. Hjälper användaren vid förflyttning och ger extra stöd vid positionering. Ingår som standard i Heron EL.

5x37x25 BxLxH cm	31880508-03
------------------	-------------

(H=Höjd över sitsen)



Västar och bälten

För korrekt positionering och stöd
För mer info, se www.etac.se.

Tillbehör, forts.

**Benstöd snäv vinkel**

För positionering av benen. Inkl fotplattor.
Underbenslängd: 39–55 cm
One size 31880506-01

**Polstring benstöd**

Polstring för användare med abduktion.
One size 31880506-12

**Benstöd snäv vinkel, kort**

För positionering av benen. Inkl fotplattor.
Underbenslängd: 30–38 cm.
One size 31880506-03

**Vadband**

Stöd för underbenen
Höjd 10 cm 31880509-01

**Benstöd vid vinkel**

För positionering av benen. Inkl fotplattor.
Underbenslängd: 36–53 cm
One size 31880506-02

**Hälband**


För korrekt positionering av fötterna.
Höjd 4 cm
5 cm ovan fotplattan. 31880509-02

För fler tillbehör – besök etac.se

Mått och vikt

Mått

	Heron med hydraulik	Heron med el
Sitsbredd (A)	550 mm	550 mm
Sitsbredd med höftstöd (tillbehör)	350–490 mm	350–490 mm
Sitsdjup (B)	450 mm	450 mm
Ryggbredd (F)	290 mm	290 mm
Ryggstödshöjd (C)	555–625 mm	555–625 mm
Underbenslängd (D)	400–560 mm	400–560 mm
Sitshöjd ovan golvet (E)	510–780 mm	560–780 mm
Totalbredd (G)	670 mm	670 mm
Underredets längd (H)	710 mm	710 mm
Total höjd (I)	1080–1350 mm	1130–1350 mm
Plan sitsvinkel	-5° – -25°	-5° – -25°
Ryggstöds vinkel	-10° – 30°	-10° – 30°
Vikt	28 kg	31 kg
Max brukar-/lastvikt	100 kg	130 kg

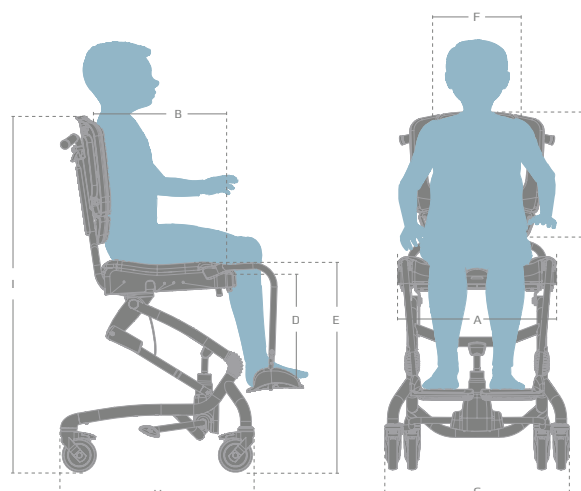

350–490 mm



400 & 450 mm



550–620 mm



Max 130 kg



Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB

☎ 0371-58 73 00

✉ info@etac.se

🌐 www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities