



immedia

SatinSheet BaseSheet elastic fit maxi

Et formsydd laken med strikk ligger alltid godt på plass. Glideflate i hele lengden sørger for enklere bevegelser inn og ut av sengen. Det er også enklere å snu seg eller endre liggestilling på egen hånd.

Immedia SatinSheet BaseSheet elastic fit maxi

Et glidelaken som legger til rette for bevegelse inn og ut av sengen, samt vending og forflytning i sengen. SatinSheet BaseSheet elastic fit gjør det enklere for bruker å være selvstendig ved behov for å snu eller flytte seg.




Full glideflate i lengden gjør det enklere å flytte hele kroppen i sengen. Glideflaten ved fotenden dekker hele lakenets bredde, som gjør det svært enkelt å flytte føttene sideveis inn og ut av sengen uten motstand.

Stripete mønster indikerer de to glideretningene. 2-veis glideflate gir enkel sideveis bevegelse ved vending og stillingsendring, og bidrar til økt selvstendighet og mindre smerter ved bevegelse inn i og ut av sengen.

Høyere friksjon i lengderetningen sikrer at bruker ikke glir nedover i sengen. Det betyr at bruker blir liggende uten å gli ned ved for eksempel heving av sengens hodedel/hjertebrett. Samtidig er det enkelt å forflytte seg høyere opp i sengen ved å skyve fra med føttene.

Lakenets kanter tilbyr friksjon og bremser bevegelse, slik at brukeren kan sitte trygt på sengekanten uten å skli.

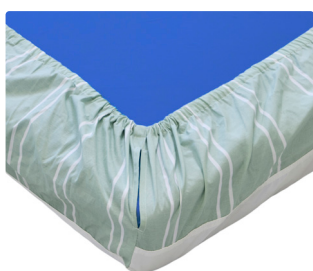

Lett å legge på

Lakenet er formsydd med strikk rundt hele undersiden slik at det ligger trygt og godt på madrassen. Lakenet er enkelt å legge på og ta av madrassen.



Praktiske detaljer

Lakenet har åpning for slange i hvert hjørne, som gjør at det også kan benyttes ved bruk av vekseltrykkmadrass med pumpe.

Størrelse	Mål glidelaken	Mål glideflate	Artikkelnummer	HMS artikkelnummer
80	B80xL200 cm	B60xL200 cm	IM4141S	
90	B90xL200 cm	B70xL200 cm	IM4142S	334902
110	B110xL200 cm	B90xL200 cm	IM4152S	
120	B120xL200 cm	B100xL200 cm	IM4162S	334903
150	B150xL200 cm	B130xL200 cm	IM4172S	334904
180	B180xL200 cm	B160xL200 cm	IM4182S	334905