



Rogue ALX

Lichtgewicht vastframe rolstoel die
voor iedereen de perfecte pasvorm biedt

Rogue ALX

De perfecte pasvorm

De Rogue ALX is een stijve, lichtgewicht rolstoel met veel opties voor individuele aanpassingen waardoor de rolstoel voor iedereen de perfecte pasvorm biedt. Met de Rogue ALX haal je het beste uit je dag.

Maximale controle

Het frame is ontworpen met extra grote buizen en dunne buiswanden, waardoor de rolstoel sterk en licht is en maximale controle geeft voor een soepele rij-ervaring.



Betere prestaties

Het unieke Maxx performance spaakwiel beschikt over achttien radiale spaken en een naaf met hoge flens die resulteren in verhoogde stijfheid voor een beter presterend wiel. Dankzij het verhoogde reactievermogen in combinatie met een lichtgewicht wiel haalt de rijder het meeste uit elke beweging.



Complete rolstoel

De Rogue ALX is de beste optie voor een ultralichte rolstoel met een stevig frame die individueel aanpasbaar is én met een optimale prijs-kwaliteitverhouding.

Kenmerken



Pas de zitdiepte aan op de gebruikerslengte met voor-gedefinieerde zitdiepte posities.



Veelvuldige verstelbaarheids-opties van het zwaartepunt terwijl het zijframe vrij blijft van overbodige onderdelen.



Zithoogte-instelling met minimaal materiaalgebruik middels een buissysteem.



Het ontwerp van de voorwielen maakt de Rogue ALX geschikt voor een gebruikersgewicht van max. 158 kg (standaard uitvoering max. 113 kg).

Opties



Neerklapbare duwhandvatten



Voetenplaat
In hoek verstelbaar en opklapbaar



Armleuning
In hoogte verstelbaar, met polstering




Anti-tip



Transportbevestiging
Goedgekeurd voor transport ISO 7176-19



Schaarremmen
Wegdraaiend onder de zitting

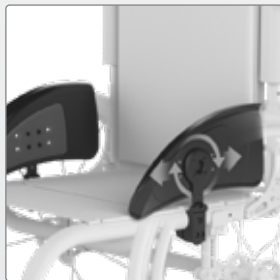

Spatscheren
Verstelbare aluminium spatscheren met polstering



Design voorvork
Gefreesd uit massief aluminium

Meer opties en accessoires beschikbaar

Specificaties

Transportgewicht:	5,08kg*
Zitbreedte:	35,5-56 cm
Zitdiepte:	35,5-51 cm
Zithoogte voor:	34,5-52 cm
Zithoogte achter:	34,5-51 cm
Buismaat:	3,5 cm
Max. gebruiksgewicht:	113,40 kg
Crash test veilig:	Ja

*Rogue ALX-gewicht berekend op basis van: 16"x16" standaard lengte frame, in hoogte verstelbare rugleuning - 30°, 4" poly wielen, buisvormige open voetplaat en standaard bekleding. Achterwielen, kussen en anti-tip zijn verwijderd.



Etac B.V.

Tinweg 8
8445 PD Heerenveen
T: 0513 681 686
E: contact.nl@etac.com
W: Etac.nl

etac[®]
Creating Possibilities