

etac[®]
Creating Possibilities



molift[®]

Molift Air 200

Lève-personne sur rails optimal pour les établissements de long séjour

Molift Air 200

Molift Air 200 est un lève-personne abordable, conçu avec soin et très opérationnel, prévu pour des patients et des résidents pesant jusqu'à 205 kg. Utilisé avec le système de rails Molift et les harnais Molift, ce lève-personne répond aux exigences de manutention et de transfert de personnes dans tout type d'environnement.

Confort et qualité

Molift Air 200 combine le besoin de confort maximal avec efficacité et sécurité lors des manutentions de personnes. Son concept et son intuitivité permettent au soignant d'effectuer toutes les manutentions quotidiennes en lui libérant du temps pour se consacrer aux soins à la personne. Le soignant bénéficie d'un meilleur environnement de travail, sans manutention manuelle. Le patient et le résident sont levés et transférés avec dignité, sécurité et confort.

Versatile

Molift Air 200 est conçu pour des transferts assis ou allongés, et convient aussi pour une utilisation debout ou une aide à la marche. Molift Air 200 est utilisable dans des rails installés tout comme dans des portiques amovibles. Il est facilement transportable grâce à son faible poids et à la fonction de décrochage rapide, facilitant son installation et son entretien.

Molift Air 200 propose plusieurs types de télécommandes, et de passage de pièce-à-pièce. En complément, il offre de nombreux éléments de sécurité, une hauteur de levage importante et une gamme étendue de cintres. Ce lève-personne constitue une solution de choix pour tous les environnements de soins.



Modèle	Batterie	Réf.
Molift Air 200	Litium	M26201
Molift Air 200	SLA	M26200
Molift Air 200 IRC	SLA	M26356
Molift Air 200 IRC Propulsion	SLA	M26358
Molift Air 200 Propulsion	SLA	M26359

Lève-personne, télécommande, chargeur de batterie

Caractéristiques techniques

Capacité max. (CMU)	205 kg
Poids du moteur	8,6 kg
Longueur	360 mm
Largueur	190 mm
Hauteur	195 mm
Batterie Litium	25,6 V LiFePO4 2,4 Ah
Batterie SLA	12 V SLA 2,9 Ah
Chargeur (Lithium, SLA)	100-240 V AC, 50-60 Hz max 0.5A
Temps de recharge max.	6 h
Hauteur de levage (M26201, M26200)	3000

Caractéristiques techniques

Hauteur de levage (M26356, M26358, M26359)	2600
Moteur	24 V DC
Vitesse de levage pour 75 kg	60 mm/sec
Durée de vie estimée	30 000 levés à CMU/ 10 ans
Logiciel d'entretien Molift	Intégré
Descente d'urgence	Mécanique et électrique
Arrêt d'urgence	Cordon accessible depuis le sol. Remise en route possible depuis le sol.
Classe de protection (télécommande et moteur)	IP24



Nettoyer/désinfecter à l'aide d'une solution standard non abrasive au pH entre 5 et 9 ou avec une solution désinfectante à 70°



Features



Fonction décrochage rapide

Son faible poids associé à la fonction de décrochage rapide facilitent le transport du Molift Air 200 durant son installation et son entretien. Le moteur est libéré de son chariot d'une simple pression du doigt.




Silencieux et progressif

Molift Air 200 est discret et possède un système de démarrage sans à-coup permettant d'instaurer un sentiment de confort et de sécurité pendant tout le processus de manutention.



Télécommande intuitive

La nouvelle télécommande du Molift Air 200 est particulièrement intuitive et propose une fixation sur le cintre ainsi qu'un socle mural en option.

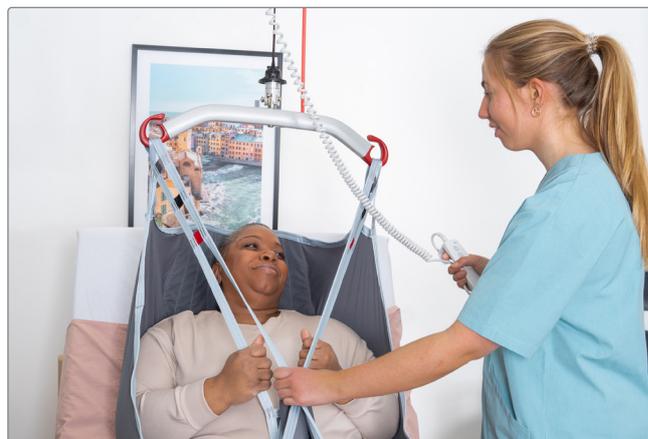

Compact et grande capacité

Molift Air 200 est très petit et ne pèse que 8,6 kg. Pourtant il offre une capacité de levage (CMU) de 205 kg. Sa petite taille et son poids réduit permettent au soignant de l'utiliser et de le transporter quelque soit la manutention à effectuer.

Accessories



Cintre à 4 points

Aluminium léger CMU 350 kg

Cintre 4 pts 350 (S)	2530210
Cintre 4 pts 450 (M)	2530211
Cintre 4 pts 550 (L).....	2530212
Cintre 4 pts 650 (XL).....	2530213



Cintre à 2 points

Aluminium léger CMU 350 kg

Cintre 2 pts 350 (S)	2530115
Cintre 2 pts 450 (M)	2530120
Cintre 2 pts 550 (L).....	2530125



Cintre à 2 points queue de cochon

Aluminium léger, CMU 350 kg

Cintre 2 pts q.de cochon 350 (S).....	1830033
Cintre 2 pts q.de cochon 450 (M).....	1830032
Cintre 2 pts q.de cochon 550 (L).....	1830031



Support civière 8 points

Destiné aux transferts allongés en association avec une civière souple. Acier laqué, CMU 300 kg

Civière 8 pts.....	2140003
--------------------	---------



Peson Molift Air

Ce peson calcule l'IMC. Certifié Classe III.

Peson CMU 300 kg.....	1840000
-----------------------	---------



Autres accessoires

Adaptateur pièce-à-pièce.....	2510295
-------------------------------	---------



Etac est un leader mondial spécialisé dans la conception et la production de d'aides techniques et d'équipement d'aide à la mobilité des personnes. Nous avons à coeur de proposer des solutions pour optimiser la qualité de vie des personnes, de leur entourage et des soignants.

Restez informés de nos dernières nouveautés en consultant notre site internet: www.etac.com

Etac



+33 03 74 09 77 68



info.france@etac.com / sav.france@etac.com



www.etac.com

 **etac**[®]

Creating Possibilities