



Molift Air 500

Trygg och värdig vård för
bariatriska patienter

 **etac**[®]

Molift Air 500

Molift Air 500 är en taklyftsmotor för bariatrisk patienter som väger upp till 500 kg. Motorn är utformad för att eliminera ansträngande manuella lyft, skapa en bättre arbetsmiljö för vårdaren och möjliggöra en god och värdig vård för bariatrisk patienter. Den enastående lyftkapaciteten och den användarvänliga utformningen gör denna motor till ett outhärligt hjälpmedel inom vårdsektorn.

Maximal användarkomfort och enkel användning

Molift Air 500 kombinerar enkelhet vad gäller användning för personalen med maximal komfort och värdig vård för patienten. Mjuka start och stopp ger mycket bekväma och effektiva lyft och överflyttningar, samt gör att patienten känner trygghet under en överflyttning.

När vårdaren inte behöver lägga ner lika mycket tid och ansträngning på att lyfta och förflytta en patient frigörs tid för mer personlig omvårdnad. Detta leder till att vårdkvaliteten förbättras medan skador och sjukskrivningar hos personal minskar.

Låga kostnader under produktens livscykel

Molift Air 500 har en snygg utformning och är tillverkad av noggrant utvalda material. En enda motor och lyftsele gör att lyften är väldigt kompakt och smälter perfekt in i miljön. Lyftmotorn har tillverkats för maximal hållbarhet och låga servicekostnader, vilket gör den till en god investering för alla vårdmiljöer.

I kombination med Molift skensystem och lyftselar hanterar Molift Air 500 de flesta lyftsituationer inom vården och andra patientmiljöer. Det är en komplett lösning för alla vårdmiljöer.



Produktnamn	Ingående delar	Art. nr.	Specifikationer
Molift Air 500	SLA-batteri, handkontroll och laddare	M26500	Förväntad livslängd: 30 000 lyft (SWL)/10 år
Specifikationer			Molift Service Tool (mjukvara) Ingår
Max brukarvikt (SWL)	500 kg	Nödsänkning	Mekanisk och elektrisk
Totalvikt inkl. (med SLA-batteri)	15 kg	Nödstopp	Kan nås från golvet med snöre. Återställning möjligt från golvet
Längd	360 mm	Skyddsklass; handkontroll och lyftmotor	IP24
Bredd	250 mm		
Höjd	195 mm		
Batteri	26,4 V SLA 2,6 Ah		
Batteriladdare	100–240 V AC, 40–60 Hz		
Laddningstid för batteri	6 timmar		
Motor	24 V DC		
Lyftintervall	3 000 mm		
Lyfthastighet 75 kg	30 mm/sekund		



Rengör / desinficera produkten med ett vanligt rengöringsmedel utan slipmedel med ett pH på mellan 5 och 9 eller med en 70% desinfektionslösning.



Egenskaper



Stort lyftintervall

Molift Air 500 har som standard ett lyftband på tre meter. Denna längd möjliggör lyft från golvet oavsett takhöjd. Molift 4-punkts lyftbygel ger ökat huvudutrymme för patienten.




En enda motorenhet för 500 kg

Lyftmotorn är kompakt och smälter perfekt in i miljön. Ett enda lyftband resulterar i en intuitiv och enkel användning.



Enastående lyftkapacitet

Molift Air 500 har en lyftkapacitet på 500 kg. Lyftens vikt och storlek gör att den är mycket lätt att manövrera vid olika förflyttningssituationer.

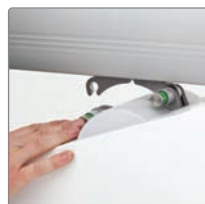

Quick release-enhet för åkvagn

Molift Air 500 är enkel att hantera vid installation och service tack vare den smarta, snabba och säkra frikopplingsfunktionen. Med ett enkelt handgrepp kopplas motorn till eller från åkvagnen.



Tillbehör:



Molift Air 4-punkts, bariatrisk pigtail-lyftbygel

Stål, maxvikt 550 kg

Large 2510435



Molift RgoSling Repositioning Sheet

Slitstark polyester, L 1 340 x B 1 300 mm maxvikt 500 kg

1 st 1721570
10 st 1721570-C



Molift våg

Maxvikt 400 kg

Large 1431021



Molift RgoSling MediumBack Plus

Slitstark polyester, maxvikt 500 kg

Large 1721940
Extra large 1721950



Vi vill ge människor möjlighet att påverka sin egen tillvaro och skapa en egen vardag på sina egna villkor – oavsett fysiska förutsättningar.

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se