



molift®

Molift Air 500

Trygg och värdig vård för bariatriska patienter

Molift Air 500

Molift Air 500 är en taklyftsmotor för bariatriska patienter som väger upp till 500 kg. Motorn är utformad för att eliminera ansträngande manuella lyft, skapa en bättre arbetsmiljö för vårdaren och möjliggöra en god och värdig vård för bariatriska patienter. Den enastående lyftkapaciteten och den användarvänliga utformningen gör denna motor till ett outhärligt hjälpmedel inom vårdsektorn.

Maximal användarkomfort och enkel användning

Molift Air 500 kombinerar enkelhet vad gäller användning för personalen med maximal komfort och värdig vård för patienten. Mjuka start och stopp ger mycket bekväma och effektiva lyft och överflyttningar, samt gör att patienten känner trygghet under en överflyttning.

När vårdaren inte behöver lägga ner lika mycket tid och ansträngning på att lyfta och förflytta en patient frigörs tid för mer personlig omvårdnad. Detta leder till att vårdkvaliteten förbättras medan skador och sjukskrivningar hos personal minskar.

Låga kostnader under produktens livscykel

Molift Air 500 har en snygg utformning och är tillverkad av noggrant utvalda material. En enda motor och lyftsele gör att lyften är väldigt kompakt och smälter perfekt in i miljön. Lyftmotorn har tillverkats för maximal hållbarhet och låga servicekostnader, vilket gör den till en god investering för alla vårdmiljöer.

I kombination med Molift skensystem och lyftselar hanterar Molift Air 500 de flesta lyftsituationer inom vården och andra patientmiljöer. Det är en komplett lösning för alla vårdmiljöer.



Produktnamn	Ingående delar	Art. nr.
Molift Air 500	SLA-batteri, handkontroll och laddare	M26500

Specifikationer

Max brukarvikt (SWL)	500 kg
Totalvikt inkl (med SLA-batteri)	15 kg
Längd	360 mm
Bredd	250 mm
Höjd	195 mm
Batteri	26,4 V SLA 2,6 Ah
Batteriladdare	100–240 V AC, 40–60 Hz
Laddningstid för batteri	6 timmar
Motor	24 V DC
Lyftintervall	3 000 mm
Lyfthastighet 75 kg	30 mm/sekund

Specifikationer

Förväntad livslängd:	30 000 lyft (SWL)/10 år
Molift Service Tool (mjukvara)	Ingår
Nödsänkning	Mekanisk och elektrisk
Nödstopp	Kan nås från golvet med snöre. Återställning möjligt från golvet
Skyddsklass; handkontroll och lyftmotor	IP24



Rengör / desinficera produkten med ett vanligt rengöringsmedel utan slipmedel med ett pH på mellan 5 och 9 eller med en 70% desinfektionslösning.



Egenskaper




Stort lyftintervall

Molift Air 500 har som standard ett lyftband på tre meter. Denna längd möjliggör lyft från golvet oavsett takhöjd. Molift 4-punkts lyftbygel ger ökat huvudutrymme för patienten.



En enda motorenhet för 500 kg

Lyftmotorn är kompakt och smälter perfekt in i miljön. Ett enda lyftband resulterar i en intuitiv och enkel användning.

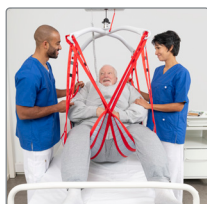

Enastående lyftkapacitet

Molift Air 500 har en lyftkapacitet på 500 kg. Lyftens vikt och storlek gör att den är mycket lätt att manövrera vid olika förflyttningssituationer.



Quick release-enhet för åkvagn

Molift Air 500 är enkel att hantera vid installation och service tack vare den smarta, snabba och säkra frikopplingsfunktionen. Med ett enkelt handgrepp kopplas motorn till eller från åkvagnen.



Tillbehör:



Molift Air 4-punkts, bariatrisk pigtail-lyftbygel

Stål, maxvikt 550 kg

Large 2510435



Molift RgoSling Repositioning Sheet

Slitstark polyester, L 1 340 x B 1 300 mm
maxvikt 500 kg

1 st 1721570

10 st 1721570-C



Molift våg

Maxvikt 400 kg

Large 1442403



Molift RgoSling MediumBack Plus

Slitstark polyester, maxvikt 500 kg

Large 1721940

Extra large 1721950



Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB

☎ 0371-58 73 00

✉ info@etac.se

🌐 www.etac.se

etac®
Creating Possibilities