

etac[®]
Creating Possibilities



molift[®]

Molift Air 500

Confort et dignité lors des soins de patients bariatriques

Molift Air 500

Molift Air 500 est un lève-personne plafonnier destiné aux patients bariatriques jusqu'à 500 kg. Il est conçu pour éviter les manutentions manuelles périlleuses, générer un environnement de travail sain pour les soignants et fournir des soins en toute dignité. Sa capacité de levage exceptionnelle associée à son design intuitif en font un lève-personne incontournable dans le secteur des soins de santé.

Confort et facilité d'utilisation optimaux

Le Molift Air 500 combine facilité d'utilisation avec confort accru et dignité des soins. Le trajet dans le rail sans à-coup et le démarrage en douceur assurent des transferts confortables et performants. De cette façon, les patients se sentent en sécurité lors des transferts.

Les gains de temps et d'effort effectués lors des transferts permettent aux soignants de se consacrer à des soins personnalisés de qualité. La qualité des soins s'en trouve améliorée, les risques, les blessures et les absences sont évités.

Un coût d'utilisation réduit

Le Molift Air 500 propose un design abouti basé sur un choix précis de matériaux. Sa conception implique un moteur unique et une seule sangle de levage, rendant ce moteur particulièrement compact et discret. Longévité maximale et un coût d'utilisation faible font de ce lève-personne un investissement rentable pour tout type d'environnement de soins.

En association avec le Système de Rails Molift et les harnais Molift, Le Molift Air 500 résout la plupart des situations de levage et de transfert de patients. Il constitue une solution complète pour les établissements de soins de santé.



Désignation	Inclus	Réf.	Caractéristiques	
Molift Air 500	Batterie SLA, télécommande et chargeur	26500	Durée prévue d'utilisation	30 000 levers à CMU ou 10 ans
Caractéristiques			Logiciel de maintenance Molift Service	Intégré
Charge maximum d'utilisation (CMU)	500 kg		Descente d'urgence	Mécanique et électrique
Poids total (avec batterie SLA)	15 kg		Arrêt d'urgence	Accessible depuis le sol par cordon. Remise à zéro possible depuis le sol.
Longueur	360 mm		Classe de protection (télécommande et moteur)	IP24
Largeur	250 mm			
Hauteur	195 mm			
Batterie	12 V SLA 2.9 Ah			
Chargeur de batterie	100-240 V AC, 50-60 Hz			
Temps de charge	6 hrs			
Moteur	24 V DC			
Amplitude de levage	3000 mm			
Vitesse de levage avec 75kg	30 mm/sec			

Nettoyer / désinfecter à l'aide d'une solution standard non abrasive au pH entre 5 et 9, ou avec une solution désinfectante à 70°

Caractéristiques




Amplitude de levage étendue

Le Molift Air 500 est équipée d'une sangle de levage de 3m. Les levages depuis le sol sont facilités. De plus, le cintre à 4 points offre plus d'espace pour la tête du patient.



Un moteur unique pour 500 kg

Le moteur unique est compact et s'intègre dans l'environnement de la pièce. Cette solution est intuitive et facile d'utilisation.

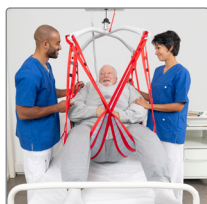

Capacité exceptionnelle

Molift Air 500 possède une capacité de levage de 500 kg. La taille et le poids du moteur le rendent particulièrement manoeuvrable quelle que soit la situation de transfert.



Décrochage rapide

Le Molift Air 500 est équipé d'un système de décrochage rapide qui simplifie son installation et sa maintenance. Le moteur est détaché de son chariot à l'aide d'une seule pression.



Accessoires



Cintre Molift à 4 points à queue de cochon

Acier, CMU 550 kg

Large 2510435



Molift RgoSling Repositioning Sheet

Polyester durable, L 1340 x W 1300 mm
SWL 500 kg

1 pc 1721570
10 pcs 1721570-C



Peson Molift

CMU 400 kg

Peson 1431021



Harnais RgoSling MediumBack Plus

Polyester haute résistance, CMU 500 kg

Large 1721940
Extra large..... 1721950



Etac est un leader mondial spécialisé dans la conception et la production de d'aides techniques et d'équipement d'aide à la mobilité des personnes. Nous avons à coeur de proposer des solutions pour optimiser la qualité de vie des personnes, de leur entourage et des soignants.

Restez informés de nos dernières nouveautés en consultant
notre site internet: www.etac.com

Etac

+33 03 74 09 77 68

info.france@etac.com / sav.france@etac.com

www.etac.com

 **etac**®

Creating Possibilities