



# Molift RgoSling Fabric Stretcher

För plana förflyttningar

 etac®

# Molift Fabric Stretcher

Molift RgoSling Fabric Stretcher är en mjuk lyftsele för sjukhus och institutioner. Den är designad för liggande förflyttningar.

## Alternativ till Molift Stretcher

Molift RgoSling Fabric Stretcher passar bra när lyft i en vanlig lyftsele inte är lämpligt, exempelvis vid tillstånd som kräver en stabil liggande ställning. Lyftsele Molift RgoSling Fabric Stretcher är ett alternativ till baren Molift Stretcher.

## Ergonomiska lyft

Vid lyft med Molift RgoSling Fabric Stretcher krävs det en 8-punkts lyftbygel. Molifts 8-punkts lyftbygel passar till mobila personlyften Molift Partner 255 och till lyftmotor Molift Air. Molift RgoSling Fabric Stretch har integrerade lyftremmar som appliceras direkt på lyftbygeln, längden kan justeras genom att det finns flera infästningsöglor att välja på. De många infästningspunkterna ger ett öppet och stabilt lyft i plant läge.



Applicera Molift RgoSling Fabric Stretcher med SlingOn under brukaren i liggande läge.

### Beskrivning

Molift RgoSling Fabric Stretch lyftsele M  
Molift RgoSling Fabric Stretch lyftsele XL  
(Används endast med 8-punkts lyftbygel)

### Art.nr

1721520  
1721540

### Material

Molift Fabric Stretch: Polyester  
Molift 8-punkts lyftbygel: Stål

### Höjd

Molift 8-punkts lyftbygel: 42 cm

### Tvättinstruktioner



60-85° C

### Yttre längd

Molift RgoSling Fabric Stretcher M: 175 cm  
Molift RgoSling Fabric Stretcher XL: 185 cm  
Molift 8-punkts lyftbygel: 143 cm

### Yttre bredd


Molift RgoSling Fabric Stretcher M: 70 cm  
Molift RgoSling Fabric Stretcher XL: 92 cm  
Molift 8-punkts lyftbygel: 92 cm




## Egenskaper



Kan lätt plockas undan  
Lyftselen Molift RgoSling  
Stretcher kan lätt plockas  
undan och är ett utmärkt  
alternativ till bären Molift  
Stretcher.

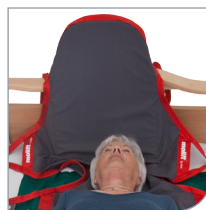

Lätt att applicera  
Lyftselen appliceras under  
brukaren i liggande läge.

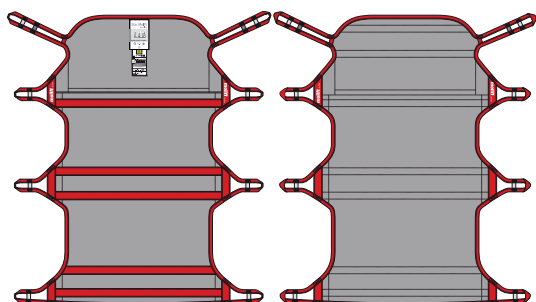

*Molift RgoSling Fabric Stretcher,  
in- och utsida.*



## Unikt lyftprogram

Molift RgoSling lyftselar och Molift Air taklyft skapar tillsammans en lösning för alla lyftsituationer. Den kombinerar det bästa ur ett installations-, vårdgivar- och användarperspektiv. Med den höga flexibiliteten hos Molift Air taklyft och det stora utbudet av Molifts RgoSlings lyftselar är det den perfekta kombinationen. Innovativ och kostnadseffektiv i alla situationer! Vi lägger mycket engagemang i utvecklingen av varje liten detalj.

