



Molift Mover 180

Un lève-personne léger et compact pour les établissements de santé et le domicile

Excellente maniabilité

Le Molift Mover 180 possède une armature en aluminium le rendant léger et robuste à la fois. Son amplitude de levage importante permet les transferts depuis des surfaces hautes ou depuis le sol. Les cintres disponibles à 2 ou 4 points sont facilement interchangeables sans outil.

Muni de roulettes de 75mm, le Molift Mover 180 se faufile dans les espaces étroits. Des roulettes de 100 mm sont disponibles en option pour des surfaces plus souples améliorant ainsi sa manoeuvrabilité.



molift[®]



Télécommande

Robuste, lavable avec témoin batterie, entretien et surcharge.



Guidon unique

Le guidon unique assure une prise en main ergonomique



Cintres variés

2 ou 4 points d'accrochage, disponibles en plusieurs tailles.



Maniable

Léger et compact de conception, le Mover 180 est très maniable.

Caractéristiques

Prise en main ergonomique

Le Molift Mover 180 est muni d'un guidon unique qui offre de nombreuses possibilités de prise en main facilitant son déplacement.

Espérance de vie

Le lève-personne a une espérance de vie de 30000 cycles ou 15 ans, selon le degré d'utilisation.

Batterie

La batterie Li-ion propose une technologie innovante et son boîtier sécurisé et étanche (IPX6) est lavable. La batterie ne pèse que 0.9kg et peut être installée d'une seule main.

La batterie peut être chargée directement sur le lève-personne. Un chargeur externe est proposé en option. Le temps de charge ne dure que 3h1/2. Une batterie pleine peut effectuer 160 cycles de levage (75kg). La batterie est compatible avec tous les lève-personnes Molift de même génération.

La batterie est conçue pour durer 1700 cycles de charge et elle est garantie 5 ans.



Mode turbo

Le mode turbo permet de lever ou abaisser le bras de levage à vide 30% plus vite.

Télécommande


La télécommande, robuste et éprouvée, propose un témoin de charge batterie, de surcharge et un témoin d'entretien pour garantir performance et sécurité.

Pour en augmenter la durée de vie, le câble peut être remplacé séparément en cas de besoin. La télécommande est lavable (IPX6).

Molift Service Tool

Comme tous les lève-personnes Molift, le Mover 180 est équipé d'un programme interne qui signale le besoin d'inspection périodique et d'entretien. Le programme enregistre également les données d'utilisation et peut être utilisé pour diagnostiquer les pannes.

En complément, le lève-personne est équipé d'une connexion Bluetooth pour une communication sans fil avec le Molift Service Tool.

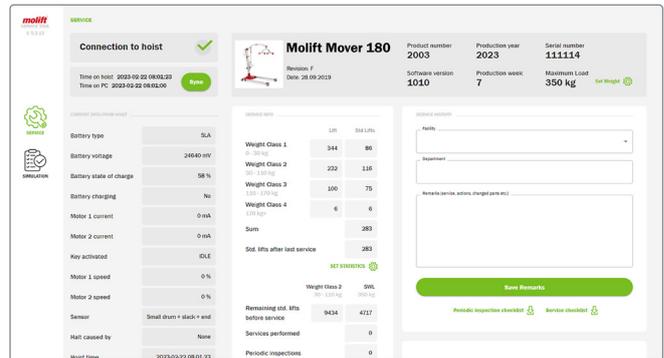

Produit		Référence	Dimensions	
Molift Mover 180		M1801	Dimensions hors tout avec piètement fermé	670 mm
Molift Mover 180		M1802	Dimensions hors tout avec piètement ouvert	1145 mm
- Hors cintre à commander séparément			Dimensions interne avec piètement fermé	555 mm
Matériaux			Dimensions interne avec piètement ouvert	1025 mm
Aluminium, acier, plastiques			Informations techniques	
Poids			Batterie	Li-Ion 25.2V, 2.85Ah
Charge Maximum d'Utilisation (CMU)		180 kg	Temps de charge batterie vide	3.5 heures
Poids de l'appareil (hors batterie)		31 kg	Vitesse de levage en charge	46 mm/sec
Dimensions			Capacité de levage	160 levages/75 kg
Hauteur		1940 mm	Nettoyage	
Longueur		1260 mm		
Haut. piètement		105 mm		
Diam. roulettes		75/100 mm	Nettoyer / désinfecter à l'aide d'une solution neutre (pH 5 à 9) non-abrasive ou une solution désinfectante à 70% d'alcool.	
Amplitude de levage		1365 mm		
Hauteurs de levage min/max avec cintre 2 pts		360 - 1730 mm		
Hauteurs de levage min/max avec cintre 4 pts		265 - 1630 mm		

Consultez www.etac.com pour connaître les indications produits et nos dernières informations.

Etac

- 03 74 09 77 68
- info.france@etac.com
- www.etac.com