



Molift Mover 205

Lève-personne polyvalent pour une utilisation intensive dans tous les secteurs de soins

Le Molift Mover 205 est un lève-personne polyvalent conçu pour faciliter les transferts et manutentions en établissement de soins de santé. Son poids réduit facilite sa maniabilité et son déplacement, et sa construction unique permet une charge maximum de 205 kg.

Le Molift Mover 205 possède une excellente amplitude de levage. Utilisé avec un cintre 4 points et un harnais Molift, il offre une position confortable et spacieuse à son utilisateur. La fonction de décrochage rapide permet de changer le modèle de cintre sans outil. La version avec barres latérales facilite l'entraînement à la déambulation.



molift®



Télécommande

Robuste, lavable avec témoin batterie, entretien et surcharge.



Guidon unique

Le guidon unique assure une prise en main ergonomique



Fonction quick-release

Cette fonction permet d'ôter et de changer de cintre sans outil.



Cintres variés

2 ou 4 points d'accrochage, disponibles en plusieurs tailles.

Caractéristiques

Prise en main ergonomique

Le Molift Mover 205 est muni d'un guidon unique qui offre de nombreuses possibilités de prise en main facilitant son déplacement.

Espérance de vie

Le lève-personne a une espérance de vie de 30000 cycles ou 15 ans, selon le degré d'utilisation.

Batterie

La batterie Li-ion propose une technologie innovante et son boîtier sécurisé et étanche (IPX6) est lavable. La batterie ne pèse que 0.9kg et peut être installée d'une seule main.

La batterie peut être chargée directement sur le lève-personne. Un chargeur externe est proposé en option. Le temps de charge ne dure que 3h1/2. Une batterie pleine peut effectuer 130 cycles de levage (75kg). La batterie est compatible avec tous les lève-personnes Molift de même génération.

La batterie est conçue pour durer 1700 cycles de charge et elle est garantie 5 ans.



Mode turbo

Le mode turbo permet de lever ou abaisser le bras de levage à vide 30% plus vite.

Télécommande


La télécommande, robuste et éprouvée, propose un témoin de charge batterie, de surcharge et un témoin d'entretien pour garantir performance et sécurité.

Pour en augmenter la durée de vie, le câble peut être remplacé séparément en cas de besoin. La télécommande est lavable (IPX6).

Molift Service Tool

Comme tous les lève-personnes Molift, le Mover 205 est équipé d'un programme interne qui signale le besoin d'inspection périodique et d'entretien. Le programme enregistre également les données d'utilisation et peut être utilisé pour diagnostiquer les pannes.

En complément, le lève-personne est équipé d'une connexion Bluetooth pour une communication sans fil avec le Molift Service Tool.

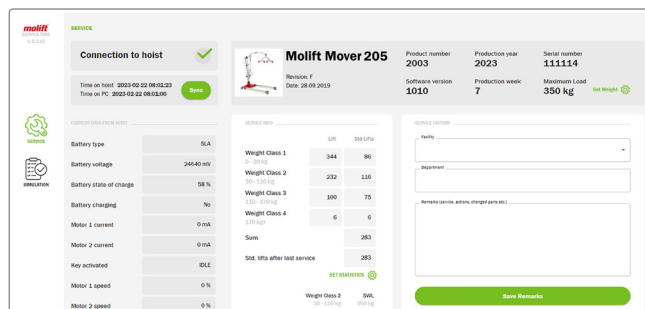

Produit

Molift Mover 205	M1401
- sans cintre	
Molift Mover 205	M1402
- sans cintre, châssis bas	
Molift Mover 205	M1403
- sans cintre, avec barres latérales	

Matériaux

Aluminium, acier, plastiques

Poids

Charge Maximum d'Utilisation (CMU)	205 kg
Poids de l'appareil (hors batterie) M1401 & M1402	36 kg
Poids de l'appareil (hors batterie) M1403	42.3 kg

Dimensions

Hauteur	2020 mm
Longueur	1285 mm
Haut. piètement	115 mm (60 mm)
Diam. roulettes	100 mm
Amplitude de levage	1410 mm

Dimensions

Hauteurs de levage min/max avec cintre 2 pts	400 - 1810 mm
Hauteurs de levage min/max avec cintre 4 pts	300 - 1710 mm
Dimensions hors tout avec piètement fermé	690 mm
Dimensions hors tout avec piètement ouvert	1205 mm
Dimensions interne avec piètement fermé	550 mm
Dimensions interne avec piètement ouvert	1065 mm

Informations techniques

Batterie	Li-Ion 25.2V, 2.85Ah
Temps de charge batterie vide	3.5 heures
Vitesse de levage en charge	40 mm/sec
Capacité de levage	130 levages/75 kg

Nettoyage



Nettoyer / désinfecter à l'aide d'une solution neutre (pH 5 à 9) non-abrasive ou une solution désinfectante à 70% d'alcool.



Consultez www.etac.com pour connaître les indications produits et nos dernières informations.

Etac

03 74 09 77 68
info.france@etac.com
www.etac.com

etac®
Creating Possibilities