



Molift Mover 300

Quand une capacité de levage élevée est nécessaire

Avec sa capacité de levage de 300kg, le Molift Mover 300 est la solution idéale pour les établissements de santé recevant des patients bariatriques dépendants. Son faible poids de 36kg en fait le plus léger de sa catégorie. Sa construction unique et la position des roulettes offrent une excellente maniabilité.

Le Molift Mover 300 permet le ramassage au sol en descendant à 30cm au plus bas. Sa hauteur de levage maximum atteint 171 cm fournissant espace et possibilité d'aide à la déambulation. La batterie haute capacité est lavable et se place d'une main.



molift®



Télécommande

Robuste, lavable avec témoin batterie, entretien et surcharge.



Guidon unique

Le guidon unique assure une prise en main ergonomique



Fonction quick-release

Cette fonction permet d'ôter et de changer de cintre sans outil.



Cintres variés

2 ou 4 points d'accrochage, disponibles en plusieurs tailles.

Caractéristiques

Prise en main ergonomique

Le Molift Mover 300 est muni d'un guidon unique qui offre de nombreuses possibilités de prise en main facilitant son déplacement.

Espérance de vie

Le lève-personne a une espérance de vie de 30000 cycles ou 15 ans, selon le degré d'utilisation.

Batterie

La batterie Li-ion propose une technologie innovante et son boîtier sécurisé et étanche (IPX6) est lavable. La batterie ne pèse que 0.9kg et peut être installée d'une seule main.

La batterie peut être chargée directement sur le lève-personne. Un chargeur externe est proposé en option. Le temps de charge ne dure que 3h1/2. Une batterie pleine peut effectuer 110 cycles de levage (75kg). La batterie est compatible avec tous les lève-personnes Molift de même génération.

La batterie est conçue pour durer 1700 cycles de charge et elle est garantie 5 ans.

Mode turbo

Le mode turbo permet de lever ou abaisser le bras de levage à vide 30% plus vite.

Télécommande


La télécommande, robuste et éprouvée, propose un témoin de charge batterie, de surcharge et un témoin d'entretien pour garantir performance et sécurité.

Pour en augmenter la durée de vie, le câble peut être remplacé séparément en cas de besoin. La télécommande est lavable (IPX6).

Molift Service Tool

Comme tous les lève-personnes Molift, le Mover 300 est équipé d'un programme interne qui signale le besoin d'inspection périodique et d'entretien. Le programme enregistre également les données d'utilisation et peut être utilisé pour diagnostiquer les pannes.

En complément, le lève-personne est équipé d'une connexion Bluetooth pour une communication sans fil avec le Molift Service Tool.

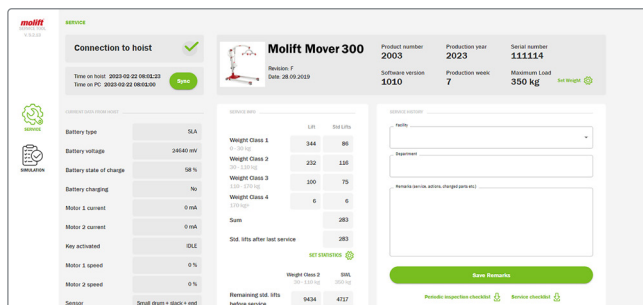

Molift Mover 300

Item no.

Molift Mover 300 - sans cintre	M1501
Molift Mover 300 - sans cintre, châssis bas	M1502
Molift Mover 300 - sans cintre, avec barres latérales	M1503
Molift Mover 300 - sans cintre, châssis bas, avec barres latérales	M1504

Matériaux

Aluminium, acier, plastiques

Poids

Charge Maximum d'Utilisation (CMU)	300 kg
Poids de l'appareil (hors batterie) M1501 & M1502	36 kg
Poids de l'appareil (hors batterie) M1503 & M1504	42.3 kg

Dimensions

Hauteur	2025 mm
Longueur	1285 mm
Haut. piètement	115 mm

Dimensions

Diam. roulettes	100 mm
Amplitude de levage	1390 mm
Hauteurs de levage min/max avec cintre 2 pts	400 - 1815 mm
Hauteurs de levage min/max avec cintre 4 pts	300 - 1715 mm
Dimensions hors tout avec piètement fermé	690 mm
Dimensions hors tout avec piètement ouvert	1205 mm
Dimensions interne avec piètement fermé	550 mm
Dimensions interne avec piètement ouvert	1065 mm

Informations techniques

Batterie	Li-Ion 25.2V, 2.85Ah
Temps de charge batterie vide	3.5 heures
Vitesse de levage en charge	32.6 mm/sec
Capacité de levage	110 levages/75 kg/

Nettoyage



Nettoyer / désinfecter à l'aide d'une solution neutre (pH 5 à 9) non-abrasive ou une solution désinfectante à 70% d'alcool.



Consultez www.etac.com pour connaître les indications produits et nos dernières informations.

Etac

+46 371 587 330

info@etac.se

www.etac.com