



Molift Mover 300

Personlyft för tunga brukare

Med sin höga lyftkapacitet på 300 kg är Molift Mover 300 den idealiska lösningen för både för hemmiljö, vårdhem och sjukhus där det finns med bariatriska patienter som har frekventa och dagliga behov av förflyttning och positionering. Med en totalvikt på 36,9 kg är Molift Mover 300 en av de lättaste i produktkategorin för tunga brukare. Den unika konstruktionen och hjulens positionering gör den mycket enkel att manövrera.

Molift Mover 300 kan lyfta enkelt från golvet och når ner till 30 cm som lägst. Den maximala lyfthöjden på 171 cm ger gott om fritt lyftutrymme och möjlighet till gångträning. Lyftens batteri kan bytas med endast en hand och är avtorkningsbar (IPX6).



molift®



Handkontroll

Robust och avtorkningsbar. Indikatorer för batteri, överbelastning och service. Utbytbar kabel.



Unikt körhandtag

Körhandtaget ger ett ergonomiskt och naturligt grepp med flera olika alternativ.



Litiumbatteri

Batteriet är utvecklat för lång hållbarhet och har 5 års garanti.



Alternativ för lyftbygel

2-punkts och 4-punkts lyftbyglar finns i flera storlekar.

Funktioner

Ergonomisk hantering

Molift Mover 300 är utrustad med Molifts unika körhandtag som ger flera och flexibla greppmöjligheter för förbättrad ergonomi för vårdpersonalen.

Batteriet

Batteriet har avancerad Li-Ion-teknik och en säker, förseglad design som gör det avtorkningsbar (IPX6). Det väger endast 0,9 kg och kan bytas ut med endast en hand.

Batteriet kan laddas direkt på lyften och det finns även en extern laddare. Laddningstiden är endast 3,5 timmar. Fullt uppladdat klarar den 110 lyft med 75 kg per lyft och är kompatibel med alla Molifts mobila lyftar.

Med en förväntad livslängd på 1.700 laddningscykler och 5 års garanti är batteriet konstruerat för att hålla länge.

Speed boost

Speed boost-funktionen möjliggör ökad hastighet när lyften är obelastad.



Handkontroll

Handkontrollen är robust och väl utprovad. Den har en batterinivåindikator, överbelastningsindikator och serviceindikator för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet.

Kabeln är utformad för att hålla länge och kan enkelt bytas ut om den skadas, och handkontrollen är avtorkningsbar (IPX6).


Molift Service Tool

Molift Mover 300, liksom alla Molifts lyftar, är utrustad med ett unikt serviceaviseringsystem som meddelar när service krävs. Den integrerade serviceprogramvaran kan också visa data om hur lyften är använd och kan hjälpa serviceteknikerna med felsökning.

Dessutom är lyften utrustad med Bluetooth-anslutning, vilket möjliggör trådlös anslutning till Molift Service Tool.

Förväntad livslängd

Lyftanordningen har en förväntad livslängd på 30.000 cykler eller 15 år, beroende på vad som inträffar först.

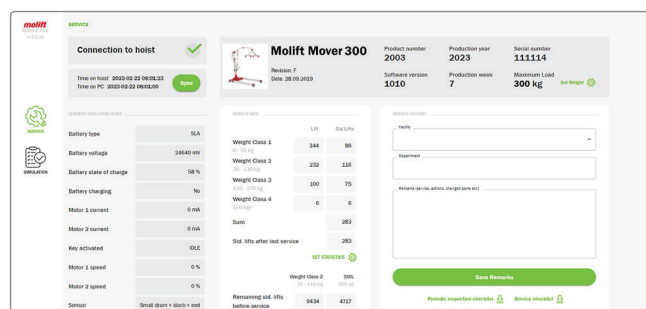

Benämning

Molift Mover 300 integrerad laddare exkl.lyftbygel

Art.nr.

M1501

Material

Aluminium, stål, plast

Vikt

Max brukarvikt (SWL)
Vikt för enhet (inkl batteri)

300 kg
36,9 kg

Mått

Höjd
Längd
Benhöjd
Hjulstorlek
Lyftintervall
Lyft min-max med 2-punkts lyftbygel
Lyft min-max med 4-punktsbygel

2025 mm
1285 mm
115 mm
100 mm
1390 mm
400 - 1815 mm
300 - 1715 mm

Mått

Utvändigt mått med stängda ben
Utvändigt mått med öppna ben
Invändigt mått med stängda ben
Invändigt mått med öppna ben

690 mm
1205 mm
550 mm
1065 mm

Teknisk information

Batteri
Batteriets laddningstid
Lyfthastighet
Kapacitet

Li-Ion 25.2V, 2.85Ah
3.5 timmar
32.6 mm/sek
110 lyft/75 kg/

Rengöring



Använd pH-neutralt rengöringsmedel. Om desinfektion krävs, använd isopropylalkohol. Använd inte slipande eller frätande ämnen för rengöring.



För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB

☎ 0371-58 73 00
✉ info@etac.se
🌐 www.etac.se

etac®
Creating Possibilities