



Molift Quattro

Det flexibla taklyftssystemet med hög lyftkapacitet

Fristående lyftsystem

Molift Quattro är ett fristående lyftsystem som med sina fyra ben och traverssystem erbjuder den bästa lösningen för tillfälliga lyftbehov eller när miljön inte är byggd för stationära installationer. Konstruktionen är lätt att installera utan att behöva montera fästen på väggar eller i tak. Den är idealisk för tillfälliga lyftsituationer i vårdhem eller i hemmiljö.



Högsta stabilitet och manövrerbarhet

Molift Quattro är ett fristående skensystem med mycket god stabilitet och funktionell design.



Enkel att installera

Molift Quattro är konstruerad för en smidig och kvick installation av en eller (helst) två personer.



Laddning av lyftmotor

Motorn kan laddas via handkontrollen vars laddare enkelt monteras direkt på en av lyftsystemets stolpar. Motorn kan också laddas via en "laddning i skena" lösning (IRC).

Löser de flesta lyftsituationer

Traversen har en lätt aluminiumram och fyra stålstolpar som ger utmärkt stabilitet. Molift Quattro löser alla lyftmoment tillsammans med Molift Air och en lyftsele. Med en lyftkapacitet på max 300 kg är den idealisk för att lyfta och förflytta en person till/från en säng, golv, stol, rullstol eller toalett.

Molift Quattro kan levereras i två storlekar: 3x3 meter och 4x4 meter. Längden på stolparna är fasta. Det lägsta tillåtna avståndet från golv till tak är 2,40 meter.



Molift Air med åkvagnar beställs separat.

Tillbehör



Justerbar fot

Molift Quattro kan optimeras med en höjddjusterbar fot på varje ben.
Artikel nr 1610200

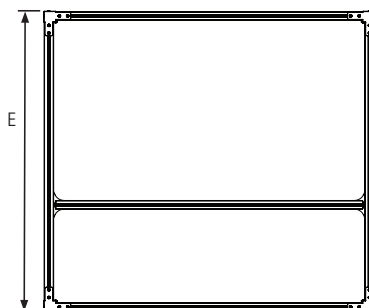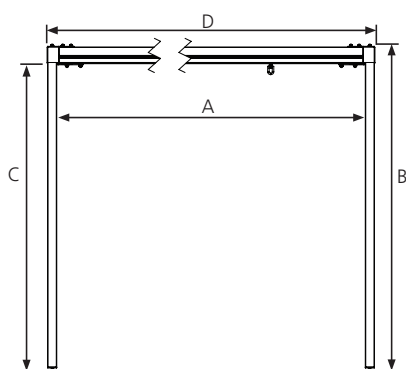

A: Längd travers	3 eller 4 m
B: Höjd utan fötter	2,33 m
Med höjddjusterbara fötter (tillbehör)	2,38 - 2,43 m
C: Innerhöjd utan fötter	2,19 m
D: Bredd	3,16 - 4,16 m
E: Djup	3,16 - 4,16 m
A x C: Max innermått utan fötter	3 x 2,19 m 4 x 2,19 m
Med höjddjusterbara fötter	3 x 2,24 m - 2,29 m 4 x 2,24 m - 2,29 m

Beskrivning

Molift Quattro 3
Molift Quattro 4

Innermått

3x3 m
4x4 m

Art.nr

1600030
1600035

Specifikationer

Max brukarvikt (Safe Working Load): 300 kg
Material: Stål, anodiserad aluminium, plast
Förväntad livslängd: 10 år



Specifikationer

Vikt per enhet:

- Travers Kg/m: 4,2 kg/m
- Ben med justerbar fot: 8,5 kg
- Hörn: 2,7kg
- Totalvikt (3x3 m): 110,95 kg
- Totalvikt (4x4 m): 131,55 kg

Underhåll

Rengör / desinficera produkten med ett vanligt rengöringsmedel utan slipmedel med ett pH på mellan 5 och 9 eller med 70% desinfektionslösning.



”Vi vill ge människor möjlighet att påverka sin egen tillvaro och skapa en egen vardag på sina egna villkor – oavsett fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se