



Molift Quattro

Fritstående løfteløsning med fremragende stabilitet

Et fritstående skinneresystem

Molift Quattro er en fritstående løfteenhed med et travers-system (med fire ben), som er den bedste løsning til midlertidige løftebehov, eller hvis faciliteterne ikke er bygget til faste installationer. Skinnebanen er nem at installere uden behov for at montere yderligere tilbehør på vægge og i lofter. Systemet er ideelt til midlertidige løftebehov på plejefaciliteter eller i private hjem.




Løser de fleste loftløftsituationer

Skinnesystemet består af en letvægtsaluminiumsramme og fire stålben, som yder fremragende stabilitet. Molift Quattro løser alle situationer der kræver loftlift, sammen med Molift Air loftlift og et sejl. Med en løftekapacitet på max. 300 kg er den ideel til løft og forflytning af en person fra eller til seng, gulv, stol, kørestol, toilet osv.

Molift Quattro kan leveres i to størrelser: 3x3 meter og 4x4 meter. Benenes længde er fast.

Molift Air med løbekat bestilles separat.

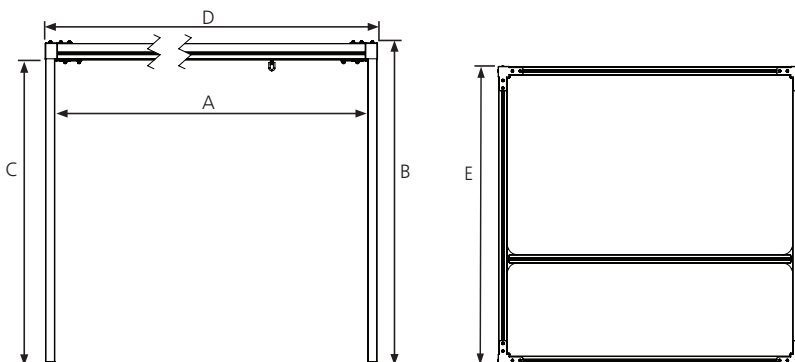

- A: Travers/Skinne længde: 3 eller 4 m
- B: Højde: 2,33 m (2,38–2,43 m med justerbar fod (tilbehør))
- C: Højde, underside af skinne: 2,19
- D: Udvendig bredde 3,16-4,16 m
- E: Udvendig dybde 3,16-4,16 m

Produkt navn

Molift Quattro 3 (3x3 m)
Molift Quattro 4 (4x4 m)

HMI-nr.

109225
109226

Varenr.

1600030
1600035

Fakta

Max. belastning: 300 kg
Materiale: Stål, anodiseret aluminium, plastik
Forventet levetid: 10 år

max 300 kg
max 660 lbs

Fakta

Enhedens vægt:

- Skinner kg/m: 4,2 kg/m
- Ben med justerbar fod: 8,5 kg
- Hjørne: 2,7kg
- Total vægt (Komplet enhed) (3x3 m): 110,95 kg
- Total vægt (Komplet enhed) (4x4 m): 131,55 kg

Rengøring

Rengør/desinficer produktet med et standard ikke-slibende rengøringsmiddel med en pH mellem 5 og 9 eller med en 70 % desinfektionsopløsning.



Funktioner



Suveræn stabilitet og manøvredegtighed

Molift Quattro fritstående skinneresystem med suveræn stabilitet, som øger tilgængeligheden i alle løftesituationer.



Opladning af løftemotoren

Løftemotoren Molift Air oplades nemt via vægmonteret lader eller skinneoplading.



Nemt at installere

Molift Quattro er designet til hurtig installation af en eller to personer (sidstnævnte er at foretrække).



Tilbehør

Justerbar fod

Molift Quattro kan optimeres med højdejusterbare fødder på hvert ben. Varenr. 1610200



For seneste nyheder og løbende opdatering af produktinformation
se www.etac.dk