



molift[®]

Molift Quick Raiser 205

Uppresningslyft med unik lyftkapacitet

Molift Quick Raiser 205

Molift Quick Raiser 205 är en toppmodern uppresningslyft med modulär uppbyggnad och unik lyftkapacitet. Det innebär att man kan skräddarsy lyften efter de olika behov man har i en specifik vårdssituation.

Stabil och kompakt

Molift Quick Raiser 205 är kompakt, stabil och enkel att manövrera. Hjulens placering, det vinklade körhandtaget och den genomtänkta viktfordelningen gör den väldigt lätt att manövrera i små utrymmen. Väljer man till små hjul så minskar man chassits höjd, vilket gör att lyften lätt går in under sängar, stolar och rullstolar. Med elektrisk benbreddning så ökar man lyftens tillgänglighet avsevärt. Väljer man däremot istället fast benbredd så tar lyften litet utrymme.

Naturligt rörelsemönster

Fyrpunktsbygeln och lyftselen RgoSling Active ger extra stöd vid uppresning från sitt till stå. Den snedställda masten ger ett naturligt rörelsemönster, vilket uppskattas av både vårdare och patienter. Fyrpunktsbygeln kombinerad med lyftselen ger en bekväm, stabil och säker uppresning.



Flexibel lyftarm

För att underlätta vårdarens arbete och för att inte oroa stressade patienter kan lyftarmen fällas bort från patienten mot pelaren när den inte används.



Utmärkt tillgänglighet

Quick Raiser 205 kommer in under de flesta sängar och stolar, och de elektriskt justerbara benen möjliggör tillgänglighet nästan överallt.



Lätt att manövrera

Lätt att manövrera vid förflyttning även i trånga utrymmen tack vare lyftens sex hjul. Enkel att hantera vid toalett, uppresning och ståträning.



Ergonomisk för vårdaren

De justerbara benen kan förbli stängda, oavsett rörelse, vilket ger vårdaren utrymme att arbeta med minimerad skaderisk.

Ergonomiska förflyttningar med naturligt rörelsemönster

Konsekventa och säkra lyft

Lyftbanan följer ett naturligt rörelsemönster, tack vare den snedställda mastens utformning.

Tack vare detta naturliga rörelsemönster stannar lyftselen på plats och glider inte upp, vilket är ett vanligt problem med uppresningslyft.

Lyftbanan är alltid densamma oavsett lyftsele och vem som är vårdare. Detta resulterar i en säker, komfortabel och konsekvent lyftupplevelse för patienten.



Man kan välja mellan fast benbredd eller elektrisk benbreddning, olika typer av underbensstöd, byglar med olika lyftsellösningar samt två typer av höjd på hjulen. Uppresningsmomentet är bekvämt, stabilt och säkert, samtidigt som lyften är enkel att manövrera.

Molift Quick Raiser 205

4-punktsbygel, elektrisk benbreddning
2-punktsbygel, elektrisk benbreddning
4-punktsbygel, fast benbredd
2-punktsbygel, fast benbredd

Art.nr

M29160
M29161
M29162
M29163

Lyfthastighet:

med 75 kg belastning 35 mm/s
med 205 kg belastning 30 mm/s

Lyfthöjd:

600 mm

Bredd hjulbas:

Chassits yttre: 630 mm
Ben stängda inre/yttre: 220/350 mm
Ben öppna inre: 590 mm

Hjul

Ø 75/50mm
Ø 100/75mm

Hjul

Ø 75/50mm
Ø 100/75mm

Hjul

Ø 75/50mm
Ø 100/75mm

Höjd fotplatta:

65 mm
90 mm

Vändradie:

Med stängda / öppna ben

1144 mm/1300 mm

Rengöring:

Rengör produkten med ett lösningsmedelsfritt rengöringsmedel (pH-värde 5–9), eller med en 70% desinfektionssprit.



max 205 kg
max 452 lbs



Dimensioner

Höjd 1140 mm
Längd (fast benbredd) 1320 mm (1165 mm)

Vikt:

Max brukarvikt (SWL): 205 kg
Totalvikt (Fast benbredd): 44 (42,5) kg
Chassi (Fast benbredd): 17 (15,5) kg
Lyftbygel: 4,5 kg
Underbensstöd: 3,5 kg
Lyftmast (tyngsta delen): 19 kg

Battery SLA 24V, 2,9 Ah:

Laddningstid: 5 timmar
Antal lyft (75kg) med fulladdat batteri: >100

Höjd hjulbas:

76 mm
101 mm

Markfrigång:

27 mm
52 mm

Tillbehör & anpassning

Med ett brett utbud av tillbehör är Quick Raiser 205 mycket anpassningsbar



2-punktsbygel

2-punkts lyftbygel är perfekt att använda med lyftsele Rgosling StandUp.

Lyftbygel StandUp


2910061



Lituimbatteri

Som tillval till Molift Quick Raiser 205 finns också ett Litumbaserat LiFePO4-batteri (25,6 V)

Batteriet kommer med integrerad laddare. Litium-batteriet har ca 4 ggr så lång förväntad livslängd jmf ett SLA-batteri.

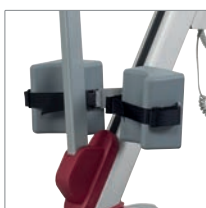

Underbensstöd

Det finns ett alternativt underbensstöd med liten/ stor kudde till lyften. Vadband finns som tillbehör.

Underbensstöd med liten kudde

2910059

Underbensstöd med stor kudde

2910056



Lyftsele Rgosling Active

Används tillsammans med 4-punktslyftbygel Active.

XS 1720910

S 1720920

M 1720930

L 1720940

XL 1720950



Fotplatta

Fotplattan ger en 10 cm förhöjning av fotstödet, vilket lämpar sig bra för barn och kortväxta vuxna. Infästningsanordningen är lätt att montera och gör det enkelt att fästa / ta loss tillbehöret på/från lyften.

Fotplatta

2910065



Lyftsele RgoSling StandUp polstrad

Används tillsammans med 2-punktslyftarmen StandUp.

XS 1720710

S 1720720

M 1720730

L 1720740

XL 1720750



Antihalkskydd fotplatta

Inlägg med antihalkmaterial för att öka friktionen.

Antihalkskydd, par

2920151



Lyftsele RgoSling Standup med support, polstrad

Används tillsammans med 2-punktslyftarmen StandUp. Ger stöd för stussen om patienten behöver extra hjälp för att komma upp till stående.

XS 1720810

S 1720820

M 1720830

L 1720840

XL 1720850



Kuddset utan vadband

Innehåller endast kuddar, inga vadband.

Liten kudde, par

2910076

Stor kudde, par

2910077

Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB

0371-58 73 00

info@etac.se

www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities