



molift[®]

Molift Quick Raiser 205

Ergonomisk oppreisningsløfter med høy løftekapasitet

Molift Quick Raiser 205

Molift Quick Raiser 205 er en topp moderne oppreisningsløfter med elektrisk regulerbare ben og høy løftekapasitet. Oppreisningsløfteren er komfortabel, stabil og har eksepsjonelt enkel manøvrering.

Naturlig bevægelsesmønster

Den aktive løftearmen (4-punkts) og RgoSling Active-seilet gir ekstra støtte ved forflytning og oppreising fra sittende til stående. Den skrå søylen gir et naturlig bevegelsesmønster og oppfyller løftebehovet til brukere som har noe egen kapasitet, opptil 205 kg. Brukeren kan føle seg trygg og komfortabel i alle bevegelser, ettersom løfteopplevelsen er den samme uavhengig av hjelper, løftearm eller seil.

Stabil og kompakt

Quick Raiser 205 er kompakt, stabil og meget enkel å manøvrere. Den unike hjulplasseringen, vinklet løftearm og meget god vektfordeling i understellet gir liten svingradius og enkel manøvrering selv i små rom.

Ved å velge de minste hjulene (50 mm), er det kun 7,5 cm høyde fra gulvet. Løfteren går under de fleste senger og stoler, og de elektrisk regulerbare bena gir tilgang nesten hvor som helst.



Fleksibel løftearm

For å lette pleierens arbeid og ikke stresse sårbare brukere, kan løftearmen skyves bort fra brukeren når den ikke er i bruk.



God tilgjengelighet

Quick Raiser 205 kommer under de fleste senger og stoler. De elektrisk regulerbare beina gir god tilgjengelighet nesten overalt.



Enkel å manøvrere

Enkel å manøvrere selv på trange steder, takket være liten svingradius og god vektfordeling.



Ergonomisk arbeidsstilling

De regulerbare beina kan forbli lukket, uavhengig av bevegelse. Slik får pleier plass til å jobbe med minimal risiko for belastning.



Skann QR-koden for å se en produktpresentasjon

Ergonomisk forflytning med et naturligt bevægelsesmønster

Stabile og trygge løft

Løftebanen følger et naturligt bevægelsesmønster takket være den skråstille søjlen.

Denne naturlige bevegelsen gjør at seilet holder seg på plass uten at det sklir opp.

Løftebanen er alltid den samme, uavhengig av hvilket seil som brukes eller hvem som hjelper til.

Dette gir en trygg, komfortabel og forutsigbar løfteopplevelse.



Mollift QuickRaiser 205

Variant	Batteri	Hjul	Artikkelnummer
Active, 4-punkts	SLA	50/75 mm	M29000
Active, 4-punkts	SLA	75/100 mm	M29100
Active, 4-punkts	Litium	75/100 mm	M29102-00
Active, 4-punkts, Nav*	SLA	75/100 mm	M29100-01
StandUp, 2-punkts	SLA	50/75 mm	M29001
StandUp, 2-punkts	SLA	75/100 mm	M29101

**Prisforhandlet Nav-modell med artikkelnummer M29100-01 har HMS-nummer 329912*

Spesifikasjoner

Høyde	1140 mm
Lengde	1320 mm
Utvendig bredde understell	630 mm
Bredde chassis, innvendig ben	220 mm
Bredde chassis, innvendig ben åpen	590 mm
Høyde på fotplate:	
Hjul Ø 75/50mm	65 mm
Hjul Ø 100/75mm	90 mm

Vekt

Maks brukervekt	205 kg
Totalvekt	44,5 (42,5 kg)

Teknisk info

Batteri	SLA 24V 2,9 Ah
Ladetid	5 timer
Antall løft m/fulladet batteri	100 løft/75 kg/500 mm
Svingradius med lukkede/åpne ben	1144 mm/1300 mm
Løftehastighet 75 kg	35 mm/sekund
Løftehastighet 205 kg	30 mm/sekund

Alk. 70%

pH 5-9

205 kg

max 452 lbs

Rengjøres med vaskemiddel uten slipemiddel og pH mellom 5 og 9, eller med desinfeksjonsmiddel 70%.

Tilbehør og tilpasning

Quick Raiser 205 har mye tilbehør og kan tilpasses den enkeltes behov

Alternative løftebøyer



Active løftebøyle

For løfteseil av typen RgoSling Active.




Loop løftebøyle

For løfteseil med løkker.



StandUp løftebøyle

For løfteseil av typen RgoSling Standup.

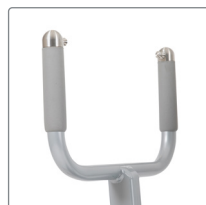

Clip løftebøyle

For løfteseil med klips.

Løfteseil



RgoSling Active seil

Dette 4-punkts løfteseilet finnes tilgjengelig i størrelsene XS til XL.

I tillegg finnes varianten Active Slim som er utviklet med tanke på toalettbesøk og personlig hygiene.

Se mål og artikkelnummer på www.etac.no



RgoSling StandUp seil

Dette 2-punkts løfteseilet finnes tilgjengelig i størrelsene XS til XL. For mer hoftestøtte finnes det enda en variant.

Se mål og artikkelnummer på www.etac.no

Leggstøtter



Sett med braketter og puter

Alternative leggstøtter med små eller store puter, og leggstropper.

Sett m/stropper og puter, str S 2910059

Sett m/stropper og puter, str L 2910056



Leggstøtter

Innholder kun puter, ingen stropper.

Sett, str S 2910076

Sett, str L 2910077

Fotplate/innlegg



Fotplate

Forhøyer fotstøtten med 10cm. Feste-mekanismen er lett tilgjengelig, og gjør det enkelt å feste og løsne fotplaten på Quick Raiser 205.

Fotplate 2910065



Innlegg til fotplate, sett

Innlegg med antisklismateriale for å øke friksjon.

Innlegg til fotplate, sett 2920151

For nyheter og oppdatert
produktinformasjon – besøk: www.etac.no