



# Molift RgoSling Repositioneringslakan

Ett lyft- och repositioneringslakan  
som alltid ligger på plats i sängen

 **etac**<sup>®</sup>

# Molift Repositioneringslakan RgoSling

Molift Repositioneringslakan RgoSling är ett viktigt hjälpmedel för effektiv vård av sängburna patienter. Repositioneringslakanet underlättar ansträngande lyft, minskar risken för skador hos vårdgivare och främjar en mer kvalitativ vård för patienter.

## Minskar risker och sparar tid

Ompositionering och förflyttning av patienter i sängen är en uppgift som upprepas åtskilliga gånger om dagen och är förknippat med skaderisker för vårdgivare. Repositioneringslakanet minskar risken för skador och bidrar till en mer kvalitativ vård eftersom det underlättar ansträngande lyft- och förflyttningssituationer.

## Bekväm och värdig vård

Lakanet är utformat för att alltid ligga på plats i sängen. Eftersom lakanet alltid befinner sig i sängen kan en mängd olika vårduppgifter utföras snabbare och enklare för både vårdgivare och patient. Bariatrisk vård i synnerhet ställer höga krav på patientkomfort och värdighet och detta underlättas med hjälp av repositioneringslakanet.

Dessutom erbjuder lakanet stöd för patientens kropp, vilket säkerställer hög komfort och säkerhet i samband med förflyttning, vändning och ompositionering.

## Underlättar vårdsituationer

Repositioneringslakan RgoSling är lämpligt för bariatrisk vård, vändning av sängburna patienter och lyft av patienter högre upp i sängen. Lakanet är även lämpligt för överflyttning av en patient från en säng till en annan, samt förflyttning till och från ryggläge. Dessutom gör lakanet det enklare att komma åt olika kroppsdelar vid, till exempel sårvård. Repositioneringslakanet är även väldigt praktiskt vid byte av sängkläder.



### Produkt

Produkt	Beskrivning	Art. nr.
Molift Repositioneringslakan RgoSling, 1 st	Midi B125cm x L134cm	1721570
Molift Repositioneringslakan RgoSling, 10 st	Midi B125cm x L134cm	1721570-C
Molift Repositioneringslakan RgoSling, 1 st	Maxi B125cm x L210cm	1721550

### Material:

Repositioneringslakan:	100% polyester
Lyftband:	100% polyester

### Specifikation

Molift Repositioneringslakan RgoSling, Midi. Åtta band med fasta öglor.  
Längd: 1340 mm  
Bredd: 1250 mm

Molift Repositioneringslakan RgoSling, Maxi. Tio band med fasta öglor.  
Längd: 2100 mm  
Bredd: 1250 mm

### Tvättinstruktioner



Maskintvätt - maxtemperatur 85 °C. Tvätt vid lägre temperaturer ökar produktens livslängd. Torktumlning - låg temperatur; maxtemperatur 60 °C. Får ej strykas. Får ej kemtvättas. Använd ej blekmedel.



## Egenskaper




### Bekväm och tidssparande

Repositioneringslakanet är utformat för att alltid ligga på plats i sängen, klart för användning. Detta frigör tid för vårdpersonalen.



### Tydlig färgkodning

Den tydliga färgkodningen på banden gör att vårdaren enkelt kan se vid vilken position/färg bandet ska fästas på var sida av lyftbygeln.

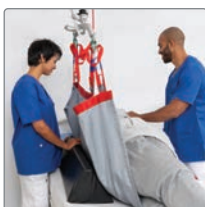

### Maximal användarkomfort

Lakanet har inga band på liggytan. Detta säkerställer en slät yta och en bekväm förflyttningssituation.



### Del av ett flexibelt system

Repositioneringslakanet är en del av Molifts breda utbud av flexibla lösningar inom patienthantering. Utbudet består av skensystem, taklyftar och mobila lyftar, lyftbyglar och lyftselar för alla typer av vårdssituationer.



## Tillbehör:



### Immedia Wedge kilformad positioneringskudde

Vid vändning av en patient på sidan kan personens kropp stödjas av en kilformad positioneringskudde som placeras mot ryggen.

Small, längd: 530 mm ..... IM53NS  
Large, längd: 800 mm .....IM53/80NS



### MultiGlide SG glidmatta

Tubformade glidmattor kan användas för att minimera friktionen under tryckpunkter, till exempel vid förflyttning högre upp i säng med Molift Repositioning Sheet.

För artikelnummer, se [www.etac.se](http://www.etac.se)



Vi vill ge människor möjlighet att påverka sin egen tillvaro och skapa en egen vardag på sina egna villkor – oavsett fysiska förutsättningar.

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: [www.etac.se](http://www.etac.se)

Etac Sverige AB  
Box 203, 334 24 Anderstorp  
tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
[info@etac.com](mailto:info@etac.com) [www.etac.se](http://www.etac.se)

  
Creating Possibilities