



# Molift RgoSling Harnais de repositionnement

Levage et rehaussement au lit

 **etac**<sup>®</sup>

# Molift RgoSling harnais de repositionnement

Le harnais de repositionnement Molift constitue un aide précieuse pour optimiser les soins des patients alités. Ce harnais facilite les portages compliqués et périlleux, réduisant le risque de blessure pour le soignant tout en offrant une qualité de soin accrue au patient.

## Reduire le risque et gagner du temps

Repositionner et transférer des patients alités font partie du quotidien des soignants et s'associent souvent avec un risque important de blessure. Le harnais de repositionnement Molift réduit ce risque tout en améliorant la qualité des soins en facilitant les levers et les transferts compliqués.

## Confort et dignité

Le harnais de repositionnement Molift est conçu pour offrir un confort maximum au patient alité. Puisqu'il est installé à demeure sous le patient, une majorité de manipulations deviennent plus rapides et plus simples pour le soignant et pour le patient. La prise en soins des patients bariatriques en particulier requiert une attention spéciale sur le plan du confort et de la dignité. Le harnais de repositionnement Molift est spécifiquement dédié à cette mission.

En complément, le harnais de repositionnement Molift fournit un soutien pour la partie supérieure du corps du patient, augmentant le sentiment de confort et de sécurité lors des transferts, latéralisations et réhaussements.

## Faciliter les situations de soins

Le harnais de repositionnement Molift convient aux soins bariatriques, aux latéralisations des patients alités, et aux réhaussements au lit. Le harnais est également pratique pour transférer un patient d'un lit à un autre ou sur tout autre surface horizontale. Pour les soins d'escarres ou autres soins cutanés, le harnais peut fournir un accès aux zones à traiter. Le harnais de repositionnement est utile quand il s'agit de changer le linge de lit.



### Désignation

Désignation	Conditionnement	Réf.
Harnais de repositionnement Molift Rgo	1 pc	1721570
Harnais de repositionnement Molift Rgo	10 pcs	1721570-C

### Matériaux

Harnais:	100 % Polyester longue durée
Sangles de levage	100 % Polyester

### Caractéristiques

8 sangles avec boucles fixes, ¼ de longueur du lit	
Longueur:	1340 mm (52,76 inch)
Largeur:	1300 mm (51,18 inch)

### Instrutions de lavage



Lavage machine à 85 °C/185 °F. Le lavage à basse température augmente la durée de vie du produit. Séchage machine – basse température ; max. 60 °C/140 °F. Repassage interdit. Lavage à sec et Javel interdits.



## Features



### Pratique et rapide

Le harnais de repositionnement est conçu pour rester dans le lit, prêt à l'emploi à tout moment. Il permet ainsi d'économiser sur le temps du soignant, le libérant pour se consacrer aux soins.



### Code couleur précis

Grâce aux boucles de couleur, les soignants peuvent se repérer facilement et s'accorder sur les réglages à adopter de part et d'autre du lit afin d'optimiser la position du patient dans le harnais.




### Confort maximum

La trame du tissu est cousue le long de la bordure du harnais. Ceci assure une surface douce et un tranfert confortable sans générer de risque d'escarre.



### Un système polyvalent

Le harnais de repositionnement Molift fait partie d'une gamme étendue de solutions de manutention de patient. Cette gamme comprend des lève-personnes mobiles au sol ou sur rails plafonniers, des cintres et des harnais destinés à toutes les situations de soins.

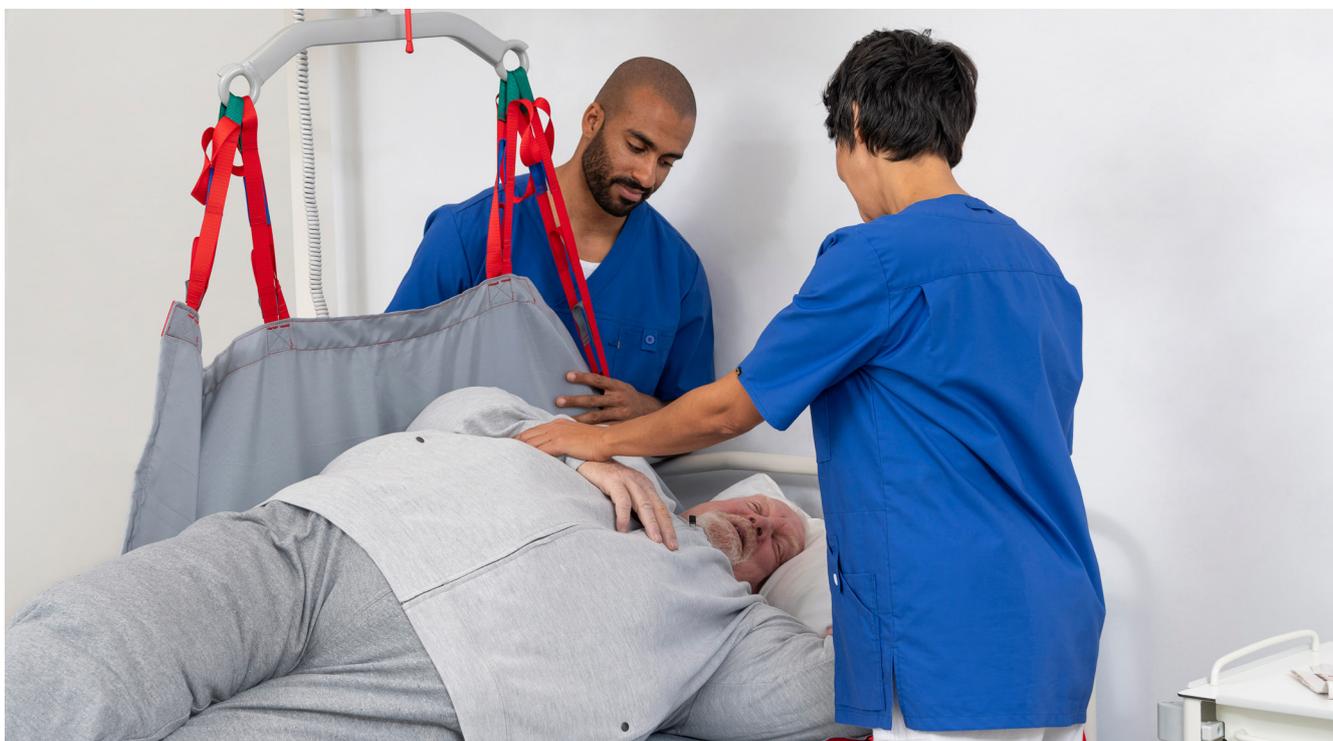

## Accessoires



### Cale de position Immedia

Utile lors de la latéralisation d'un patient, cette cale se place dans le dos du patient pour le stabiliser.

Small, L: 530 mm..... IM53NS  
Large, L: 800 mm.....IM53/80NS



### Drap de glisse MultiGlide SG nylon

Les drap de glisse tubulaires réduisent la friction sous les points saillants (par ex. les talons) lors du réhaussement au lit avec le harnais de repositionnement Molift.

Tubular 600 mm..... M0066  
Tubular 400 mm..... M0040



Etac est un leader mondial spécialisé dans la conception et la production de d'aides techniques et d'équipement d'aide à la mobilité des personnes. Nous avons à coeur de proposer des solutions pour optimiser la qualité de vie des personnes, de leur entourage et des soignants.

Restez informés de nos dernières nouveautés  
en consultant notre site internet:  
[www.etac.com](http://www.etac.com)

Etac SAS  
274 ter Avenue de la Marne  
Château Rouge Wood Park, bât. C&D  
59700 Marcq en Baroeul, France  
Tél. 03 74 09 77 68  
Email : [info.france@etac.com](mailto:info.france@etac.com)  
Email SAV : [sav.france@etac.com](mailto:sav.france@etac.com)  
[www.etac.com](http://www.etac.com)

  
Creating Possibilities