



Molift Smart 150

Kompakt smarthet - lätt, hopfällbar och transportabel utan verktyg

Molift Smart 150 är avsedd för förflyttningar över korta sträckor, t.ex. mellan säng och stol eller in i badrummet. Den kan enkelt rullas och transporteras dit den behövs. Tack vare sin låga vikt och sitt lilla fotavtryck är Molift Smart 150 lätt att manövrera även i trånga utrymmen. Lyften är idealisk för hemvård men kan användas i alla vårdmiljöer.

Lyftområdet ger en utmärkt maximal lyfthöjd och kan även lyfta från golvet. Den integrerade 4-punktsbygeln säkerställer en bekväm och rymlig lyftposition för användaren. Molift Smart 150 är hopfällbar i ett stycke utan verktyg, vilket gör den perfekt för resor och enkel förvaring. En mjuk resväska och en resväska med hårt skal finns som tillbehör.



Lätt att manövrera

Lätt och kompakt design gör den enkel att manövrera.



4-punkts lyftbygel

Ger användaren en bekväm och rymlig lyftposition.



Hopfällbar utan verktyg

Enkel hantering förenklar vardagen och transporten på resan.



Handkontroll

Robust och tvättbar. Indikatorer för batteri, överbelastning och service.

Funktioner

Ergonomisk hantering

Molift Smart 150 är utrustad med Molifts unika körhandtag som ger flera och flexibla greppmöjligheter för förbättrad ergonomi för vårdpersonalen.

Förväntad livslängd

Lyftanordningen har en förväntad livslängd på 30.000 cykler eller 15 år, beroende på vad som inträffar först.

Batteriet

Batteriet har avancerad Li-Ion-teknik och en säker förseglad design som gör det tvättbart (IPX6). Det väger endast 0,9 kg och kan bytas ut med endast en hand.

Batteriet kan laddas direkt på lyften och det finns även en extern laddare. Laddningstiden är endast 3,5 timmar. Fullt uppladdat klarar den 100 lyft med 75 kg per lyft och är kompatibel med alla Molifts mobila lyftar.

Batteriet är konstruerat för att hålla länge och har en förväntad livslängd på 1.700 laddningscykler.

Speed boost

Speed boost-funktionen möjliggör ökad hastighet när lyften är obelastad.

Handkontroll


Handkontrollen är robust och väl utprovad. Den har en batterinivåindikator, överbelastningsindikator och serviceindikator för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet.

Kabeln är utformad för att hålla länge och kan enkelt bytas ut om den skadas, och handkontrollen är tvättbar (IPX6).

Molift Service Tool

Molift Smart 150, liksom alla Molifts lyftar, är utrustad med ett unikt serviceaviseringsystem som meddelar när service krävs. Den integrerade serviceprogramvaran kan också visa data om hur lyften är använd och kan hjälpa serviceteknikerna med felsökning.

Dessutom är lyften utrustad med Bluetooth-anslutning, vilket möjliggör trådlös anslutning till Molift Service Tool.

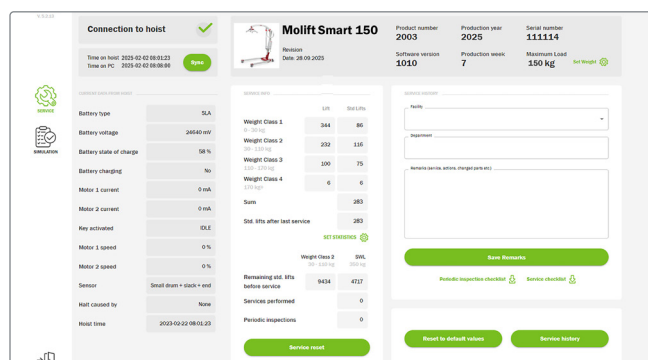

Beskrivning

Molift Smart 150	Art.nr. M1020
Transportväska Molift Smart 150 mjuk bag	3049177
Transportväska Molift Smart 150 hård resväska	0990200

Vikt

Max brukarvikt (SWL)	150 kg
Enhetens vikt (inkl batteri)	24,9 kg

Mått

Längd	1200 mm
Benhöjd	110 mm
Mått hopvikt	L1160 x W475 x H360 mm
Lyfthöjd	195–1665mm
Lyftintervall	1470 mm

Material

Aluminium, stål

Teknisk information

Batteri	Li-Ion 25.2V, 2.85Ah
Batteriets laddningstid	3.5 timmar
Lyfthastighet	60 mm/sek
Kapacitet	100 lyft/75 kg/500 mm

Rengöring



Använd pH-neutralt rengöringsmedel. Om desinfektion krävs, använd isopropylalkohol. Använd inte slipande eller frätande ämnen för rengöring.



För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB

0371-58 73 00
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities