



molift[®]

Molift UnoSling

Sikre og komfortable engangssejl til brug for Single Patient Use (SPU)

Molift UnoSling

Molift UnoSling er en portefølje af engangssejl (SPU), der er udviklet til at imødekomme det voksende behov i Sundhedssektoren, både på sygehuse og institutioner, hvor forebyggelse af infektionsrisiko er af største betydning.

Fordele ved SPU-produkter

SPU-produkter er afgørende for at forhindre overførsel af infektion. De er også medvirkende til omkostningsbesparelser og en mere effektiv drift, da ressourcekrævende logistik- og vaskeomkostninger undgås. De er lette at opbevare og er altid klar til brug.

Høje krav til infektionskontrol

Da Molift UnoSling kun anvendes ved én og samme patient gennem hele patientforløbet og bortskaffes når patienten afslutter forløbet eller hvis sejlet bliver beskidt eller beskadiget, formindskes risiko for smitte.

Stærkt og sikkert materiale

Molift UnoSling er fremstillet i et stærkt ikke-vævet materiale, som ikke kan vaskes. Éngangssejlet kasseres, hvis det bliver snavset eller beskadiget, eller hvis patienten ikke længere har brug for det.

Modeller med specifikke funktioner

Selvom det er éngangsprodukter, er Molift UnoSling stadig designet med høj kvalitet samt patientkomfort og sikkerhed i tankerne. Flere modeller er tilgængelige for at imødekomme patienternes forskellige behov, UnoSling HighBack, UnoSling Toilet, UnoSling Repositioning Sheet, UnoSling Ambulating Vest og UnoSling LimbLift.





Label: Må ikke vaskes

Hvis produktet fejlagtigt vaskes, vil symbolet ændre udseende.



2-punkts eller 4-punkts løfteåg

Velegnet til brug med enten 2-punkts eller 4-punkts løfteåg.


Engangssejl til Single Patient Use (SPU)

For at reducere risiko for smitte bortskaffes engangssejlet, hvis det er snavset, eller hvis patienten ikke længere har brug for det.

Label med patientens navn

Alle produkter er mærket med en tydelig label med praktiske oplysninger. Størrelsen vises tydeligt, og det er nemt at tilføje patientens navn og dato for ibrugtagning.

Dette er med til at sikre korrekt og sikker brug af sejlet.

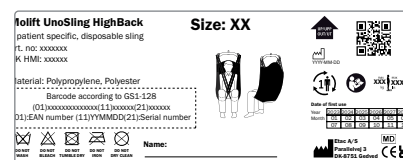


Materialer



Ikke-vævet

Ikke-vævet polypropylen. Gælder for alle Molift UnoSlings undtagen Molift UnoSling Repositioning Sheet, som er fremstillet i polyester.

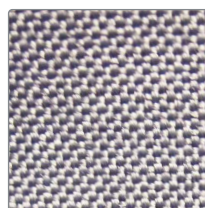

Polyester

Standardpolyesterstoffet er slidstærkt. Materialet er let at vedligeholde og har en smudsafvisende overflade.


Molift UnoSling HighBack

Velegnet til de fleste patienter i almindelige forflytningssituationer.

Molift UnoSling HighBack er velegnet til de fleste patienter i almindelige forflytningssituationer, eksempelvis fra seng til kørestol. Sejlet forbliver hos patienten under hele patientforløbet.

Molift UnoSling HighBack er velegnet til brug med enten 2-punkts eller 4-punkts løfteåg.

- Passer til de fleste patienter i almindelige forflytningssituationer
- Forflytning til og fra liggende eller siddende stilling
- Støtte til ryg og hoved
- Velegnet til 2- eller 4-punkts løfteåg

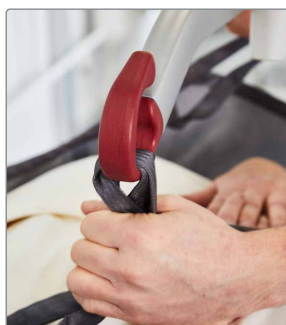

Velegnet til 2- eller 4-punkts løfteåg


Molift UnoSling HighBack



Str.	Stk./pk	Varenr.	HMI-nr.
S	20	3060020	103301
M	20	3060030	103302
L	20	3060040	103303
XL	20	3060050	103304
XXL	10	3060050	103305

Max. brugervægt 350 kg

Mål

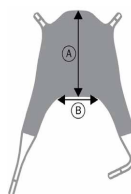

Str.	(A) Ryghøjde	(B) Bredde
S	80 cm	35 cm
M	93 cm	40 cm
L	100 cm	47 cm
XL	105 cm	54 cm
XXL	110 cm	60 cm

Molift UnoSling Toilet

For patienter med god stabilitet og muskeltonus

Molift UnoSling Toilet er et éngangssejl med lav ryg og en stor åbning mellem benstøtterne for at lette af- og påklædning i forbindelse med toiletbesøg. Sejlet er let at påføre og fjerne og har et bælte for ekstra sikkerhed under løft- og forflytning.

Indersiden af sejlet er foret med et skridsikkert materiale, så det bliver på plads.

Sejlet har en grøn søm i ryggen, som guide til placering i en centreret position.

- Til patienter med god stabilitet og muskeltonus
- Letter af- og påklædning
- Let at påføre og fjerne
- Bælte for ekstra sikkerhed under løft- og forflytning
- Velegnet med 2- eller 4-punkts løfteåg



Bælte for ekstra sikkerhed under løft- og forflytning

Molift UnoSling Toilet				Mål		
Str.	Stk./pk.	Varenr.	HMI-nr.	Str.	(A) Ryghøjde	(C) Anbefalet taljestørrelse
S	5	3090020	133866	S	33 cm	76-100 cm
M	5	3090030	133869	M	33 cm	85-110 cm
L	5	3090040	133872	L	33 cm	94-120 cm
XL	5	3090050	133875	XL	34 cm	115-140 cm

Max. brugervægt 350 kg



Molift UnoSling Ambulating Vest

Engangssejl til sikre genoptræningsaktiviteter, såsom gangtræning samt gang- og balancetræning

Molift UnoSling Ambulating Vest er designet til patienter med behov for tryk og sikker genoptræning såsom gangtræning, ståtræning samt balanceøvelser. Sejlet leveres med dobbelte spænder og et skridsikkert materiale inde i bæltet. Det leveres med lyskestrapper, der forhindrer sejlet i at glide op.

Sejlet har en grøn søm i ryggen, som guide til placering i en centreret position.


- Sikrer sikker rehabilitering og tidlig mobilisering
- Dobbeltspænder og skridsikker foring for ekstra sikkerhed
- Lyskestrapper forhindrer sejlet i at glide op
- Velegnet med 2-punkts løfteåg



Lyskestrapper for ekstra sikkerhed




Molift UnoSling Ambulating Vest

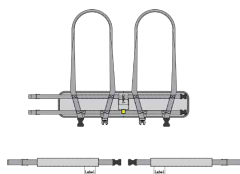

Str.	Stk./pk	Varenr.	HMI-nr.
S	5	3070020	133842
M	5	3070030	133845
L	5	3070040	133848
XL	5	3070050	133851

Max. brugervægt 350 kg

Mål

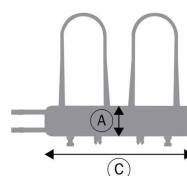

Str.	(A) Ryghøjde	(C) Anbefalet taljestørrelse
S	20 cm	72-92 cm
M	20 cm	90-110 cm
L	21 cm	105-125 cm
XL	21 cm	123-145 cm



Molift UnoSling StandUp

Engangssejl egnet til aktive sit-to-stand forflytninger

Molift UnoSling StandUp er velegnet til patienter, der har behov for støtte fra en sit-to-stand lift for at skifte fra en siddende stilling til en anden, såsom til eller fra en seng, en kørestol eller et toilet. Sejlet fordeler vægten over ryggen og giver patienten behagelig støtte gennem hele sit-to-stand bevægelsen. Det er også et nyttigt produkt i tidlige rehabiliteringsaktiviteter med en aktiv sit-to-stand lift.

Indersiden af sejlet er foret med et skridsikkert materiale, så det bliver på plads.


Molift UnoSling StandUp er til brug med en sit-to-stand ståløfter med et 2-punkts loop løfteåg.

- Til aktive sit-to-stand forflytninger
- Bæltet og skridsikker foring giver ekstra sikkerhed
- Fordeler vægten over ryggen for behagelig støtte



Velegnet med et 2-punkts loop løfteåg


Molift UnoSling StandUp

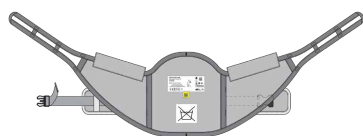

Str.	Stk./pk	Varenr.	HMI-nr.
S	5	3080020	133854
M	5	3080030	133857
L	5	3080040	133860
XL	5	3080050	133863

Max. brugervægt 350 kg

Mål

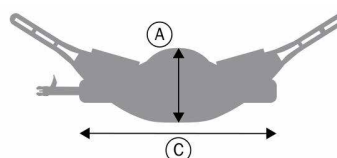

Str.	(A) Ryghøjde	(C) Anbefalet taljestørrelse
S	34,5 cm	70-95 cm
M	35 cm	90-110 cm
L	35 cm	100-120 cm
XL	35 cm	110-140 cm

Molift UnoSling LimbLift

Engangssejl til løft og støtte af f.eks. et ben

Til løft og støtte af f.eks. et ben


Molift UnoSling LimbLift er et løftebånd designet til forskellige anvendelser såsom at løfte og holde en kropsdel. Det kan anvendes til situationer som fodpleje eller undersøgelse og behandling af tryksår. Fås i to bredder.

Sejlet forbliver hos patienten under hele patientforløbet.

- Anvendes under behandling, vask eller undersøgelse
- Til et ben, arm eller andre dele af kroppen
- Reducerer arbejdsbelastningen for plejepersonalet
- Lomme på den ene side for at lette påføringen




Molift UnoSling LimbLift

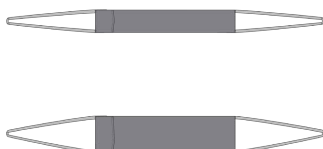

Str.	Stk./pk	Varenr.	HMI-nr.
Standard	10	3100020	133878
Bred	10	3100030	133881

Max. brugervægt 200 kg

Mål

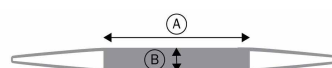

Str.	(A) Længde	(B) Bredde
Standard	95 cm	15 cm
Bred	95 cm	25 cm

Molift UnoSling Repositioning Sheet

Velegnet til forflytninger i sengen og imellem horisontale flader

Molift UnoSling Repositioning Sheet er velegnet til en lang række plejesituationer for at gøre forflytninger og lejringsopgaver hurtigere, lettere og mere sikker for både plejepersonale og patienten. For eksempel ved vending af patienter, forflytning højere op i sengen eller til pleje af bariatriske patienter.


Sejlet forbliver hos patienten under hele patientforløbet.

- Kan bruges til en lang række plejesituationer for sengeliggende patienter
- Til vending og forflytning højere op i sengen
- Kan forblive i sengen under patienten under patientforløbet
- Velegnet til pleje af bariatriske patienter




Tydelig markering af op/ned og top/bund

Molift UnoSling Repositioning Sheet

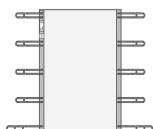

Mål

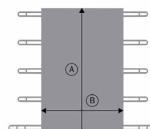

Str.	Stk./pk	Varenr.	HMI-nr.
One size	10	3200020	133884

Max. brugervægt 500 kg

Str.	(A) Længde	(B) Bredde
One size	215 cm	135 cm



Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering.

Siden 1973 har vi arbejdet engageret for at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder og produktinformationer på www.etac.dk

Etac AB

+45 79 68 58 33

info@etac.dk

www.etac.dk

etac[®]
Creating Possibilities