



## Next Level

Die neue Generation  
Toilettensitzerhöhungen  
für mehr Möglichkeiten



## Etac My-Loo

Toilettensitzerhöhung  
mit Klammern

 **etac**<sup>®</sup>



# Etac My-Loo

## Toilettensitzerhöhung mit Klammern

In Zusammenarbeit mit erfahrenen Industriedesignern haben wir eine neue Toilettensitzerhöhung mit Klammer entwickelt – die Etac My-Loo. Ein Konzept, das Ansprüchen an Hygiene, Sicherheit und Design eine neue Bedeutung verleiht. Mit seinen sanft geschwungenen Linien und der exzellenten Ergonomie bietet sie äußersten Komfort und ein Design, das ideal für moderne Badezimmer geeignet ist.

### Entwickelt für Funktion und Komfort

Etac My-Loo wurde entwickelt um sich dezent ins Badezimmer einzufügen. Ihre Formgebung bietet optimalen Komfort und Körperhygiene. Durch die sanften Linien und die große Öffnung ist die My-Loo für fast alle Menschen geeignet. Die My-Loo wird in zwei Höhen angeboten, mit oder ohne Deckel.

### Einfach sauber und frisch

Die My-Loo Toilettensitzerhöhung mit Klammern besteht aus nur wenigen Teilen und nachhaltigen Materialien. Sie ist einfach mit einem weichen Tuch abzuwischen. Für eine intensive Reinigung, kann sie einfach vom WC entfernt, um dann anschließend genauso einfach wieder aufgesteckt zu werden.

### Sichere, schnelle Installation

Es benötigt nur wenige Sekunden die Etac My-Loo zu installieren! Sie befestigen sie mit zwei speziell entworfenen Halterungen, die sich leicht an verschiedene Toilettenformen anpassen lassen. Die extra großen Reibflächen und das flexible Material der Elemente sorgen für eine stabile Verbindung mit dem Porzellan. Stecken Sie die Klammern in die Rasterungen des Sitzes und positionieren Sie den Sitz auf dem Porzellan. Die Klammern nur noch andrücken und die Installation ist abgeschlossen!



HMV-Nummer Etac My-Loo  
6 cm: 33.40.01.0111  
10 cm: 33.40.01.0112

#### Etac My-Loo Toilettensitzerhöhung mit Klammern

	Art.-Nr.
6 cm	80301520
10 cm	80301521
6 cm mit Deckel	80301522
10 cm mit Deckel	80301523

#### Gewicht

6 cm: 0,8 kg	10 cm: 1,1 kg
6 cm mit Deckel: 1,2 kg	10 cm mit Deckel: 1,4 kg

#### Max. Benutzergewicht

190 kg

#### HMV-Nr.

6 cm: 33.40.01.0111  
10 cm: 33.40.01.0112

#### Material

Polypropylen und TPE

#### Design

Myra Industriell Design AB

myra

#### Waschanleitung



Verwenden Sie ein lösungsmittelfreies Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 5 und 9. Zur Desinfektion dient 70% Alkohol. Kann bei Bedarf bei 85°C gereinigt werden.



## Eigenschaften



### Einfach sauber und frisch

Die sauberen, glatten Oberflächen sind einfach mit einem weichen Tuch abzuwischen. Für eine intensive Reinigung, kann man sie einfach vom WC entfernen um dann anschließend genauso einfach wieder aufgesteckt zu werden.



### Entwickelt für Funktion und Komfort

Die weiche Form des Sitzes bietet sicheren Halt und hohen Komfort. Eine extra große Öffnung und großzügige Aussparungen erleichtern die Körperhygiene.



### Sichere, schnelle Installation

Die einfach zu befestigenden Klammern mit vielen Einstellungsmöglichkeiten und großen Reibflächen machen es leicht, die My-Loo jederzeit sicher an jedem Toilettenporzellan fest und einfach zu montieren. Ganz ohne Schrauben.








### Varianten

Etac My-Loo Toilettensitzerhöhung mit Klammern ist in zwei verschiedenen Höhen erhältlich (6 und 10 cm) sowie mit oder ohne Deckel.



### Maße

Außenbreite x Tiefe	36 cm x 40 cm
Breite d. Öffnung x Tiefe	23 cm x 36 cm
Sitzhöhe	6 cm, 10 cm
Abstand zw. d. Klammern	29 cm - 38,5 cm

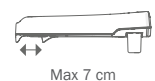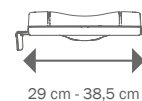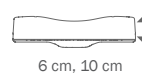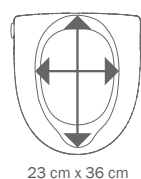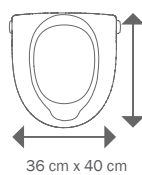





## Next Level

Eine neue Generation Toilettensitzerhöhungen die mehr Möglichkeiten bietet. My-Loo Toilettensitzerhöhung mit Klammern ist Teil einer ganz neuen Generation intelligenter Produkte von Etac. Mit den höchsten Anforderungen an Sicherheit, Komfort und Flexibilität bis hin zu einfacher Installation und Reinigung präsentieren wir Ihnen eine Produktpalette, die völlig neue und überlegene Lösungen bietet.

Mit diesem Sortiment bringen wir Hilfsmittel für die Toilette auf ein neues Niveau. „Design treibt Entwicklung voran“ war schon immer unser Leitmotiv, und wir sind überzeugt, dass Etac My-Loo mit Klammern den Benutzern und Versorgern helfen wird, neue Möglichkeiten zu schaffen.

Für die neuesten Nachrichten und ständig aktualisierte Produktinformationen – besuchen Sie:  
[www.etac.de](http://www.etac.de)