

Immedia OneManSling


Vårdarens hjälp

Immedia OneManSling gör det möjligt för en vårdare att förflytta brukaren högre upp i sängen. Genom att fästa den ena änden av slingan i sängens huvudgavel kan vårdaren med minimal kraftanstängning flytta brukaren högre upp i sängen. Om brukaren inte kan medverka placeras med fördel en glidmatta under axlar och stuss.

Konstruktionen på OneManSling, ett band med glidhylsa som placeras invid stussen tillsammans med en Multiglide glidmatta gör att förflyttningen högre i säng kan utföras med minimal friktion eller sidleds rörelse.



Immedia OneManSling gör det möjligt för en vårdare att förflytta brukaren högre upp i sängen.

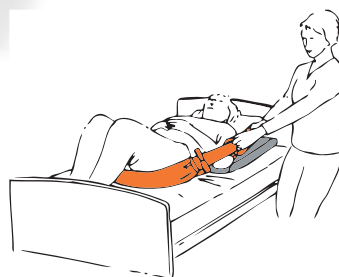

Användningsområden

- Högre upp i säng
- Förflytta ben i och ur säng

Beskrivning

Immedia OneManSling

6 handtag 1 par, nylon, gröna

CM

7,5 x 300

Art.nr

IM460PU

Specifikationer

OneManSling

Material

Band: Polyester
Glidhylsa insida: Nylon
Polstring: Polyester
Utsida: Polyuretan

Max. brukarvikt: 150 kg



Tvättråd

Maskintvätt 80 °C. Torktumling låg temperatur. Strykning låg temperatur. Tål ej kemtvätt. Ingen klorblekning. Torkning. Använd inte sköljmedel eller klorin.

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se