

Rhombo-fill® overmadrass

Rhombo-fill overmadrass er ikke en overmadrass i vanlig forstand. Rhombo-fill overmadrassen er delt opp i 34 kammer, som er fylt med over en million små, luftige, asymmetriske, superelastiske skumbiter. Disse gir en enestående trykkfordeling og god komfort for smerteutsatte brukere, samt god ventilasjon uten at brukernes mulighet til å bevege seg minskes. Overmadrassen skal brukes oppå en standard madrass.

Bruksområder

Anbefales for liggende personer som:

- Har hatt trykksår
- Har mindre sår
- Har risiko for å utvikle trykksår
- Har normal eller nedsatt sensibilitet




Egenskaper

- 34 kammer fylt med små asymmetriske skumbiter
- God trykkfordeling
- Gir en komfortabel liggstilling for smerteutsatte pasienter
- Varme og fuktighet blir effektivt ledet bort
- Kan brukes uten trekk

Oppbygging og materialer

MADRASS:	Volumvekt	40 kg/m ³
	Fasthet (kPa/N)	2,3 kPa / 80 N
	Elastisitet	110%
	Vask	95° C
	Tørketrommel	600 omdreininger / min.

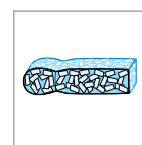

Rhombo-fill

TREKK:	Bomull:	
	Inkontinens	100% polyester belagt med Polyuretan
	Elastisitet	2-sidig elastisk
	Vask	Maskin 60° C

Se side 32-33 for oversikt over størrelser og art.nr.

Fakta Rhombo-fill

Høyde uten belastning	7 cm
Maks brukervekt	40 - 120 kg
Branntest	NS-EN 597 1/2

NAV POST		TRYKK	SKYV	VARME FUKT	PASIENT RISIKO	MADR. FOREB. EFFEKT	PASIENT SÅRGRAD	MADR.BEHANDL. EFFEKT
6	Rhombo-fill®	●●●	●●	●●●	lav	●●●	liten	0