



# Molift Air 200

Komplett løftemotor for  
alle løftesituasjoner i hverdagen

 **etac**<sup>®</sup>

# Molift Air 200

Molift Air 200 er en økonomisk, funksjonell takheismotor med god design for brukere opptil 205 kg. Molift Air 200 er det minste medlemmet i Molift Air familien. Kombinert med Molift skinnesystem og Molift seil løser Molift Air alle daglige løftesituasjoner i helsevesenet og andre pasientrelaterte miljøer.

## Komfort og kvalitet

Molift Air 200 kombinerer behovet for maksimal komfort med effektive og trygge forflytningssituasjoner.

Designet og brukervennligheten gir en eksepsjonell frihet ved bruk, og det er kun behov for én pleier til å utføre daglig forflytning, noe som gir mer tid til hver enkelt bruker. Molift Air gir en ergonomisk riktig arbeidsstilling uten manuelle løft og et bedre arbeidsmiljø for pleier. Bruker får en verdig, trygg og komfortabel forflytning.

## Lett og fleksibel

Molift Air er en sterk og smidig takheis egnet til å sitte i, ved liggende forflytninger og i stå- og gåtreningssituasjoner - brukt sammen med det omfattende tilbehørsprogrammet fra Molift.

Molift Air brukes med faste takskinner, men kan også brukes med bærbare frittstående systemer.

På grunn av svært lav vekt og det smarte quick release koblingssystemet, er Molift Air enkel å håndtere under installasjon og service. Molift Air tilbyr fleksible løsninger som fjernkontroll, lading-i-skinne (IRC) og muligheter for rom-til-rom-forflytning. Legg til sikkerhetsfunksjoner, det store løfteintervallet og stort utvalg opphengsmuligheter blir Molift Air en komplett løsning for pleie- og helsetjenesten.



Modell	Inkluderer	Art. nr.	HMS nr.	Fakta
Molift Air 200	Motor, håndkontroll, lader, SLA batteri	M26200-00	292448	Molift Service Software
				Nødsekk
				Nødstopp
				Beskyttelsesklasse; håndkontroll og løftemotor
				Inkludert
				Mekanisk og elektrisk
				Snoren kan nås fra gulv
				Reset mulig fra gulv
				IP24
<b>Fakta</b>				
Maks belastning (SWL)		205 kg		
Totalvekt (med SLA batteri)		8,6 kg		
Lengde		360 mm		
Bredde		190 mm		
Høyde		195 mm		
Batteri		26.4 V SLA 2.6 Ah		
Batterilader		100–240 V AC, 40–60 Hz		
Ladetid batteri		6 timer		
Motor		24 V DC		
Løfteintervall		3000 mm		
Løfthastighet 75 kg		60 mm/sek.		
Forventet levetid		30 000 løft SWL/10 år		

Rengjør / desinfiser produktet ved bruk av et løsemiddelfritt rengjøringsmiddel uten slipemidler med pH mellom 5 og 9, eller med 70% desinfeksjonsmiddel. Produktet kan dekontamineres eller vaskes på 85°C i 3 minutter.

## Egenskaper



### Liten motor - høy løftekapasitet

Molift Air 200 er liten og veier kun 8,6 kg. Likevel har den en løftekapasitet (SWL) på 205 kg. Størrelsen og vekten gjør den meget enkel å manøvrere og flytte for pleieren i de ulike forflytningssituasjonene.



### Stille i bruk

Molift Air 200 er stille i bruk og har en "myk" start og stopp. Dette gir en komfortabel og trygg forflytning for brukeren.



### Quick release funksjon for løpevogn

Molift Air 200 er enkel å håndtere både ved installasjon og service, takket være sin meget lette vekt og den smarte quick release funksjonen. Med et enkelt grep kobles motoren av og på løpevognen ved behov.



### Intuitiv håndkontroll

Molift Air 200 har en ny intuitiv håndkontroll med festemulighet på løftebøylen og vegghengt lader.



## Tilbehør




### 4-punkts løftebøyle

	Art. nr.	HMS nr.
4-punkt Small	2530212	292461
4-punkt Medium	2530211	292482
4-punkt Large	2530210	292460



### 8-punkts løftebøyle

	Art. nr.	HMS nr.
En størrelse	2140003	248648

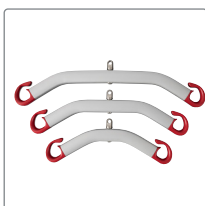

### 2-punkts løftebøyle

	Art. nr.	HMS nr.
2-punkt Small	2530115	292461
2-punkt Medium	2530120	292449
2-punkt Large	2530125	292453



### Annet tilbehør

	Art. nr.	HMS nr.
Vekt 300kg	1840000	292457
Vekt klasse 3, 300 kg	1840000-KG	292458
Rom-til-rom enhet	2510295	229726



"Alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og følge sine drømmer  
uavhengig av fysiske omstendigheter"

For mer informasjon om våre produkter og løsninger, se [etac.no](http://etac.no).