



Etac Prio

Den aktiva komfortrullstolen

 **etac**[®]

Bejaka rörligheten med Etac Prio

Många som inte längre klarar att sitta i en allroundrullstol hamnar i en tung, trög komfortrullstol – och blir sittande helt beroende av andras hjälp för att kunna förflytta sig. Ofta onödigt tidigt.

Med Etac Prio föds en ny typ av rullstol. En aktiv komfortrullstol där man sitter överraskande bekvämt och som ändå är välbalanserad och lättkörd. Prio är gjord för att ge vila – utan att ge upp rörligheten. Med Prio ger vi fler möjligheter att leva aktivt längre i livet.

Ge inte upp rörligheten – Prova Prio.



Dynamiskt bäckenstöd

När ryggstödet vinklas bakåt minskar automatiskt spänningen i bäckenbandet vilket medför ett skönt viloläge. När ryggstödet förs till upprätt läge drar det dynamiska bäckenstödet återigen åt spänningen i bäckenbandet.



Hel fotplatta

Ett tillbehör som ger gott om plats för att kunna röra på fötterna, vilket bidrar till rörlighet i höftlederna.



Skapa form

Sköldar fördelar trycket från ryggbanden. Därför kan Prio ha en tunn och följsam dyna som låter sig formas efter användarens behov. Kilar, inlägg och breddningssats är ytterligare möjligheter att forma och storleksanpassa Prio.



Låg sitshöjd

Prio har en lägsta sitshöjd på 38 cm, vilket gör det möjligt för användare att sparka sig fram.



Gaskolvsclips

Minska vinkelinställningsmöjligheten. Ju fler clips, desto mer minimeras vinkelinställningarna bakåt. Inga verktyg krävs.



Aktivitet baserad på användarens förmåga

Vad vi kan prestera är baserat på vår förmåga. Förmågor är färskvara, används de inte går de förlorade. Viktiga förutsättningar är motivation och ett bra utgångsläge. För en person som använder komfortullstol, kan de aktiva stunderna vara korta. Men inte desto mindre viktiga. För att orka vara aktiv så länge som viljan finns, är rätt stöd och balans avgörande, både i aktivitet och vila. Ryggstödet anpassbarhet till användarens rygg påverkar kroppskontrollen och ökar sittoleransen. Det är viktiga förutsättningar för att själv kunna hålla sin kaffekopp, köra rullstolen lite eller bara hålla ögonkontakt med den man samtalar med. Helt enkelt aktivitet baserat på individens förmåga – Ability Based Seating™.

Etac Prio – form och stöd

Det handlar om den individuella förmågan. Vår strävan är att möta användaren på toppen av förmågan med form och stödjande insatser. Bättre sittande ökar aktivitets och mobilitetsförmågan. Det är det vi kallar Ability Based Seating™.

Ability Based Seating™

Vi vet att förmågor är färskvara. Används de inte kan de försämrast. Det gäller att ta tillvara på möjligheterna. En förmåga som stimuleras kan till och med stärkas, vilket kan leda till ökad sitttolerans över tid.

Prio är den enda komfortrollstolen som erbjuder ett bäckenstöd för aktivt sittande. Stödet avaktiveras vid vila och ryggklädselns avlastande sköldar jämnar ut trycket i viloläge. Utifrån användarens förmåga, kan vi förbättra förutsättningarna för aktivitet och mobilitet genom bättre sittande.

Det kallar vi Ability Based Seating™.
Så våga ändra inställning!



Detaljer




Dynamiskt bäckenstöd

När ryggstödet vinklas bakåt minskas automatiskt spänningen i bäckenbandet vilket medför ett skönt viloläge. När ryggstödet förs till upprätt läge drar det dynamiska bäckenstödet återigen åt spänningen i bäckenbandet.



Skapa form

Sköldar fördelar trycket från ryggbanden. Därför kan Prio ha en tunn och följsam dyna som låter sig formas efter användarens behov. Kilar, inlägg och breddningssats är ytterligare möjligheter att forma och storleksanpassa Prio.

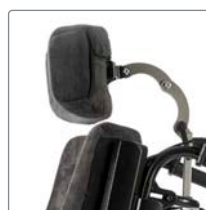

Traditionellt huvudstöd

Reglerbart i höjd, djup och vinkel. Kan justeras ned framför ryggstödet. Avståndet mellan kyfosens topp och nackens stödpoint (occiput) kan vara långt. Detta ställer krav på huvudstöds justerbarhet i djupled. Kan utrustas med minnesfunktion.



Aktivitet lika viktigt som vila

Smal stolsbredd, låg vikt och flera valbara drivhjulpositioner är egenskaper som gör Prio användaren mer aktiv.

Etac Prio 3D

Ibland tar kroppen sig helt nya vägar. Nu presenterar Etac nya 3D-ryggstödet. En patentsökt svensk innovation för formbarhet i alla riktningar, idealiskt för asymmetri och kyfos.

Kyfos påverkar hela människan

Med ökad ålder påverkas ryggradens kurvatur. De individuella skillnaderna är stora. När ryggradskrökningen överstiger 50 grader man tala om diagnosticerad kyfos. För användare med kyfos och andra asymmetrier har vi skapat ett ryggstöd som ger rymd och stöd i alla riktningar.

Att orka vara aktiv

Att sitta hopsjunken påverkar förmågan att vara aktiv. Huvudet hamnar alltmer framför bröstkorgen, vilket förskjuter tyngdpunkten. Bröstryggens krumma form begränsar skulderbladens rörlighet vilket i sin tur påverkar rörligheten i armarna. Vid kyfos accelererar problematiken. Mycket energi går åt att hålla upp huvudet, sittställningen blir instabil och aktivitetsgraden begränsas. Även andning, matsmältning och möjligheten att ha kontroll på urinblåsan påverkas av en hopsjunken sittposition.

Målet är att lyfta blicken och få en avslappnad sitt- och körställning.

Dags att ändra inställning!



Detaljer




3-delad ryggdyna

Sidopanelerna ger stöd i sidan och skapar horisontell skålning. Centrumpanelen följer kyfosens vertikala form.



Rygghöjd

Den hopsjunkna ryggställningen ställer krav på lägre ryggstödshöjd. Prio 3D kan ställas i ryggstödshöjder från 45 till 60 cm.

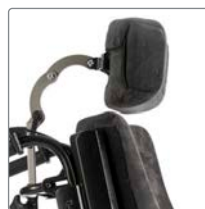

Traditionellt huvudstöd

Reglerbart i höjd, djup och vinkel. Kan justeras ned framför ryggstödet. Avståndet mellan kyfosens topp och nackens stödpunkt (occiput) kan vara långt. Detta ställer krav på huvudstöds justerbarhet i djupled. Kan utrustas med minnesfunktion.



Dynamiskt Bäckenstöd

En krum rygg medför ofta ett bakåttippat bäcken. Likaväl som vi måste ge plats för bröstryggen, måste vi stödja bäckenet. Ett varierat stöd för vila och aktivitet.

Etac Prio med Eltilt

Förutom andra möjligheter till Prio, är eltilt för justering av rygg- och sitsvinkel tillgänglig för användare som kan och vill ändra position själv.

Aktivitet och vila

Eltilt finns som tillval eller som tillbehör för eftermontering på Prio. Elenheten är diskret och adderar endast 3.5 kg till totalvikten, vilket gör att Prio behåller sina egenskaper som en stilren och lättanvänd komfortrullstol.

Prio är en aktiv, multifunktionell komfortrullstol. Med elektrisk rygg- och sitstilt kan dessa funktioner också bidra till att skapa aktivitet. Prio med eltilt ger användaren ännu fler möjligheter att leva aktivt längre i livet.

Prio eltilt kan inte kombineras med bäckenstöd, komfortlås, QR-sprint, clips för vinkelbegränsning rygg/tilt eller korg.



Detaljer



Handkontroll

Enkla och tydliga symboler.



Tillgänglig placering av handkontroll

Handkontrollen är magnetisk och kan tack vare den medföljande metallplattan fästas på valfri plats, där den är lättåtkomlig.



Avlastande vila

Eltilten ger samma möjlighet till avlastning som en standard Prio.



Lättåtkomlig laddning

Den kompakta elenheten inklusive litiumbatteriet är lättåtkomlig för laddning.

Ändra inställning!

Du behöver egentligen bara veta vilket höftmått användaren har. Resten kan justeras, adderas eller bytas ut! Form skapas på plats med användaren i stolen. Reglerbar ryggklädsel och ryggkilar är två enkla redskap för att skapa form. Att aktivt använda sitstilt och ryggvinkling är också viktiga inställningar.



* Ej i kombination med Prio Eltill.

Utöver ovanstående inställningar kan även sitshöjd och drivhjulposition justeras.

Modell/Sitsbredd	Sitsdjup	Totalbredd	Totalbredd VB	Transportbredd	Vikt	Transportvikt
40 cm	39-51 cm	59 cm	64 cm	56 cm	33.5 kg	22.9 kg
45 cm	39-51 cm	64 cm	69 cm	61 cm	33.8 kg	23.2 kg
50 cm	39-51 cm	69 cm	74 cm	66 cm	34.1 kg	23.5 kg
55 cm	39-51 cm	74 cm	79 cm	71 cm	34.4 kg	23.8 kg

Ryggstödshöjd 55-70 cm Standard 45-60 cm 3D	Vikt Gäller stol med armstöd, vinkelställbara benstöd, fotplattor, vaddstöd, drivhjul och tippskydd.	Sitsdjup Tre fasta lägen. Funktionellt sitsdjup mäts från framkant av sittdyna till ryggstöds mitt.
Sitstilt -3° - +20°	Sitshöjd 20", 22" och 24" drivhjul: 38 - 52.5 cm 16" drivhjul: 40-45 cm. Mått utan sittdyna.	Totalbredd M100 hjul +19 cm / Cross 5 hjul +21 cm / 24" VB +24 cm / 16" hjul +19,5 cm
Ryggstöd, vinkelreglerbart 0° - +30°	Max brukarvikt 135 kg	Transportvikt Gäller stol utan armstöd, vinkelställbara benstöd, fotplattor, vaddstöd, drivhjul och tippskydd
Drivhjul, balanslägen Etac Prio med 20", 22" och 24" drivhjul har tre alternativa balanspositioner per sitshöjd		

Tillbehör



Traditionellt huvudstöd

Reglerbart i höjd, djup och vinkel.
Kan justeras ned framför ryggstödet.
Överdrag: Plysch eller grå hygienklädsel



Huvudstöd med sidostöd

Reglerbart i höjd, djup, vinkel och sidledes.
Överdrag: grå hygien, avtagbart och tvättbart.



Minnesfunktion

Huvudstöd kan utrustas med en minnesfunktion för att säkerställa korrekt justering.



Ryggdyna

Följsam och avlastande ryggdyna, fäst med kardborre. Kan kombineras med sidodynor och kilar. Överdrag: Plysch eller grå hygienklädsel.



Prio 3D-ryggssystem

Unikt ryggsystem som ger stöd och rymd för en kyfotisk rygg eller asymmetrier, fäst med kardborre. Kan kombineras med sidodynor och kilar. Överdrag: Mjuk plysch



Ryggöverdrag

Ett tunnare överdrag med sömmar som förbättrar följsamheten för ryggen. Kombineras enkelt med kilar och sidodynor. Överdrag: Mjuk plysch




Sidodyna

Sidodynans ger ökad sidostabilitet till klädselns kroppsnära stöd. Kan roteras och användas i två olika riktningar. Stöds av armstöden.



Låssprint Quick Release rygg

För fällning av rygg. Ej i kombination med eltilt.

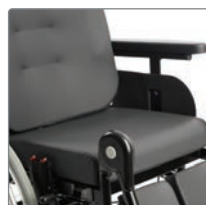

Sittdyna Basic

Sittdyna Basic har en konturerad sitsgrop och är precis som sittdyna komfort tillverkad i kallsaum.




Sittdyna Komfort

Utöver sittdyna Basic finns komfortdyna med avtagbart inlägg i mjuk viscoelastiskt skum, samt urtag för låren. Överdrag: Plysch eller grå hygienklädsel.



Kardborrsats sits

För fäste på sitsplatta och under sittdyna.

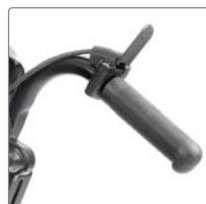

Körhandtag

Tillbehör



Armstöd

Justerbara i höjd och djupled, avtagbara.



Armstöd, smalt

Ett smalare armstöd för att lättare komma åt drivringarna. Längd: 37,5 cm, bredd: 5 cm, höjd: 23–32 cm



Armstödsdyna, polstrad

För extra komfort.



Hemiarmstöd

Justerbar i vinkel. Höjden ställs in med justering av armstöd. Monteras på armstöd smalt. Vadderat avtagbart överdrag i mörkgrå plysch.



Clips vinkelbegränsning rygg/tilt

Minska vinkelinställningsmöjligheten. Ju fler clips, desto mer minimeras vinkelinställningarna bakåt. Inga verktyg krävs.



Komfortlås

Säkerställer ens tiltposition. Fyra alternativa lägen (0°, 4°, 8° alt. 12°) Det kan vara den aktiva positionen eller det perfekta viloläget som då blir lättare att hitta.



Eltilt

För användare som själva vill justera rygg- och sitsvinkeln. Kan väljas som tillval eller beställas som tillbehör för eftermontering till Prio f.r.o.m serienummer 38C. Vid eftermontering på Prio med 16" hjul skall klämskydd (tillbehör) monteras. Eltilten kan ej kombineras med bäckenstöd, komfortlås, QR-sprint eller korg.



Lås vinkelreglage sits/rygg

Förhindrar att ryggvinkel alt. tiltvinkel kan aktiveras. För att aktivera reglage dras spärren uppåt. För att återgå till spärrläge tryck nedåt.



Broms med vinklat handtag

För 20", 22" och 24" drivhjul. Ger större greppyta. Finns i svart och rött.




Broms med förlängningshandtag

Bromsspaken kan vinklas framåt för att underlätta vid sidoförflyttningar.



Tillbehör

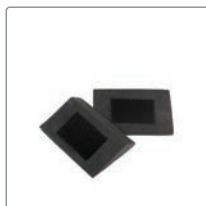

Kilar

Kilar med kardborre. Kan klippas till önskad passform. Par. Finns i storlek liten, medium och stor. Längd x Bredd x Höjd
Liten: 13x9x2 cm
Medium: 18.5x11x2 cm
Stor: 20x17.5x2.5 cm



Benstöd, Cross

Avtagbara och sidosvängbara.



Breddningssköldar rygg

Fördelar trycket från ryggprofilen. Kan även användas som breddning av ryggen.
Längd: 20 cm
Bredd: 15 cm
Höjd: 1 cm



Fotplattor, standard

Uppfällbara, reglerbara i höjd och justerbara i vinkel. Djup: 15 cm.



Band vinkelbegränsning rygg

Minskar ryggvinkeln framåt för en aktiv sittposition.




Fotplattor, Cross

Uppfällbara, reglerbara i höjd och justerbara i vinkel och djup. Djup: 13 cm.



Bålstöd, Sidosvängbara

Justerbara i höjd, djup och bredd. Optimalt för sidoförflyttning. Armstödet kan monteras av när bålstödet är utsvängt. Dyna: Polyurethan

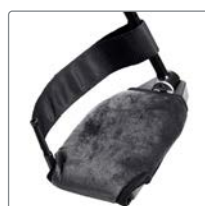

Polstring, delad fotplatta

För extra mjuk komfort. Plysch.




Bålstöd, reglerbara

Justerbara i höjd, djup och bredd. Tas enkelt av och på utan verktyg. Dyna: Polyurethan



Vadband

Reglerbart i längd och avtagbart.

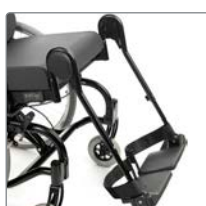

Benstöd, fast vinkel

Sidosvängbara och avtagbara.

Tillbehör



Förlängda fotplattor

Passar fotplatta Cross.
Djup 21 cm.



Länkhjul

6" eller 8".



Hel fotplatta

Fotplattan ger golvkänsla och stimulerar till rörelse. Inkl fasta benstöd.



Adapterhylsa sitshöjd 16" transporthjul

Möjliggör ytterligare två sitshöjder för Prio med 16" transporthjul: 40 cm och 42.5 cm



Hel fotplatta, Cross

Uppfällbar och ställbar i höjd, djup och vinkel. Monteras på fast eller vinkelställbara benstöd.



Drivhjul/transporthjul

20", 22" eller 24". Massiva däck.
Snabbkopplingsnav. 16" transporthjul.



Polstring, hel fotplatta Cross

För extra mjuk komfort. Pysch.




Abduktionskloss

Avtagbar, justerbar i djup.



Droppställning

För två flaskor.

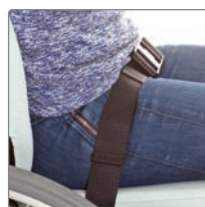

Positioneringsbälte

Flera möjliga fästpunkter på ramen.



Syrgaskorg

Kan även användas som lastkorg.
Ej i kombination med eltilt.



Fäste bröstsele

För övre infästning av bröstsele.
Monteras på huvudstödsstaget.



Bord

Transparent, monteras på armstöden.





“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad
produktinformation – besök: www.etac.se