

etac[®]
Creating Possibilities



etac[®]


Etac Prio 3A

Tillbehör

Tillbehör

Vi erbjuder ett brett urval av tillbehör till rullstol Etac Prio 3A.


Här anges ett urval av tillbehör. Fler tillbehör finns på etac.se.

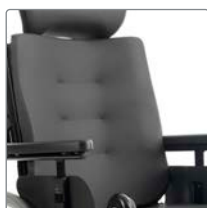

Ryggdyna

Följsam och avlastande ryggdyna, fäst med kardborre. Kan kombineras med sidodynor och kilar.

Överdrag: Mörkgrå plysch eller grå hygienklädsel.

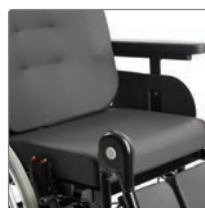

Sittdyna Basic

Sittdyna Basic med konturerad sitsgrup.

Överdrag: Mörkgrå plysch eller grå hygienklädsel.



3D ryggsystem

Unikt ryggsystem som ger stöd och rymd för en kyfotisk rygg eller asymmetrier, fäst med kardborre. Kan kombineras med sidodynor och kilar.

Överdrag: Mörkgrå plysch



Sittdyna Komfort

Komfortdynan är något lägre i bakkant. För att ytterligare förbättra stabiliteten har den ett avtagbart inlägg i mjukt viskoelastiskt skum och urtag för låren.

Överdrag: Mörkgrå plysch eller grå hygienklädsel.



Ryggöverdrag

Ett tunnare överdrag med sömmar som förbättrar följsamheten för ryggen. Kombinerar enkelt med kilar och sidodynor.

Överdrag: Mörkgrå plysch



Sitsplatta

Finns i trä eller plast.



Dynamiskt bäckenstöd

När ryggstödet vinklas bakåt minskas automatiskt spänningen i bäckenbandet vilket medför ett skönt viloläge. När ryggstödet förs till upprätt läge drar det dynamiska bäckenstödet återigen åt spänningen i bäckenbandet.



Kardborrsats sits

För fäste på sitsplatta och under sitsdyna.



Förlängningsdyna rygg 3A nedre

Förläng ryggdynan när en högre rygg används. Täcker avståndet mellan sits och rygg.

Överdrag: Grå hygienklädsel



Huvudstöd

Reglerbart i höjd, djup, vinkel och sidledes. Överdraget är avtagbart och tvättbart.

Överdrag: Mörkgrå plysch eller grå hygienklädsel.



Förlängningsdel ryggklädsel


Täcker avståndet mellan sitsen och ryggen vid högre rygghöjder, till exempel om användaren använder inkontinensskydd. Ryggklädseln ger också extra stöd för sittdynan.



Huvudstöd med sidostöd

Reglerbart i höjd, djup, vinkel och sidledes. Överdraget är avtagbart och tvättbart.

Överdrag: Grå hygienklädsel

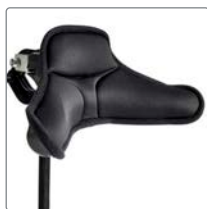

Anatomiskt huvudstöd R82

Anatomiskt format med sidostöd. Polstrat och försett med överdrag. Justerbart i höjd, djup, vinkel och i sidled. Överdraget är avtagbart och tvättbart.



Minnesfunktion

Huvudstöd kan utrustas med en minnesfunktion för att säkerställa korrekt inställning.



Armstöd

Justerbara i höjd och djupled, avtagbara.

Längd: 49 cm
Höjd: 23,5–35 cm



Armstöd, smalt

Ett smalare armstöd för att lättare komma åt drivningarna.

Längd: 38 cm
Höjd: 21–32,5 cm



Armstödsdyna, polstrad

För extra komfort till våra armstöd.

Överdrag: Mörkgrå plysch



Hemiarmstöd

Justerbar i vinkel. Höjden ställs in med justering av armstöd. Monteras på armstöd smalt.

Överdrag: Vadderat avtagbart i mörkgrå plysch



Polstring sidoskydd

Polstringen ger ökad komfort och minskar sittbredden mellan armstöden med ca 1,5 cm per sida. Fästs på sidoskydden. Säljs styckvis.

Överdrag: Grå hygienklädsel



Bord

Transparent, monteras på armstöden.



Hembord

Fästs mot armstödsdynor med velcro (ingår). Monteras på armstöd smalt. Finns upp till 50 cm sidsbredd. Halkskydd finns som extra tillbehör.



Breddningssats

Ökar bredden mellan armstöden och totalbredden med 2 cm.



Vinkelställbara benstöd

Sidosvängbara och avtagbara. Med fällbara vadstöd, justerbara i höjd- och djupled.

Överdrag: Grå hygienklädsel.



Benstöd, Cross

Avtagbara och sidosvängbara. Finns i 90° eller 70°. I kombination med 90° rekommenderar vi ett breddat framgaffelfäste.



Fotplattor

Uppfällbara. Justerbara i djup och vinkel, reglerbara i höjd. Djup: 13 cm.



Hälband

Reglerbart i längd. Passar både höger och vänster sida. Kan ej kombineras med förlängd fotplatta.



Förlängning fotplatta - plattform

En plattform som monteras på befintliga fotplattor. Finns i en storlek:
Small - 250 x 225 mm

Använd breddat länkhjulsfäste för att undvika kollision.



Polstring för vadband

Ger ett mjukare stöd för vaderna.
Finns i 20, 30 och 40 cm längd.



Förlängning fotplatta

Monteras på befintliga fotplattor. Använd separat eller länka ihop till en plattform. Finns i två storlekar:

Medium 150 x 225 mm

Large 200 x 225 mm

Använd breddat länkhjulsfäste för att undvika kollision.



Vadmatta

För extra mjuk komfort. Justerbart med Velcro. Monteras på fast eller vinkelställbara benstöd. Plysch. Finns i två storlekar: 70 cm och 90 cm



Sidoskydd fotplatta

Sidoskyddet monteras på den förlängda fotplattan för att förhindra att foten kommer i kontakt med länkhjulet. Sälj styckvis.



Knästöd, yttre

Ger stöd för låren, placerar knäna i en mer neutral position och kontrollerar abduktion.



Fotlåda

Monteras på befintliga fotplattor Finns i två storlekar:

Medium, för sitsbredd 40–45 cm

Large, för sitsbredd 45–55 cm

Använd breddat länkhjulsfäste för att undvika kollision.



Abduktionskloss

Avtagbar, justerbar i djup.

Överdrag: Grå hygienklädsel



Förlängd fotplatta

Monteras på Cross fotplatta för större understödsyta.

Djup: 21 cm



Amputationsbenstöd

Justerbart i höjd, reglerbart i djup, vinkel och sidled. Passar för höger och vänster sida. Avtagbart överdrag i mörkgrå plysch alternativt hygienklädsel.



Polstring, delad fotplatta

För extra mjuk komfort. Mörkgrå plysch.



Bålstöd, sidovängbart

Justerbara i höjd, djup och bredd. Optimalt för sidoförflyttning. Armstödet kan monteras av när bålstödet är utsvängt.

Dyna: Polyurethan



Vadband

Avtagbart, reglerbart i längd.



Bålstöd, reglerbara

Justerbara i höjd, djup och bredd. Tas enkelt av och på utan verktyg.

Dyna: Polyurethan



Överdrag bålstöd

Överdrag i mörkgrå plysch.



Sidodyna

Sidodynan ger ökad sidostabilitet till klädseln kroppsnära stöd. Kan roteras och användas i två olika riktningar. Stöds av armstöden. Säljs styckvis.

Överdrag: Mörkgrå plysch



Sidostopp rygg, rak 40 mm, 3A

Monteras på 3A ryggstöd. Kombineras med sidostödsdyna för ökad stabilitet. Justerbar i djup och höjd. Säljs styckvis.



Breddningssköld rygg

Fördelar trycket från ryggprofilen. Kan även användas som breddning av ryggen. Säljs styckvis.




Breddning rygg, 30 mm, 3A

Sidostoppet monteras på 3A ryggstöd och ökar ryggstödetets bredd med 30 mm på var sida. Kombineras gärna med ett bredare ryggöverdrag eller en ryggkil. Säljs styckvis.



Ryggkilar

Mjuk kil som fästs med kardborre mot klädseln. 15 cm hög. Kan kombineras med sidostopp med breddning. Säljs styckvis. Två storlekar: 15 cm och 30 cm lång Klädsel: mörkgrå plysch.

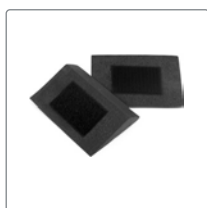

Komfortkilar

Inklusive självhäftande kardborre. Säljs i par. Finns i tre storlekar:
Längd x Bredd x Höjd
Liten: 13 x 9,5 x 2 cm
Medium: 19 x 12 x 2 cm
Stor: 20 x 17 x 2.5 cm



Breddning rygg

Skapa en bredare rygg och fördela trycket från ryggprofilen. Säljs som ett komplett kit med två extra spännband.

Endast i kombination med sitsbredd 40 cm och 45 cm.



Ryggförlängare 3A

Ryggförlängaren ökar den högsta rygghöjden för standard 3A rygg med 6 cm.



Clips vinkelbegränsning rygg/tilt

Minskar inställningsmöjligheter av sitstilt och ryggvinkel. Möjliggör ett lättbalanserat läge så att stolen förblir stabil i viloläge. Inga verktyg krävs.

Endast i kombination med Etac Prio manuell tilt.



Positioneringsbälte

Med snäplås, justerbara i längd. Höftbälte: Två alternativa fästpunkter på ramen. Finns i två längder, 100 cm och 128 cm.



Fäste positioneringsbälte

Extra främre fäste för positioneringsbälte. Möjliggör montering av både 2- och 4-punktsbälten. Säljs i par.



Fäste för bröstsele

Kombineras med huvudstöd.



Eltilt

Eltilt för reglering av sits- och ryggvinkel kan väljas som tillval vid beställning av stol eller beställas som tillbehör för eftermontering. Kan ej kombineras med bäckenstöd, komfortlås, QR-sprint eller korg.



Klämskydd eltilt

För montering på Prio med eltilt, utrustad med 16" hjul.




Brukarmanövrerad själtilt

Gör det möjligt för användare att själv justera sitsvinklingen för vila och aktivitet.



Körhandtag

Höjdglerbara och avtagbara med glidstopp på handtagsklädseln. Kan kombineras med vårdarbroms.

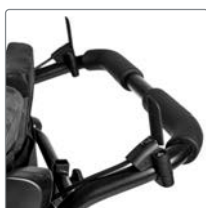

Körbygel

Höjdglerbar och avtagbar. Kan kombineras med vårdarbroms.

Finns även som vinkelreglerbar för sitsbredd 40 cm, 45 cm and 50 cm.



Vårdarbroms

Med glidstopp på handtagsklädseln. 100 mm mellan handtagsgrepp och bromsspak.



Broms med vinklat bromshandtag

Ger en större greppyta. Färg: svart alt. rött. För 20", 22" och 24" drivhjul.



Broms med bromsspaksförlängare

Bromsspaken kan vinklas framåt, för att underlätta vid sidoflyttning.



Enhandsbroms

Höger alternativt vänster sida. Kan kombineras med vårdarbroms.

Passar 22" och 24" drivhjul.



Lås vinkelreglage sitys/rygg

Förhindrar att ryggvinkel alt. tiltvinkel kan aktiveras. För att aktivera reglage dras spärren uppåt. För att återgå till spärrläge tryck nedåt.



Komfortlås

Säkerställer en tiltposition. Fyra alternativa lägen (0°, 4°, 8° alt. 12°). Det kan vara den aktiva positionen eller det perfekta viloläget som då blir lättare att hitta.

Ej i kombination med elektrisk tilt.



Låssprint QR ryggsprint

För att underlätta vid fällning av ryggen kan den ordinarie låssprinten bytas ut mot en låssprint med quick release funktion.

Ej i kombination med elektrisk tilt.



Ryggvinkelbegränsning

Remmen ger möjlighet att begränsa ryggvinkeln framåt på Prio för en aktiv position.



Enarmsdrift

Passar både höger och vänster sida.

Kan inte kombineras med vårdarbroms.



Adapterhylsa sitshöjd för 16" transporthjul

Möjliggör ytterligare två sitshöjder för Prio med 16" transporthjul: 40 cm och 42.5 cm



Drivhjul

20", 22" eller 24". Massiva eller luftpumpade. Quick release nav. Drivringar plastade, cellgummi, aluminium, titan eller rostfria. 16" transporthjul. Standard drivhjul ökar totalbredden på Prio med endast 19 cm.



Teleskoperande tipskydd

Uppfällbara, justerbara i höjd och reglerbara i längd och vinkel. Passar alla sitshöjder.



Länkhjul

6", 6,5" eller 8".



Droppställning

För två flaskor.

Ej i kombination med bord.



Breddat framgaffelfäste

Flyttar ut länkhjulet 3 cm. Stolens totalbredd påverkas inte.



Syrgaskorg

Kan även användas som lastkorg. Korgen kan inte kombineras med elektrisk tilt.



Ekerskydd

Grå eller gul logo.



Verktygsats

Innehåller alla nödvändiga verktyg.
Insexnyckel 3, 4, 5 och 6 mm
Ringnyckel 8, 10, 13 och 17 mm
Hylsnyckel 19/24 mm

Etac Fotplattesystem uppmuntrar till säker och bekväm rörelse i fötterna.

Genom att flytta fötterna, även om det är små rörelser, främjar du blodcirkulationen och du får aktivering från höfterna och ner. Detta hjälper till att undvika smärta och obehag som kan orsakas av stillasittande i en rullstol. Små rörelser kan särskilt vara till nytta för en person som tidigare varit gående.



Förlängning av fotplatta och fotlåda monteras på befintliga fotstöd för att skapa en större yta. Förlängningen kan lätt fällas undan för enkel förflyttning i och ur rullstolen. Fotlådan är fast med en vaddering som hjälper till att minska trycket när fötterna är sårbara. Det är ett skonsamt hjälpmedel för att placera fötterna mer bekvämt på ett befintliga fotstöd. Yttre knästöd hjälper till att justera lårbenet, placera knäna i ett mer neutralt läge och kontrollera abduction. Tilläggen är tillgängliga som tillbehör.



Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB

☎ 0371-58 73 00

✉ info@etac.se

🌐 www.etac.se

etac®

Creating Possibilities