



Etac Prio

Komfortkørestol
til aktivitet og hvile

 **etac**[®]

Etac Prio

Det handler om den enkeltes funktionsniveau. Det er vores mål, at brugerens funktionsniveau udnyttes fuldt ud, ved hjælp af form og støtte. Etac Prio hjælper til korrekt siddestilling, som forbedrer brugerens aktivitets- og mobilitetsniveau.

Mange, der ikke længere er i stand til at sidde i en all-round kørestol, skifter til en ordinær komfortkørestol og bliver dermed helt afhængige af andres hjælp til at kunne bevæge sig. Ofte tidligere end nødvendigt.

Med Etac Prio er en ny type komfortkørestol født. En aktiv komfortkørestol, hvor brugeren sidder overraskende komfortabelt og velafbalanceret.

Prio er den eneste multifunktionskørestol, der tilbyder dynamisk bækkenstøtte. Støtten deaktiveres i hvile

og genaktiveres i den aktive position. Den dynamiske bækkenstøtte er bare ét eksempel på Prio's innovative funktioner, der rent faktisk forbedrer siddetolerancen over tid.

Prio er lavet til at give ro - uden at opgive mobiliteten. Med Prio giver vi flere muligheder for at leve aktivt længere. Opgiv ikke mobiliteten - Prøv Prio.



Prio Aktiv

Prio Standard

Prio Hospital

Prio følger brugerens behov

Den alsidige komfortkørestol kan konfigureres og tilpasses i mange varianter. Dette betyder, at brugeren ikke nødvendigvis behøver en anden kørestol, når behov ændres. Med Prio kan samme kørestol nemt bygges om ved f.eks. at ændre ryg, fodstøtter, tilføje eltilt etc.

Når kørestolen langsomt tilpasses brugerens behov, skabes tryk og genkendelighed, idet brugeren skånes for den markante ændring, et skift af kørestol kan være. Samtidig er det god totaløkonomi med én stol, der kan tilpasses så stor en målgruppe, og et bredt tilbehørsprogram, der passer til alle kørestolens konfigurationer.

Ovenfor vises vores mest populære konfigurationer:

Prio Aktiv
Prio Standard
Prio Hospital

Alle 3 kørestole har en række fælles egenskaber og funktioner, som gennemgås på de følgende sider. Læs mere om de enkelte varianter på side 6-8.

Egenskaber



Dynamisk bækkenstøtte

Bækkenstøtten er højdejusterbar og kan justeres med præcision. Bækken-stroppens spænding mindses automatisk, når man læner sig tilbage i behagelig hvilestilling - og strammer til igen, når ryggen føres frem igen. En ideel kombination for aktivitet og hvile.



Byg den ønskede form

Start med at indstille ryghøjden. Rygstøtten formes når stropperne justeres. Rygskjoldene fordeler trykket fra stroppryggen. Dette muliggør brug af en tynd og fleksibel rygpude, der former sig nøjagtigt efter stroppryggens justering.



Lav sædehøjde

Det er nemt at ændre sædehøjden på Prio (38-52,5 cm) vha. de forskellige drivhjulpositioner, samt størrelse på driv- og forhjul. De laveste stole er ideelle til brugere, der selv kan gå stolen frem.



Eltilt som tilvalg/tilbehør

Til brugere, som selv vil kunne justere ryg- og sædevinkel, anbefales montering af eltilt. Eltilt kan også eftermonteres. Eltiltet kan ikke kombineres med dynamisk bækkenstøtte, komfortlås, quick release låsesplit eller varekurv.



Aktivitet er lige så vigtigt som hvile

Smal totalbredde, lav egenvægt og enestående afbalanceringsmuligheder, er egenskaber, der tillader Prio brugeren at være mere aktiv og mobil.



Komfortlås

Sikrer, at en forudindstillet kipposition kan findes. Der er fire mulige indstillinger (0°, 4°, 8° eller 12°). Vælg én position, der hyppigt anvendes til aktivitet eller hvile.




Nøgler til ændring af indstillinger

To unbrako-nøgler er let tilgængelige og diskret placeret bag på ryglænet.



Med en sædehøjde, der kan justeres helt ned til 38 cm, er Prio ideel til de brugere, der selv kan gå stolen frem.

Form

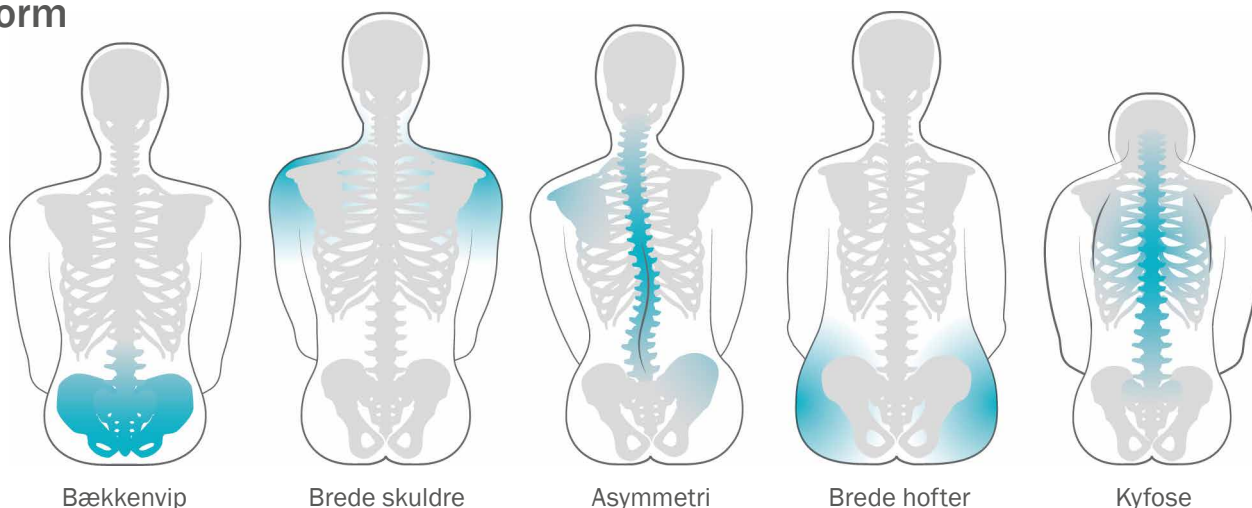

Bækkenvip


Brede skuldre

Asymmetri

Brede hofter

Kyfose

Stropryg med justerbar spænding gør ryglænet formbart. Ryghynden følger den form, der skabes. Tilsammen muliggør dette, at kørestolsryggen kan formes med brugeren i kørestolen. Yderligere støtte skabes ved hjælp af rygkiler.


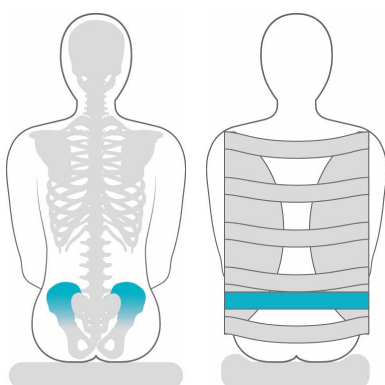


Dynamisk bækkenstøtte

Prio's dynamiske bækkenstøtte tilpasser sig både aktivitet og hvile. En opret stilling kræver en aktiv støtte. Når der skiftes til tilbagelænet stilling, frigøres spændingen automatisk, så bækkenet kan vippe nogle få grader bagud, hvorved lænderyggen rettes ud. Den dynamiske bækkenstøtte er højdejusterbar.

3D-ryg

Vores patenterede 3D-ryglænsssystem er formbart i alle retninger! Vi har skabt et ryglæn, der giver plads og støtte i alle retninger - ideelt for brugere med kyfose og andre asymmetrier. Desuden kan det lave ryglæn med fordel benyttes til den mere aktive bruger, der har brug for god plads til skulderbevægelse, når drivhjulene betjenes. 3D-ryg er standard på Prio Aktiv.

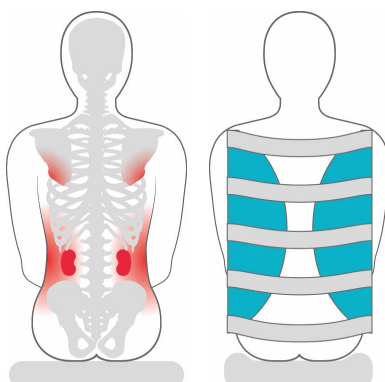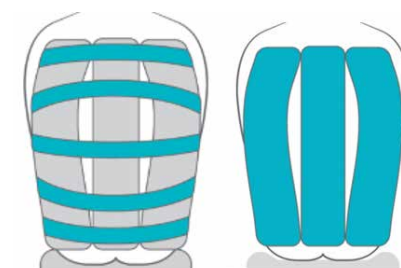



Rygskjold til trykfølsomme områder

Nederst på siderne af brystkassen, skulderbladene og nyrerne er områder, der er særligt følsomme over for koncentreret tryk. Prio's rygpolsstring er forsynet med "skjold", der giver ekstra beskyttelse mod tryk på disse følsomme områder.

Tekniske data

Model/Sædebredde	Sædedybde	Totalbredde	Totalbredde med tromlebremse	Transportbredde	Vægt
40 cm	39-51 cm	59 cm	64 cm	56 cm	33,5 kg
45 cm	39-51 cm	64 cm	69 cm	61 cm	33,8 kg
50 cm	39-51 cm	69 cm	74 cm	66 cm	34,1 kg
55 cm	39-51 cm	74 cm	79 cm	71 cm	34,4 kg

<p>Ryglæn, vinkling 0° til +30°</p> <p>Sædeklip -3 til +20°</p> <p>Sædehøjde 38 - 52,5 cm. Målt uden sædehynde.</p> <p>Ryghøjde Standard ryg: 55 - 70 cm 3D-ryg: 45 - 60 cm</p> <p>Sædehøjde 20", 22" og 24" drivhjul: 38 - 52,5 cm. 16" transithjul: 40 - 45 cm.</p> <p>Max. brugervægt 135 kg.</p>	<p>Transportvægt 22,9 - 23,8 kg.</p> <p>Baghjul, balanceret tilstand 20", 22" og 24". Alle hjul har 3 alternative balancepositioner pr. sædehøjde.</p> <p>Transportvægt 22,9-23,8 kg uden armlæn, eleverbare benstøtter, lægstøtter og drivhjul.</p> <p>Produktvægt og dimensioner Vægt og dimensioner er angivet for kørestol med monteret armlæn, eleverbare benstøtter, lægstøtter, 24" drivhjul, massive hjul, rustfrit stål drivringe og tipsikringer. Angivne mål kan variere ± 2%.</p>	<p>Vask Alle betræk kan vaskes ved 60 °C. Hygiejnebetrækket til sædehynden kan vaskes ved 95 °C. Hygiejnebetrækket kan også tørres af med en fugtig klud. For øvrige vaskeanvisninger, se mærket på den enkelte hynde.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Hyndebetræk Mørkegrå, velourbetræk Mørkegrå, hygiejnebetræk</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="background-color: #333; width: 60px; height: 20px;"></div> <div style="background-color: #333; width: 60px; height: 20px;"></div> </div> <p>OBS: 3D-ryg og rygovertræk fås ikke med hygiejnebetræk.</p>
--	---	---



Prio Aktiv

Med komfortkørestolen Prio Aktiv er det næsten som at sidde i en let krydsramme-kørestol med lav ryg. Kørestolens enkle udtryk gemmer dog på flere funktioner, der kan give brugeren ekstra støtte og komfort. Udover sædetilt, rygtilt og dynamisk bækkenstøtte, er Prio Aktiv udstyret med vores patenterede 3D-ryglæssystem, der er formbart i alle retninger og ideelt ved bl.a. asymmetri og kyfose.

- ✓ 3D-ryg, som giver optimal støtte og komfort
- ✓ Lav ryghøjde fremmer aktivitet
- ✓ Dynamisk bækkenstøtte
- ✓ Letkørende og nem at gå frem
- ✓ Bredt tilbehørsprogram
- ✓ Mulighed for elektrisk betjent ryg- og sædetilt.



Bestilling af Prio Aktiv

Sædebredde	Varenr.	HMI-nr.	
Prio 40 cm	13421305	118796	Prio Aktiv konfigureres specifikt til den enkelte brugers behov, men er defineret som standard med: <ul style="list-style-type: none"> • Standard sædepude, velourbetræk • Dynamisk bækkenstøtte* • 3D-ryg, velourbetræk • Komfortlås • Højdejusterbare kørehåndtag • Højdejusterbare og smalle armlæn, model Cross • Standard benstøtter • Fodplader med hælremme • Tipsikringer • Stelfarve Sort • 6", 6,5" eller 8" massive forhjul** • 20", 22" eller 24" drivhjul** med massive dæk og aludrivringe.
Prio 45 cm	13421309	118799	
Prio 50 cm	13421313	118802	
Prio 55 cm	13421317	118805	
Eltilt, komplet sæt	28348	-	

* Eltilt kan ikke kombineres med dynamisk bækkenstøtte, komfortlås, quick release låsesplit eller varekurv.
 ** Afhængig af sædehøjde.

Prio Standard

Prio Standard yder mere støtte end Prio Aktiv. Ryggen er højere og den justerbare hovedstøtte kan, sammen med de eleverbare benstøtter, tilpasses den enkelte bruger. Komfortlås sikrer, at en forudindstillet kip-position nemt kan findes igen. Desuden kan der tilvælges eltilt til de brugere, der selv vil kunne justere ryg- og sædevinkel. Eltiltet kan dog ikke kombineres med dynamisk bækkenstøtte og komfortlås.

- ✓ Stroptryk med rygovertræk, former sig efter brugers ryg
- ✓ Højde- og vinkeljusterbar hovedstøtte
- ✓ Komfortlås ved tilt
- ✓ Dynamisk bækkenstøtte
- ✓ Bredt tilbehørsprogram
- ✓ Mulighed for elektrisk betjent ryg- og sædetilt.



Bestilling af Prio Standard

Sædebredde	Varenr.	HMI-nr.	
Prio 40 cm	13420305	107922	<p>Prio Standard konfigureres specifikt til den enkelte brugers behov, men er defineret som standard med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standard sædepude, hygiejnebetræk • Stroptryk, rygovertræk i velour og dynamisk bækkenstøtte* • Komfortlås • Hovedstøtte, traditionel. Hygiejnebetræk • Højdejusterbare kørehåndtag • Højdejusterbare, brede armlæn • Eleverbare benstøtter med lægstøtter • Fodplader med hælremme • Tipsikringer • Stelfarve Sort • 6", 6,5" eller 8" massive forhjul** • 20", 22" eller 24" drivhjul** med massive dæk og aludrivringe.
Prio 45 cm	13420309	107923	
Prio 50 cm	13420313	107924	
Prio 55 cm	13420317	107925	
Eltilt, komplet sæt	28348	-	

* Eltilt kan ikke kombineres med dynamisk bækkenstøtte, komfortlås, quick release låsesplit eller varekurv.

** Afhængig af sædehøjde.

Prio Hospital

Med tanke på de store hygiejnekrav, der må tilgodeses på bl.a. hospitaler, tilbyder vi den rengøringsvenlige variant Prio Hospital. Kørestolen tåler vask i vaskemaskine og alle puder har vandtæt hygiejnebetræk, der nemt kan vaskes og tørres af. Stropryggen er nem at justere og det brede tilbehørsprogram gør det enkelt at tilpasse stolen til patienten.

Benytter hospitalet også vores populære Cross 5 krydsrammekørestol, tilgodeses god totaløkonomi og overskuelig logistik, idet meget tilbehør fra Cross 5 kan benyttes på Prio.

- ✓ Stropryg, dynamisk bækkenstøtte og rygpude giver maksimal komfort og stabilitet
- ✓ Vaskbart og vandtæt hygiejnebetræk på sædepude, rygpude, nakkestøtte og lægplader
- ✓ Bredt tilbehørsprogram, som er kompatibelt med vores populære Cross 5 krydsrammekørestol
- ✓ Mulighed for elektrisk betjent ryg- og sædetilt.



Bestilling af Prio Hospital

Sædebredde	Varenr.	HMI-nr.	Prio Hospital konfigureres specifikt til den enkelte brugers behov, men er defineret som standard med:
Prio 40 cm	13422305	118806	<ul style="list-style-type: none"> • Standard sædepude med Tidy-betræk og komfort rygpude med hygiejnebetræk • Stropryg og dynamisk bækkenstøtte* • Komfortlås • Hovedstøtte, traditionel. Hygiejnebetræk • Højdejusterbare kørehåndtag • Højdejusterbare, brede armlæn • Eleverbare benstøtter med lægstøtter • Fodplader med hælremme • Tipsikringer • Stelfarve Sort • 6", 6,5" eller 8" massive forhjul** • 20", 22" eller 24" drivhjul** med massive dæk og aludrivringe.
Prio 45 cm	13422309	118809	
Prio 50 cm	13422313	118812	
Prio 55 cm	13422317	118815	
Eltilt, komplet sæt	28348	-	

* Eltilt kan ikke kombineres med dynamisk bækkenstøtte, komfortlås, quick release låsesplit eller varekurv.

** Afhængig af sædehøjde.



Tilbehør og reservedele



Hovedstøtte med sidestøtte

For ekstra støtte af hovedet. Inkl. betræk i mørkegrå hygiejne.

Hovedstøtte hygiejne, rustfri stang28536-65
 Hovedstøtte hygiejne, sort stang.....28539-65
 Betræk hygiejne63185-65
 Hovedstøtteholder* 28024
 *Anvendes hvis der skiftes fra anden type hovedstøtte.



Rygovertræk


Blødt rygovertræk i grå velour.
 SB = sædebredde

Til SB 40 cm63200-60
 Til SB 45 cm 63201-60
 Til SB 50 cm 63202-60
 Til SB 55 cm 63203-60



Hovedstøtte, anatomisk

Materiale og form giver god støtte for hoved og nakke.

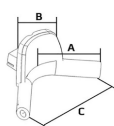

Str. Medium: A15,5 cm,
 B14 cm, C26 cm 319945483-83
 Str. Large: A17 cm,
 B14 cm, C32 cm319967493-83



Prio 3D-ryghynde

3D er et unikt rygsystem, der giver støtte og plads til en kyfotisk ryg eller asymmetrier. Grå velour. Monteres med velcro. OBS! Stolen skal være monteret med 3D-ryg. SB = sædebredde

Til SB 40 cm63267-60
 Til SB 45 cm 63268-60
 Til SB 50 cm 63269-60
 Til SB 55 cm 63270-60



Hovedstøtte, traditionel

Højde- og vinkeljusterbar, aftagelig. Anbefales ved kyfose. Betræk: Grå velour eller hygiejnebetræk. Hovedstøttestang i rustfri stål eller sort rustfri stål.

Hovedstøtte velour, rustfri stang.....28534-60
 Hovedstøtte hygiejne, rustfri stang28534-65
 Hovedstøtte hygiejne, sort stang.....28538-65
 Betræk Velour..... 63177-60
 Betræk Hygiejne..... 63177-65
 Hovedstøtteholder* 28024
 *Anvendes hvis der skiftes fra anden type hovedstøtte.



Rygpude

Polstret pude, monteret med velcrobånd på bagsiden. Hygiejnebetræk på forsiden eller gråt velour. Kan ikke monteres på 3D-ryg. SB = sædebredde

Til SB 40 cm, Velourbetræk.....28410-60
 Til SB 40 cm, hygiejnebetræk.....28410-65
 Til SB 45 cm, Velourbetræk.....28411-60
 Til SB 45 cm, hygiejnebetræk.....28411-65
 Til SB 50 cm, Velourbetræk.....28412-60
 Til SB 50 cm, hygiejnebetræk.....28412-65
 Til SB 55 cm, Velourbetræk.....28413-60
 Til SB 55 cm, hygiejnebetræk.....28413-65



Selefæste

Kun til traditionel hovedstøtte/hovedstøtte med sidestøtte.

One size 28186



Rygpude, hygiejnebetræk på for- og bagside

Polstret pude, monteres med velcrobånd på bagsiden. Hygiejnebetræk på både for- og bagside. Kan ikke monteres på 3D-ryg. SB = sædebredde


Til SB 40 cm, hygiejnebetræk.....28540-65
 Til SB 45 cm, hygiejnebetræk.....28541-65
 Til SB 50 cm, hygiejnebetræk.....28542-65
 Til SB 55 cm, hygiejnebetræk.....28543-65

Tilbehør og reservedele

Sædepude, Standard


Standardpuder med mørkegråt velour eller hygiejne betræk. Varianten Tidy Hygiejne er med svejsede sømme og er stærkere end "Hygiejne". Pudetykkelse: 8 cm fortil og 6,5 cm bagtil. Pudelængde: Kort 50 cm og Lang 56 cm.

Sædebredde	Kort (Sædedybde 46-50 cm)			Lang (Sædedybde 52-56 cm)		
	Velour	Hygiejne	Tidy Hygiejne	Velour	Hygiejne	Tidy Hygiejne
40,0 cm	27751-60	27751-65	28055-65	27759-60	27759-65	28059-65
45,0 cm	27752-60	27752-65	28056-65	27760-60	27760-65	28060-65
50,0 cm	27753-60	27753-65	28057-65	27761-60	27761-65	28061-65
55,0 cm	27754-60	27754-65	28058-65	27762-60	27762-65	28062-65

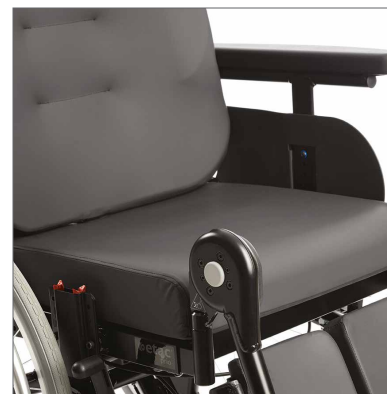

Stort udvalg af puder


Udover standardpuder tilbyder vi også et stort udvalg af særligt trykafastende puder - både komfortpuder og luftfyldte puder. Se det store udvalg i vores separate pudekatalog.

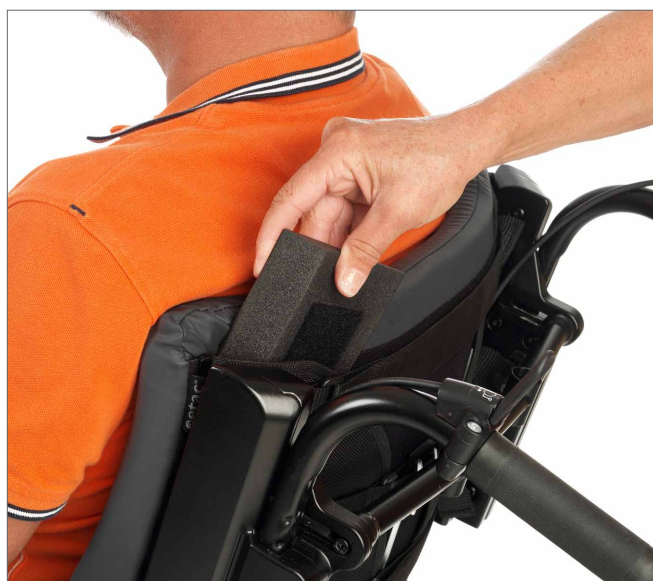


Skab en form med kiler

Foruden det justerbare ryglæn og bredningssættet, er disse kiler en god løsning til at forme og tilpasse Prio's ryg og/eller sæde. Kilerne, der kan kombineres og klippes til, fås i tre størrelser og leveres i sæt med 2 stk.

Small (L13 x B9,5 x H2 cm), 2 stk 28030
 Medium (L19 x B12 x H2 cm), 2 stk 28139
 Large (L20 x B17 x H2,5 cm), 2 stk 28140

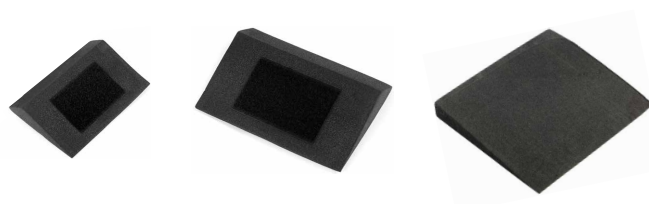

Tilbehør og reservedele

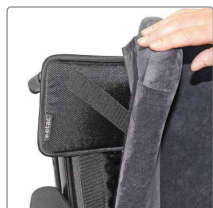

Trykfordeler

Fastgøres med velcro bag rygovertækket, præcis hvor der er brug for den. Brug den evt. til at fordele trykket over rygprofilerne eller til at gøre ryggen bredere. Mål L20 x B15 x H1 cm.

Trykfordeler..... 28637



Kørebøjle

Højdejusterbar og aftagelig. Kan kombineres med ledsagerbremse. SB = sædebredde.


Til SB 40 cm 25580-01
 Til SB 45 cm 25582-01
 Til SB 50 cm 25583-01
 Til SB 55 cm 26069-01



Sidepude

Puden kan vendes for at opnå en anden form. Kan kun benyttes i kombination med ryg med rygovertæk.

Højre.....63171-60-1
 Venstre.....63171-60-2

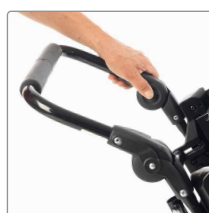

Kørebøjle, vinkeljusterbar

Højde- og vinkeljusterbar, og aftagelig. Kan kombineres med hjælpebremse. SB = sædebredde.

Til SB 40 cm 27163
 Til SB 45 cm 27165
 Til SB 50 cm 27167



Kørehåndtag

Højdejusterbart og aftageligt, skridsikker belægning. Leveres som kit inkl. udløser for enten rygfældning eller sædetilt - med og uden monteret ledsagerbremse.


Med rygfældning 28219-01
 Med sædetilt..... 28220-01
 Med ledsagerbremse og rygfældning.. 28221-01
 Med ledsagerbremse og sædetilt..... 28222-01



Armlæn, Standard Prio

Højde- og dybdejusterbar, aftageligt. Armlæns pude 49 cm. Med eller uden armlæns pude. Armlænsbetræk i velour yder ekstra komfort.

Armlæn med pude, højre 28512-1
 Armlæn med pude, venstre 28512-2
 Armlæn uden pude, højre 28513-1
 Armlæn uden pude, venstre 28513-2
 Armlæns pude, højre 63193-60-1
 Armlæns pude, venstre 63193-60-2

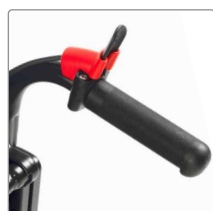

Låsbart greb

Forhindrer aktivering af tilbagelæning eller kip. Hvis positionen skal justeres, trækkes låseanordningen opad og derefter ned igen for at låse grebet.

1 stk 28047



Armlæn med bred og blød pude

Giver blød og dejlig aflastning til armen. Leveres med fingerskrue for enkel justering i dybden. Passer til både højre og venstre side. Monteres på Armlæn, Standard Prio.

Bred armlæns pude, blød 28640

Tilbehør og reservedele



Armlæn, smalt (Model Cross)

For at gøre drivringene let tilgængelige anbefaler vi dette smalle armlæn. Armlænsbetræk yder ekstra komfort.

Armlæn Højre, længde 38 cm	28511-1
Armlæn Venstre, længde 38 cm.....	28511-2
Betræk Velour 1 stk	62283-60
Betræk Dartex 1 stk	62283-63
Betræk Velour med gel 1 stk.....	26241-60
Betræk Dartex med gel 1 stk.....	26241-63



Polstring til sideplader

Giver øget komfort og mindsker sædebredden mellem armlænene med ca. 1,5 cm i hver side. Betrækket trækkes nemt ud over sidepladen og er ligeledes nemt at fjerne igen.

Polstring sideplade, højre	63271-1
Polstring sideplade, venstre.....	63271-2



Hemiplegiarmlæn

Kan drejes for god positionering af arm. Monteres på Armlæn, smalt (Model Cross).


Hemiplegiarmlæn Højre	25770-60-1
Hemiplegiarmlæn Venstre	25770-60-2
Betræk	62449-60



Sidestøtte, svingbar

Justerbar i højde, dybde og bredde. Armlænet kan fjernes, når sidestøtten er foldet til side, hvilket er ideelt ved sideværts forflytning. Pude: Polyurethan.

Svingbar, højre	28019-1
Svingbar, venstre	28019-2

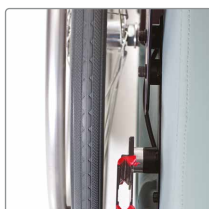

Bredningssæt

Øger afstanden mellem armlænene med 2,5 cm.

1 sæt.....	27892
------------	-------



Sidestøtte, justerbar

Justerbar i højde, dybde og bredde. Let at fjerne og montere uden værktøj. Pude: Polyuretan.

Justerbar.....	28020
----------------	-------



Polstring til sideplader

Giver øget komfort og mindsker sædebredden mellem armlænene med ca 2 cm. Klippes/skæres til efter eget ønske og monteres med dobbeltklæbende tape (medfølger).

1 sæt á 2 stk	28021
---------------------	-------

Tilbehør og reservedele



Eltilt

Eljustering af ryg- og sædevinkel. Kan monteres fra fabrikken eller bestilles som tilbehør til eftermontering på eksisterende Prio kørestole. OBS! Eltilt kan ikke kombineres med dynamisk bækkenstøtte, komfortlås, quick release låsesplit eller varekurv.

Eltilt, komplet sæt..... 28348
Klemsikring..... 28415



Låsesplit, quick release

Denne låsesplit gør sammenklapning af ryggen nemmere.

Låsesplit..... 83159



Gaspatronklips

Hver klips, der tilføjes, begrænser vinklingen med ca. 2°. Der kræves intet værktøj.

Pose med 10 stk..... 28163



Ledsagerbremse

Ledsagerbremse leveres komplet, dog uden drivhjul.

Ledsagerbremse, kit..... 28423

Drivhjul til ledsagerbremse:

16" massivt dæk, højre..... 81173
16" massivt dæk, venstre..... 81174
20" massivt dæk..... 81337
22" massivt dæk..... 81339
24" massivt dæk..... 81346



Tilbehør og reservedele



Bremse med vinklet greb

Giver en større gribeblade. Bremsen passer til 24" drivhjul. Ved 20" og 22" drivhjul, skal der benyttes en adapter.


Højre, sort.....	27894-1
Venstre, sort.....	27894-2
Højre, rød.....	27951-1
Venstre, rød.....	27951-2
Adapter til bremse 20".....	28404
Adapter til bremse 22".....	28403



Amputbenstøtte

Højdejusterbar, længderegulerbar og vinkelregulerbar. Kan leveres i dartex eller velour. Længde = 26 cm. Kan forlænges med 6 cm.

Mørkegrå velour.....	25516-60
Sort dartex.....	25516-63
Ekstra bred til sædebredde 55 cm:	
Sort dartex, højre.....	26210-63-1
Sort dartex, venstre.....	26210-63-2

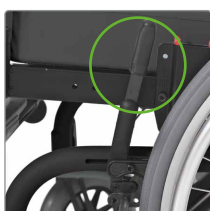

Bremse og bremseforlænger

Bremsegrebet kan vinkles fremad for at lette sideværts forflytninger.

Bremse med forlænget håndtag,	
højre.....	27895-1
Bremse med forlænget håndtag,	
venstre.....	27895-2
Kun bremseforlænger.....	25515



Benstøtte, fast vinkel (Cross 5)

Kan svinges til siden og er aftagelig. (Benyttes også til kørestolen Cross 5).

Benstøtte vid vinkel, 1 stk.....	25574-01
----------------------------------	----------



Enhåndsbremse

Kan kombineres m/drivhjul til ledsagerbremse.

Højre.....	27531-1
Venstre.....	27531-2



Benstøtte, fast vinkel (Prio)

Kan svinges til siden og er aftagelig.

Højre.....	27729-1
Venstre.....	27729-2



Enhåndsdraft

Passer til både højre og venstre side. Kan ikke kombineres med ledsagerbremse. Både drivhjul og teleskopaksel skal monteres.

20" drivhjul.....	26534
22" drivhjul.....	26533
24" drivhjul.....	26522
Teleskopaksel til Prio 40.....	27318
Teleskopaksel til Prio 45-50.....	27319
Teleskopaksel til Prio 55.....	27320



Benstøtter, eleverbare

Kan svinges til siden og er aftagelige. Inkl. lægstøtter, som er justerbare i højde og dybde. Betræk lægstøtter: Grå hygiejnetekstil. SB = sædebredde.

Til SB 40 cm Højre.....	27857-65-1
Til SB 40 cm Venstre.....	27857-65-2
Til SB 45 cm Højre.....	27858-65-1
Til SB 45 cm Venstre.....	27858-65-2
Til SB 50 cm Højre.....	27859-65-1
Til SB 50 cm Venstre.....	27859-65-2
Til SB 55 cm Højre.....	27860-65-1
Til SB 55 cm Venstre.....	27860-65-2


Tilbehør og reservedele



Hel fodplade

Fodpladen giver en gulvfornemmelse og stimulerer bevægelse. Sammenklappelig og aftagelig. OBS! Kan kun bruges sammen med 6" og 6½" forhjul. SB = sædebredde.

Til SB 40,0 cm	28342
Til SB 45,0 cm	28343
Til SB 50,0 cm	28344
Til SB 55,0 cm	28345

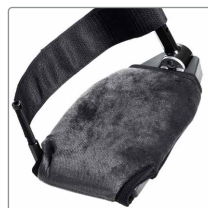

Polstring til delte fodplader

Blød polstring til delte fodplader model Cross. SB = sædebredde.


Til SB 35-40 cm, højre	63188-60-1
Til SB 35-40 cm, venstre	63188-60-2
Til SB 42,5-50 cm højre	63189-60-1
Til SB 42,5-50 cm venstre	63189-60-2
Til SB 52,5-60 cm højre	63192-60-1
Til SB 52,5-60 cm, venstre	63192-60-2



Hel fodplade, model Cross

Opklappelig og indstillelig i højde og vinkel. SB = sædebredde.

Til SB 40-45 cm (B26 x D17 cm)	25937
Til SB 50-55 cm (B37 x D17 cm)	26853

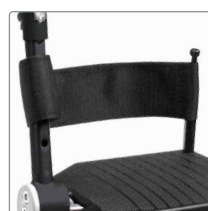

Hælrem

Anvendes på delte fodstøtter. Justerbar i dybden.

One size	24458
----------------	-------



Polstring til hel fodplade

Blød polstring til hel fodplade, model Cross. SB = sædebredde.

Til SB 40-47,5 cm	63190-60
Til SB 50-60 cm	63191-60



Fodpladeforlænger

Øger fodpladedybden. Monteres ovenpå Cross-fodstøtten. Længde: 21 cm. SB = sædebredde.

Til SB 40 cm	50798
Til SB 45 cm	50799
Til SB 50 og 55 cm	50800



Fodplade 13 cm dyb, Cross

Sammenklappelig, højde- og vinkeljusterbar. Ekskl. hælrem. Varianten med ekstra lange underrør anbefales til eleverbare fodstøtter. Højre (x=1) Venstre (x=2) SB = sædebredde.

Til SB 40 cm	25644-x
Til SB 45 cm	25736-x
Til SB 50 og 55 cm	25646-x
Til SB 40 cm, underrør +10 cm	25650-x
Til SB 45 cm, underrør +10 cm	25737-x
Til SB 50 og 55 cm, underrør +10 cm	25652-x

Tilbehør og reservedele



Lægbånd

Længdejusterbart og aftageligt.
SB = sædebredde.

Til SB 40 cm.....	27909
Til SB 45 cm.....	27919
Til SB 50 cm.....	27920
Til SB 55 cm.....	27921



Hoftesele

Monteres på sæderammen.

Længde 100 cm.....	27904
Længde 128 cm.....	28544



Polstring til lægbånd

Aftagelig. Fås i 3 længder.

20 cm.....	26845
30 cm.....	26846
40 cm.....	26847



Beslag for positioneringssele

Dette beslag, som monteres på den forreste del af stolen, gør det muligt at montere både 2- og 4-punktssele. Beslaget er udstyret med spor, for individuel justering af selen og monteres på armlænsfæstet. Leveres i sæt for montering på begge sider.

Beslag for positioneringssele.....	28641
------------------------------------	-------



Polstret lægstøtte

Lægstøtte i blødt velour og i to bredder.
Passer til Prio og Cross benstøtter.
SB = sædebredde.

75 cm til SB 35-47,5 cm.....	63186-60
90 cm til SB 50-60 cm.....	63187-60



Abduktionsklods

Aftagelig og dybdejusterbar.

One size	28022
----------------	-------



Adapter for sædehøjde til 16" drivhjul

Muliggør yderligere to sædehøjder for Prio med 16" drivhjul: 40 cm og 42,5 cm.

Adapter	28414
---------------	-------

Tilbehør og reservedele



Dropstativ
Til to poser.

One size 28341



Stokkeholder

Velegnet til både højre og venstre side.

Stokkeholder, dobbelt.....27327



Kurv til iltflaske

Kan også benyttes som varekurv.

One size 28316



Tipsikring

Opklappelig, justerbar i højde og regulerbar i længde og vinkel. Passer alle sædehøjder.

Tipsikring multi CC59..... 28457



"Etac Prio hjælper til korrekt siddestilling, som forbedrer brugerens aktivitets- og mobilitetsniveau"

Tilbehør og reservedele



Bord til Prio armlæn

Transparent. Monteres på Armlæn, model Standard Prio. Bredde bord: Sædebredde + 17,5 cm, + yderligere 2,5 cm ved bredningssæt. SB = sædebredde.

Til SB 40 cm.....	27971
Til SB 45 cm.....	27972
Til SB 50 cm.....	27973
Til SB 55 cm.....	27974
Til SB 40 cm med bredningssæt.....	24601
Til SB 45 cm med bredningssæt.....	26021
Til SB 50 cm med bredningssæt.....	26907
Fikseringsbånd	82921



Egerbeskytter

Gråt eller gult tryk og Etac logo.

20" - Grå Etac.....	25502-28
22" - Grå Etac.....	25503-28
24" - Grå Etac.....	25504-28
20" - Gul Etac.....	25502-29
22" - Gul Etac.....	25503-29
24" - Gul Etac	25504-29



Bord til smalle armlæn

Transparent. Monteres på Armlæn, smalt (Model Cross). Bredde bord: Sædebredde + 10 cm, + yderligere 2,5 cm ved bredningssæt. SB = sædebredde.

Til SB 40 cm.....	24418
Til SB 45 cm.....	24419
Til SB 50 cm.....	24601
Til SB 55 cm.....	26021
Til SB 40 cm med bredningssæt.....	25188
Til SB 45 cm med bredningssæt.....	25731
Til SB 50 cm med bredningssæt.....	26020
Til SB 55 cm med bredningssæt.....	26022
Fikseringsbånd	62103



Forhjul


6" (150 x 30 mm) Halvmassivt	27863
6½" (165 x 30 mm) Massivt.....	27866
7" (175 x 45 mm) Halvmassivt.....	27867
8" (200 x 35 mm) Halvmassivt	27864
8" (200 x 50 mm) Halvmassivt	27868



Halvbord til smalle armlæn

Justerbart i dybde og bredde. Monteres på Armlæn, smalt (Model Cross).

Højre.....	27352-1
Venstre.....	27352-2

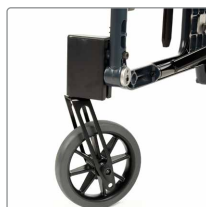

Forgaffler og forgaffelfæste

Forgaffelfæste fås i standard og bredt. Det brede flytter forhjulet 3 cm udad. Sædets totalbredde bliver ikke påvirket. Fæste og forgaffel bestilles separat.

Forgaffel standard	28422
Forgaffel kort	28421
Forgaffelfæste standard, komplet.....	80606
Forgaffelfæste bredt, komplet.....	25763
Forgaffelhus, bredt	80899
Låg til forgaffelhus	50429



Drivhjul

20", 22" eller 24". Massive dæk (pur). Quick Release, aluminiumdrivring. Ønskes højtryksdæk, kontakt venligst Etac.

20"*	82486
22"	82485
24".....	82484

*OBS: ikke mulig i position 1.



Hjælpemotor Lille Viking

Med Lille Viking gøres kørestolen el-drevet og ledsagerstyret, og betjenes via en trinløs håndbetjening monteret på stolens skubbehåndtag. Kontakt venligst Etac.

Kørestole fra Etac skaber et trygt forløb for brugeren

Alle kørestole fra Etac kan konfigureres i mange varianter, der hver især kan tilpasses individuelt helt ned til mindste detalje. Dette betyder, at brugeren ikke altid behøver en ny kørestol, når behovet ændres.

Når kørestolen langsomt tilpasses brugerens behov, skabes tryghed for brugeren. Denne glidende overgang skåner brugeren for den markante forandring, et skift af kørestol kan være. F.eks. vil et skift fra Etac Cross 5 til komfortkørestolen Etac Prio Aktiv, ikke være så stor en

synlig forandring for brugeren, som skift til en regulær og tung komfortkørestol. Hvis der bliver brug for yderligere støtte og funktioner i komfortkørestolen, kan samme kørestol nemt bygges om, ved f.eks. at ændre rygtype, hovedstøtte, tilføjelse eltilt etc.

Kørestole fra Etac er produkter med meget høj genbrugsværdi og har sandsynligvis markedets bedste totaløkonomi.



Krydsrammekørestol

Etac Cross 5

Komfortkørestol

Etac Prio Aktiv

Etac Prio Standard

Etac Prio Hospital

Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering.

Vi ønsker at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder og produktinformationer på www.etac.dk.

Etac A/S
Parallelvej 3, 8751 Gedved
Tlf 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk

Etac, afdeling Øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

etac[®]
Creating Possibilities