



Etac Swift Mobil Tilt-2

Dusj- og toalettstol med tilt

 **etac**

Etac Swift Mobil Tilt-2

Prisforhandlet, NAV-avtale Hygienehjelpemidler, DK 4.

Swift Mobil Tilt-2 er en funksjonell dusj- og toalettstol som passer en mange ulike behov og størrelser. Stolen har en unik tiltfunksjon som gir økt trygghet for bruker og en god, ergonomisk arbeidsstilling for pleier. Takket være utmerket tilgjengelighet rundt seteområdet blir hygienerutinene for pleier god, og kan utføres på en verdig måte for brukeren.

Dusj- og toalettstolen er tilpasningsdyktig og passer dermed mange brukere med ulike behov og størrelser. Den har en maks brukervekt på 160 kg som standard og høyden fra setet til gulv kan endres fra 50-65 cm. Armlenene kan justeres høyde- og sideveis, og de svingbare fotplatene kan justeres i høyden og fås også i en kortere variant.



Etac Swift Mobil Tilt-2 som standard



Etac Swift Mobil Tilt-2 kommer levert som standard med en grå, myk komfortpute på 2 cm som har en bakre åpning. I tillegg er hode støtte, ryggstøtte, armlen, fotstøtter og fire låsbare hjul inkludert.



Stolen kommer levert med komfortpute 2 cm.

Etac Swift Mobil Tilt-2

Art. nr.

HMS nr.

Prisforhandlet modell, inkl. komfortpute 2 cm

80229495

297331



Standard: hode støtte, ryggstøtte, sete, armlen, fotstøtter og fire låsbare hjul

Vekt

19,7 kg

Mål

Total bredde: 57/56/64 cm. Bredde between arm supports: 42/48/54 cm

Materialer

Chassis: pulverlakkert stål
Sete/armlen: polypropylene
Rygg: polyester/velcro
Fotstøtte: polypropylene
Castors: polyamid/TPE, lockable, ball bearing

Rengjør / desinfiser produktet med et standard ikke-slipende rengjøringsmiddel med en pH mellom 5 og 9, eller med en 70 % desinfiserende løsning.

Produktet kan trygt rengjøres i en vaskemaskin ved 85 °C i 3 minutter.

Maks brukervekt: 135 kg

Fordeler

Multijusterbar hodestøtte

Designet for å gi maksimal komfort og fleksibilitet og kan justeres for å passe en rekke behov.

Komfortabel rygg

Justerbar og hurtigtørkende. Stabil passform med doble fester rundt kjørebøylen.

Enkel tilgang

Sete med åpning bak, skrå front og god plass på begge sider.

Høydejusterbar

Enkel å justere til ulike faste setehøyder, uten bruk av verktøy.



Leveres med 2 cm komfortpute.

Fleksible armstøtter

Justerbare i høyde og sideveis.

"Etac Easy-Clean"

En unik overflate spesielt utviklet for Etac, med perfekt balanse mellom friksjon og renslighet, sklisikkerhet og hygiene.

Ergonomisk fotstøtte

De lett buede fotplatene gir støtte for vrist og fotbue, og sikrer komfort, stabilitet og avslapning.



Etac Swift Mobil Tilt-2

Egenskaper




Sete med åpning bak

Gir enkel tilgang for pleieren og komfort for brukeren. Den unike overflaten er spesielt utviklet for Etac og har den perfekte balansen mellom friksjon og renslighet - sklisikker og hygienisk.



Unik og sikker tiltfunksjon

Kan betjenes fra hver side av stolen, noe som gir en god arbeidsstilling for pleier og trygghet for bruker.

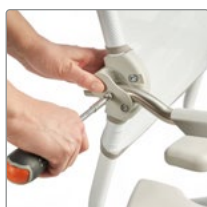

Justerbare armlener som standard

Enkelt tilpasset ulike brukerbehov. Justerbar både i høyden og i bredden, +/- 6 cm i hver retning.



Multijusterbar hodestøtte

Hodestøtten er designet for å gi maksimal komfort og fleksibilitet og kan justeres for å passe en rekke brukerbehov.

Lengde	Bredde	Setehøyde	Rygghøyde	Setedybde	Dybde rygg	
Swift Mobil Tilt-2	104 cm	57/58/64 cm	50 / 65 cm	55 cm	46,5cm	25 cm
Setebredde	Høyde armlen	Bredde mellom armlen	Høyde fotstøtte	Høyde		
Swift Mobil Tilt-2	50 cm	22/25/28 cm	42/48/54 cm	34 / 46,5 cm	100-115 cm	

Tilbehør - utvalg



Komfortpute 4 cm

80209519

Ergonomisk formet med behagelig mykhet som gir god avlastning og behagelig støtte. Utstyrt med utsparring foran. Materiale: polyuretan



Komfortpute 2 cm (std.)

80209518

Ergonomisk formet med behagelig mykhet som gir god avkastning og behagelig støtte. Utstyrt med utsparring foran. Materiale: polyuretan



Komfortsete, 4 cm

Liten åpning 15 cm (6"): 80209507

Stor åpning 18 cm (7"): 80209506

Ergonomisk formede komfortseter med utsparringer foran. Høyden er 4 cm på det laveste punktet.

Materiale: Polyuretan.



Komfortsete, 2 cm

80209434

Åpning 18 cm: 80209306

Formsydd, mykt komfortsete med utsparring foran. Høyden er 2 cm på det laveste punktet.

Materiale: Polyuretan.



Setecover

80209434

Et komfortabelt, lukket sete når du vil dekke til hygieneåpningen. Kan brukes i dusjen.

Høyde 2 cm.

Materiale: Polyuretan.



Myk sete med standard åpning

80209065

Skumpute med trekk laget av en vannavstøtende stoff. Høyde 2 cm.

Materiale: Polyeter/belagt plast.



Myk pute med oval åpning

80209067

Skumpute med trekk laget av vannavvisende stoff. Høyde 4 cm.

Materiale: Polyeter/belagt plast.



Hodestøtte

80209521

Multijusterbar hodestøtte med formet pute. Justerbar i høyde, dybde, sideveis og i vinkel. Komplet med brakett.

Materiale: Pute: Polyuretan

Bøyle: Rustfritt stål



Komfortcover

80209455

Myk rygg med integrerte armlensputer.

Komfortpolstringen gir en myk støtte mens gripeflaten på armlenet holdes fri. Materiale: Polyetylen



Sidestøtter

80209509

Tilbyr en myk sidestøtte og letter plassering i stolen. Justerbar i bredden.

Materiale: Polyesterstoff, borrelås, polyetylen.

Komplett oversikt over tilbehør, artikkelnr. og HMS nr. finner du på etac.no

Tilbehør - utvalg



Myk rygg

80209448


Gir brukeren varme og mykhet. Brukes inne i armlenene, som gjør det mulig å slå opp armlenene og skape tilgjengelighet for sideflytting.
Materiale: Polyetylen.



Armstøttepolster

80209508

Brukes for å skape mykhet rundt armlenene. Gir en varm, myk overflate for å støtte armene samtidig som den holder gripeflaten fri, noe som gjør det trygt å stå opp. Selges i par.
Materiale: Polyetylen.

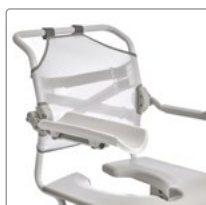

Hemiplegi armstøtter

80209035


Gir støtte til underarmene med sin konturformede form. Utstyrt med et varmereflekterende materiale på utsiden. Passer til venstre og høyre armlener.
Materiale: Polyetylen



Armstøtter, lås

80209445

En låsepinne som skal brukes når du ønsker å låse armlenet i nedfelt eller oppfelt stilling.
Materiale: Rustfritt stål.

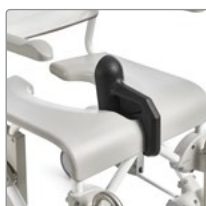

Urinskjerm

80209430

En myk beskyttelse som forhindrer søl. Festes til fordypningen foran på setet og kan enkelt tas av.
Materiale: Polyuretan



Tverrstag

60,5 cm 80303034

66,5 cm 80209452


En sikker støtte å holde seg i, eller den kan brukes som en belastningsstøtte. Festes til armlenene.
Materiale: Aluminium, polyetylen.



Polstret hofte-/brystbelte

80209524


Todelt belte for posisjonering som kan brukes enten som hofte- eller brystbelte. Justerbar med 3 spenner med inntil 65-130 cm lengde. Materialet er behagelig og hurtigtørkende og gir solid støtte ved posisjonering.

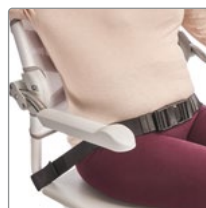

Hoftebelte

80209440

Enkel å justere med en plastspenne. Festes rundt ryggryggene bak med borrelåsbånd.
Materiale: Polyester

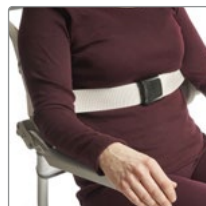

Brystbelte

80209442

Enkel å justere og festes rundt stroppene på ryggstøttetrekket. Bruk med hoftebelte anbefales.
Materiale: Polyester



Bekken med lokk og håndtak

80209255

Unik indre form som forhindrer sprut. Lokket har et håndtak som låses på bekkenet og sørger for at innholdet ikke søles ut.
Materiale: Polypropylen



Bekken

Pan uten lokk 80209254

Lokk med håndtak 80209256

Unik indre form som forhindrer sprut.
Materiale: Polypropylen



Bekkenholder

80209257

Passer både til Etac bekken og tradisjonelle sykehusbekken. Brukes sammen med festeholderne som bestilles separat.
Materiale: Polypropylen



Fester til bekken og bekkenholder

80209435

Monteres godt under setet for å muliggjøre bruk av bekkenholdere. Utstyrt med skrutrekker. Komplet sett.
Materiale: Polyamid



Lav montering av bekken/bøtte

80209259

Brukes når du vil ha bekkenet/bøtta plassert lavere under setet. Monteres med bekken eller bøtteholderne. Senker bekken/bøtteholderne med 6 cm.
Materiale: Polypropylen.



“Vi i Etac ønsker at alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og følge sine drømmer, uavhengig av fysiske omstendigheter. ”

For nyheter og løpende produktoppdateringer - besøk www.etac.no