

Molift Mover 300

Personlyft för tunga brukare

Hög lyftkapacitet

Med sin höga lyftkapacitet på 300 kg är Molift Mover den idealiska lösning för sjukhus och sjukhem som har förflytningsbehov i vardagen med tunga brukare.

Med en totalvikt på 39 kg är Molift Mover 300 en av de lättaste i produktkategorin för tunga brukare. Den unika konstruktionen och hjulens positionering gör den mycket enkel att manövrera.

Det låga chassit på bara 11 cm gör det enkelt att komma in under möbler och låga sängar. Molift Mover är dessutom mycket lätt att rengöra och desinficera.

Stort lyftspann

Molift Mover 300 lyfter lätt från golvet. Det finns bra möjligheter för gåtträngning då lyftens maximala lyfthöjd på 179 cm ger ett stort lyftutrymme.

Lyften är utrustad med miljövänliga NiMH-batterier.



Patenterad Quick release

Molift Mover 300 har en unik "Quick release-funktion" vilket gör det enkelt att byta lyftbygel.



Ergonomiskt körhandtag

Det unika körhandtaget ger ett naturligt grepp, skapar god ergonomi och många greppmöjligheter.



Nödsänkning

Molift Mover 300 är utrustad med både elektrisk och manuell nödsänkning.



Miljövänliga batterier

MOVER 300 har miljövänligt NiMH batteri och är utrustad med integrerad laddare.

Tillbehör



Många möjligheter

Mover 300 kan användas med både 2-punkts och 4-punkts lyftbygel.

2-punkts S: 350 mm, art.nr 1430117

2-punkts M: 450 mm, art.nr 1430116

2-punkts L: 550 mm, art.nr 1430115

4-punkts M: H240 x W300 x L450, art.nr 1530101




Molift Stretcher bår

Molift Stretcher är en användarvänlig, flexibel och skålformad bår för sjukhus och institutioner. Den är designad för förflyttning med en 4-punkts lyftbygel från liggande till liggande, från och till säng och operationsbord eller från golv. Art nr: M25100



Våg

Vågen uppfyller gällande tekniska standarder, och är en godkänd klass III-våg. Vågen kan beräkna Body Mass Index (BMI).

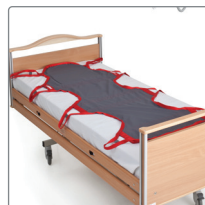

Molift Stretcher liggsele

En mjuk liggsele för horisontella eller vertikala lyft. Används tillsammans med 8-punkts lyftbygel.

Art nr M: 1721520

Art.nr XL: 1721540



Gåträning

Molift Mover 300 kan beställas med extra armstöd, dessa i kombination med den höga höjden för lyften gör att den passar bra för gåträning.

Benämning

Molift Mover 300

Molift Mover 300 integrerad laddare exkl lyftbygel

Art.nr

M15002

M15053

Laddningstid batteri Ca 3 timmar

Lyft hastighet 2,7 cm / sek

Antal lyft Ca 50 lyft med 75 kg och 50 cm

Skyddsklass: IPX4

Max brukarvikt 300 kg

Material Aluminium och stål

Service tool Ingår

Totalvikt 39,3 kg

Längd 132,2 cm

Lyfthöjd 40-179 cm

Bredd 70,2 cm

Benhöjd 11,5 cm

Batteri NiMh 26.4 V – 2.2 Ah. Art.nr. 1341000

Underhåll



Rengör / desinficera produkten med ett vanligt rengöringsmedel utan slipmedel med ett pH på mellan 5 och 9 eller med en 70% desinfektionslösning.



”Vi vill ge människor möjlighet att påverka sin egen tillvaro och skapa en egen vardag på sina egna villkor – oavsett fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se