

etac[®]

Creating Possibilities



R82[®]

R82 Rabbit Up

Litet och smart mobilt ståstöd för ökad självständighet

R82 Rabbit Up

Rabbit Up är ett anpassningsbart ståstöd – stabilt, pålitligt och justerbart för alla behov av ståträning. Med de valbara drivhjulen får användaren dessutom möjlighet att förflytta sig självständigt och utforska sin omgivning. Rabbit Up uppmuntrar till aktivt deltagande, stimulerar sinnen och ger ökad självständighet.

Delaktighet i ögonhöjd

Rabbit Up kan användas i hemmet, i vårdmiljöer eller i skolan. Delaktighet är en viktig del av utvecklingen och med Rabbit Up kan användaren komma upp i ögonhöjd med andra – något som främjar socialt samspel och engagemang. Att stå upprätt ger nya perspektiv på omgivningen och belastar skelett, leder och muskler på ett varierat sätt, vilket bidrar till att förebygga försämring och stödja fortsatt utveckling.

Ökad självständighet

Rabbit Up är mer än bara ett ståstöd. När den används med drivhjul får användaren möjlighet att delta ännu mer aktivt. Det ger dessutom en form av träning som stärker motoriken och muskelkontrollen i överkroppen och armarna.



Egenskaper

Rabbit Up finns i fyra storlekar som är lätta att känna igen tack vare sina fina färger: gul för storlek 1, blå för storlek 2, grå för storlek 3 och silver för storlek 4. Ståstödet har många smarta funktioner som gör det möjligt att anpassa för användare från cirka ett till arton års ålder. Centerskenan är försedd med spår för montering av tillbehör – så att stödet kan justeras efter varje användares individuella behov.



Ståstöd och mobilt ståstöd

Rabbit Up uppfyller inte bara alla behov av ståträning – det ger också användaren friheten att utforska sin omgivning med hjälp av de två valbara drivhjul. På så sätt ökar möjligheterna till självständighet och aktivt deltagande.

Vinkeljusterbart centerstag

Rabbit Up har vinkeljusterbart centerstag med steglös spindeljustering. Detta underlättar förflyttningar och gör det möjligt att uppnå bästa möjliga position för både stående och framdrivning med drivhjul.



Drivhjul – Quick Release

De två drivhjul är utrustade med quick release, vilket gör dem enkla att montera och ta av. Hjulen finns i flera storlekar, från 22" till 36", så att rätt storlek kan väljas utifrån användarens behov.

Cambervinkel

När Rabbit Up används med drivhjul finns möjlighet att justera cambervinkeln. Det ger en optimal hjulposition som gör det lättare för användaren att driva ståstödet framåt.



När Rabbit Up är rätt val

Tack vare de olika möjligheterna att placera stöd längs centerskenan är Rabbit Up lämplig för de flesta användare med försenad utveckling och olika typer av funktionsnedsättningar som behöver stöd för att kunna stå. För användare med cerebral pares är Rabbit Up lämplig för nivå II-IV enligt GMFCS.



Möjligheter

Rabbit Up kan användas både inomhus och utomhus – i hemmet, i vårdmiljöer eller i skolan. Den passar användare som står med stöd av en person eller ett hjälpmedel. För att kunna använda drivhjulen behöver användaren kunna driva ståstödet framåt genom att själv greppa drivringarna.

Användaren är ofta beroende av hjälpmedel även vid sittande och gång, och kan till exempel redan använda sittsystemen x:panda eller Wombat Living samt gånghjälpmedel som Mustang eller Crocodile.

Att tänka på

När Rabbit Up används med drivhjul är det viktigt att den vuxne som övervakar ser till att omgivningen är säker för körning, till exempel genom att trappor och öppna utrymmen är avspärrade.

Om Rabbit Up används utan drivhjul bör den utrustas med länkhjul med broms för att säkerställa en trygg och stabil bas.

Måttguide

[Klicka här för komplett måttguide](#)



Rabbit Up mått användare

Rabbit Up (Ståstöd och Mobilt ståstöd)	Storlek 1	Storlek 2	Storlek 3	Storlek 4
Ungefärlig total längd	870 - 1000 mm	1000 - 1390 mm	1110 - 1490 mm	1230 - 1800 mm
Max höjd till armhåla	740 mm	1080 mm	1190 mm	1420 mm
Max brukarvikt	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg
Ungefärlig ålder	1 - 3	4 - 10	5 - 12	7 - 18

Mått och vikt

Mått	Storlek 1	Storlek 2	Storlek 3	Storlek 4
Totalbredd	635 mm	680 mm	730 mm	720 mm
Totaltbredd*	515 mm	500 mm	600 mm	600 mm
Inre bredd	325 mm	425 mm	425 mm	425 mm
Totalhöjd	670-1000 mm	850-1180 mm	990-1310 mm	1200-1530 mm
Barnets längd fot-axil	550-740 mm	750-1080 mm	830-1190 mm	960-1420 mm
Längd	500 mm	700 mm	800 mm	1000 mm
Vinkel centerstag	0 - +30°	0 - +30°	0 - +30°	0 - +30°
Cambervinkel	8°	6°	6°	4°
Vikt	13.5 kg	15.5 kg	16 kg	18.5 kg
Vikt*	9 kg	10.5 kg	11 kg	13.5 kg
Max brukarvikt	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg
Statisk stabilitet sidled	10°	10°	10°	10°
Statisk stabilitet uppforsbacke	10°	10°	10°	10°
Statisk stabilitet nedforsbacke	10°	10°	10°	10°

Rabbit Up mäts i stående position med fotplattan inställd i lägsta läge. För mindre användare är det möjligt att höja fotplattan.

*Mått är utan drivhjul. Guide för hur du väljer drivhjul hittar du på vår hemsida www.etac.se.

Tillbehör



Hälstöd till fotplatta



Knästöd



Ryggstöd



Sidostöd, bakre



Höftstöd



Bord



Delade fotplattor



Bålstöd

För fler tillbehör - besök vår hemsida

Välj variant av Rabbit Up – Ståstöd eller Mobilt Ståstöd

Val av storlek



Storlek 1: Gul



Storlek 2: Blå



Storlek 3: Grå



Storlek 4: Silver

Ståstöd




Utan drivhjul, med 4 länkhjul med broms och förberedd för drivhjul.

Mobilt ståstöd



2 drivhjul, 4 länkhjul med eller utan broms.

Val av drivhjul

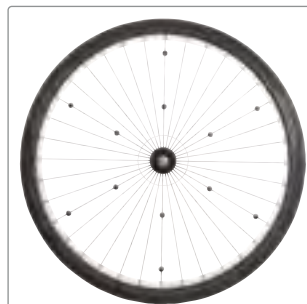

Val av 22", 24", 26", 29", 32" och 36"

Val av cambervinkel



Standard cambervinkel:
Storlek 1: 8°, Storlek 2+3: 6°, Size 4: 4°
Camberkit (tillbehör) för cambervinkel
+3°, +6°, -3°, -6°



Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB

 0371-58 73 00

 info@etac.se

 www.etac.se

 **etac**®

Creating Possibilities