

A man with short grey hair, wearing a grey waffle-knit bathrobe over light grey trousers, is sitting on a white plastic shower stool with four silver adjustable legs. He is smiling and looking down at a pair of glasses he is holding in his hands. The setting is a modern bathroom with large white square tiles on the walls and floor. To the left, there is a white pedestal sink on a wooden vanity with a gold handle. A green plant is visible on the left side of the frame. In the top right corner, there is a green curved banner with the Etac logo and tagline.

etac®
Creating Possibilities

etac®

Etac Edge, Smart, Easy

Sgabelli da doccia

Sgabelli da doccia affidabili

Sedersi mentre si fa la doccia, o durante altre attività in bagno, è consigliabile per evitare di cadere. Etac offre una vasta gamma di sgabelli da doccia progettati per garantire il massimo del comfort e della sicurezza.

L'aspetto più importante di uno sgabello da doccia è la stabilità. I modelli Easy, Smart e Edge progettati da Etac sono dotati di gambe robuste, inclinate verso l'esterno per garantire la massima stabilità indipendentemente dall'altezza. Sono tutti caratterizzati da speciali puntali antiscivolo che si adattano a superfici irregolari e assicurano un supporto stabile anche su pavimenti bagnati. Gli sgabelli da doccia Etac sono inoltre sottoposti a rigorosi test in conformità alle normative europee e internazionali, garantendo elevati livelli di qualità ed affidabilità. Easy e Smart supportano una portata massima di 200kg, Edge fino a 130kg.



Uno sgabello per ogni esigenza

La vasta gamma di sgabelli da doccia Etac comprende una varietà di conformazioni, altezze e colori, offrendo soluzioni adatte alla maggior parte delle esigenze degli utenti.



Grazie alla sua classica seduta rotonda, Easy si adatta a molteplici esigenze ed ambienti. Indipendentemente dalla posizione dello sgabello, è semplicissimo sedersi sopra.



La seduta rettangolare di Smart può essere utilizzata da diversi lati. Un lato offre una superficie di seduta più ampia, l'altro una più ristretta. Gli angoli della seduta consentono di cavalcarla facilmente, garantendo una maggiore stabilità.



Con il suo ingegnoso design triangolare, Edge si adatta perfettamente agli spazi piccoli o agli angoli della doccia. Gli utenti possono sedersi a cavalcioni per ottenere una maggiore mobilità. Un'alternativa sarebbe quella di abbassare una delle gambe e posizionarsi a cavalcioni in corrispondenza di quell'angolo. In questo modo l'inclinazione della seduta aumenta, contribuendo ad alleviare il dolore all'anca.



Smart e Easy sono disponibili anche con pad girevoli che garantiscono una maggiore mobilità. Questi pad consentono di ruotare facilmente senza attrito durante i movimenti. Inoltre, sono idrorepellenti, riflettono il calore corporeo e sono dotati di una superficie antiscivolo.

Varianti di colore

Gli sgabelli da doccia Etac sono disponibili in tre varianti di colore. Grigio, blu e bianco. Questo per offrire all'utente opzioni di qualità, e soprattutto la possibilità di abbinare lo sgabello all'arredo del bagno.



Tutti i nostri prodotti sono progettati con particolare attenzione alla sicurezza, all'igiene e alla sostenibilità. Edge, Smart e Easy sono coperti da una garanzia di 5 anni e hanno una durata prevista di 10 anni.

Caratteristiche




Stabile

Le gambe dello sgabello sono inclinate verso l'esterno per una maggiore stabilità. I puntali antiscivolo si adattano al pavimento e garantiscono equilibrio anche su superfici bagnate o irregolari.



Comodo e sicuro

Le ampie superfici di seduta dalla forma rotonda, ed una superficie antiscivolo rendono l'utilizzo comodo e sicuro. Appositi fori permettono che l'acqua in eccesso fluisca velocemente.

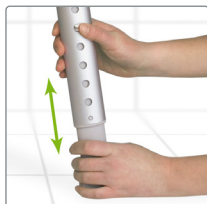

Regolabile in altezza

L'altezza è semplice da regolare, basta premere il pulsante a scatto. La forma ovale evita che le gambe telescopiche ruotino durante la regolazione. Non sono presenti componenti staccabili che potrebbero andare perse.



Semplice da montare

Vengono forniti in pratiche confezioni compatte facili da trasportare; possono inoltre essere rapidamente assemblati senza l'utilizzo di strumenti. Il sistema di bloccaggio con pulsante a pressione consente di fissare le gambe senza difficoltà.





Accessori

Pad seduta:

Per comfort e calore maggiori può essere aggiunto alla seduta un pad soft. Si aggancia intuitivamente alla seduta e può essere facilmente pulito e asciugato dopo l'utilizzo.



Pad seduta Edge

Materiale: Polipropilene
Codice no.81801132



Pad seduta Smart

Materiale: Polipropilene
Codice no. 80209502




Pad per seduta Easy

Materiale: Polipropilene
Codice no. 80209501

Pad girevole:

Il pad girevole permette di ruotare facilmente senza frizione. Offre una sensazione di calore immediata, è idrorepellente ed è dotato di una superficie antiscivolo.

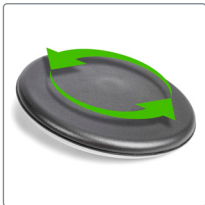


Pad girevole

Compatibile con Smart e Easy
Materiale: Polipropilene
Codice no. 80209503

Prodotto	Bianco	Grigio	Blu
Edge	81801060	81801010	81801030
Edge low		81801040	n/a
Easy	81901060	81901010	81901020
Easy Swivel		81901050	
Smart	81951060	81951010	81951020
Smart low		81951030	
Smart Swivel		81951050	

Colori

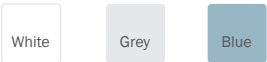

Dimensioni

Profondità seduta: Edge: 45 x 45 x 45 cm (17¾" x 17¾")
Easy: 40 cm (15¾" x 15¾")
Smart: 43 x 38 cm (17" x 15")

Altezza seduta: Edge, 42 - 57 cm (16½" - 22½")
Edge, low, 34,5 - 42 cm (13½" - 16½")
Easy, 42 - 57 cm (16½" - 22½")
Smart, 42 - 57 cm (16½" - 22½")
Smart, low, 34,5 - 42 (13½" - 16½")

Materiali

Seduta: Polipropilene
Gambe: Alluminio, polipropilene, poliammide
Puntali: TPE
Seduta soft: Polietilene

Peso

Edge: 2.6 kg (5.7 lbs)
Edge, low: 2.4 kg (4.4 lbs)
Easy: 2.75 kg (6.1lbs)
Smart: 3.15 kg (6.9 lbs)

Portata massima

Edge: 130 kg (287 lbs)
Easy: 200 kg (441 lbs)
Smart: 200 kg (441 lbs)

Manutenzione



Pulisci/disinfetta il prodotto usando un detergente comune non abrasivo con un ph tra 5 e 9, o con una soluzione disinfettante al 70%.
Il proodtto può essere lavato in sicurezza anche in una lavatrice-disinfettatrice a 85° per 3 minuti.



Shower stools Booklet_01_INT

Etac è un'azienda leader a livello mondiale nella produzione e fornitura di dispositivi di assistenza e di attrezzature per la movimentazione dei pazienti.

Il nostro scopo è fornire soluzioni che migliorano la qualità di vita della persona, della sua famiglia e dei suoi caregivers.

Per le ultime novità e continui aggiornamenti sui prodotti, visita il nostro sito web.

Etac



+39 051 2819228



italia.ordini@etac.it



www.etac-it.com

etac[®]
Creating Possibilities