



Sjøblom Kombigyn



Etac AS
Pb. 249, 1501 Moss
Tlf 815 69 469
hovedkontor.norge@etac.com
www.etac.no

 **etac**[®]

Sjøblom Kombigyn

Benk for gynekologi og allmennundersøkelser.

Vår kombigyn-benk er designet i samarbeid med pleiepersonell, med fokus på funksjonalitet, brukervennlighet, pasientkomfort og kvalitet. Resultatet er en funksjonell, smidig og stødig benk som tar liten plass, med en "vennlig" design som gjør at pasienten kjenner seg mer velkommen inn i undersøkelsesrommet. Høy liggekomfort med puter i skumplast polstret med skai. Enkle å rengjøre.

Egenskaper

- Forkrommet (standard) eller hvitlakkert understell (tilvalg).
- Elektrisk regulering med 2 eller 3 motorer, der to motorer (innstilling av høyde, samt sjokkleie/setevinkel) er standard. Som tilvalg kan benken fås med en ekstra motor for elektrisk regulering av fremre del av rygg.
- Benstøtter, papirrullholder, hjul 125mm m/sentralbrems og skylleskål i rustfritt stål leveres som standard. Integriert oppbevaringsskuff under benken. Designet for enkel rengjøring.
- Motorer 220-240V / 24V. Bryter for fotregulering er standard. Håndkontroll kan fås som tilvalg. Kan leveres med batteri back up (tilvalg).
- Benstøtter spesialdesignet ergonomisk utførelse. Benstøttene er enkle å justere i alle retninger og kan føres langsmed tilbehørsskinnen avhengig av pasientens størrelse. De er også enkle å ta av.
- Liggeflatens aviserramme beskytter polsteret mot støt og er konstruert slik at det ikke er noe klemfare.
- Stort tilbehørsprogram

Understellet er konstruert i en kraftig utførelse, og har fire løftepunkter, noe som gjør benken stabil og trygg. Høyderegulering fra 57-95 cm gir en god ergonomisk arbeidsstilling for personalet, samtidig som det gjør det enkelt for pasienten å komme inn og ut av stolen. Sitteputen er smalere enn benken ellers for å enklere komme til ved gynekologiske undersøkelser. Puten tas enkelt av for rengjøring.

Mål

Lengde	200 cm
Lengde ryggstøtte 1	75 cm
Lengde ryggstøtte 2 (gyn-ryggstøtte)	85 cm
Bredde	70 cm
Bredde seteplate/pute	55 cm (pute 53 cm)
Høyde	57-95 cm. Maks setehøyde v/tilt 110 cm
Ryggstøtte vinkel	70°
Gyn-ryggstøtte vinkel	53°
Sjokkleie vinkel	-7°
Vekt u/pasienthåndtak	88 kg
Maks belastning	165 kg

Beskrivelse

Beskrivelse	Art. nr.
Kombigyn m/standard benholdere	SJ015-2050
Kombigyn m/svarte benholdere, integral	SJ016-2050


Tilbehør

Hvitlakkert understell	SJ010-0000
Nakkepute	SJ010-0100
Pasienthåndtak, sett	SJ010-2033
Proktologi/rektoskopitilsats	SJ010-2034
Kolposkopfeste	SJ010-2035
Elektrisk regulerbar ryggstøtte	SJ010-2062
Batteri back up	SJ010-8201
Undersøkelseslampe LED	SJ15 473 000
Lampefeste for benk	SJ090-5004



Modell SJ016-2050 med pasienthåndtak art. nr. SJ 010-2033

Posisjoner:

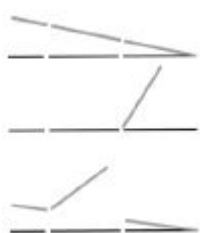

Undersøkelseslampe kan monteres direkte på benken.



Vår kombigyn kan også brukes som vanlig behandlingsbenk. Benstøtter og pasienthåndtak er avtagbare.