




Star Sentinel

Slimme technologie voor luchtcelzitkussens

Slimme en gebruiksvriendelijke technologie

Met Sentinel kunnen verticale luchtcelkussens rechtstreeks worden ingesteld. Hierdoor is het niet meer nodig is om een handpomp te gebruiken. Sentinel detecteert vervolgens automatisch wanneer de gebruiker op het kussen zit en kan moeiteloos het klinisch ingestelde luchtdrukkniveau handhaven. Zitcomfort en gemak gegarandeerd.

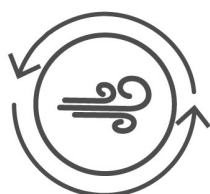

Luchtbeheersysteem

Zodra het klinische luchtdrukkniveau is ingesteld, bewaakt het luchtmanagementsysteem van Sentinel het luchtdrukkniveau in het kussen. Het beheert de druk en past automatisch het luchtniveau aan naar veranderingen in de omgeving.



Melding

Sentinel monitort en past het verticale luchtcelkussen gedurende de dag aan en zal bij eventuele gedetecteerde problemen waarschuwen.



Lichtgewicht en compact

Het gewicht van Sentinel is vergelijkbaar met dat van een mobiele telefoon en past in het voorvak van een Star luchtcelzitzkussen.



Optionele app

Er is een app beschikbaar waarin je de instellingen kunt bekijken en desgewenst aanpassen.

Sentinel & StabilAir

Sentinel en StabilAir vormen de perfecte combinatie voor een 'go anywhere' rolstoelzitzkussen. Samen creëren ze een stabiele kussenoplossing dat zich automatisch aanpast aan veranderingen in de omgeving.



Product	Artikelnr.	Afmetingen LxBxD	Gewicht
Sentinel, powered by Kalogon - EU unit	KA0501-ST-EU	114x55x37 mm	0,2 kg
Technical Batterij: Lithium Ion 1,000 mAh Oplaadtijd: 3 - 4 uur Batterijduur: 24 - 56 uur Waterbestendig: IPX4 App koppeling: Bluetooth			
Compatibel met: luchtcelzitzkussens met één kamer, zoals Star Standard Air en StabilAir.			
Lekkagedetectie: Sentinel kan perforaties vanaf 3 mm groot detecteren. Wanneer microperforaties zeer langzaam lekken vanwege de eigenschappen van neopreen, waarschuwt Sentinel de gebruiker mogelijk niet voor een mogelijk lek, maar compenseert hij eventueel luchtverlies.			



Etac is één van 's werelds toonaangevende ontwikkelaars van ergonomische hulpmiddelen voor kinderen en volwassenen. Met onze verschillende productmerken bieden we kwalitatieve producten voor een breed scala aan dagelijkse behoeften en zorgomgevingen, voor alle levensfasen. Denk hierbij aan douche- en toiletvoorzieningen, zitkussens, rolstoelen, tilliften en transferhulpmiddelen.

Samen met onze klant op zoek gaan naar de beste oplossing voor ieders persoonlijke situatie, dat is onze missie.

Etac



0513 681 686



contact.nl@etac.com



www.etac.nl

etac[®]

Creating Possibilities