

etac[®]

Creating Possibilities



R82[®]

R82 Stingray

Klapvognen til ethvert behov

Tag afsted sammen


At leve et aktivt familieliv kræver det rigtige udstyr. Stingray er en velgennemtænkt multijusterbar klapvogn, der er et oplagt valg til et barn med særlig behov for komfort og støtte. En af de revolutionerende funktioner er bl.a. at køreretningen kan drejes 180°, mens barnet bliver siddende i vognen.

Klapvognen gør det muligt at tage barnet med udenfor og give det en masse stimulation. Der tilbydes et omfattende tilbehørsprogram, således klapvognen kan tilpasses den enkeltes behov. Sædeenheden fås i to størrelser med komfortable hynder i flotte farver. Stellet fås i én størrelse og benyttes til begge sædestørrelser.


Stingrays mange forskellige funktioner og indstillingsmuligheder er lette at betjene uden brug af værktøj. Stellets unikke design, fremstillet i carbon og glasfiber, gør Stingray til en letkørende og stabil klapvogn, der samtidig præsenteres i yderst smart og gennemtænkt design.



45° sædetilt - justeringsmulighederne af ryginklen skaber en god sidde- og hvilestilling.

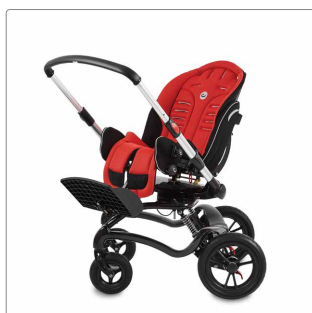

180° drejeligt sæde - revolutionerende funktion, som også kan udføres når barnet sidder i sædet.

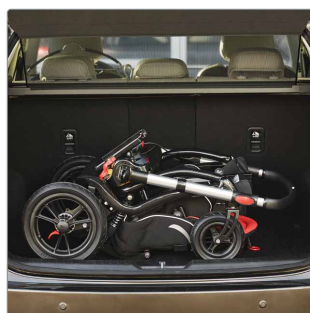

Sammenklappelig - og meget kompakt, så den passer i næsten alle biler.



Sikker transport - Stingray er godkendt til transport med 40 kg brugervægt i køretøjer (ISO 7176-19)

Bestilling

	Varenr.	HMI-nr.
Stingray understel med drejelige forhjul	318722212	87139
Stingray understel med faste forhjul*	318721212	87140
Stingray sædeenhed str. 1	318711120	87208
Stingray sædeenhed str. 2	318712220	87209
Hynder, komplet sæt str. 1	31875051x**	-
Hynder, komplet sæt str. 2	31875052x**	-

* bestillingsvare -> længere leveringstid må forventes.

**Vælg farvekode nedenfor, og udskift x i varenr. med tallet for den ønskede hyndefarve: 1 = Blå, 2 = Rød, 3 = Grøn*, 4 = Grå, 5 = pink*, 6 = orange* eller 7 = gul*.

Stingray som standard

Sædeenhed	2 størrelser. Bredde- og højdejusterbar. Sæde- og rygtilt. Vendbar.
Hynder	Flammesikre og vaskbare
Hyndefarver standard	Blå, rød eller grå
Hyndefarver øvrige*	Grøn, pink, orange eller gul
Stel	Foldbart. Regulerbar fjedring. Ramme i glasfiber og carbon.
Fodstøtte	Højde- og vinkelregulerbar.
Hjul	2 x 12" baghjul og 2 x 7" svingbare forhjul. Massive dæk.
Bremser	Fodbremser på baghjul.
Skubbebøjle	Højdejusterbar

Mål og farver

Stingray fås i flere forskellige farver med stof lavet af 100 % genanvendeligt materiale. Det er brand-, vand- og olieafvisende, antibakteriel, vaskbart og modstandsdygtig over for falmning.

		1	2
	Effektiv sædebredde	300 mm	350 mm
	Effektiv sædedybde	180-300 mm	250-400 mm
	Ryghøjde	410-550 mm	500-650 mm
	Sædehøjde over gulv, fortil**	520 mm	520 mm
	Max. brugervægt	40 kg	40 kg
	Max. brugervægt v. transport	40 kg	40 kg
	Rygvinkel	170°	170°
	Plan sædevinkel	45°	45°
	Længde*	740 mm	740 mm
	Total bredde	590 mm	590 mm
	Længde sammenklappet	900 mm	900 mm
	Bredde sammenklappet	590 mm	590 mm
	Højde sammenklappet	490 mm	490 mm
	Vægt	19 kg	20 kg

*Note: Afhænger af produktets konfiguration. **Målt til adaptorplade. Se flere mål på hjemmesiden.



Perfekt siddestilling

Det er vigtigt at skifte siddestilling. Vi gør det hele tiden, men nogle børn har brug for hjælp til at korrigere deres siddestilling, så de kan strække deres muskler. Det er meget let at lave ryg- og sædetilt på Stingray.

Sædetilt

Sædetiltfunktionen bevarer barnets hoftevinkel, og gør det muligt for barnet at hvile og slappe af. Ændringer i tiltvinklen vil lette trykket på balder og ryggrad, så det bliver behageligt at sidde i længere perioder, da der således benyttes flere siddestillinger. Børn uden tilstrækkelig hovedkontrol kan have gavn af en lille smule tilbageklænet tilt.



Rygtilt op til 170°

Ved rygtilt ændres hoftevinklen. Nogle børn med spasticitet foretrækker at vedholde en fikseret hoftevinkel, mens andre finder det meget afslappende at kunne ligge ned. I den stilling kan barnet tage en lur, hvis der er brug for det.



Postural støtte og stabilitet

Det er vigtigt at sikre en optimal postural støtte, der passer til barnets behov. En stabil base i siddepositionen skabt med lidt ekstra støtte giver barnet frihed til at bevæge sig.

Stingray sædeenheden leveres med en fodstøtte – en minimal støtte til at påvirke positionen af bækkenet og på den måde mavemusklernerne.

Til Stingray fås en lang række tilbehør, der kan skabe ekstra postural stabilitet. Se de følgende sider.



Tilbehør og reservedele



Hovedstøttepude

Kræver ikke beslag.

Hovedstøttepude str. 1 318740810

Hovedstøttepude str. 2 318740820



Beslag til separat hovedstøtte

For montering af separat hovedstøtte.

Beslag til separat hovedstøtte..... 318720850




Anatomisk hovedstøtte

For at støtte og korrigere hovedets stilling.

Anatomisk hovedstøtte,
medium (nr. 45) 318720862

Anatomisk hovedstøtte,
large (nr. 67)..... 318720863

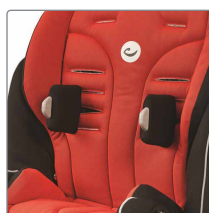

Sidestøtter

Sæt.

Sidestøtter str. 1,
D10 x H10 cm..... 318720301

Sidestøtter str. 2,
D13,5 x H12,5 cm..... 318720302


Betræk til knop på sidestøtte 318720360



Justerbar hovedstøtte

Denne justerbare hovedstøtte er sort og kan benyttes til str. 1 og 2.

Justerbar hovedstøtte 318720870

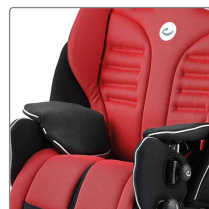

Hoftestøtter, breddejusterbare

Komplet m/betræk, sæt.

Hoftestøtter, breddejusterbare
str. 1, B18 x H16,5 cm.....318740230

Hoftestøtter, breddejusterbare
str. 2, B22 x H17,5 cm318740240



Anatomisk nakkepude

For ekstra støtte og stabilitet. Kan bruges til Stingray, flere x:panda og Panda Futura modeller.

Anatomisk nakkepude, small
B 24 x D 12 cm 318720831

Anatomisk nakkepude, medium
B 28 x D 15 cm 318720832




Skumplade ryg str. 1

Tykkelse: 12 mm.

Skumplade ryg str. 1,
B31 x H13 cm.....318776325

Skumplade ryg str. 2,
B35,5 x H14 cm 318776326

Tilbehør og reservedele

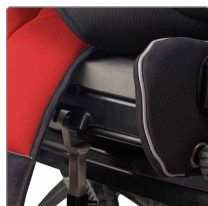

Kile
One size

Kile 318720405



Transportbeslag

R82 Stingray opfylder kravene efter ISO 7176-19.

Transportbeslag 318720902



Gribehåndtag
For sikkerhed og støtte.

Gribehåndtag str. 1, B36 cm 318720401
Gribehåndtag str. 2, B41 cm 318720402



Kaleche

Til al slags vejr.

Kaleche str. 1 318740110
Kaleche str. 2 318740120



Abduktionsklods
Holder benene adskilte.


Abduktionsklods str. 1,
B4 x D7 x H9 cm 318720501
Abduktionsklods str. 2,
B9 x D9 x H9 cm 318720502
Abduktionsklods str. 3,
B9 x D12 x H9 cm 318720503



Kørepose

Fås i 2 størrelser.

Kørepose str. 1, B24 x L80 cm..... 318740131
Kørepose str. 2, B29 x L87 cm..... 318740132

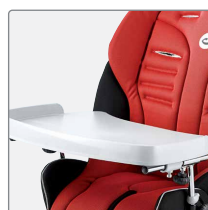

Bord, type 8 med kant
Passer både til str. 1 og str. 2.

Bord..... 318776350



Regnslag

Fås i 2 størrelser.

Regnslag str. 1 318720141
Regnslag str. 2 318720142


Tilbehør og reservedele



Kørepose med seler

I vandtæt og åndbart materiale til udendørs brug.

Kørepose str. small,
HMI-nr. 18603 3187460-170
Kørepose str. medium,
HMI-nr. 18604 3187460-270
Kørepose str. large,
HMI-nr. 18645 3187460-370
Kørepose str. x-large,
HMI-nr. 39468 3187460-460
Kørepose str. xx-large,
HMI-nr. 39469 3187460-560

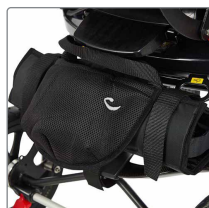

Ittflaskeholder, vandret montering

Kræver montage af centralbremse.
Max. vægt: 10 kg.

Ittflaskeholder 318776295



Varekurv

Ekstra plads til opbevaring.
Max vægt: 10 kg.

Varekurv 318720600



Ittflaskeholder, lodret montering

Monteres ved højre forhjul. De justerbare stropper passer til de fleste flaskestørrelser - op til 12 cm i diameter og en vægt på 10 kg.

Ittflaskeholder, lodret montering 318776296



Rygsæk

Ekstra plads til opbevaring.
Max vægt: 5 kg.

Rygsæk str. 1 3187043183-1
Rygsæk str. 2 3187043183-2



Beslag til dropstativ

Beslaget monteres på venstre bagside af Stingray-sædet, hvorefter det højdejusterbare dropstativ kan monteres.

Beslag til dropstativ 318776291
Dropstativ 31C904566



Udstyrsbakke

Kræver montage af centralbremse.

Udstyrsbakke, B 34 x H 44 cm 318776290



Veste, bæltter og seler på etac.dk

Find et bredt udvalg af veste, bæltter og seler på etac.dk



Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering.

Siden 1973 har vi arbejdet engageret for at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder og produktinformationer på www.etac.dk

Etac A/S

 +45 79 68 58 33

 info@etac.dk

 www.etac.dk

**etac**[®]
Creating Possibilities