



etac®

Creating Possibilities

R82®

R82 Swan Curo

En bekväm och säker dusch- och toalettstol för barn


Swan Curo

Swan Curo är en månsidig och funktionell mobil dusch- och toalettstol, som säkerställer daglig bekvämlighet för både användare och vårdgivare. Den ger barn och ungdomar med särskilda behov en bekväm, avslappnad och hygienisk toalettupplevelse.

Egenvård och värdighet

Swan Curo dusch- och toalettstol har en minimalistisk design och tar liten plats, vilket gör den lämplig för badrum och hem av olika storlekar. Den formade sitsen är noggrant designad för hög komfort och har släta ytor som gör den enkel att rengöra. Den mångsidiga funktionen kan minimera behovet av förflyttningar, där man ofta måste använda lyft och sele.

Att delta i dagliga toalettbesök och lära sig grundläggande kunskaper om personlig hygien, kan ha en positiv effekt på barns egenvård och främja värdigheten – och därmed livskvaliteten.

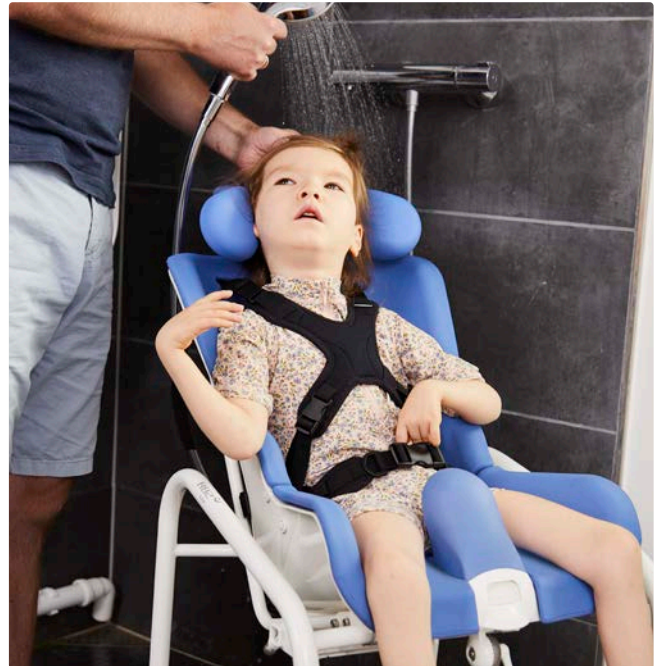

Standardutförande

Produkt

Swan Curo storlek 1	3187061
Swan Curo storlek 2	3187062
Swan Curo storlek 3	3187063
Swan Curo storlek 4	3187064

Art.nr**Chassi**

Rostfritt och pulverlackerat stål

Sitsenhet

Glasfiber, kan fällas steglöst

Potthållare

Integrerad i sitsenheten

Hjul

Vita plasthjul 75 mm

Bromsar

Samtliga hjul är låsbara

Färg

Vit



Detaljer

Swan Curo finns i fyra olika storlekar och är lämplig för användare från två år. För att tillgodose olika behov kan Swan Curo kompletteras med olika tillbehör.



Mångsidiga funktioner

Swan Curo är en mångsidig dusch- och toalettstol, perfekt för olika vardagliga egenvårds- och friskvårdsaktiviteter. Detta gör det möjligt för barnet att vara så aktivt och delaktigt som möjligt, vilket gör att livskvaliteten främjas, behovet av förflyttningar minimeras och den fysiska arbetsbelastningen för vårdgivaren minskar.

Bekvämlighet i vardagen

Underredets minimalistiska och kompakta mått gör att dusch- och toalettstolen lämpar sig väl för hus och badrum av olika storlekar. Den enkla designen gör stolen mycket användarvänlig och lätt – den är enkel att hantera för vårdgivaren och de släta ytorna gör den enkel att rengöra.



Individuell anpassning

Placering av användaren görs enkelt med hjälp av den gaskolvsförsedda tiltfunktionen och det höjd- och vinkeljusterbara fotstödet. Underredet kan justeras i höjd för att vårdgivare ska få bästa möjliga höjd vid förflyttning och toalettbesök.

Komfort och stöd

Den formade sitsen är noggrant designad för att omsluta användaren och erbjuder i kombination med den mjuka polstringsdynan hög sittkomfort. Polstringsdynan är enkel att sätta fast och har hög hållfasthet. Huvudstöd, västar och bälten erbjuder optimalt stöd för användaren.

Val av storlek

För att välja rätt storlek är det viktigt att mäta både barnet, toaletten och badrummet. Genom att jämföra dessa mått med måtten för Swan Curo, säkerställs rätt val av storlek för användaren och den omgivande miljön.



För måttguide, besök etac.se

Mått och vikt

		Storlek 1	Storlek 2	Storlek 3	Storlek 4
	Sitsbredd	220 mm	260 mm	320 mm	410 mm
	Sitsdjup	265 mm	310 mm	400 mm	450 mm
	Ryggstödshöjd	380 mm	470 mm	525 mm	600 mm
	Max brukarvikt	35 kg	60 kg	85 kg	110 kg
	Plan sitsvinkel (tillt)	0° -20°	0° -20°	0° -20°	0° -19°
	Längd	495 mm	625 mm	680 mm	680 mm
	Totalbredd	500 mm	530 mm	580 mm	655 mm
	Totalhöjd	760-920 mm	960-1120 mm	990-1150 mm	1060-1220 mm
	Vikt	8,5 kg	10,5 kg	11,8 kg	12,8 kg

För övriga mått, besök etac.se

Produktlösning

För att individuella behov ska kunna tillgodoses kan Swan Curo utrustas med extra tillbehör. Det finns ett stort utbud av tillbehör för ökad komfort och funktionalitet.

Tillbehören tillhandahåller nödvändigt stöd till övre bål, huvud och armar så att användaren kan sitta extra bekvämt i stolen. Se alla tillbehör på vår hemsida.

Gaskolv

Gaskolven möjliggör en mjuk justering av stolens tiltfunktion, vilket minskar belastningen för vårdgivaren.

Huvudstöd

Lägg till huvudstöd beroende på användarens behov. Huvudstödet är lämpligt för användare i behov av ett omfattande stöd.

Enkel design

Stolen är mycket användarvänlig och lätt i vikt. Den är enkel att använda, rengöra och hantera.

Västar och bälten

Västar och bälten ser till att bälens position bibehålls och ger stöd för bäckenet.

Bord

Bordet lämpar sig perfekt för olika badrumsaktiviteter. Den stödjer överarmarna och hjälper barnet att bibehålla en upprätt position.

Polstringsdyna

Den moderna polstringsdynan ger förbättrad sittkomfort. Klädseln är enkel att sätta fast, ta loss och rengöra.

Stänkskydd

Stänkskydd i två utföranden – högt och lågt.

Låsbara hjul

Av säkerhetsskäl är stolen försedd med låsbara hjul för t.ex. förflyttning. Större hjul finns tillgängliga som tillbehör.

Höjdbar

Underredet är höjdbar för att passa olika modeller av toaletter.

Stag till fotplatta

Det vinkeljusterbara staget underlättar justering av fotplattan.



Tillbehör

**Polstringsdyna rygg & sits, komplett**

Säkerställer en optimal sittkomfort.

Storlek 1	3187061-61
Storlek 2	3187062-61
Storlek 3	3187063-61
Storlek 4	3187064-61

**Stänkskydd nedre**

För användning över toaletten.

Storlek 1-2	31870805
Storlek 3	31870806
Storlek 4	31870807

**Polstringsdyna rygg**

Säkerställer en optimal sittkomfort.

Storlek 1	3187065-61
Storlek 2	3187066-61
Storlek 3	3187067-61
Storlek 4	3187068-61

**Bord**

Ger stöd för överarmen.

Storlek 1	3187038
Storlek 2	3187039
Storlek 3	3187040
Storlek 4	3187041

**Polstringsdyna sits**

Säkerställer en optimal sittkomfort.

Storlek 1	3187069-61
Storlek 2	3187070-61
Storlek 3	3187071-61
Storlek 4	3187072-61

**Underarmstöd**

Ger stöd för överarmen. Sidosvängbart.

Storlek 1	31870131-61
Storlek 2	31870132-61
Storlek 3	31870133-61
Storlek 4	31870134-61

**Sittlock potthål**

För att täcka öppningen i sitsen.

Storlek 1	3187073-61
Storlek 2	3187074-61
Storlek 3	3187075-61
Storlek 4	3187076-61

**Körhandtag**

För säker manövrering.

One size	31880110
----------	----------

**Hel fotplatta exkl stag**

Justerbar i höjd och vinkel. Uppfällbar.

Storlek 1	3187145-1
Storlek 2	3187145-2
Storlek 3	3187145-3

**Stänkskydd, högt**

Undviker stänk utanför pottan eller toalettstolen samt hantering av adduktion.

One size	31880508-0561
----------	---------------

**Stag fotplatta**

För korrekt positionering av fötterna. Vinkeljusterbart (0-90°).

25 cm	3187023
35 cm	3187024
50 cm	3187025

**Stänkskydd, lågt**

Ger enkel åtkomst till sitsen.

One size	31880508-0861
----------	---------------

**Potta**

För en flexibel och bekväm toalettöslösning.

Storlek 1-2	31870800
Storlek 3	31870801
Storlek 4	31870802

**Hjul**

Set / 4 st

100 mm

125 mm

31880100-S

31880100-125

För fler tillbehör – besök etac.se



21 mars, 2023

Etac är en världsledande utvecklare och leverantör av ergonomiska hjälpmedel och hjälpmedel för patientförflyttningar och lyft. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB

☎ 0371-58 73 00

✉ info@etac.se

🌐 www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities