

NYHET



## R82 Swan Curo

Prisforhandlet badestol for høy  
komfort og enkel omsorgsgivning

 **etac**<sup>®</sup>

# R82 Swan Curo - nyhet!

Prisforhandlet, NAV-avtale Hygienehjelpemidler, DK 7.

## Egenomsorg og verdighet

Swan Curo toalett- og badestol har et minimalistisk design og tar liten plass, som gjør den egnet for ulike bad og hjem. Skallsetet har høy komfort og glatte overflater, som gjør det enkelt for omsorgspersonen å rengjøre. Den allsidige funksjonen kan minimere behovet for forflytninger, som ofte inkluderer bruk av heis og seil.

Engasjement i daglige toalettaktiviteter og læring av ferdigheter innen personlig hygiene kan ha en positiv effekt på egenomsorg og fremme verdighet – og dermed fremme livskvalitet for barnet.



# Swan Curo som standard



## Standard prisforhandlet utførelse str. 1

- Hodestøtte nr 4 blå pur med kort turtlestang
- Polstring str. 1
- Swing-away armlen
- Urinskjerm høy
- Fotplate str. 1
- Fotbrettstang 25 cm
- Hoftebelte neopren str. 1

## Standard prisforhandlet utførelse str. 2

- Hodestøtte nr. 4 blå pur med kort turtlestang
- Polstring str. 2
- Swing-away armlen
- Urinskjerm høy
- Fotplate str. 2
- Fotbrettstang 35 cm
- Hoftebelte neopren str. 1

## Standard prisforhandlet utførelse str. 3

- Hodestøtte nr. 4 blå pur med kort turtlestang
- Polstring str. 3
- Swing-away armlen str. 3
- Urinskjerm høy
- Fotplate str. 2
- Fotbrettstang 35 cm
- Hoftebelte neopren str. 2

## Standard prisforhandlet utførelse str. 4

- Hodestøtte nr. 4 blå pur kort turtlestang
- Polstring str. 4
- Swing-away armlen str. 3
- Urinskjerm høy
- Fotplate str. 3
- Fotbrettstang 50 cm
- Hoftebelte neopren str. 3

# Egenskaper

Swan Curo leveres i fire størrelser. Passer for barn og unge fra 2 år og oppover. Tilbehør kan legges til for å dekke ulike behov.



## Allsidig og funksjonell

R82 Swan Curo er en allsidig toalett- og badestol, ideell for ulike daglige egenomsorgs- og velværeaktiviteter. Dette gjør at barnet kan være så aktivt og involvert som mulig. Den fremmer derfor livskvalitet, minimerer behovet for forflytninger og den fysiske arbeidsbelastningen for omsorgspersonen.

## Minimalisme for enkelhetens skyld

Det minimalistiske designet gjør at toalett- og badestolen passer godt inn i ulike hus og bad. Stolen er svært brukervennlig og lett – noe som gjør den enkel for omsorgspersonen å håndtere. De glatte overflatene er enkle å rengjøre.



## Individuell justering

Posisjonering av brukeren gjøres enkelt ved hjelp av tiltfunksjonen og den høyde- og vinkeljusterbare fotstøtten. Understellet er høydejusterbart for å sikre en optimal høyde ved forflytning.












## Komfort og støtte

Skallet er nøye utformet for å omslutte brukeren. Sammen med det myke PU-innlegget gir det høy sittekomfort. PU-innlegget er enkelt å feste og har høy slitestyrke. Hodestøtte, vester og belter sikrer ideell støtte for brukeren.

# Mål og artikkelnummer

Ved valg av størrelse er det viktig å kartlegge barnets mål og mål fra toalett- og badomgivelsene. Til slutt sammenlignes målene med Swan Curo's mål, for å sikre riktig valg av størrelse for barnet og omgivelsene.

		Str. 1	Str. 2	Str. 3	Str. 4
<b>1 2 3</b>	Artikkelnummer	3287061	3287062	3287063	3287064
<b>1 2 3</b>	HMS nummer	297336	297337	297338	297339
	Effektiv setebredde	220 mm	260 mm	320 mm	410 mm
	Effektiv setedybde	265 mm	310 mm	400 mm	450 mm
	Rygg høyde	380 mm	470 mm	525 mm	600 mm
	Maks brukervekt	35 kg	60 kg	85 kg	110 kg
	Tilt	0° -20°	0° -20°	0° -20°	0° -19°
	Lengde	495 mm	625 mm	680 mm	680 mm
	Total bredde	500 mm	530 mm	580 mm	655 mm
	Total høyde	760-920 mm	960-1120 mm	990-1150 mm	1060-1220 mm
	Produktvekt	8,5 kg	10,5 kg	11,8 kg	12,8 kg

Ytterligere mål finner du på vår nettside.



# Detaljer

## Gassfjær

Gassfjæren sørger for en jevn tilt og redusert arbeidsbelastning for omsorgspersonen ved endring av stolens stilling.

## Hodestøtte

Hodestøtte for ekstra støtte og trygghet. Kommer som standard.

## Enkelt design

Stolen er svært brukervennlig og lett – den er enkel å betjene, lett å rengjøre og lett å håndtere for omsorgspersonen.

## Vester og belter

Belter og stropper gir ekstra støtte og stabilitet for overkropp. Hoftebelte i neopren er standard.

## Bord

Bordet er ideelt for ulike baderomsaktiviteter. Den gir støtte for overarmene og hjelper barnet å ha en oppreist stilling.

## PU-innlegg

Det moderne PU-innlegget sikrer en forbedret sittekomfort for brukeren. Trekket er lett å feste og ta av og enkelt å rengjøre.

## Urinskjermer

Velg mellom lav eller høy urinskjerm. Høy er standard.

## Låsable hjul

Av sikkerhetsmessige årsaker er Swan Curo utstyrt med låsable hjul.

## Høydejusterbar

Understellet er høydejusterbart, og passer til en rekke toaletter.

## Fotbrettstang

Vinkeljusterbar fotbrettstang som gjør det enkelt å justere fotbrettet.



Se instruksjonsvideoer

# Tilbehør - utvalg



**PU-innlegg (standard)**



**PU-innlegg, rygg**



**PU-innlegg, sete**



**Seteinlegg**



**Fotplate**



**Fotbrettstang**



**Bekken**



**Bekken, til toalettet**



**Låsbare hjul, 4 stk**  
75 mm, 100 mm eller 125 mm



**Bord, ABS**



**Swing-away armstøtter/ bord**




**Kjørehåndtak**



**Urinskjerm, høy**



**Urinskjerm, lav**

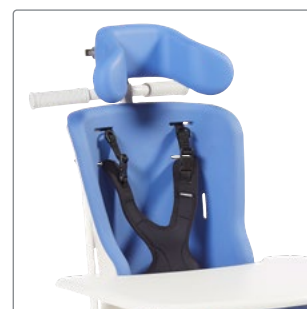

**Vester og belter**



“Vi i Etac ønsker at alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og følge sine drømmer, uavhengig av fysiske omstendigheter. ”

For nyheter og løpende produktoppdateringer - besøk [www.etac.no](http://www.etac.no)