



Etac Swift Mobil

Höjddreglerbar hygienstol
med bästa komfort.

 **etac**[®]



Etac Swift Mobil

Det trygga alternativet för både hem- och sjukvård

Ryggstödet i vattenavstötande nylon, de ergonomiskt utformade fotplattorna och den enkla höjddregleringen är tre bra exempel på stolens enkelhet och komfort. Armstöden har en bredd på 4,5 cm för att ge en skön avlastning för armarna. Trots armstödens bredd är stolen bredast vid hjulfästena. Det minskar skaderisken för användaren. Därutöver är sitsen avtagbar och utbytbar.

Egenskaper



Behaglig ryggklädsel i textil

Ryggklädseln är ställbar och möjlig att anpassa med hjälp av de genomtänkta kardborrebanden. Kan enkelt tas av för rengöring.



Enkel att höjddreglera

Höjddregleringen görs helt utan verktyg. Sitshöjden regleras från 45 cm till 60 cm.




Behagliga armstöd

Armstöden har en bredd och form som ger skön avlastning för armarna och bra greppyta vid uppresning.



Ergonomiska fotplattor

Fotplattorna är mjukt välvda för att ge ett stabilt och skönt stöd mot fotvalvet.

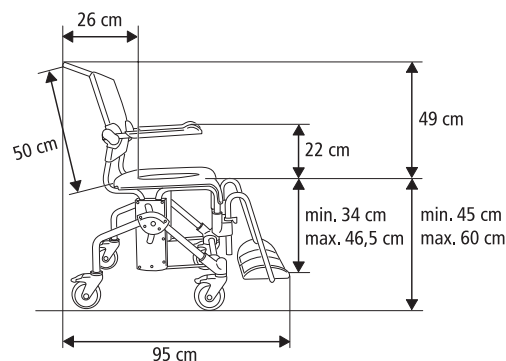

Etac Swift Mobil dusch- och toalettstol

Artikel nr.

delmonterad
monterad

80209400
80209401

Standard: Ryggstöd, sits, armstöd, benstöd, fotplattor och 4 st hjul med broms.

Vikt

16,6 kg

Max brukarvikt

135 kg

Material

Chassi: Pulverlackat stål rör. Sits/Armstöd: Polypropen/PP. Ryggstöd: Polyester/Kardborre/PA. Fotplatta: Polypropen. Hjul: Polyamid/TPR, Låsbara, kullagrade

Dimensioner

Total bredd och sitsbredd: 58 cm
Total längd: 94 cm
Reglerbar sitshöjd: 45–60 cm
Bredd mellan armstöd: 48 cm
Sitsdjup: 46,5 cm
Öppning: 30 cm djup x 21 cm bredd

Swift Mobil finns även i en variant för 160 kg brukarvikt försedd med bredare armstöd.

Underhåll



Rengör / desinficera produkten med ett vanligt rengöringsmedel utan slipmedel med ett pH på mellan 5 och 9 eller med en 70% desinfektionslösning. Produkten kan även rengöras på ett säkert sätt i tvättskåp vid 85° C i 3 minuter.

Tillbehör




Mjuk komfortsits

Swift Mobils mjukaste komfortsits. Skålad för ökad komfort. Intimurtag både fram och bak. Sitsen lyfts enkelt på och av. Material: polyuretan.

Standardöppning 18 cm Art.nr 80209506

Liten öppning 15 cm Art.nr 80209507

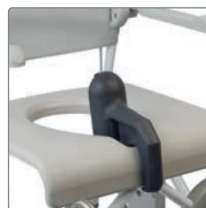

Stänkskydd

Kläms fast i intimurtaget.
Material: Polyuretan.


Art.nr 80209430



Swift Mobil Armstödsdyna – par

Dynorna utgör ett varmt, mjukt underlag och stöd för armarna och lämnar handtaget fritt för enklare uppresning. Material: polyeten.

Par Art.nr 80209508

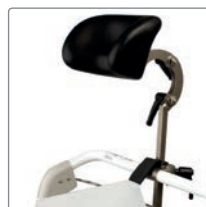

Nackstöd

Justerbart i höjd- djup- och sidled.
Material: Polyuretan, rostfritt stål och zink.
Komplett med fäste.

Art.nr 80209447



Swift Mobil/Clean Comfort Bålstöd

Bålstödet fixerar bälgen så att brukaren sitter bättre och känner sig tryggare.

Material: polyester, polyamid och polyeten.


Art.nr 80209509



Mjukrygg

Ger ett mjukt, behagligt, stöd.
Används i våtutrymmen.
Material: Polyeten.

Art.nr 80209448

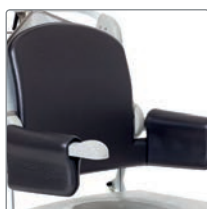

Swift Mobil komfortskal

En mjukrygg med integrerade armstödsdynor. Ger ett varmt mjukt stöd samtidigt som handtaget på armstöden lämnas fritt för enklare uppresning. Material: polyeten.

Art.nr 80209455



Bäcken

Material: Polyamid

Bäcken,


Art.nr 80209254

Bäcken inkl lock med handtag,

Art.nr 80209255

Lock med handtag,

Art.nr 80209256

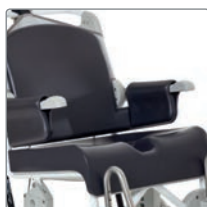

Komfort kit Swift Mobil

Ett komplett set med komforttillbehör till Swift Mobil. I ett artikelnummer får du Komfortskal och Komfortsits mjuk dvs ryggstöd, armstöd och sits med standardöppning 18 cm.

Art.nr 80209457



Bäcken- och hinkgejder

Bäckegejdern passar både Swift Mobil bäcken och sjukhusbäcken. Hinkgejdern passar hinkar och bäcken med högre kanter. Fästen beställs separat. Material: Polypropen. Grå, 1 par. Bäckengejder, Hinkgejder,

Art.nr 80209257

Art.nr 80209258



Tvärså

Ger ökad trygghet och kryststöd.

Material: Aluminium, gummi och cellpolyeten
60,5 cm lång,

Art.nr 80303034

66,5 cm (för breddade armstöd),

Art.nr 80209452



Gejderfäste

Till bäcken- och hinkgejder. Monteras på sitsens undersida.

Material: Polyamid. Grå, sats

Art.nr 80209435



Höftbälte

Enkelt reglerbart i längd, fästs runt ryggrören med kardborreband.

Material: Polyester

Art.nr 80209440



Tillsats för låg upphängning av gejdern

Material: Polypropen. Sats.

Art.nr 80209259



Brösthäls

Enkel reglerbart i längd. Fästs i ryggstödet. Används alltid i kombination med höftbälte.

Material: Polyester.

Art.nr 80209442




Breddningssats

Ökar avståndet mellan armstöden med 6 cm.
Material: Rostfritt stål.

Art.nr 80209444

Tillbehör fortsättning

November 2018

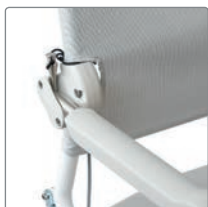

Armstödslås

Låser armstöden i nedfällt läge.
Material: Rostfritt stål.

Art.nr 80209445



Häiband

Hindrar fötterna att glida bakåt.
Reglerbara i längd.
Material: Polyester.

Art.nr 80209432



Armstöd Hemiplegi

Passar både höger och vänster sida. Material:
Cellpolyeten, aluminium,
rostfritt stål, polystyren. Sats.

Art.nr 80209035



Benstöd med uppfällbara fotplattor

Komplett hö/vä

Art.nr 80209446



Mjuk dyna med oval öppning

För extra mjukt underlag,
utan intimurtag, passar olika sitsar.
Material: Polyeter/vävpplast.

Art.nr 80209067



Drivhjulssats

Med inbyggda fästen för tippskydd.
24" drivhjul med massiva däck.
Material: Polyamid, rostfritt stål.
Inklusive fäste och broms.

Art.nr 80209436



Mjuk dyna med standardöppning

För extra mjukt sitsunderlag.
Polyeter/vävpplast.

Art.nr 80209065



Tippskydd

Ökar tryggheten om tyngdpunkten ligger långt
bak, exempelvis vid lårbensamputation.

Material: Aluminium

Exklusive fäste

Art.nr 80209438

Inklusive fäste

Art.nr 80209439



Sitslock

När en mjuk, slät sits behövs.
Lätt att rengöra.
Material: Skummad polyuretan.

Art.nr 80209434



Tramprör

För enklare och säkrare förflyttning
över trösklar och andra hinder. Sats.

Art.nr 80209449



Ben- och vadvstöd samt fotplatta

Vinkelreglerbart ben- och vadvstöd. Fotplattan
är ställbar i 6 lägen. Passar höger och vänster
sida. Material: Vadvstöd ABS-plast. Fotplatta
polypropen.

Ben- och vadvstöd,
Fotplatta,

Art.nr 80209437

Art.nr 80209443



ROHO® Protect dyna, tryckavlastande

Luftdyna med utmärkt tryckavlastande
egenskaper. Lufttrycket är justerbart och
dynan är anpassad för att passa Clean/
Swiftsitsen. Bredd urtag: 21 cm. Material:
Neopren.

Art.nr 80209245



Amputationsbenstöd

Komplett

Art.nr 80209510



Mjuk Komfortsits Swift Mobil

Lägre mjuksits som passar utmärkt om man
vill ge brukaren en mjuk sits utan att den
höjer sitthöjden med mer än ca: 1,5 cm.
Höjd 2 cm, slutet baktill

Art.nr 80209306

Swift Mobil kan levereras delmonterad och packas då i en mindre låda. Det spar transporter och lager vilket även ger kostnads- och miljömässiga fördelar. Monteringens görs enkelt och utan verktyg. Lätt att demontera och därmed utmärkt att källsortera.

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se www.etac.se

etac®
Skapar möjligheter