

etac®

Etac Swift Mobil-2

Sedie da doccia comode e manovrabili

Vi presentiamo la gamma Swift Mobil-2

Le sedie da doccia Swift Mobil-2 sono facili da manovrare e semplificano sia i trasferimenti dell'utente, sia lo spostamento da e verso il bagno. Sono progettate per rendere la vita più semplice a chi le utilizza. Comprendiamo ciò che è davvero importante per assistenti e utenti perché ascoltiamo le loro esigenze. È proprio grazie all'ascolto dei nostri clienti che riconosciamo l'importanza di aspetti quali la facilità di accesso, l'adattabilità, la dignità e il comfort.



La gamma Swift Mobil-2 offre 5 anni di garanzia e una durata utile di 10 anni.

Facilita l'accesso

La maggior parte dei caregivers dichiara che l'accessibilità rappresenta una sfida durante le routine di igiene personale, costringendo spesso ad assumere posture di lavoro scorrette ed affaticanti. Per facilitare l'accesso, la seduta della Swift Mobil-2 presenta un'apertura posteriore e spazio libero su entrambi i lati, rendendo le operazioni di igiene più dignitose per gli utenti e i caregivers.

Flessibilità e comfort su misura

I modelli Swift Mobil-2 vantano un'ampia portata massima di 160 kg e possono essere facilmente adattati a utenti di corporatura diversa, con esigenze e patologie differenti. Offrono molteplici regolazioni e i suoi accessori rendono migliorare il comfort e la stabilità. Apportare semplici regolazioni può fare una grande differenza per la sicurezza, il benessere dell'utente e le condizioni di lavoro dei caregivers.

Scopri i benefici

Una gamma di sedie da doccia comode e manovrabili, funzionali e flessibili, progettate per facilitare le attività di igiene personale sia per l'assistente che per l'utente. Swift Mobil-2 è disponibile in tre diversi modelli: standard, un modello basculante e un modello ad autospinta con ruote da 24".

Poggiatesta multifunzione

Progettato per offrire il massimo livello di comfort e flessibilità, può essere regolato per adattarsi alle diverse esigenze dell'utente.

Schienale tensionabile

Regolabile e ad asciugatura rapida. Fissaggio stabile grazie alle doppie cinghie di ancoraggio attorno al maniglione di spinta.

Accesso facilitato

Seduta con apertura posteriore, incavo anteriore e spazio libero su entrambi i lati.

Regolabile in altezza

Facile da regolare in diverse altezze fisse della seduta, senza l'uso di attrezzi.



Swift Mobil Tilt-2

Swift Mobil-2



Swift Mobil 24"-2

Braccioli regolabili

Regolabili in altezza e larghezza

"Etac Easy-Clean"

Una superficie sviluppata appositamente per Etac, con un perfetto equilibrio tra aderenza e pulizia: antiscivolo e igienica!

Pedana ergonomica

La pedana curva offre un supporto ideale al collo del piede e all'arco plantare, garantendo comfort e stabilità.

Swift Mobil-2

Swift Mobil-2 è una sedia da doccia a spinta manuale, che offre ai caregivers un'ottima accessibilità per le operazioni di igiene personale. È facile da manovrare e può essere personalizzata per soddisfare le diverse esigenze dell'utente.

Seduta unica

La seduta presenta un'apertura posteriore che garantisce all'assistente un agevole accesso durante le operazioni di igiene personale. Inoltre, la finitura antiscivolo "Etac Easy Clean" sulla sua superficie è un'esclusiva Etac e offre il perfetto equilibrio tra aderenza e facilità di pulizia.



Scarico della pressione e comfort

Per gli utenti con cute sensibile o soggetti a lesioni, sono disponibili cuscini morbidi per la seduta che offrono sia sostegno sia un confortevole scarico della pressione. Lo schienale morbido ad asciugatura rapida e i poggiapiedi sagomati aumentano ulteriormente il comfort dell'utente.

Regolabile in altezza

Swift Mobil-2 offre una portata massima di 160 kg ed è regolabile in altezza da 45 a 60 cm. Braccioli regolabili sia in altezza sia in larghezza, con un'escursione di 6 cm in entrambe le direzioni. Poggiapiedi ribaltabili e apribili regolabili in altezza, disponibile una variante più corta, ideale quando si utilizzano cuscini morbidi ad alto spessore.

Opzioni di configurazione

Per gli utenti bariatrici sono disponibili configurazioni con telaio dello schienale maggiorato, che offrono 6 cm di spazio in più tra i braccioli. Questi modelli presentano inoltre una larghezza aumentata di 12 cm tra i supporti per le gambe, grazie ad appositi adattatori. Il telaio dello schienale XL e gli adattatori sono disponibili come accessori anche per le altre varianti di Swift Mobil.

Swift Mobil-2 offre anche una configurazione con schienale in posizione eretta che, abbinata al poggiatesta verticale, consente di avvicinare la sedia di 7 cm alla parete, garantendo un posizionamento ottimale sui WC fissati a muro.

Swift Mobil-2	Item no.
Swift Mobil-2 parzialmente assemblata	80229400
Swift Mobil- 2 assemblata	80229401
Swift Mobil- 2 parzialmente assemblata con attacchi per padella	80229406
Swift Mobil- 2 parzialmente assemblata con schienale XL	80229467
Swift Mobil- 2 parzialmente assemblata con attacchi per padella e schienale XL	80229483
Swift Mobil- 2 parzialmente assemblata con attacchi per padella e schienale dritto	80229490

Standard: supporto schienale, seduta, braccioli, pedana e 4 ruote bloccanti.

Peso

16,6 kg

Dimensioni

Larghezza totale: 58/64 cm. Larghezza tra i braccioli: 42/48/54 cm.
Larghezza totale XL: 61/64/70 cm. Larghezza tra i braccioli: 48/54/60 cm.

Materiali

Telaio: acciaio verniciato a polvere
Seduta/Braccioli: polipropilene
Schienale: poliestere/velcro
Poggiapiedi: polipropilene
Ruote pirettanti: poliammide/TPE, bloccabili, su cuscinetti a sfera

max 160 kg | max 353 lbs

Pulizia manuale: pulire il prodotto con un detergente privo di solventi con pH compreso tra 6 e 9, oppure con una soluzione disinfettante al 70%.
Lavaggio meccanizzato: il prodotto può essere lavato in una lavadisinfettante ad armadio a una temperatura massima di 85 °C per 3 minuti.
Portata massima: 160 kg

Caratteristiche



Seduta con apertura posteriore

Offre facilità di accesso per l'assistente e comfort per l'utente. L'esclusiva superficie, sviluppata appositamente per Etac, vanta un perfetto equilibrio tra aderenza e pulizia: antiscivolo e igienica!



Braccio regolabili standard

Si adatta facilmente alle diverse esigenze dell'utente. Regolabile sia in altezza sia in larghezza, di ± 6 cm in entrambe le direzioni.



Schienale tensionabile

Si adatta facilmente alla postura, alla conformazione corporea e al massimo comfort. Dotato di due elementi di fissaggio attorno alle maniglie di spinta. Materiale morbido e ad asciugatura rapida.



Pedana ergonomica

I poggiapiedi sagomati offrono un supporto ideale al collo del piede e all'arco plantare, garantendo comfort, stabilità e relax.



Swift Mobil Tilt-2

Swift Mobil Tilt-2 è progettata tenendo conto delle esigenze sia dell'assistente sia dell'utente. Affronta le numerose sfide quotidiane dei caregiver, garantendo al contempo il comfort e la sicurezza necessari affinché gli utenti si sentano sempre protetti.

Sistema di basculamento

Swift Mobil Tilt-2 è dotata di sistema di basculamento che garantisce sicurezza per l'utente e una posizione di lavoro ergonomica per il caregiver. La sua funzione di basculamento, regolabile da -5° a 35°, può essere azionata da entrambi i lati della sedia, ciò consente di rassicurare l'utente durante la movimentazione.



Facilità di accesso e comfort

Grazie alla facilità di accesso alla seduta, le operazioni di cura e igiene personale risultano più agevoli per i caregivers e possono essere svolte con rispetto per l'utente. Per gli utenti con cute sensibile, sono disponibili cuscini per la seduta extra-morbidi. Lo schienale morbido ad asciugatura rapida e i poggiapiedi sagomati di Swift Mobil-2 aumentano ulteriormente il comfort dell'utente.

Adatta a diversi utenti

Etac Swift è adatta a soddisfare le esigenze si un'ampia gamma di utenti. Offre di serie una portata massima di 160 kg e un'altezza della seduta regolabile da terra (50-65 cm). I braccioli sono regolabili in altezza o in larghezza, la pedana è regolabile in altezza e i singoli poggiapiedi ribaltabili verso l'esterno sono disponibili anche in versione corta.

Swift Mobil Tilt-2 XL

Sono disponibili modelli per utenti bariatrici, dotati di ulteriori 12 cm tra i supporti per le gambe e di un telaio dello schienale maggiorato di 6 cm extra tra i braccioli.

Swift Mobil Tilt-2	Item no.
Swift Mobil Tilt-2	80229410
Swift Mobil Tilt-2, con attacchi per secchio	80229411
Swift Mobil Tilt-2, con attacchi per padella	80229412
Swift Mobil Tilt-2, con attacchi per padella e padella	80229415
Swift Mobil Tilt-2, XL	80229480
Swift Mobil Tilt-2, XL con attacchi padella	80229481
Swift Mobil Tilt-2, XL con attacchi secchio	80229485

Standard: poggiatesta, schienale, seduta, braccioli, pedana e 4 ruote bloccanti

Peso

20,4 kg

Dimensioni

Larghezza totale: 58/64 cm. Larghezza tra i braccioli: 42/48/54 cm
Larghezza totale XL: 61/64/70 cm. Larghezza tra i braccioli: 48/54/60 cm.

Materiali

Telaio: acciaio verniciato a polvere
Seduta/Braccioli: polipropilene
Schienale: poliestere/velcro
Poggiapiedi: polipropilene
Ruote pirettanti: poliammide/TPE, bloccabili, su cuscinetti a sfera

max 160 kg max 353 lbs

Pulizia manuale: pulire il prodotto con un detergente privo di solventi con pH compreso tra 6 e 9, oppure con una soluzione disinfettante al 70%.
Lavaggio meccanizzato: il prodotto può essere lavato in una lavadisinfettante ad armadio a una temperatura massima di 85 °C per 3 minuti.
Portata massima: 160 kg

Caratteristiche



Seduta con apertura posteriore

Offre facilità di accesso per l'assistente e comfort per l'utente. L'esclusiva superficie, sviluppata appositamente per Etac, vanta un perfetto equilibrio tra aderenza e pulizia: antiscivolo e igienica!



Braccio regolabili standard

Si adatta facilmente alle diverse esigenze dell'utente. Regolabile sia in altezza sia in larghezza, di ± 6 cm in entrambe le direzioni.



Sistema di basculamento

Può essere azionata da entrambi i lati della sedia, garantendo una posizione di lavoro corretta per l'assistente e rassicurando l'utente durante la fase di basculamento.



Poggiatesta multifunzione

Il poggiatesta è progettato per offrire il massimo livello di comfort e flessibilità, e può essere regolato per soddisfare le diverse esigenze dell'utente.



Swift Mobil 24"-2

Swift Mobil 24"-2 è un modello ad autospinta, progettato per l'utente autonomo.

Facile da manovrare

La sedia da doccia e comoda è semplice da usare e facile da manovrare. Le ruote posteriori sono posizionate per garantire il massimo controllo e sono facili da raggiungere. I braccioli ribaltabili e l'ampio spazio davanti alle ruote consentono di effettuare agevolmente i trasferimenti laterali. Inoltre, la forma relativamente omogenea della seduta facilita ulteriormente i trasferimenti laterali.



Seduta confortevole

Per facilitare l'accesso, la seduta è dotata di un'apertura posteriore e di un incavo igienico nella parte anteriore. La seduta è progettata per offrire il massimo comfort, indipendentemente dalla postura dell'utente o dalla larghezza del bacino. Per un comfort ulteriore, sono disponibili sedute morbide ed ergonomiche.

Adatta a varie esigienze

Swift Mobil 24”-2 è adattabile per soddisfare le esigenze e le corporature di un'ampia gamma di utenti. Offre di serie un'elevata portata massima di 160 kg e un'altezza della seduta regolabile da terra (45-60 cm). I braccioli sono regolabili sia in altezza che in larghezza, e lo schienale morbido può essere regolato per ottimizzare il posizionamento e il comfort.
Per gli utenti di corporatura più grande, è disponibile uno schienale extra largo che offre 6 cm in più di spazio tra i braccioli. È inoltre disponibile un kit per allargare le pedane, che aumenta lo spazio per le gambe di 12 cm.

Swift Mobil 24"-2	Item no.
Swift Mobil 24"-2	80229402
Swift Mobil 24"-2 con attacchi per secchio	80229407
Swift Mobil 24"-2 con attacchi per padella	80229408

Standard: schienale, seduta, braccioli, pedana e 4 ruote bloccanti

Peso

25,1 kg

Dimensioni

Larghezza totale: 74 cm
Larghezza tra i braccioli: 42/48/54 cm

Materiali

Telaio: acciaio verniciato a polvere
Seduta/Braccioli: polipropilene
Schienale: poliestere/velcro
Pedana: polipropilene
Ruote piroettanti: poliammide/TPE, bloccabili, su cuscinetti a sfera
Ruote posteriori: coperture piene, poliammide, su cuscinetti a sfera
Freni: poliammide, acciaio inossidabile



Pulizia manuale: pulire il prodotto con un detergente privo di solventi con pH compreso tra 6 e 9, oppure con una soluzione disinfettante al 70%.
Lavaggio meccanizzato: il prodotto può essere lavato in una lavadisinfettante ad armadio a una temperatura massima di 85 °C per 3 minuti.
Portata massima: 160 kg

Caratteristiche



Facile da manovrare

La posizione delle ruote posteriori facilita la spinta in avanti della sedia e semplifica i trasferimenti laterali.



Altezza della seduta regolabile

Swift Mobil 24"-2 può essere facilmente impostata su diverse altezze fisse senza l'uso di utensili, garantendo un'altezza sicura e confortevole.



Schienale tensionabile

Si adatta facilmente alla postura, alla conformazione corporea e al massimo comfort. Dotato di due elementi di fissaggio attorno alle maniglie di spinta. Materiale morbido e ad asciugatura rapida.



Pedana ergonomica

I poggiapiedi sagomati offrono un supporto ideale al collo del piede e all'arco plantare, garantendo comfort, stabilità e relax.



Accessori



Seduta senza apertura posteriore

84001337
Seduta con apertura igienica anteriore e chiusa sul retro.
Materiale: polipropilene



Sedile Soft Comfort, 4 cm, apertura posteriore

80209519
Forma ergonomica e notevole morbidezza per offrire un comfort elevato e un ottimo livello di scarico e supporto. Progettata con incavo igienico anteriore. Materiale: poliuretano



Sedile Soft Comfort, 2 cm, apertura posteriore

80209518
Progettata con una notevole morbidezza e forme arrotondate per offrire il massimo livello di comfort. Presenta un incavo igienico anteriore.
Materiale: poliuretano



Imbottitura seduta Soft Comfort, 4 cm

Apertura piccola 15 cm (6"): 80209507
Apertura grande 18 cm (7"): 80209506
Seduta morbida e confortevole dalla forma ergonomica, dotata di incavo igienico anteriore. L'altezza è di 4 cm nel punto più basso.
Materiale: Poliuretano



Imbottitura seduta Soft Comfort, 2 cm

Apertura 18 cm: 80209306
Seduta morbida e confortevole sagomata, dotata di incavo igienico anteriore. L'altezza è di 2 cm nel punto più basso.
Materiale: poliuretano



Imbottitura sedile senza foro

80209434
Una seduta comoda e chiusa, ideale per coprire l'apertura igienica. Può essere utilizzata sotto la doccia. Altezza 2 cm.
Materiale: poliuretano



Poggiatesta

80209521
Poggiatesta multi-regolabile con cuscino sagomato. Regolabile in altezza, profondità, inclinazione e angolazione. Completo di attacco.
Materiale cuscino: poliuretano
Asta: acciaio inossidabile, polipropilene



Poggiatesta per schienale verticale

80209533
Posizionamento più ravvicinato alla parete in combinazione con lo schienale verticale.
Materiale cuscino: poliuretano
Asta di supporto: acciaio inossidabile



Kit Comfort

80209455
Schienale morbido con imbottiture dei braccioli integrate. L'imbottitura confortevole offre un supporto morbido, lasciando libera la superficie di presa del bracciolo.
Materiale: polietilene



Supporti laterali tronco

80209509
Offre un supporto laterale morbido e facilita il posizionamento nella carrozzina. Regolabile in larghezza.
Materiale: tessuto in poliestere, velcro, polietilene



Schienale standard

80209538
Include uno schienale in rete e supporti per le braccia. Compatibile con schienale lavabile. Braccioli regolabili 6 cm in entrambe le direzioni.
Materiale: poliestere, acciaio verniciato a polvere, acciaio inossidabile polipropilene



Schienale XL

80209454
Ideale per utenti bariatrici, offre maggiore spazio per la schiena e le spalle. Aumenta la larghezza tra i braccioli fino a 48/54/60 cm.
Materiale: poliestere, acciaio verniciato a polvere, acciaio inossidabile, polipropilene



Schienale diritto

80209529
Per un posizionamento ottimale sopra i wc a parete. Consente di collocare la carrozzina 70 mm più vicina alla parete rispetto a un telaio schienale standard.
Materiale: Come per lo schienale XL



Schienale igenizzabile

80209530
Una forma ergonomica con sezione inferiore flessibile. Regolabile in altezza. Materiale igienizzabile, adatto al lavaggio in lavatrice. Facile da montare.
Materiale: polipropilene

Accessori



Barra di supporto

60.5 cm 80303034
66.5 cm 80209452
Un supporto sicuro a cui aggrapparsi o da utilizzare come sostegno per la spinta e il sollevamento. Si fissa ai braccioli.
Materiale: alluminio, polietilene



Imbottitura schienale Soft

80209448
Offre all'utente calore e morbidezza. Applicata all'interno dei braccioli, consente di ribaltarli verso l'alto per facilitare il trasferimento laterale.
Materiale: polietilene



Imbottiture braccioli - paio

80209508
Offre una superficie calda e morbida per sostenere le braccia mantenendo libera la superficie di presa, garantisce la massima sicurezza durante il sollevamento in piedi.
Venduta a paia. Materiale: polietilene



Bracciolo per emiplegici

80209035
Offre supporto per l'avambraccio grazie alla sua conformazione anatomica. Dotato di materiale termoriflettente sulla superficie esterna. Adatto sia al bracciolo destro che a quello sinistro.
Materiale: polietilene



Dispositivo di bloccaggio bracciolo

80209445
Perno di bloccaggio da utilizzare per bloccare il bracciolo in posizione abbassata o sollevata.
Materiale: acciaio inossidabile



Paraspruzzi

80209430
Una protezione morbida contro gli schizzi di urina nella parte anteriore. Si fissa all'incavo anteriore della seduta ed è facilmente rimovibile.
Materiale: poliuretano



Cintura tronco/bacino imbottita

80209524
Cintura di posizionamento a 2 elementi utilizzabile tronco/bacino. Regolabile tramite 3 fibbie fino a 65-130 cm. Materiale confortevole e ad asciugatura rapida, offrendo un supporto saldo durante il posizionamento.



Cinghia pelvica

80209440
Facile da regolare tramite una fibbia in plastica. Si fissa posteriormente attorno ai tubi dello schienale con cinghie in velcro.
Materiale: poliestere



Cintura tronco

80209442
Facile da regolare, si fissa attorno alle cinghie del rivestimento dello schienale. Si raccomanda l'uso in combinazione con una cintura pelvica.
Materiale: poliestere



Padella con coperchio e maniglia

80209255
Sagomatura interna che rompe il flusso del liquido e previene gli schizzi. Il coperchio ha una maniglia che si blocca sulla padella, garantendo che il contenuto non fuoriesca.
Materiale: polipropilene



Padella

Senza maniglia 80209254
Con maniglia 80209256
Sagomatura interna che rompe il flusso del liquido e previene gli schizzi.
Materiale: polipropilene



Agganci padella

80209257
Adatto sia per la padella Etac sia per le tradizionali padelle ospedaliere. Da utilizzare in combinazione con i supporti di aggancio, ordinabili separatamente.
Materiale: polipropilene



Blocco padella

80209049
Mantiene in posizione la padella quando la carrozzina da doccia viene basculata. Compatibile con le varianti di Swift Mobil Tilt-2 e Alto.
Materiale: polipropile



Fissaggio per agganci padella

80209435
Da montare saldamente sotto la seduta per consentire l'utilizzo dei supporti per padella. Si fissa con un cacciavite. Set completo.
Materiale: poliammide

Accessori



Attacchi per montaggio ribassato

80209259

Utilizzato quando si desidera posizionare la padella/il secchio più in basso sotto la seduta. Si monta insieme ai supporti per padella o per secchio. Abbassa i supporti per padella/secchio di 6 cm. Materiale: polipropilene



Dispositivo di aggancio per secchio

80209258

Utilizzato come supporto per padelle/secchi o padelle sanitarie con bordi più alti. Da utilizzare in combinazione con i supporti di aggancio, ordinabili separatamente.
Materiale: polipropilene



Secchio con maniglia e coperchio

80209265

Secchio tradizionale da utilizzare in combinazione con il relativo supporto.
Materiale: polipropilene



Antiribaltamento Swift Mobil Tilt-2

80209459

Offre una protezione contro il ribaltamento all'indietro della carrozzina. Aumenta la sicurezza quando il baricentro si sposta molto all'indietro.
Materiale: polipropilene e alluminio



Antiribaltamento Swift Mobil-2

Inclusi attacchi: 80209439
Esclusi attacchi: 80209438

Offre una protezione contro il ribaltamento all'indietro della carrozzina. Vendute in coppia.
Materiale: polipropilene e alluminio



Antiribaltamento anteriore per Swift Mobi-2

80209526

Offre una protezione contro il ribaltamento in avanti della carrozzina. Include il supporto di aggancio. Vendute in coppia.
Compatibile con tutti i modelli Swift Mobil.
Materiale: acciaio inossidabile e polipropilene



Staffa per il superamento ostacoli

80209449

Facilita il superamento di ostacoli, ad esempio soglie o rampe. Fornito completo di staffa di supporto.
Materiale: polipropilene e alluminio



Pedane ridotte

80209520

Una pedana corta con ribaltamento laterale. Regolabile di 12,5 cm, la lunghezza del poggiapiedi va da 24 a 36,5 cm. Presenta una forma arotondarta. Venduti in coppia.
Materiale: acciaio inossidabile e polipropilene



Pedane con poggiapiedi ribaltabili

80209446

Supporti per le gambe regolabili in altezza e ribaltabili lateralmente con pedane pieghevoli. Ideali per chi necessita di un angolo di flessione dei piedi più aperto. Cinturini poggia-tallone inclusi. Venduti in coppia. Materiale: acciaio



Distanziatori per pedane

80209525

Adattatori per uno spazio supplementare per le gambe. Aumentano la larghezza tra i supporti per le gambe di 12 cm. Inclusi in tutte le configurazioni XL/con schienale largo. Venduti in coppia. Materiale: poliammide



Poggiagambe regolabile in altezza

80209437

Supporto per la gamba ad inclinazione regolabile, utilizzabile sia per la gamba destra sia per la sinistra. Dotato di 4 posizioni ad angolo fisso. Venduto singolarmente.
Materiale: acciaio inossidabile e plastica ABS



Cover poggiagambe regolabile in altezza

80209535

La superficie morbida migliora il comfort del supporto per polpaccio e gamba. Facile da applicare inserendolo a scorrimento sul supporto. Si pulisce rapidamente con una semplice passata.



Pedana poggiapiedi elevabile

80209443

Kit con pedana separata da montare insieme al supporto per gamba e polpaccio.
Materiale: plastica ABS



Angled leg support plus

80209531

Distanzia il supporto per i piedi di 5 cm dal telaio. Venduti in coppia.
Materiale: acciaio inossidabile e poliuretano

Accessori



Supporto gambe ad angolo negativo

80209532

Avvicina il supporto per i piedi di 4 cm al telaio. Venduti in coppia.
Materiale: acciaio inossidabile e poliuretano



Poggiagambe per amputati

80209510

Regolabile in altezza, lunghezza e inclinazione. Utilizzabile ambo i lati. In caso di utente con amputazione, si raccomanda l'uso dei dispositivi antiribaltamento.
Materiale: acciaio inossidabile e poliuretano



Fermatalloni

80209553

Da montare sulle pedane. Impedisce ai piedi di scivolare all'indietro. Regolabili in lunghezza. Venduti in coppia.
Materiale: poliestere



Kit ruote da 24" ad autospinta

80209436

Ruote posteriori da 24" con pneumatici pieni e dispositivi antiribaltamento integrati. Include supporto di aggancio e freno. Compatibili con Swift Mobil, non compatibili con Swift Mobil Tilt.
Materiale: poliammide, acciaio inossidabile,

Vedere le istruzioni per il lavaggio a pagina 10.



Istruzioni per il lavaggio

Sedile chiuso posteriormente, Sedili Soft Comfort e Coprisedile, Poggiatesta, Supporto verticale per poggiatesta, Blocco bracciolo, Paraspruzzi, Padella, Supporto per padella, Supporto di aggancio, Attacco a montaggio basso, Supporto per secchio, Secchio, Antiribaltamento, Levispinta, Supporti per i piedi, Supporto per gamba e polpaccio, Supporto gamba per utente con amputazione, Supporti per le gambe ad inclinazione regolabile, Kit ruote posteriori da 24", Schienale igienizzabile



Rivestimento dello schienale, Cintura pelvica/toracica imbottita, Cintura pelvica, Cintura toracica, Cinturino poggia-tallone.



Cuscini morbidi, Copertura Comfort, Imbottitura morbida per schienale, Imbottitura per bracciolo, Supporto per bracciolo per emiplegia, Barra trasversale, Copertura per supporto gamba e polpaccio



Legenda dei simboli di lavaggio



Lavaggio in lavatrice – temperatura massima 60 °C / 140 °F



Pulizia meccanizzata: il prodotto può essere lavato in una lavastrumenti/termodisinfettatrice a una temperatura massima di 85 °C / 185 °F per 3 minuti.



Pulizia manuale: pulire il prodotto con un detergente privo di solventi con pH compreso tra 6 e 9, oppure con una soluzione disinfettante al 70%.

Misure








Modello	Lunghezza	Larghezza	Altezza seduta	Altezza schienale	lunghezza seduta
Swift Mobil-2	93 cm	58/64 cm	44 ∫ 59 cm	50 cm	46,5 cm
Swift Mobil-2 XL	93 cm	61/64/70 cm	44 ∫ 59 cm	50 cm	46,5 cm
Swift Mobil 24"-2	106 cm	74 cm	45 ∫ 60 cm	50 cm	46,5 cm
Swift Mobil Tilt-2	102 cm	58/64 cm	47,5 ∫ 62,5 cm	55 cm	46,5 cm
Swift Mobil Tilt-2 XL	102 cm	61/64/70 cm	47,5 ∫ 62,5 cm	55 cm	46,5 cm





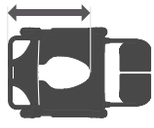

Modello	Alezza pedana	Larghezza seduta	Altezza braccioli	larghezza tra braccioli	Profondità dalla parete
Swift Mobil-2	34 ∫ 46,5 cm	50 cm	22/25/28 cm	42/48/54 cm	54 cm (47 cm*)
Swift Mobil-2 XL	34 ∫ 46,5 cm	50 cm	22/25/28 cm	48/54/60 cm	54 cm
Swift Mobil 24"-2	34 ∫ 46,5 cm	50 cm	22/25/28 cm	42/48/54 cm	67 cm
Swift Mobil Tilt-2	34 ∫ 46,5 cm	50 cm	22/25/28 cm	42/48/54 cm	60 cm
Swift Mobil Tilt-2 XL	34 ∫ 46,5 cm	50 cm	22/25/28 cm	48/54/60 cm	60 cm







Modello	Altezza	Dimensioni ruote	Largehzza utile WC	Altezza da terra/sopra WC	Dimensioni ruote
Swift Mobil-2	95-110 cm	12,5 cm	40 cm	40-55 cm	-
Swift Mobil-2 XL	95-110 cm	12,5 cm	40 cm	40-50 cm	-
Swift Mobil 24"-2	95-110 cm	12,5 cm	40 cm	41-56 cm	61 cm
Swift Mobil Tilt-2	100-115 cm	12,5 cm	40 cm	43,5-58,5 cm	-
Swift Mobil Tilt-2 XL	100-115 cm	12,5 cm	40 cm	43,5-58,5 cm	-






Modello	Raggio di rotazione	Portata massima	Peso		
Swift Mobil-2	ø 99 cm	160 kg	16,6 kg		
Swift Mobil-2 XL	ø 99 cm	160 kg	17,3 kg		
Swift Mobil 24"-2	ø 121 cm	160 kg	25,1 kg		
Swift Mobil Tilt-2	ø 104 cm	160 kg	20,4 kg		
Swift Mobil Tilt-2 XL	ø 104 cm	160 kg	21 kg		

* 8022 9489, 8022 9490, 8022 9491



Etac è un’azienda leader a livello mondiale nella produzione e fornitura di dispositivi di assistenza e di attrezzature per la movientazione dei pazienti. Il nostro scopo è fornire soluzioni che migliorano la qualità di vita della persona, della sia famiglia e dei suoi caregivers.

Per le ultime novità e continui aggiornamenti sui prodotti, visita il nostro sito web

Etac

+39 501 2819228

italia.ordini@etac.it

www.etac-it.com

etac®

Creating Possibilities