



etac®

Etac Swift Mobil-2

Mobile bade- og toiletstole

Vi introducerer Swift Mobil-2 familien

Etac Swift Mobil-2 bade- og toiletstole er lette at manøvrere og forenkler forflytning såvel som transport af brugeren til og fra badeværelset. De er designet til at gøre livet lettere for både brugeren og plejeren. Vi forstår, hvad der er vigtigt for plejere og brugere, og ved at lytte til vores kunder, forstår vi vigtigheden af let adgang, tilpasningsevne, værdighed og komfort.



Tilgængelighed

Et flertal af plejere giver udtryk for, at ved personlig pleje af brugeren, er manglende tilgængelighed en udfordring, og ender ofte ud i anstrengte arbejdsstillinger. For at forbedre tilgængeligheden har sædet på Swift Mobil-2 åbning bagtil, samt god tilgængelighed både bagfra og fra siderne. Dette hjælper med til at gøre personlige hygiejnerutiner hurtigere at udføre, og mere værdigt for både bruger og plejer.

Flexibilitet og komfort

Alle Swift Mobil-2-modeller har en max. brugervægt på 160 kg og kan let tilpasses til mindre eller større brugere med forskellige udfordringer og behov. Stolene er justerbare på mange måder og har et bredt udvalg af tilbehør, der forbedrer komfort og stabilitet. Små justeringer kan gøre en stor forskel for sikkerhed og velvære for brugeren og arbejdsforholdene for plejeren.

Udforsk fordelene

Alle Swift Mobil-2 modellerne er funktionelle, fleksible og mobile bade- og toiletstole, designet til at lette personlig pleje for både plejeren og brugeren. Swift Mobil-2 tilbydes i fire forskellige modeller; en standard bade- og toiletstol, en model med opret ryg, en tilt-model og en med 24" drivhjul.

Multi-justerbar hovedstøtte

Designet til at give maksimal komfort og fleksibilitet. Den kan justeres for at opfylde individuelle behov for brugeren. En Opret hovedstøtte er også tilgængelig.

Komfortabelt ryglæn

Justerbart og hurtigtørrende. Stabil pasform med to fastgørelsespunkter omkring kørebøjlen. En fast, aftørbar ryg er også tilgængelig.

Bekvem tilgængelighed

Sæde med åbning bagtil, fordybning fortil og god tilgængelighed både bagfra og fra siderne.

Højdejusterbar

Nem at indstille til forskellige sædehøjder, uden brug af værktøj.

Bækken

Swift Mobil-2 og Swift Mobil Tilt-2 leveres inkl. bækken med låg.



Etac Swift Mobil-2



Etac Swift Mobil-2 med opret ryg



Etac Swift Mobil 24"-2 (leveres med fodstøtter som vist nedenfor).

Fleksible armlæn

Justerbart i højde og bredde.


"Etac Easy-Clean"

En unik overflade specielt udviklet til Etac. En perfekt balance mellem friktion og renlighed, skridsikkerhed og hygiejne!



Fodstøtte

Svingbare og aftagelige fodstøtter. Hælremme leveres som standardudstyr på Swift Mobil Tilt-2. Kan tilkøbes som ekstra udstyr til de andre Swift Mobil-2 modeller.

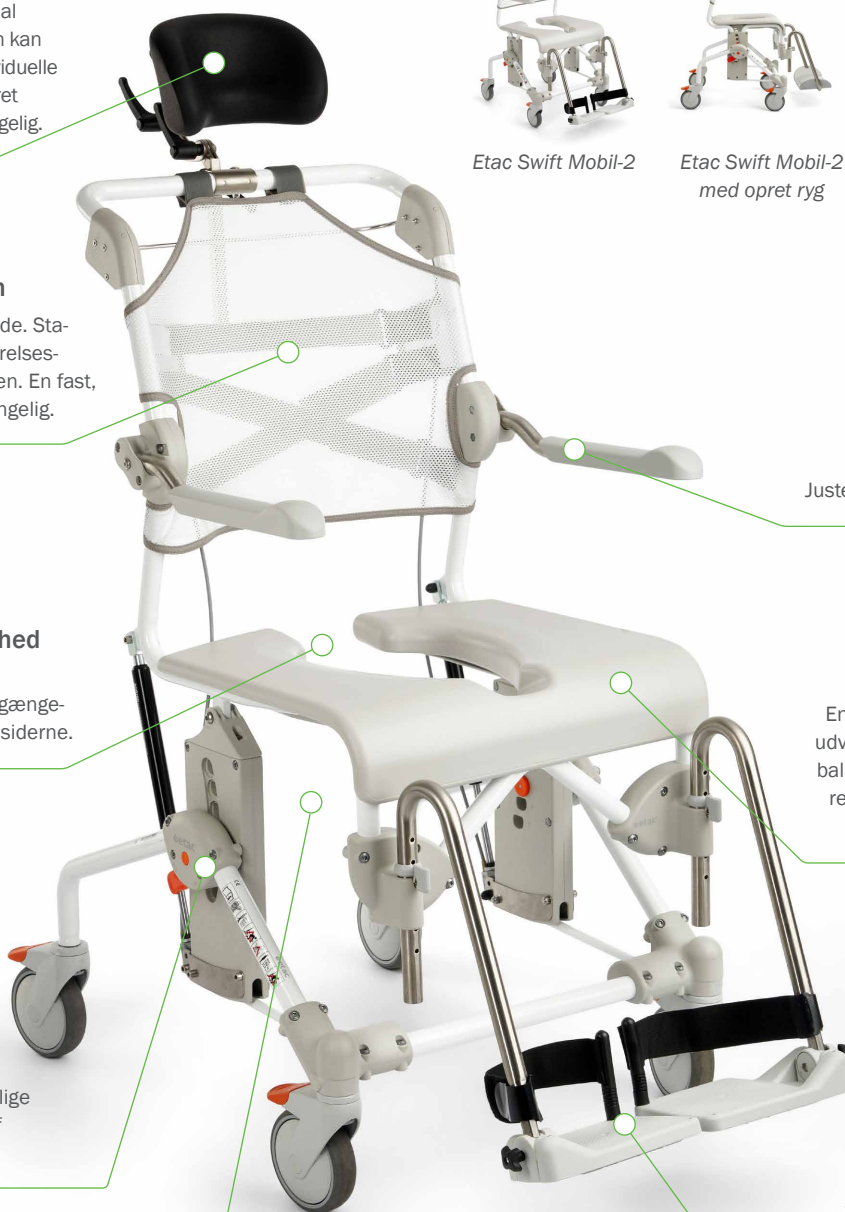

Etac Swift Mobil Tilt-2

Etac Swift Mobil-2

Swift Mobil-2 er en fleksibel bade- og toiletstol, som giver de bedste muligheder for personlig pleje og komfort. Det brede tilbehørsprogram betyder, at Swift Mobil er meget fleksibel og nem at tilpasse til den enkelte brugers behov.

Sæde med god tilgængelighed

Sædet har åbning bagtil, hvilket giver hjælperen nem adgang til at assistere ved personlig pleje. Sædets overflade har "Etac Easy Clean" mønster, som giver en perfekt balance imellem friktion og rengøringsvenlighed.

Komfortabel aflastning

Den bløde rygpolstring, som tørrer hurtigt, har indbyggede stropper, som gør det muligt at indstille ryggen optimalt til den enkelte bruger. For støtte og komfortabel aflastning til de ekstra følsomme brugere, anbefaler vi de bløde sæder, som fås som tilbehør.

Nem og fleksibel tilpasning

Swift Mobil-2 har en maksimum brugervægt på 160 kg som standard, og den kan let højdejusteres fra 45 til 60 cm uden brug af værktøj. Armlænene kan justeres i højde og bredde. Swing-away fodstøtterne er højdejusterbare og fås også i en kort version, som f.eks. kan anvendes i kombination med et højere, blødt sæde.



Etac Swift Mobil-2

HMI-nr.

Varenr.

Swift Mobil-2
inkl. ryglæn, sæde, armlæn, bækkenholder, bækken
med læg, opklappelige og vinkeljusterbare fodstøtter
og 4 låsbare hjul.

118816

80229463

Vægt og dimensioner

16,6 kg. Total bredde: 57/58/64 cm (regulerbar). Bredde mellem armlæn: 42/48/54 cm (regulerbar).

Etac Swift Mobil-2 XL

HMI-nr.

Varenr.

Swift Mobil-2 XL
inkl. ryglæn, sæde, armlæn, svingbare og
aftagelige fodstøtter og 4 låsbare hjul.

128787

80229483

Vægt og dimensioner

16,6 kg. Total bredde: 58/64/70 cm (regulerbar). Bredde mellem armlæn: 48/54/60 cm (regulerbar).

Etac Swift Mobil-2 med opret ryg

HMI-nr.

Varenr.

Swift Mobil-2 med opret ryg
inkl. ryglæn, sæde, armlæn, bækkenholder, svingbare
og aftagelige fodstøtter, 4 låsbare hjul

135042

80229489

Vægt og dimensioner

16,6 kg. Total bredde: 57/58/64 cm (regulerbar). Bredde mellem armlæn: 42/48/54 cm (regulerbar).


Materialer

Stel: pulverlakeret stål.
Sæde/Armlæn: polypropylen.
Ryglæn: polyester/velcro.
Fodstøtte: polypropylen.
Hjul: polyamid/TPE, låsbare, kugleleje.



Max brugervægt: 160 kg.

Rengør / desinficer produktet med et standardrengøringsmiddel uden slibemiddel med en pH mellem 5 og 9, eller med en 70 % desinfektionsopløsning. Produktet kan rengøres sikkert i Autoklave ved 85°C i 3 minutter.

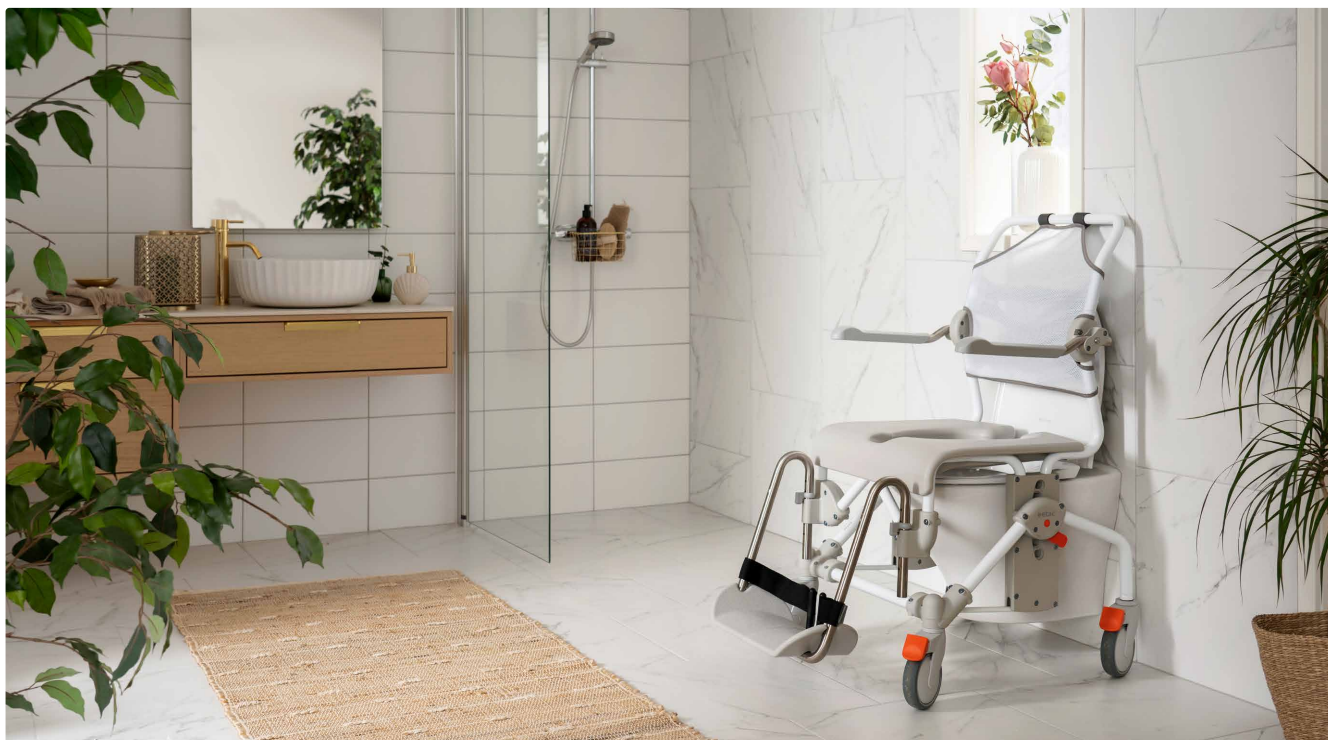

Etac Swift Mobil-2 med opret ryg, perfekt til væghængte toiletter

Etac Swift Mobil-2 er yderst velegnet til brug over almindelige toiletter, men ved visse typer af væghængte toiletter bliver toiletstolen placeret for langt fremme i forhold til toilettets åbning idet ryggen/kørebøjlen går mod væggen.


Med Swift Mobil-2 med opret ryg, evt. i kombination med en Opret hovedstøtte, kommer stolen 7 cm tættere på væggen og passer dermed perfekt over væghængte toiletter. Den oprette ryg kan også tilkøbes som tilbehør.

Egenskaber



Sæde med åbning bagtil

Giver nem adgang for personlig pleje, og komfort for brugeren. Den unikke overflade, specielt udviklet til Etac, har den perfekte balance mellem friktion og rengøringsvenlighed, skridsikker og hygiejnisk!

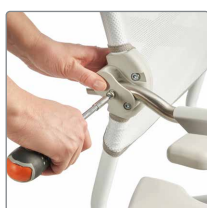

Justerbare armlæn som standard

Nem tilpasning i forhold til forskellige brugeres behov. Armlænen på Swift Mobil-2 og Tilt-2 kan justeres 6 cm i højden og bredden. Armlænen på XL-modellerne kan justeres 6 cm i højden og 12 cm i bredden.



Justerbart ryglæn

Nem at tilpasse i forhold til brugerens figur, kropsholdning og behov for komfort. Rygbetrækket er fastgjort med 2 stropper omkring kørebøjlen for ekstra nem justering af hovedstøtte. Blødt og hurtigtørrende materiale.



Opklappelige og vinkeljusterbare fodstøtter

Fodpladerne kan klappes op og indstilles i vinkel, hvilket sikrer optimal understøttelse af fødderne. Nem indstilling af fodstøtten i forhold til underbenslængde. Ekskl. hælremme.

Bemærk at Swift Mobil-2 Standard og Swift Mobil-2 med opret ryg er udstyret med opklappelige og vinkeljusterbare fodstøtter (80209446).

Swift Mobil-2 XL er med svingbare og aftagelige fodstøtter (84001302).

Etac Swift Mobil Tilt-2

Swift Mobil Tilt-2 er designet med ekstra meget fokus på plejeren og brugeren. Med tiltbar sædeenhed lettes de mange udfordringer, som plejepersonalet står overfor i deres daglige arbejde, og giver samtidig den komfort og sikkerhed, brugerne har brug for, for at føle sig godt tilpas.

Tilt funktion

Swift Mobil Tilt-2 har en brugervenlig tiltfunktion, der giver øget sikkerhed for brugeren og en ergonomisk arbejdsstilling for plejeren. Tiltfunktionen (+ 5° til -35°) kan betjenes fra begge sider af stolen. Dette gør det nemt for plejeren at berolige og støtte brugeren, når han/hun vippes.

God tilgængelighed og komfort

Med god tilgængelighed rundt om sædeområdet gøres rutinerne for personlig pleje lettere. For følsomme brugere anbefales ekstra bløde sædehynder. Det bløde og hurtigtørrende ryglæn og fodstøtterne giver brugeren en god komfort.

Passer mange brugere

Grundet disse features kan bade- og toiletstolen tilpasses mange brugerbehov og -størrelser: Maksimal brugervægt på hele 160 kg, højdejusterbar 45-60 cm (sæde-til-gulv), armlænene kan justeres i højde og bredde, og den højdejusterbare, svingbare fodstøtte tilbydes også i en kortere version.



Etac Swift Mobil Tilt-2

Swift Mobil Tilt-2

inkl. Hovedstøtte, ryglæn, sæde, armlæn, bækkenholder, bækken med låg, opklappelige fodstøtter, hælrem og 4 låsbare hjul.

HMI-nr.

118817

Varenr.

80229473

Materialer

Stel: pulverlakeret stål.
Sæde/Armlæn: polypropylen.
ryglæn: polyester/velcro.
Fodstøtte: polypropylen.
Hjul: polyamid/TPE, låsbare, kugleleje.

Vægt og dimensioner

20,4 kg. Total bredde: 57/58/64 cm (regulerbar).
Bredde mellem armlæn: 42/48/54 cm (regulerbar).



Rengør / desinficer produktet med et standardrengøringsmiddel uden slibemiddel med en pH mellem 5 og 9, eller med en 70 % desinfektionsopløsning.
Produktet kan rengøres sikkert i Autoklave ved 85°C i 3 minutter.

Max brugervægt: 160 kg.

Etac Swift Mobil Tilt-2 XL

Swift Mobil Tilt-2 XL

inkl. Hovedstøtte, ryglæn, sæde, armlæn, svingbare og aftagelige fodstøtter, hælrem og 4 låsbare hjul.

HMI-nr.

128788

Varenr.

80229481

Vægt og dimensioner

20,4 kg. Total bredde: 58/64/70 cm (regulerbar).
Bredde mellem armlæn: 48/54/60 cm (regulerbar).

Egenskaber




Sæde med åbning bagtil

Giver nem adgang for personlig pleje, og komfort for brugeren. Den unikke overflade, specielt udviklet til Etac, har den perfekte balance mellem friktion og rengøringsvenlighed, skridsikker og hygiejnisk!



Sikker tiltfunktion

Tiltfunktionen kan betjenes fra begge sider af stolen, hvilket muliggør en god arbejdsstilling for plejeren og tryghed for brugeren.

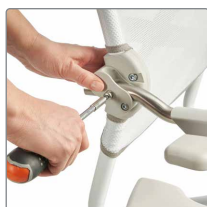

Justerbare armlæn som standard

Nem tilpasning i forhold til forskellige brugeres behov. Armlænene på Swift Mobil-2 og Tilt-2 kan justeres 6 cm i højden og bredden. Armlænene på XL-modellerne kan justeres 6 cm i højden og 12 cm i bredden.



Multi-justerbar hovedstøtte

Hovedstøtten er designet til at give maksimal komfort og fleksibilitet og kan justeres, så den passer mange brugerbehov.



Etac Swift Mobil 24"-2

Etac Swift Mobil 24"-2 er en version med drivhjul, designet til den selvhjulpne bruger.

Nem at manøvrere

Denne bade- og toiletstol er enkel at bruge og let at manøvrere. Baghjulene er placeret for maksimal kontrol og er lette at nå. De opklappelige armlæn og god plads foran drivhjulene, samt sædets facon, letter forflytninger til og fra stolen.

Komfortabelt sæde

For bedre tilgængelighed ved personlig pleje, er sædet åbnet bagtil og har en fordykning fortil. Sædet er designet til at give komfort uanset brugernes siddestilling eller bækkenbredde. For yderligere komfort fås ergonomiske og bløde sæder (tilbehør).

Imødekommer mange behov

Grundet disse features kan Swift Mobil 24"-2 tilpasses mange brugerbehov og -størrelser: Maksimal brugervægt på hele 160 kg, højdejusterbar 45-60 cm (sæde-til-gulv), armlænenene kan justeres i højde og bredde, og den bløde og justerbare ryg kan justeres og tilpasses for bedst mulig positionering og komfort.

For større brugere tilbydes en ekstra bred rygramme, der giver yderligere 6 cm mellem armlænenene.



OBS! I Danmark leveres Swift Mobil 24"-2 med disse svingbare og aftagelige fodstøtter. Ekskl. hælrem.

Etac Swift Mobil 24"-2

Etac Swift Mobil 24"-2
inkl. Ryglæn, sæde, armlæn, bækkenholder,
opklappelige fodstøtter, 2 låsbare forhjul,
2 drivhjul og bremser.

HMI-nr.

118818

Varenr.

80229464

Vægt

25,1 kg

Dimensioner

Total bredde: 72 cm

Bredde mellem armlæn: 42/48/54 cm (regulerbar)

Materialer

Stel: pulverlakeret stål
Sæde/Armlæn: polypropylen
ryglæn: polyester/velcro
Fodstøtte: polypropylen
Hjul: polyamid/TPE, låsbare, kugleleje
Drivhjul: massive dæk, polyamid, kugleleje
Bremser: polyamid, rustfrit stål



Rengør / desinficer produktet med et standardrengøringsmiddel uden slibemiddel med en pH mellem 5 og 9, eller med en 70 % desinfektionsopløsning. Produktet kan rengøres sikkert i Autoklave ved 85°C i 3 minutter.

Max brugervægt: 160 kg.

Egenskaber



Nem at manøvrere

Drivhjulenes position gør den nemt for brugeren at køre stolen. Drivhjulenes placering giver samtidig god plads foran stolen, hvilket letter forflytninger til og fra stolen.



Justerbart ryglæn

Nem at tilpasse i forhold til brugerens figur, kropsholdning og behov for komfort. Rygbetrækket er fastgjort med 2 stropper omkring kørebøjlen for ekstra nem justering af hovedstøtte. Blødt og hurtigtørrende materiale.



Justerbar sædehøjde

Swift Mobil 24"-2 kan nemt indstilles i forskellige sædehøjder. Justeringer foretages endda uden brug af værktøj.



Opklappelige og vinkeljusterbare fodstøtter

Fodpladerne kan klappes op og indstilles i vinkel, hvilket sikrer optimal understøttelse af fødderne. Nem indstilling af fodstøtten i forhold til underbenslængde. Ekskl. hælremme.



Tilbehør



Sæde uden åbning bagtil

Varenr. 84001337
Designet med en fordybning foran.
Materiale: Polypropylen.



Blødt Komfortsæde, 4 cm åbning bagtil

Varenr. 80209519
Den ergonomiske form og betydelige blødhed giver behagelig lindring og støtte. Designet med en fordybning foran.
Materiale: Polyurethan.



Blødt Komfortsæde, 2 cm åbning bagtil

Varenr. 80209518
Den ergonomiske form og betydelige blødhed giver behagelig lindring og støtte. Designet med en fordybning foran.
Materiale: Polyurethan.



Blødt Komfortsæde, 4 cm

Varenr. 80209507 (Lille åbning 15 cm)
Varenr. 80209506 (Stor åbning 18 cm)
Blødt og ergonomisk formet sæde med en fordybning foran. Sædet er min. 4 cm tykt.
Materiale: Polyurethan.



Blødt Komfortsæde, 2 cm

Varenr. 80209306
Åbning 18 cm. Blødt og ergonomisk formet sæde med en fordybning foran. Sædet er min. 2 cm tykt.
Materiale: Polyurethan.



Blødt sæde uden åbning

Varenr. 80209434
Et komfortabelt lukket sæde som dækker hygiejneudskæringen. Kan benyttes i badet.
Tykkelse 2 cm.
Materiale: Polyurethan.



Blød sædepude med standard åbning

Varenr. 80209065
Skumpude med betræk af vandafvisende stof. Tykkelse 2 cm.
Materiale: Polyester/plastikbelagt.




Blød sædepude med oval åbning

Varenr. 80209067
Skumpude med betræk af vandafvisende stof. Tykkelse 4 cm.
Materiale: Polyester/plastikbelagt.



Hovedstøtte

Varenr. 80209521
Multijusterbar hovedstøtte med bueformet pude. Justerbar i højde, dybde, sideværts og i vinkel. Leveres komplet.
Materiale pude: Polyurethan
Materiale monteringsstang: Rustfrit stål.

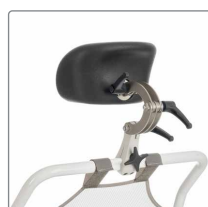

Opret hovedstøtte

Stolen kan komme tættere på væggen i kombination med Opret ryg. Hovedstøtten er multijusterbar med formet pude. Leveres komplet.
Materiale pude: Polyurethan
Materiale monteringsstang: Rustfrit stål.



Komfort kit

Varenr. 80209457
Inkluderer både komfortsæde med standard-åbning på 18 cm og komfortryglæn.



Komfort rygovertræk

Varenr. 80209455
Blød ryg med integrerede armlænsputer. Giver en varm og blød støtte. Håndtaget på armlænet dækkes ikke af overtrækket for bedre greb, når bruger skal rejse sig.
Materiale: Polyethylen.



Sidestøtter

Varenr. 80209509
Blødt rygstykke med sidestøtter.
Materiale: Polyester stof, velcro, polyethylen.



XL-ryg

Varenr. 80209454
Giver mere plads til skuldre og ryg hos den større bruger. Bredden mellem armlænene Bredden mellem armlænene øges 6 cm til totalbredde 48/54/60.
(Passer ikke til Swift Mobil Tilt-2).
Materiale: Polyester, pulverlakeret stål, rustfrit stål, polypropylen.

Tilbehør



Oporet ryg

Varenr. 80209529

Passer optimalt til væghængte toiletter, da stolen kan placeres 7 cm tættere på væggen sammenlignet med en standard ryg. (Passer ikke til Swift Mobil Tilt-2).
Materiale: Samme som ved XL-ryggen.



Lås til armlæn

Varenr. 80209445


Låsefunktion til armlæn fastlåser armlænet i enten op- eller nedslået position.
Materiale: Rustfrit stål.



Fast ryg, aftørbar

Varenr. 80209530

Justerbar i højden og let fleksibel i den nederste del. Nem at rengøre, vedligeholde og montere.
Materiale: Polypropylen.

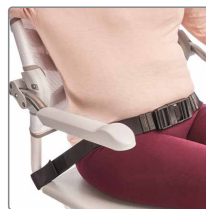

Hoftebælte

Varenr. 80209440

Nem at justere med plastikspændet. Monteres omkring rygrørerne med velcrostropper.
Materiale: Polyester



Tværlås

Varenr. 80303034 (60,5 cm)

Varenr. 80209452 (66,5 cm)

Fastgøres til armlænene.
Materiale: Aluminium, polyethylen.



Brystbælte

Varenr. 80209442

Let at justere. Fastgøres omkring stropperne på rygstøttepolsstringen. Samtidig brug af hoftebælte anbefales.
Materiale: Polyester.



Blød rygpude

Varenr. 80209448

Giver brugeren varme og blødhed. Denne rygpude fastgøres ikke på armlænene, så disse fortsat kan slås op for at give god plads til sideværts forflytning.
Materiale: Polyethylen.



Hofte-/brystbælte (polstret)

Varenr. 80209524

Todelt bælte, der kan bruges enten som hofte- eller brystbælte. Justerbart med 3 spænder, længde 65-130 cm. Materialet er behageligt og hurtigtørrende.



Urinfanger

Varenr. 80209430

En blød urinfanger, som er nem at montere og afmontere.
Materiale: Polyurethan.



Spand med håndtag og låg

Varenr. 80209265

Traditionel spand som benyttes med ovenstående spandeholder.
Materiale: Polypropylen.



Armlænsputer

Varenr. 80209508


Armlænsputerne udgør et varmt og blødt underlag og støtte for armene. Håndtaget på armlænet dækkes ikke af puderne for bedre greb, når bruger skal rejse sig. Sælges parvis.
Materiale: Polyethylen.



Spandeholder

Varenr. 80209258

Benyttes ved montering af spand eller bækken med høj kant. Der skal benyttes monteringsbeslag, som bestilles separat.
Materiale: Polypropylen.

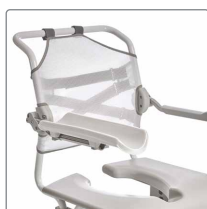

Hemiplegiarmlæn

Varenr. 80209035

Den konturerede form giver støtte til brugerens underarm. Varmereflekterende materiale. Passer både til venstre og højre armlæn.
Materiale: Polyethylen.



Bækken med låg og håndtag

Varenr. 80209255

Designet form, der modvirker stænk. Låget har et håndtag, der låses fast på bækkenet og sikrer, at indholdet ikke spilder.
Materiale: Polypropylen.

Tilbehør



Bækken

Varenr. 80209254 (Bækken uden låg)
Varenr. 80209256 (låg med håndtag)
Designet form, der modvirker stænk. Låget har et håndtag, der låses fast på bækkenet og sikrer, at indholdet ikke spilder.
Materiale: Polypropylen.



Bækkenholder

Varenr. 80209257
Passer til Etac bækken og andre traditionelle hospitalsbækkener. Monteringsbeslag bestilles separat, se nedenfor.
Materiale: Polypropylen.



Monteringsbeslag

Varenr. 80209435
Monteres under sædet, hvilket gør det muligt at montere spande- og bækkenholder.
Monteres med skruetrækker. Komplet sæt.
Materiale: Polyamid.




Lav montering af bækken

Varenr. 80209259
Med denne adapter placeres bækkenholderen 6 cm lavere under sædet.
Monteres med bækken- eller spandeholder og monteringsbeslag.
Materiale: Polypropylen.



Bækkenlås

80209049
Holder bækkenet på plads, når stolens tilt-funktion benyttes. Passer til Swift Mobil Tilt-2.
Material: Polypropylen

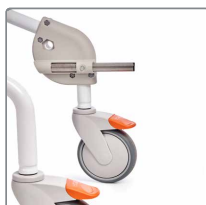

Trædestang

Varenr. 80209449
Letter færden over f.eks. dørtrin eller ramper.
Leveres komplet med beslag.
Materiale: Polypropylen og Aluminium.



Tipsikring Swift Mobil Tilt-2

Varenr. 80209459
Minimerer risikoen for at stolen tipper bagover. Anbefales især når tyngdepunktet er bagest i stolen, f.eks. ved benamputation.
Materiale: Polypropylen og Aluminium.



Tipsikring Swift Mobil-2

Varenr. 80209439 (inkl. fæste)
Varenr. 80209438 (ekskl. fæste)
Minimerer risikoen for at stolen tipper bagover.
Materiale: Polypropylen og Aluminium.



Tipsikring, fremadvendt

Varenr. 80209526
Tages i brug, hvis der er stor vægtbelastning foran på stolen. F.eks. ved bruger med ben lagt i gibs etc.



Hælremme

Varenr. 80209522
Monteres på fodpladerne. Forhindrer fødderne i at glide bagud. Kan reguleres i længden. Leveres som par.



Korte fodstøtter

Varenr. 80209520
En kort fodstøtte der kan svinges til siden. Fodpladen har en afrundet form. Leveres som par.
Materiale: Rustfrit stål og Polypropylen.



Opklappelige fodstøtter

Varenr. 80209446
Justerbar for de brugere der har brug for en mere åben fodvinkel. Hælstropper kan monteres (bestilles separat). Leveres som par.
Materiale: Rustfrit stål og Polypropylen.



Ben- og lægstøtte

Varenr. 80209437
Vinkelregulerbar ben- og lægstøtte, der passer både til højre og venstre side. Kan indstilles i fire vinkel positioner. Leveres stykvis. Materiale: Rustfrit stål og ABS-plastik.



Betræk til ben- og lægstøtte

Varenr. 80209535
Med polstring der giver en blødere og mere behagelig overflade til benet.
Består af to dele: en indvendig polstret og vandtæt del og en ydre del med en overflade, der er let at tørre af.

Tilbehør



Fodplade til ben- og lægstøtte

Varenr. 80209443

Kit med separat fodplade, som kan monteres sammen med ovenstående ben- og lægstøtte. Materiale: ABS plastik.



Kit for øget afstand ml. benstøtter

Varenr. 80209525

Øger afstand mellem benstøtterne med 12 cm. Er monteret som standard på Swift Mobil-2 XL og Swift Mobil Tilt-2 XL.



Amputationsbenstøtte

Varenr. 80209510

Justerbar i højde, længde og vinkel. Kan monteres i både højre eller venstre side. Er brugeren benamputeret, anbefales tipsikring. Materiale: Rustfrit stål og polyurethan.



Drivhjulskit 24"

Varenr. 80209436

Med inbyggede fæster for tipsikring. 24" drivhjul med massive dæk inkl. fæste og bremse. Nemt at montere. Materiale: Polyamid, Rustfrit stål, Polyurethan og Aluminium.



Vaskeinstruktioner

Komfortsæder, Blødt sæde uden åbning, Hovedstøtte, Lås til armlæn, Urinfanger, Bækken, Bækkenholder, Monteringsbeslag, Lav montering af bækken, Spandeholder, Spand, Tipsikring, Trædestang, Fodstøtter, Ben- og lægstøtte, Amputationsbenstøtte, Drivhjulskit 24"



Ryglæn, Hofte-/brystbælte (polstret), Hoftebælte, Brystbælte, Hælstropper



Bløde sædepuder, Komfort rygovertæk, Blød rygpude, Armlænsputer, Hemiplegiarmlæn, Tværlås



Vaskesymboler



Maskinvask - max. temperatur 60 °C



Autoklave ved max. 85 °C i 3 minutter



Aftørring med en ren klud




Rengør / desinficer produktet med et standard-rengøringsmiddel uden slibemiddel med en pH-værdi mellem 5 og 9, eller med en 70 % desinfektionsopløsning.




Ingen rens

Mål

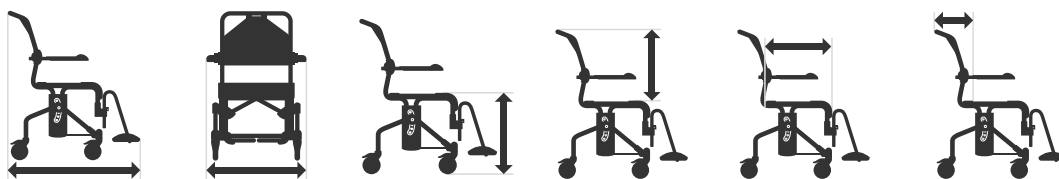

Model	Længde	Bredde	Sædehøjde	Ryghøjde	Sædedybde	Ryglænsdybde
Swift Mobil-2	93 cm	57/58/64 cm	45 / 60 cm	50 cm	46,5cm	21 cm
Swift Mobil-2 XL	93 cm	61/64/70 cm	45 / 60 cm	50 cm	46,5cm	21 cm
Swift Mobil 24"-2	106 cm	74 cm	45 / 60 cm	50 cm	46,5cm	21 cm
Swift Mobil Tilt-2	102 cm	57/58/64 cm	50 / 65 cm	55 cm	46,5cm	25 cm
Swift Mobil Tilt-2 XL	102 cm	61/64/70 cm	50 / 65 cm	55 cm	46,5cm	25 cm

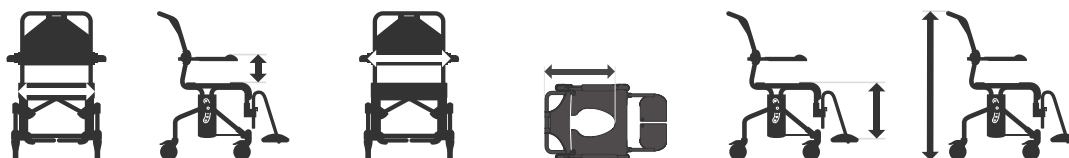

Model	Sædebredde	Armlænshøjde	Bredde ml. armlæn	Dybde mod væg	Underbenslængde	Højde
Swift Mobil-2	50 cm	22/25/28 cm	42/48/54 cm	54 cm (47 cm*)	34 / 46,5 cm	95-110 cm
Swift Mobil-2 XL	50 cm	22/25/28 cm	48/54/60 cm	54 cm	34 / 46,5 cm	95-110 cm
Swift Mobil 24"-2	50 cm	22/25/28 cm	42/48/54 cm	67 cm	34 / 46,5 cm	95-110 cm
Swift Mobil Tilt-2	50 cm	22/25/28 cm	42/48/54 cm	60 cm	34 / 46,5 cm	100-115 cm
Swift Mobil Tilt-2 XL	50 cm	22/25/28 cm	48/54/60 cm	60 cm	34 / 46,5 cm	100-115 cm

* Opret ryg, varenr. 80229489. Swift Mobil-2 og Swift Mobil-2 med opret ryg har herudover samme mål.





Version 4 - 2024 - Forbehold for trykfejl og evt. ændringer

Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering. Siden 1973 har vi arbejdet engageret for at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder og produktinformationer på www.etac.dk

Etac A/S

+45 79 68 58 33

info@etac.dk

www.etac.dk

etac®
Creating Possibilities