



R82<sup>®</sup>

# R82 Toucan

Ett ståstöd som ökar livskvaliteten.

# R82 Toucan

Toucan är ett väl designat och funktionellt ståstöd anpassat för magstående. Vinkeln i stående ställning kan enkelt och steglöst justeras med barnet stående i sin Toucan.

## Optimalt ståstöd

Toucan är uppbyggd runt ett centerstag, vilket gör att alla tillhörande stöd är steglöst höjjusterbara. Bröstplatta, sidostöd och knästöd är dessutom lätta att ställa in på bredden, vilket gör det enkelt att anpassa efter det enskilda barnets behov. I Toucan står barnet nästan i golvhöjd, vilket medför att barnet är i ögonhöjd med sin omgivning. Det breda tillbehörsprogrammet ger möjlighet till optimala anpassningar för varje barns individuella behov.

Det är även enkelt att flytta barnet från en rullstol till ståstödet vilket är en mycket god egenskap som gynnar både barnet och vårdaren.

## Vinkling av centerstaget

Centerstaget på Toucan kan vinklas steglöst, vilket gör det möjligt att anpassa vinkeln efter det enskilda barnets behov och möjligheter. Vinklingsystemet är mycket lätt att använda – även med barnet placerat i ståstödet.



Toucan storlek 1 röd



Toucan storlek 3 blå

### Ståstöd Toucan

	Art. nr
Stl 1 - röd	31861001-1S
Stl 2 - blå	31861002-2S
Stl 3 - blå	31861003-3S
Stl 4 - silver	31861004-3S
Stl 5 - silver	31861005-3S

### Material

Chassi: Aluminiumrör. Stoppning: Svart PUR (Polyuretan)

### Bröststöd

Multijusterbar, inkl. ryggrem

### Hjul

Punkteringsfria säkerhetsjul: skaterjul, transparent

### Fotplatta

Höjd- och vinkeljusterbar

### Chassifärger



Stl 1 - Röd

Stl 2-3 - Blå

Stl 4 och 5 - Silver

## Detaljer



### Enkel justering av centerstag

Enkel och stabil justering av vinkeln är en förutsättning för en bra ståposition.



### Hjul med lås

Alla fyra hjul har lås vilket för Toucan stabilt.



### Handtag med lås

Handtaget för att vinkla Toucans centerstag är utrustat med ett säkerhetslås.






### Flexibelt tillbehörsprogram

Alla storlekar av Toucan kan utrustas med alla storlekar av tillbehör.

## Mått och vikt

Mått	Storlek 1	Storlek 2	Storlek 3	Storlek 4	Storlek 5
Bredd underrede (G)	560 mm	630 mm	630 mm	700 mm	700 mm
Längd (H)	750 mm	880 mm	880 mm	1110 mm	1110 mm
Total höjd (I1*)	670-870 mm	720-1010 mm	970-1230 mm	1040-1340 mm	1240-1540 mm
Höjd från fotplatta till bröst (I2*)	340-700 mm	540-900 mm	740-1100 mm	910-1210 mm	1110-1410 mm
Höjd från golv till fotplatta	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Vinkling av centerstag (a1)	0 - +30°	0 - +30°	0 - +30°	0 - +20°	0 - +20°
Vinkling av fotplattan (a2)	+15° - -10°	+15° - -10°	+15° - -10°	+15° - -10°	+15° - -10°
Längd centerstag	450 mm	500 mm	700 mm	800 mm	1000 mm
Vikt	7.5 kg	8.5 kg	9 kg	10.5 kg	10.75 kg
Max brukar-/lastvikt	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg

\*Toucan mäts i stående position med fotplattan inställd i lägsta läge. För mindre barn är det möjligt att höja fotplattan.

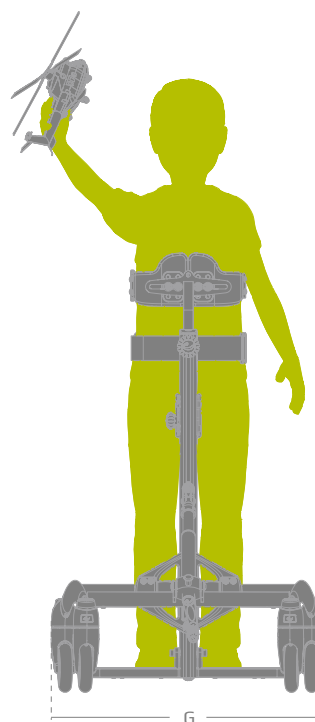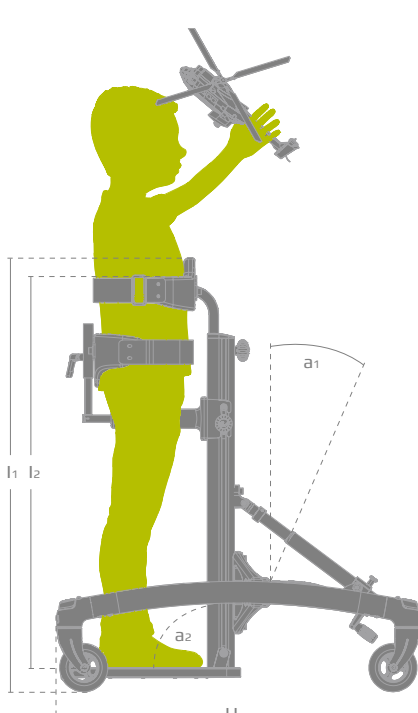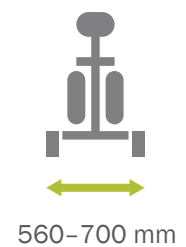


## Tillbehör



### Andfötter

Både för mag- och ryggstående. Par.

Stl 0	17.5 cm (L)	3186149
Stl 1-2	21.5 cm (L)	3186147
Stl 3	24 cm (L)	3186148

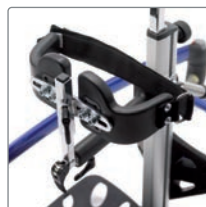

### Sidostöd, bakre

För ytterligare stöd och stabilitet.

	HxBxD	
Stl 1	11x15.5x7.5 cm	31861501
Stl 2-3	11x20-27x7.5 cm	31861502
Stl 4-5	25-32x16x10.5 cm	31861503



### Knästöd

Formbart stöd för exakt passform.

Stl 1	6x6 cm (BxH)	31861301
Stl 2-3	8x7 cm (BxH)	31861302
Stl 4-5	10x7 cm (BxH)	31861303



### Höftstöd

För ytterligare stöd och stabilitet.

	Ø, H	
Small	47-64, 8.5 cm	31861610
Medium	67-78, 11 cm	31861620
Large	87-114, 14 cm	31861630



### Ryggstöd

Stabiliserar bäckenet för korrekt position.

One size	13x19 cm (HxB)	31861401
----------	----------------	----------



### Bord med leklåda och bricka, plast

Kan kompletteras med armstöd och lekbåge.

Stl 1	31861121
Stl 2	31861122
Stl 3	31861123
Stl 4	31861124
Stl 5	31861125

För fler tillbehör - besök [etac.se](http://etac.se)



För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation - besök [www.etac.se](http://www.etac.se)

Etac Sverige AB

☎ 0371-58 73 00

✉ [info@etac.se](mailto:info@etac.se)

🌐 [www.etac.se](http://www.etac.se)

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities