



R82 Toucan

Ståstøtte til alle aldre, stabil og let indstillelig.

Toucan er designet til at støtte brugeren frontstående fra lodret op til 30° fremadvippet. Dette indstilles nemt ved hjælp af drejehåndtaget foran på stellet.

Toucan er opbygget på en centerstamme, således at alle støtter indstilles trinløst i højden. Bryststøtte, hoftestøtte og knæstøtte er desuden let indstillelige i bredden, hvilket gør det muligt at tilpasse Toucan nøjagtigt til brugeren.

Stellets design betyder, at brugeren kan flyttes direkte ind i Toucan fra eksempelvis en kørestol.

Toucan passer til brugere fra ca. 1 år og opefter.



R82 




Klargjort til tilbehør

Med riller i centerstammen, for let montage.




Vinkling af centerstammen

Kan vinkles trinløst efter den enkelte brugers muligheder og behov.

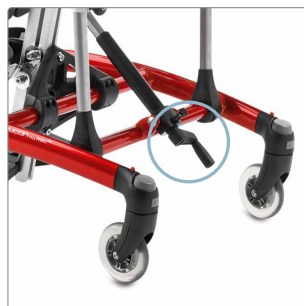

Håndtag med lås

Håndtaget til vinkling af centerstammen er udstyret med en sikkerheds-lås.

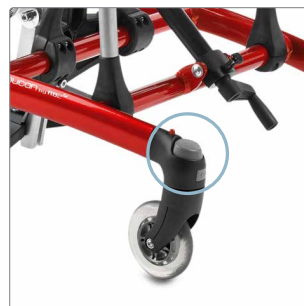

Hjul med låse

Alle fire hjul er udstyret med låse for at sikre stabiliteten.

Toucan

Toucan har et bredt tilbehørsprogram, der kan skabe optimale muligheder for den enkelte bruger. Todelte knæstøtter, flip op fodplader og rotationshøftestøtte er blandt tilbehøret.

Toucan leveres i 5 størrelser.




Scan for
produktinfo
og tilbehør



Bestilling og mål

Toucan		Str. 1 (Rød)	Str. 2 (Blå)	Str. 3 (Blå)	Str. 4 (Sølv)	Str. 5 (Sølv)
Standard (alle str.) indeholder		Stel og centerstamme.				
Varenr.		31861001	31861002	31861003	31861004	31861005
HMI-nr.		44861	44862	44864	44863	44865
 Total bredde		560 mm	630 mm	630 mm	700 mm	700 mm
 Længde		750 mm	880 mm	880 mm	1110 mm	1110 mm
 Total højde		670-870 mm	720-1010 mm	970-1230 mm	1040-1340 mm	1240-1540 mm
 Brugerhøjde, gulv til axil		340-700 mm	540-900 mm	740-1100 mm	910-1210 mm	1110-1410 mm
 Længde, centerstamme		450 mm	500 mm	700 mm	800 mm	1000 mm
 Højde fra gulv til fodplade		60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
 Vinkling af centerstamme		0 til +30°	0 til +30°	0 til +30°	0 til +20°	0 til +20°
 Vinkling af fodpladen		+15° til -10°	+15° til -10°	+15° til -10°	+15° til -10°	+15° til -10°
 Total vægt		7,5 kg	8,5 kg	9 kg	10,5 kg	10,75 kg
 Max. brugervægt		30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg
 Max. nominel belastning		39,5 kg	50,5 kg	61 kg	72,5 kg	82,75 kg
 Statisk stabilitet, opad/sidelæns		5 °	5 °	5 °	5 °	5 °

Stelfarve rød
Toucan str. 1

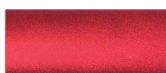

Stelfarve blå
Toucan str. 2+3



Stelfarve sølv
Toucan str. 4+5

