

etac[®]

Creating Possibilities



molift[®]

Molift Transfer Pro

Forflytningsplatform til siddende forflytninger og styrket mobilitet

Molift Transfer Pro

En forflytning er mere end blot en bevægelse - den er en vigtig del af brugerens genoptræning og er med til at holde brugerens fysiske evner vedlige. Transfer Pro bidrager til et sikkert og sundt plejemiljø for både bruger og hjælper.

Optimeret til siddende forflytninger

Transfer Pro er en sit-to-stand forflytningsplatform til siddende forflytninger mellem seng, kørestol, toilet eller lignende.

Brugeren skal være i stand til at følge instruktioner, kunne løfte egen vægt og opretholde en god stabilitet i truncus.

Transfer Pro passer ideelt til forskellige plejemiljøer såsom hospitaler, plejehjem og private hjem.


Høj komfort og sikkerhed gennem innovativt design

Med et ergonomisk og stort håndtag har både brugeren og hjælperen mulighed for at benytte flere greb. Det giver også nem adgang til håndvasken, når der skal vaskes hænder. Begge dele er med til at sikre brugervenligheden.

De stabile sædeplader giver en behagelig og sikker forflytning, mens den bløde polstrede benstøtte tilpasser sig skinnebenene og giver høj brugerkomfort.

Fodpladen har en lav indstigningshøjde og en vinklet kant, der gør det let for brugeren at træde op og har en skridsikker overflade. Hjælperen kan let justere bredden på benene, og designet gør det muligt at få forflytningsplatformen tæt på sideområdet. Det giver en sikker forflytning. Du kan både høre og se, når den centrale bremse, der samtidigt låser begge hjul rettet mod hjælperen, aktiveres og deaktiveres.

På siden af håndtaget er der fastgørelsespunkter til diverse tilbehør.

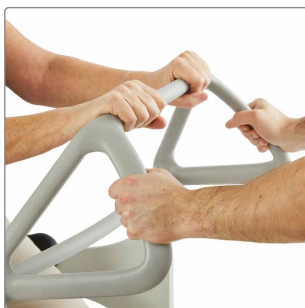


Dynamisk håndtag

Håndtaget er udformet så både brugeren og hjælperen kan holde på flere forskellige måder, hvilket sikrer komfort og ergonomi.



Intuitiv centralbremse

Intuitiv centralbremse låser begge hjul ved hjælperen samtidigt uanset deres placering. Du kan betjene den med kun én fod og tydeligt høre og se låsen slå til og fra.

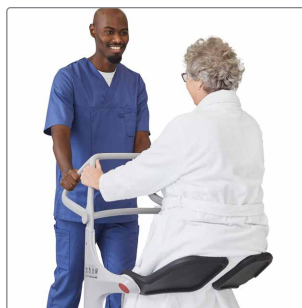

Sædeplade

Stabile sædeplader giver brugeren en behagelig forflytning. De forhøjede kanter giver et godt greb, og gør det nemt for hjælperen at klappe pladerne ned og op.



Stor manøvrerdygtighed

Hjul af høj kvalitet gør det usædvanligt nemt at manøvrere. Dermed skal du bruge minimal kraft for at skubbe/trække forflytningsplatformen.

Kliniske fordele:

- Reducerer arbejdsrelaterede skader eller belastninger.
- Muliggør tidlig genoptræning.
- Komfortable og sikre siddende forflytninger.
- Støtter brugeren i at bruge deres fysiske evner.
- Gør det muligt at udføre plejen med én hånd.

Naturligt bevægemønster

Et naturligt bevægemønster refererer til den måde mennesker naturligt bevæger deres kroppe under aktiviteter i dagligdagen.

Disse naturlige bevægelsesmønstre er en del af menneskets fysiologi og er blevet formet af evolutionen for at lette aktiviteter som at rejse sig op og sætte sig ned.

Transfer Pro understøtter det naturlige bevæge. Brugeren kan placere fødderne under sig og benytte håndtaget til at læne sig frem, når han/hun rejser sig.



Scan QR-koden for at se en video og lære mere om Transfer Pro.

Produkt	HMI-Nr.	Varenummer	Specifikationer
Molift Transfer Pro	140146	16090300	Højde 1179 mm Længde 920 mm Bredde 669 mm Fodplade - højde 56 mm Drejeradius med åbne/lukkede ben 1030/1146 mm
Brugerhøjde		1490-2000 mm	
Minimum - Maksimum			
Vægt			
Total vægt		28.2 kg	
Max brugervægt (SWL)		200 kg	
Materiale			
Pulverlakeret aluminium, plast, stål, polyuretanskum.			
			Rengør / desinficer produktet med et standard ikke-slibende rengøringsmiddel med en pH-værdi mellem 5 og 9 eller med en 70% desinfektionsopløsning.


Tilbehør



Bløde oprejsningshåndtag

Til hjælp for brugeren, der har svært ved at nå håndtaget. 2 stk.

Bløde oprejsningshåndtag.....82511

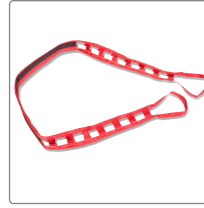

Molift Assist Strap

En oprejsningsstøtte (tryghedsbånd), der giver ekstra støtte og tryghed. Fås i to størrelser.

Molift Assist Strap str. S/M 82508

Molift Assist str. L/XL 82509




Molift Assist Sleeve

En oprejsningsstøtte (tryghedsbånd) med glidemuffe der støtter, når brugeren skal rejse/sætte sig ved en forflytning.

Molift Assist Sleeve str. S/M 82528

Molift Assist Sleeve str. L/XL 82529

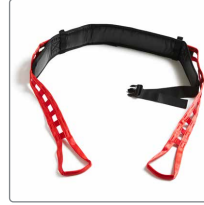

Molift Assist Belt

En oprejsningsstøtte (tryghedsbånd) med glidemuffe og et bælte med låsespænde, der støtter, når brugeren skal rejse/sætte sig ved en forflytning.

Molift Assist str. S/M 82964

Molift Assist str. L/XL 82965



Molift Assist Sleeve Bred

En oprejsningsstøtte (tryghedsbånd) i størrelse L/XL med fast glidemuffe der støtter, når brugeren skal rejse/sætte sig ved en forflytning.

Molift Assist Sleeve Bred 90301



Dropstativ, Transfer Pro

Højdejusterbart dropstativ.

Dropstativ1630030



Iltflaskeholder, Transfer Pro

Til sikker opbevaring og transport af iltflasker.

Iltflaskeholder1630040

Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering.

Siden 1973 har vi arbejdet engageret for at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder og produktinformationer på www.etac.dk

Etac A/S

+45 79 68 58 33

info@etac.dk

www.etac.dk

etac[®]
Creating Possibilities