



R82 Wombat Living

Funktionell arbetsstol för barn
i förskola, skola och hemmet.

 **etac**®

R82 Wombat Living

R82 Wombat Living är en smart arbetsstol för barn i förskola, skolbarn, tonåringar och övergången till vuxen. Den har ett modernt utseende som passar in i alla inomhusmiljöer.

En arbetsstol för aktivitet

R82 Wombat Living passar för aktiviteter såsom läsning och lärande i skolan, ha kul med vänner och hjälpa till med sysslor hemma. Stolen ger barnet stor rörelsefrihet samtidigt som det nödvändiga stödet säkrar en bra sittställning.

Arbetsstolen är höjdjusterbar från golvhöjd till bordshöjd med gaskolv eller el.

Tilt-funktionen framåt gör det enkelt att flytta över till arbetsstolen och få en aktiv sittställning. Ryggstödet ställs in manuellt i djup, höjd och vinkel.

R82 Wombat Living finns med standard rygg och hög rygg och med olika alternativ av dynor för att passa specifika behov. Den höga ryggen kan kompletteras med bäckenstöd, se tillbehör. Sitsvinkeln ställs in manuellt och steglöst med hjälp av en gaskolv.

wombat
LIVING



R82 Wombat Living
utrustad med dynor

Wombat Living

Art.nr.

- gaskolv, centralbroms, standard rygg, stl 1	31951232-00
- gaskolv, centralbroms, standard rygg, stl 2	31952232-00
- gaskolv, centralbroms, standard rygg, stl 3	31953232-00
- gaskolv, centralbroms, hög rygg, stl 1	31955232-00
- gaskolv, centralbroms, hög rygg, stl 2	31956232-00
- gaskolv, centralbroms, hög rygg, stl 3	31957232-00
- el, centralbroms, standard rygg, stl 1	31951236-00
- el, centralbroms, standard rygg, stl 2	31952236-00
- el, centralbroms, standard rygg, stl 3	31953236-00
- el, centralbroms, hög rygg, stl 1	31955236-00
- el, centralbroms, hög rygg, stl 2	31956236-00
- el, centralbroms, hög rygg, stl 3	31957236-00

I Sverige marknadsförs Wombat Living med grått underrede.

Obs! Dynor ingår inte som standard utan beställs separat. Se Tillbehör.

Chassi

Pulverlackat stål, höjdinställbart, grå färg

Broms

Centralbroms

Hjul

100 mm hjul låsbara

Rygg

Standard eller hög. Höjdinställbar och vinkeljusterbar. Exkl ryggdyna.

Sits

ABS plast, vinkeljusterbar. Exkl sittdyna.

Körbygel

Sitsmonterad inkl reglage sitstilt

Fotplatta

Avtagbar, höjd- och vinkeljusterbar, uppfällbar




Detaljer




Tiltning – Tilt in space

Sitsen kan enkelt tiltas med reglage på körbygeln, från -15° till +20° för både aktiv och passiv sittställning.

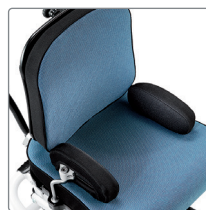

Väx med stolen

Wombat Living erbjuder steglösa justeringar vilket gör det möjligt för användaren att växa med stolen. Flytta ryggstödet framåt eller bakåt och justera höftstöden (tillbehör) för att anpassa sittbredden.

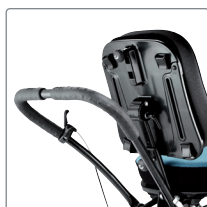

Vinkeljusterbar körbygel

Körbygeln kan vinklas i önskat läge och används för att köra stolen. Tiltreglaget är monterat på körbygeln.



Hög rygg

Wombat Living finns även i utförande med högre rygg. Denna rygg kan kombineras med bäckstöd för stabilt sittande.

Det handlar inte bara om att sitta

Om du ställer samma krav på god sittkomfort som vi gör, är Wombat Living en stol för dig!

Wombat Living levereras utan dynor, vilket ger möjlighet att välja den dyna som passar varje användare. Välj mellan standarddyna som ger god komfort och ett bekvämt sittande eller formade dynor för ytterligare komfort och stöd. Komplettera din stol med ett svankstöd, som ger extra stöd för ryggen.

Dynorna är gjorda av tjockt bekvämt skum med luftgenomsläppligt överdrag. Sittdynan har extra hållbara kanter och en form som skyddar användarens knäveck.

När man sitter ska man sitta skönt – därför är Wombat Living ett självklart val!



R82 Wombat Living med formade dynor.



Var aktiv och luta dig fram

Wombat Living kan tiltas från -15 gr framåt. Vid stöd för fötterna underlättas förflyttning i och ur arbetsstolen.

För många användare hjälper den aktiva positionen att bibehålla en korrekt sits, vilket gör det möjligt att vara ännu mer aktiv. Dessutom har studier visat att en framåtlutad aktiv position avlastar och minskar belastningen på ryggmuskulaturen.



Nå nya höjder

Wombat Living är justerbar från en sitthöjd på 39 cm upp till 70 cm ovanför golvet. Höjden justeras manuellt med en pedal placerad baktill på chassit, alternativt med el, via handkontroll.

Den vinkelreglerbara körbygeln underlättar vid höjjustering och tiltning.





Egenskaper och funktioner

- Bekväma dynor med extra hållbara kanter.
- Ryggen kan skjutas fram eller bak och anpassa sitsdjupet individuellt.
- Sitsmonterad vrb körbygel med tiltreglage för snabb och enkel tilt.
- Många möjligheter att montera västar och bälten.
- Förberett för montering av flera tillbehör, ex: bålstöd, höftstöd, huvudstöd mm.
- Höjdjusterbat chassi för enkel förflyttning.
- Fotstöd justerbart i höjd, djup och vinkel.
- Lättrullade låsbara 100 mm hjul.

R82 Wombat Living med gaskolv, utrustad med tillbehör.



Mått och vikt

Mått	Storlek 1.	Storlek 2	Storlek 3
Sitsbredd (A)	30 cm	37 cm	42 cm
Sitsbredd mellan höftstöd (tillbehör)	10.5-30 cm	17-37 cm	21.5-42 cm
Sitsbredd bäckenstöd med sidor (tillbehör)	17-24 cm	23-30 cm	29-36 cm
Bredd bäckenstöd utan sidor (tillbehör)	24 cm	24 cm	29 cm
Sitsdjup (B)	18-31 cm	25-38 cm	32-50 cm
Rygghöjd, standard rygg (C)	28-34 cm	31-38 cm	39-50 cm
Rygghöjd, hög rygg (C)	36-43 cm	39.5-46 cm	46-57.5 cm
Underbenslängd (D)	15-25 cm	15-35 cm	15-44 cm
Sitshöjd över golvet, 100 mm hjul (E)	39-68 cm	39-68 cm	42-70 cm
Bredd bak, standard dyna (F)	25 cm	30 cm	35 cm
Bredd bak, formad dyna, mellan bälstöd (tillbehör) (F)	17 cm	23 cm	27 cm
Armstödshöjd	6.5-17.5 cm	6.5-17.5 cm	6.5-17.5 cm
Armstödshöjd, långt stag och dyna	6.5-26.5 cm	6.5-26.5 cm	6.5-26.5 cm
Ryggvinkel (a1)	90° - 118°	90° - 118°	90° - 133°
Sitsvinkel (a2)	-15° - 20°	-15° - 20°	-10° - 22°
Vinkel, stag fotplatta (a3)	-30° - 30°	-30° - 30°	-30° - 30°
Totalbredd (G)	55 cm	55 cm	61 cm
Underredets längd (H)	60 cm	60 cm	72 cm
Max brukar-/lastvikt	45 kg	45 kg	70 kg
Vikt	15.5 kg	15.5 kg	22 kg



30-42 cm





18-50 cm



28-57.5 cm



max. 70 kg

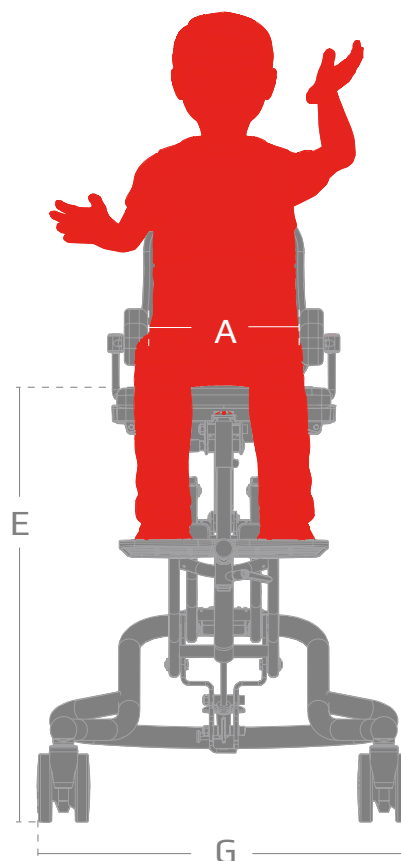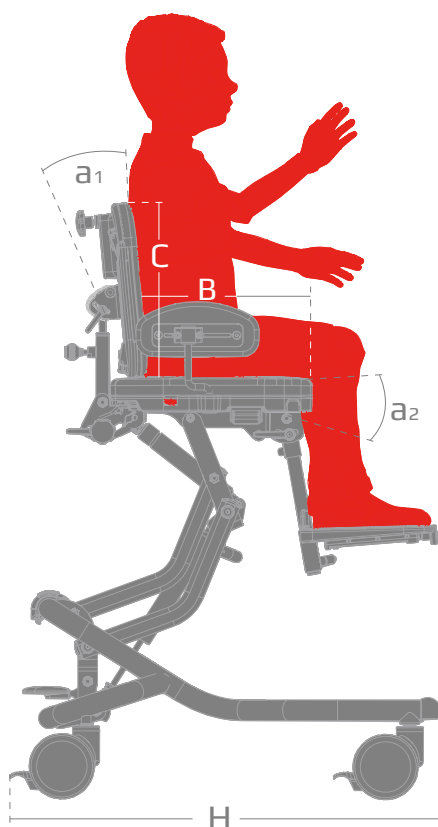

Tillbehör



Dynor standard

Grå. Inkl överdrag.

Ryggdyna

Stl 1	31955031-228
Stl 2	31955032-228
Stl 3	31955033-228

Sittdyna

Stl 1	31955021-228
Stl 2	31955022-228
Stl 3	31955023-228



Dynor formade

Formad rygg- och sittdyna för ökad komfort.

Grå. Inkl överdrag.

Ryggdyna

Stl 1	31955021-238
Stl 2	31955022-238
Stl 3	31955023-238

Sittdyna

Stl 1	31955021-238
Stl 2	31955022-238
Stl 3	31955023-238



Svankstöd

Extra stöd för ryggen.

Stl 1	31955030-1
Stl 2	31955030-2
Stl 3	31955030-3



Bålstöd, fasta

För korrekt positionering och stöd.


Stl 1-2	15x11 cm (HxD)	3195121
---------	----------------	---------



Bålstöd, sidosvängbara

För korrekt positionering och stöd.

För mer info, alternativ och mått, se hemsidan www.etac.se

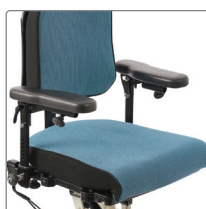

Armstöd

Ger stöd för armarna. HxBxL cm

Stl 1-2	6-18x8x26 cm	3195112-1
Stl 1-2	12-21x8x29 cm	3195113-1
Stl 3	6-18x8x26 cm	3195114
Stl 3	6-18x8x37 cm	3195115



Bord, tonad plast

Ger stöd för armarna.

Stl 1-2	60x34 cm (BxD)	3195125
Stl 3	60x46 cm (BxD)	3195126



Ryggförlängare

För extra stöd av nedre delen av ryggen.

För Wombat Living storlek 3.

Stl 3	6x27 cm (HxB)	3195140-60
-------	---------------	------------



Sittdyna formad inkl Inkontinensöverdrag

Tvättbart överdrag.


Stl 1	31955021-237
Stl 2	31955022-237
Stl 3	31955023-237



Inkontinensöverdrag sittdyna

Tvättbart.


Stl 1	31955621-282
Stl 2	31955622-282
Stl 3	31955623-282

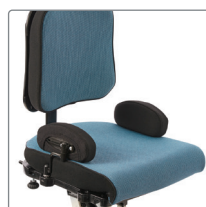

Höftstöd

För extra stöd och smalare sittbredd.


Stl 1	8x19 cm (HxB)	3195110-1
Stl 2-3	10x25 cm (HxB)	3195111-1
Överdrag stl 1, par		3195110-60
Överdrag stl 2, par		3195111-60

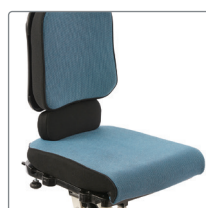

Bäckensstöd utan sidor

För extra stöd. I kombination med hög rygg.

Stl 1-2	24 cm (B)	3195140-61
Stl 3	29 cm (B)	3195140-63

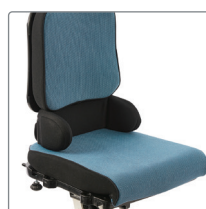

Bäckensstöd med sidor

Skapar stabilitet vid bäckenpositionering.

I kombination med höftstöden skapas ett omfattande stöd runt både bäcken och lår. I kombination med hög rygg.

Stl 1	17-24 cm (HxB)	3195140-64
Stl 2	23x30 cm (HxB)	3195140-65
Stl 3	29x36 cm (HxB)	3195140-66



“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad
produktinformation – besök: www.etac.se

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities