



R82<sup>®</sup>

# R82 x:panda

Med förbättrad funktion

# Skapad för bästa sittupplevelse

Användare, familjer och specialister över hela världen uppskattar x:pandas många konfigurationsmöjligheter samt dess funktioner och tillbehör. Ett sittersystem utvecklat för att skapa en idealisk sittposition för barn och ungdomar med motorisk funktionsnedsättning, och som ökar möjligheten att aktivt delta i lek och aktiviteter.

## Förbättrad vardag och funktion

x:panda finns i fyra storlekar och är ett multijusterbart och modulärt sittersystem som kan konfigureras för att möta olika posturala behov och följa användarens tillväxt.

Vi har utformat sitsen så att användare, familjer och specialister kan dra nytta av funktioner som nya armstöd, fixerade kilar, tydliga markeringar samt dynor och överdrag. Tillsammans med de befintliga funktionerna – som dynamisk rygg, ryggvinkling, multijusterbarhet och ett brett

utbud av tillbehör – ger detta flexibla möjligheter för optimal positionering.

När ett barn upplever god sittkomfort och ideal positionering ger det inte bara kliniska fördelar, utan främjar även färdighetsutveckling och meningsfullt deltagande tillsammans med kompisar. För föräldrar, vårdgivare och specialister underlättar x:panda dessutom vardagliga moment och hantering.



## Sittkomfort på hög nivå

För de flesta barn och ungdomar kan en bra och bekväm sittposition ha en positiv inverkan på muskeltonusen. Detta underlättar användarens förmåga att utföra rörelser med sina övre extremiteter och huvud. En rad olika funktioner har utvecklats för att skapa den bästa möjliga anpassningsbara sittpositionen enligt enskilda användares sittbehov.

### Huvudstöd

Ett brett urval av huvudstöd och tillbehör ger många möjligheter till individuellt stöd både i vila och aktivitet.

### Fasta eller sidosvängbara bålstöd

De svängbara eller fasta bålstöden väljs utifrån användarens bålkontroll och deras förmåga att utföra armrörelser. Bålstöd kan fixeras med ett snäplås för att möjliggöra daglig justering av avståndet mellan bålstöden.

### Överdrag

Hållbara överdrag med hög komfort till bålstöd, knä- och höftstöd finns också tillgängliga.

### Dynor

Dynorna består av en sitt- och ryggdyna med ett extra lager skum för mjukare komfort.

### Underreden

x:panda passar på olika underreden för användning inomhus eller utomhus. Maximal belastning på sitsen och underredet för vanlig användning och för transport finns i vår guide på hemsidan.

### Västar och bälten

x:panda är utrustad med snabbspännen på både sits och rygg, för montering av västar och bälten.

### Armstöd och överdrag

Armstödens "click and remove snap system" gör det enkelt att anpassa och ta bort armstöden. Tydlig märkning säkerställer att armstöden hamnar i samma höjd efter att de tagits bort. Överdrag finns till.

### Knästöd

Knästödet tillåter en position mellan 0 och 15 grader av abduktion i höftlederna.

### Fotplatta

Det finns ett antal olika fotplattor som kan monteras på underreden till x:panda.



Se x:panda videon

## Armstöd

Armstödet "click and remove snap system" gör det enkelt för föräldrar och vårdgivare att montera av och på armstödet i situationer där lätt tillgång till barnet behövs. Armstödet kan återställas med hjälp av minnesfunktionen. Detta säkerställer att armstödet kan återplaceras i samma höjd igen efter att ha tagits bort. Armstödet upprätthåller positionen tack vare förskjutningsknappen och ger ett stabilt stöd vid användning av bord. Med ett bord monterat får barnet lätt åtkomst till leksaker och läromedel. Armstöden kan förses med överdrag.



## Fixerade kilar

De fixerade kilarna används för att skapa en sittgrop. Utan stöd kan bäckenet tilta bakåt när användaren söker stabilitet. De fixerade kilarna är stabila och förhindrar att kilarna glider ur sin position. Kilarna hålls på plats när dynorna tas bort. Kilarna finns i åtta storlekar. För ytterligare anpassning har kilarna perforeringsmärken som gör de enkla att skära till för önskad passform.

## Tydlig märkning

x:panda kan tillgodose komplexa krav och ge användaren en pålitlig och hållbar position. För att underlätta för föräldrar, vårdgivare och specialister har x:panda tydliga markeringar på ryggstödet ut- och insida, liksom på sitsytan.



### Ryggstöd – utsida

Dessa markeringar kan användas för att återskapa rygghöjdsinställningen för lättare användning.



### Ryggstöd – utsida

Dessa markeringar anger ryggstödet storlek, samt var tillbehör som bålstöd och överarmstöd ska monteras.



### Ryggstöd – insida

Dessa markeringar anger storlek på ryggstödet och var rygghöjden skall justeras.




### Sitsyta


Sitsens tydliga markeringar underlättar justeringen av sitsens djup och bredd vid tillväxt.

## Lager av komfort

Dynorna består av två lager skum: skum i själva kudden, samt ett extra skumskikt som sys på överdraget. Detta bidrar till att säkra ett minimalt tryck samt förbättra komforten för användaren. Vid utformning av tvåskiktslösningen användes tryckmätning.

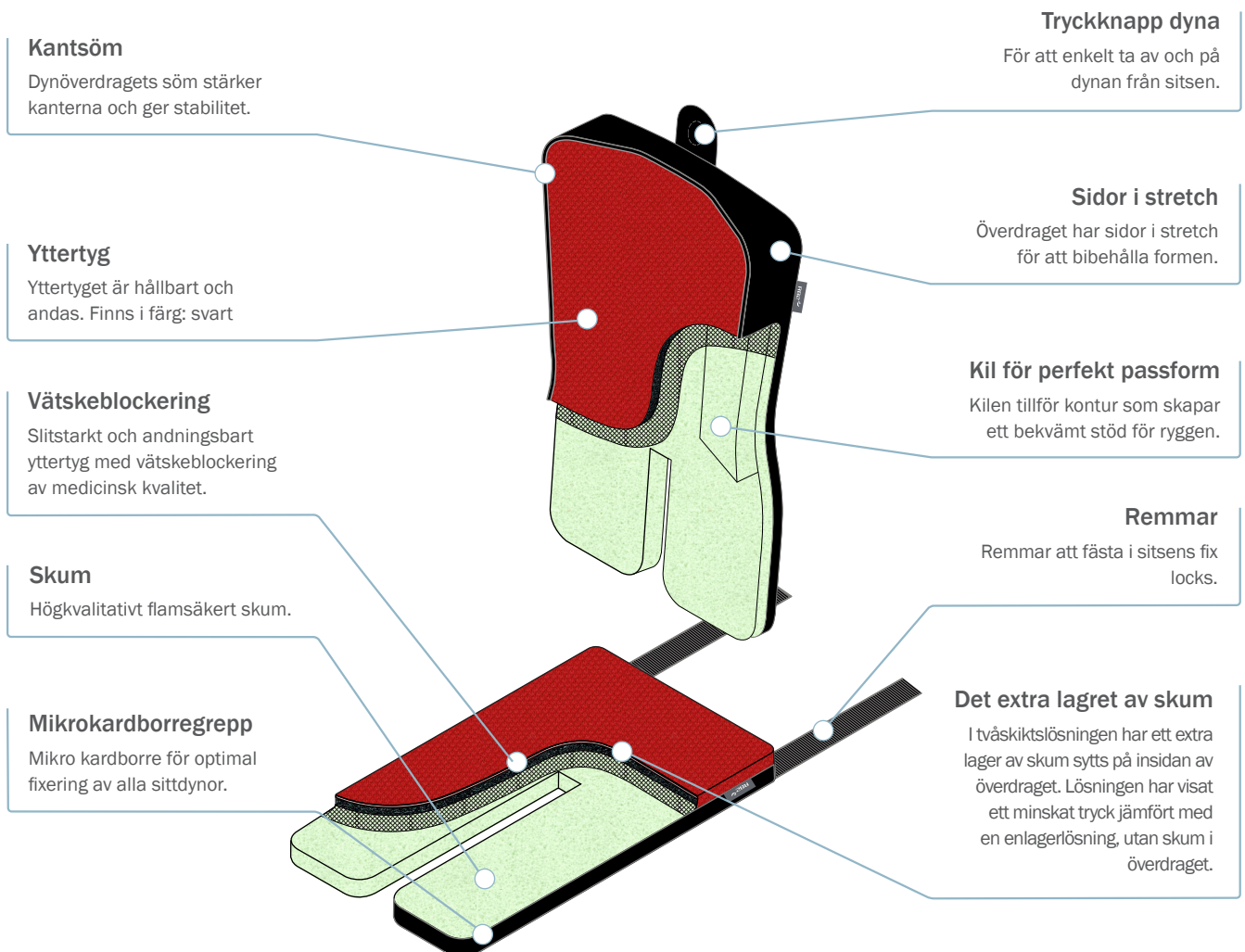

Överdrag ryggdyna

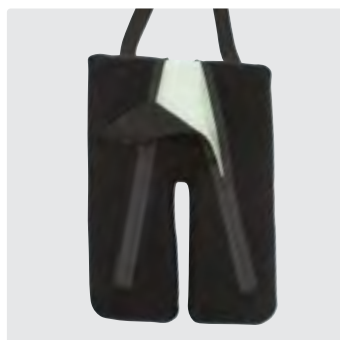

Överdrag sittdyna

### Dynor & överdrag:

- för bålstöd, knä- och höftstöd och armstöd.
- tillverkade i hållbart material med hög komfort
- är tvättbara i 60°C

## En trygg och stabil bas

x:panda skapar en stabil bas bestående av bäcken, lår och fötter, där bål, axlar och huvud balanserar. Detta möjliggör rörelser av huvud, armar och händer. Den kan tillgodose komplexa krav och ge användarens en pålitlig och varaktig positionering. Dessutom är justeringarna enkla att utföra. x:panda kan monteras på ett antal olika underredena som Multi Frame, Combi Frame:x och underredena som anges nedan.



High-low:xo



Multi Frame



Combi Frame:x



Strong Base

## Mått och vikt

x:panda mått		Storlek 1	Storlek 2	Storlek 3	Storlek 4
	Effektiv sitsbredd	160, 200, 240	200, 240, 280	260, 310, 360	340, 400, 460
	Lårbredd	70, 90, 110	100, 120, 140	120, 145, 170	130, 190, 250
	Effektivt sitsdjup	160 - 260	220 - 330	260 - 390	390 - 530
	Ryggstöds höjd	270 - 370	320 - 420	350 - 470	500 - 710
	Ryggbredd, övre del av ryggstödet	230	280	330	350 +50
	Total bredd båda benen i maximal abduktion	310, 350, 390	380, 420, 460	470, 520, 570	590, 650, 710
	Armstöd till sitsavstånd	100-165	100-165	100-165	100-165
	Armstöds främre placering	140	140	180	350
	Ryggstöds vinkel	-5° - +30°	-5° - +30°	-5° - +30°	-5° - +30°
	Abduktionsvinkel, vart ben, stl. 1 i minsta position	0° - 15° 0° - 8°	0° - 15°	0° - 15°	0° - 15°
	Vikt	6,5 kg	8,5 kg	11 kg	13 kg
	Max brukarvikt	30 kg	30 kg	60 kg	80 kg
	Max brukarvikt vid transport	30 kg	30 kg	60 kg	75 kg
	Min brukarlängd	650	850	1000	1390
	Max brukarlängd	1050	1280	1430	1800


## Tillbehör




Ryggförlängare




Huvudstöd

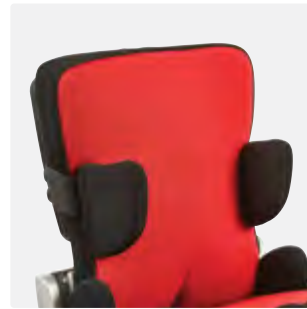


Bålstöd, fasta och  
sidosvängbara

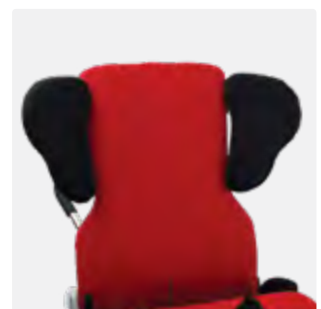


Överarmstöd, justerbara

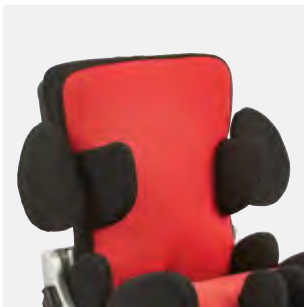

Överarmstöd till fasta bålstöd

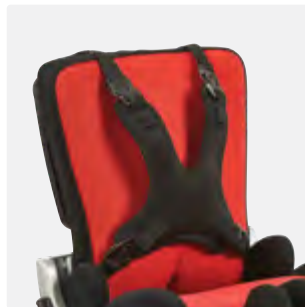

Västar och bälten

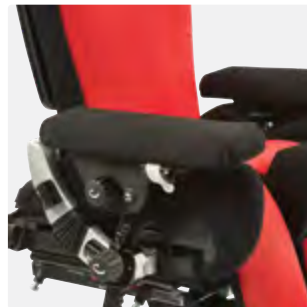

Armstöd, Överdrag armstöd




Mellandyna



Ländryggstöd



Höftstöd (endst storlek 4)

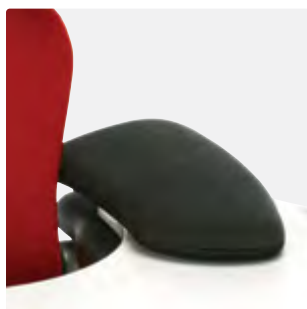

Armstöd till bord



Griphandtag för bord

För fler tillbehör - besök vår hemsida



Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök [www.etac.se](http://www.etac.se)

Etac Sverige AB

☎ 0371-58 73 00

✉ [info@etac.se](mailto:info@etac.se)

🌐 [www.etac.se](http://www.etac.se)

**etac**®  
Creating Possibilities