


Etac Prio 3A

Reservdelsslista svensk



1a17831.11 2025-01-08

Gäller Etac Prio med serienummer som börjar på 38D eller
serienummer från S/N 1003310170001

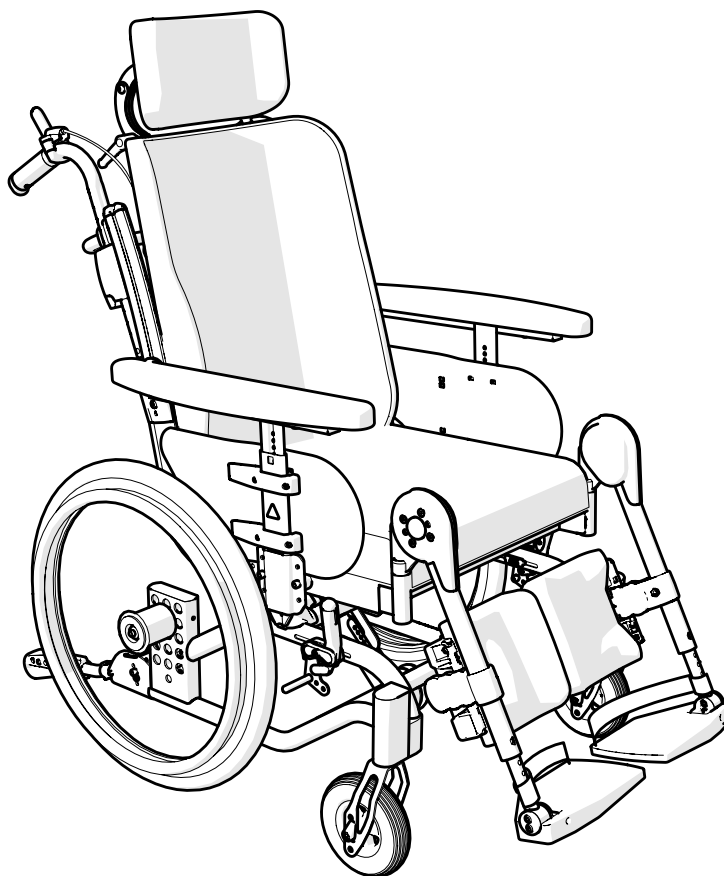

Innehåll

Innehåll	Sida
Chassi	3
Sitschassi	4
Gaskolvar, komfortlås	5
Elektrisk vinklinsfunktion	6-7
Ryggchassi	8-9
Körhandtag	10
Körbygel	11
Körbygel vinkelreglerbar	12
Benstöd	13-14
Amputationsbenstöd	15
Fotstöd	16-17
Hel fotplatta	18
Fotlåda	19
Broms	20-21
Drivhjul	22-25
Vårdarbroms	26
Däck och slang	27-28
Drivring	29-30
Länkhjul	31-32
Breddningssats	33
Hård sits	34
Armstöd	35-36
Armstöd Hemi	37
Bålstöd	38-41
Abduktionskloss	42
Bord	43
Fäste selar	44
Droppstativ	45
Korg	46
Positioneringsbälte	47
Tippskydd	48
Ekerskydd	49
Huvudstöd	50
Sittdyna	51-52
Sittdyna - klädsel	53
Ryggdyna	54
Överdrag rygg	55
Förlängning ryggklädsel	56
Ryggklädsel	57
Ryggvinkelbegränsning	58

● Möjligt val


Prio utrustad med 16" transporthjul	
Prio utrustad med vårdarbroms	
Prio utrustad med drivhjul	

Prio

Prio VB


Prio 16"

Chassi

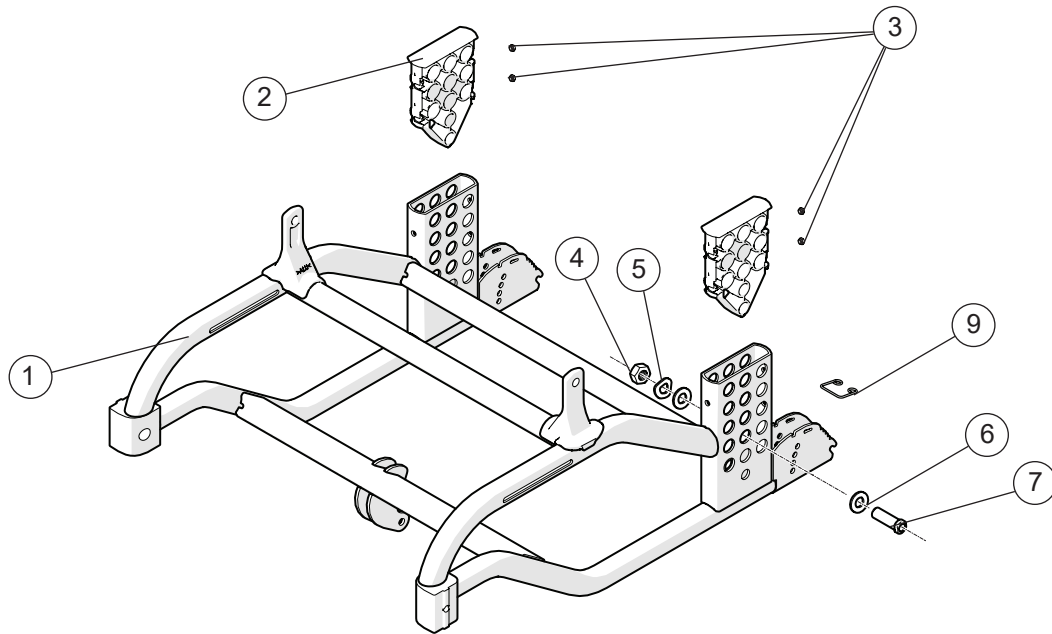


Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Chassi Prio		●	●	●
2	Lock drivhjulsfäste Prio		●	●	●
3	Fyrkantsmutter M6 DIN 557		●	●	●
4	Mutter M16x1 NV 24 B8 fzb	12052	●	●	
5	Bricka M16 fzb DIN 128 B	13039	●	●	
6	Bricka BRB 17 x 30 x 3 FZB	13117	●	●	
7	Navhylsa D12	20537	●	●	
	Navhylsa för axel D12,7x110	83893	●	●	
8	Bättringsfärg	80517-01	●	●	●
9	Trådbygel tippskydd	83142	●	●	●

Sitschassi

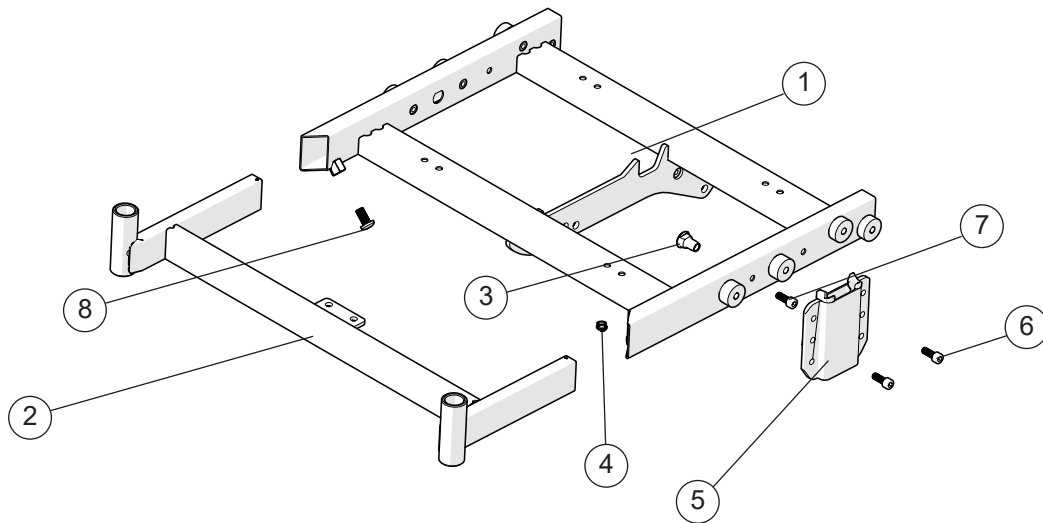

Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Sits bakre Prio		●	●	●
2	Sits främre Prio		●	●	●
3	Ledmutter sits chassi Prio	12117	●	●	●
4	Vajerfäste	50893	●	●	●
5	Armstödsfäste Prio	28514	●	●	●
6	Skruv M6	11253	●	●	●
7	Skruv M 6x 14 MC6LS SW5 Zn8/P4 sv	11700	●	●	●
8	Skruv M8x16 K6S A2	11014	●	●	●

Gaskolvar, komfortlås

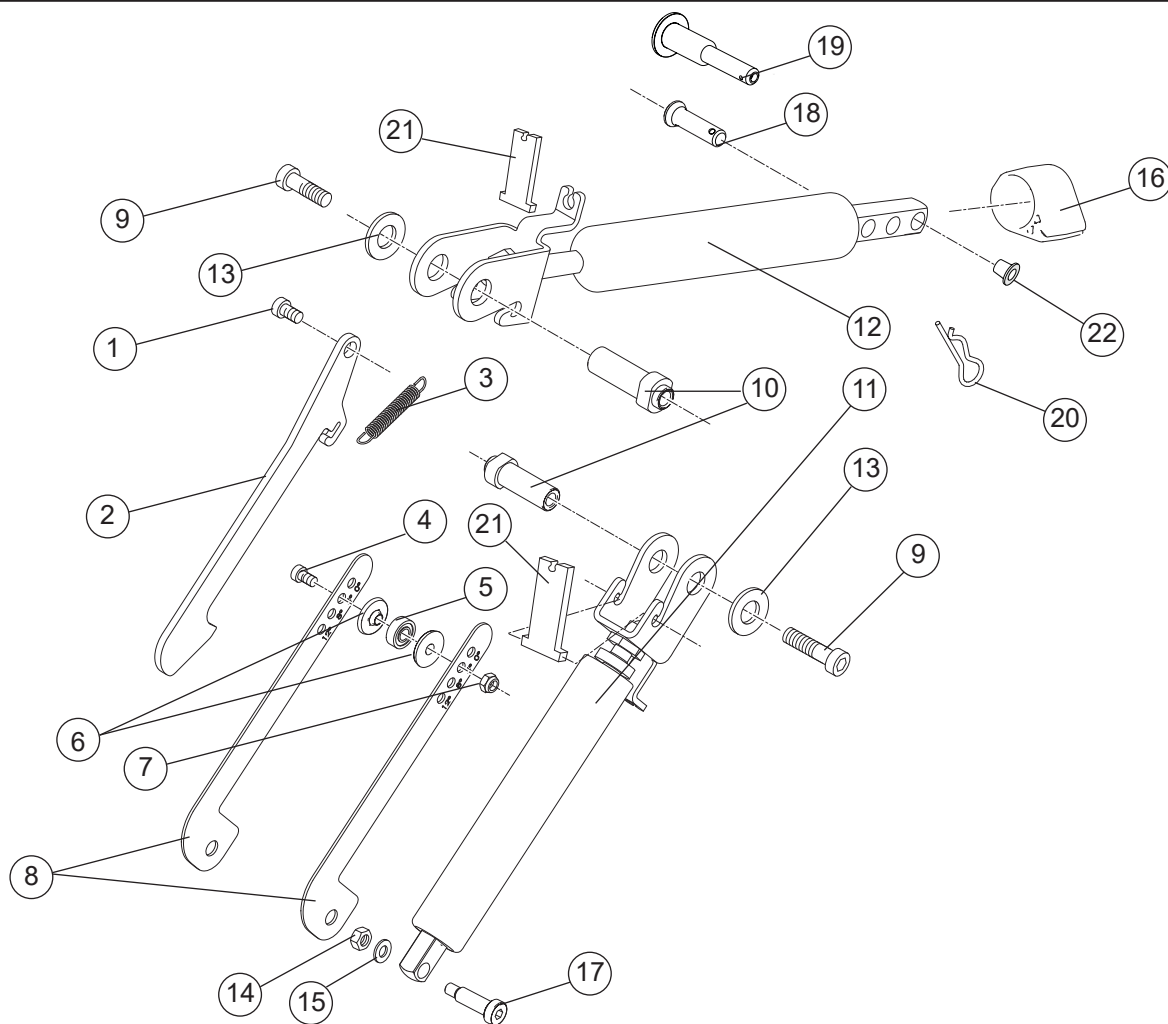

Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Skruv MC6S M6 x 16 10.9 ISO 7462 svkr esloc	11253
2	Låsplåt komfortläge Prio	82667
3	Fjäder rfr Prio	82690
4	Skruv MC6S M5 x 18 8.8 ISO 4762 FZB	11424
5	Kullager Dy15 Di6 t5 (NOMO 696zz)	82660
6	Kullagerbussning komfortlås Prio	20509
7	Låsmutter M5 DIN 985 Klass 8 FZB	12003
8	Justerplåt komfortlås Prio	82691
9	Skruv M8x20 K6S 10.9 fzb	11704
10	Ledhylsa nyckelfattning gaskolv Prio	20511
11	Gaskolv kompl	24581
12	Gaskolv 3A kompl	24582
13	Bricka 25x12x1,5 SV PA	51169
14	Låsmutter M6 DIN 985 Klass 8 FZB	12017
15	Bricka BRB 6,4 x 10 x 1,5 FZB	13080
16	Dragmekanism aktiv Rygg Prio Plast	51042
17	Skruv Passbult 12,9 8xM6x22 Prio	20513
18	Lednit D8 L23.3	83003
19	QR-sprint	83159
20	Låssprint R t2	83037
21	Låskläpp	82697
22	Täckplugg gaskolv Prio 3A	51238


Prio

Prio VB

Prio 16"

●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●

Ställdon, elektrisk tiltfunktion

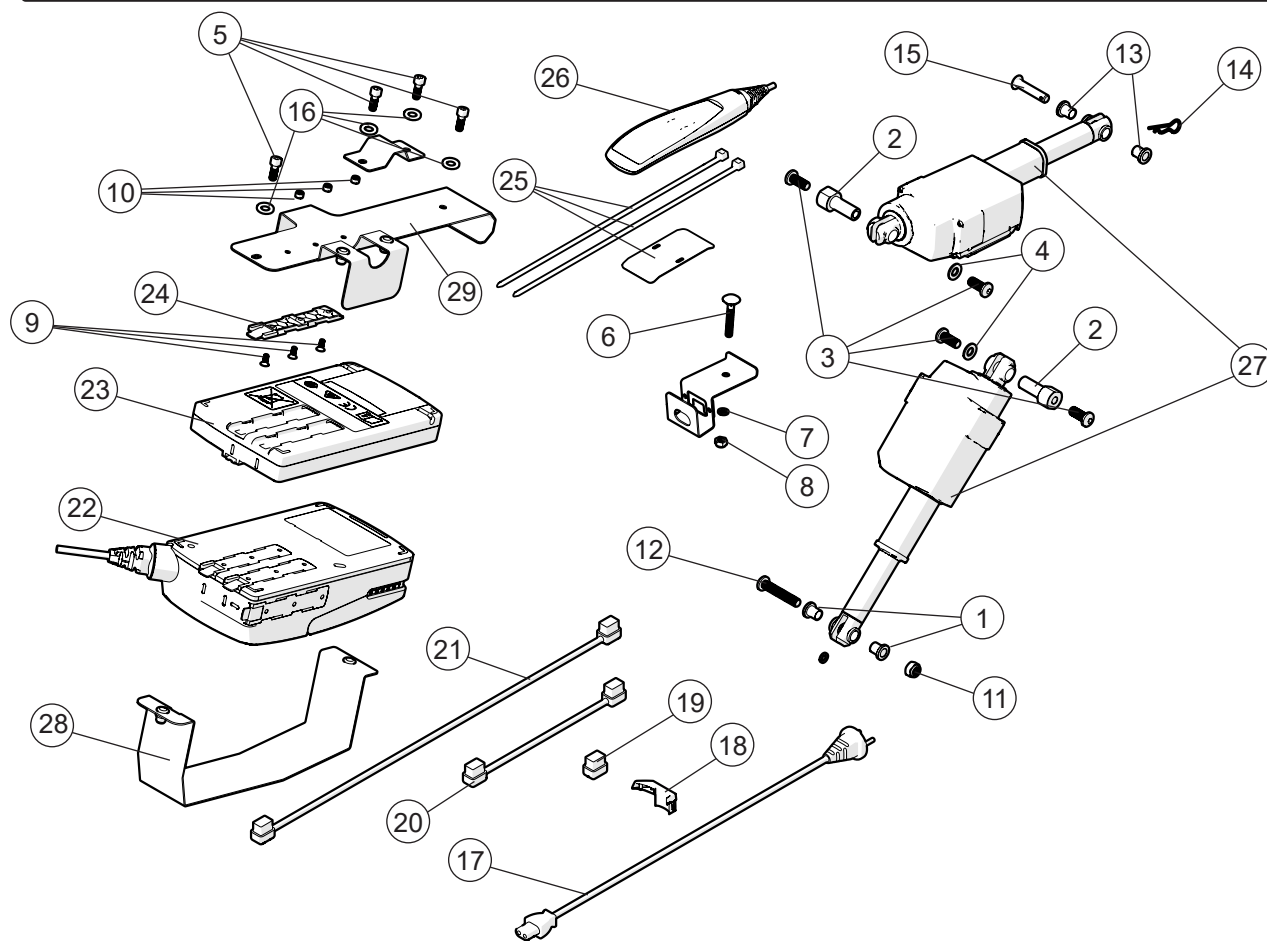

Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Distans Prio eltilt	
2	Distans M8	
3	Skruv M 8x 20 K6S 10.9 fzb	
4	Bricka TBRUB 8.4x16x3 fzb	
5	Skruv M 6x 16 MC6S 12.9	
6	Skruv M 6x 40 MVBF fzb	
7	Bricka 6.4x10x1.5 fzb	
8	Låsmutter M 6 fzb DIN 985-6	
9	Skruv M 4x 10 MF6S Fzb	
10	Låsmutter M 4 fzb din 985	
11	Låsmutter M 8 fzb DIN 985-6	
12	Skruv M 8x 45 MK6S Fzb	
13	Distans POM	
14	Låssprint R t2	
15	Lednit	
16	Bricka 6.5x12x1.5	
1-16	Skrivsats Prio Eltilt	28370
17	Nätkabel L 3000mm	83173
18	Kabellås LA23	83170

Prio


Prio VB

Prio 16"

Ställdon, elektrisk tiltfunktion

Ställdon, elektrisk tiltfunktion			Prio	Prio VB	Prio 16"
Pos.	Benämning	Art. nr.			
19	Plugg styrenhet CO61	51155	●	●	●
20	Batterikabel CO61-BA21	83167	●	●	●
21	Motorkabel CO61-LA23	83164	●	●	●
22	Styrenhet CO61	83166	●	●	●
23	Batteri Li-Ion BA22	83837	●	●	●
24	Montagebleck	83171	●	●	●
25	Handkontrollshållare kpl	28577	●	●	●
26	Handkontroll HB30-magnet	83169	●	●	●
27	Ställdon LA23	83165	●	●	●
28	Fäste undre eltilt monterad		●	●	●
29	Fäste övre eltilt monterad		●	●	●
1-29	Eltilt Prio kompl sats	28898	●	●	●
19, 28, 29	Fäste eltilt BA22 kpl	24841	●	●	●

Ryggchassi 3A

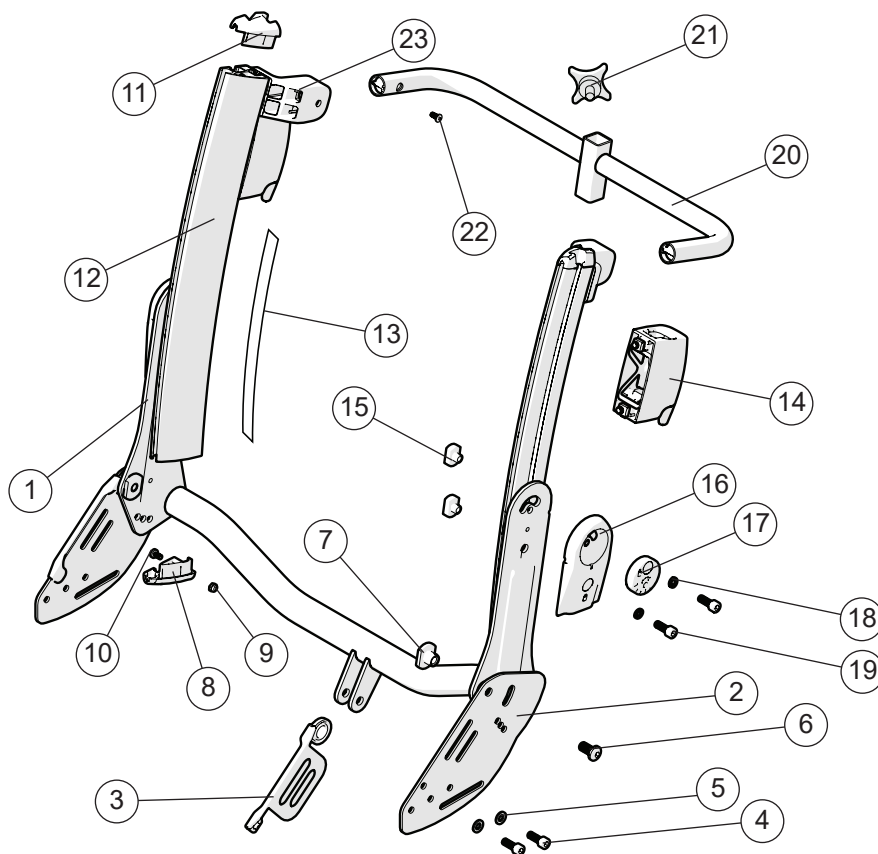


Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Ryggchassi	
2	Ryggledsplåt Prio mod 3	28674-01
3	Skoning ryggledsplåt hö	51226-1
	Skoning ryggledsplåt vä	51226-2
4	Skruv M6x16 MC6S 12.9	11253
5	Bricka 6.4x12x1.6 Zn8/P4	13030
6	Skruv M8x16 K6S 10.9 driloc	11713
7	Ledmutter	83316
1-17	Ryggchassi Prio 40 inkl ryggklädsel (se sida med ryggklädsel)	28708
	Ryggchassi Prio 45 inkl ryggklädsel (se sida med ryggklädsel)	28709
	Ryggchassi Prio 50 inkl ryggklädsel (se sida med ryggklädsel)	28710
	Ryggchassi Prio 55 inkl ryggklädsel (se sida med ryggklädsel)	28711
8	Ändavslutning rygg låg hö	51232-1
	Ändavslutning rygg låg vä	51232-2
9	Låsmutter M 4 fzb din 985	12026
10	Skruv M4x8 MRX sv 4.8 pos	11441
11	Ändavslutning rygg 1 mod 4	51130
	Ändavslutning rygg 2 mod 4	51131
10, 12-14, 23	Ryggskena 3A mod 4 kpl hö	28703-1
	Ryggskena 3A mod 4 kpl vä	28703-2
12	Ryggskena 3A mod 4 L395 hö	83315-1
	Ryggskena 3A mod 4 L395 vä	83315-2
13	Etikett rygghöjd 46-62	71887
14	Fäste körhandtag	28576
15	Mutter T-spår	20028
16	Täckåpa excenter 3A	51227
17	Excenter ryggchassi	83291
18	Fjädersring M6 vågad	13113
19	Skruv M6x18	11670
20-22	Huvudstödsfäste 3A 40 cm	28680
	Huvudstödsfäste 3A 45 cm	28681
	Huvudstödsfäste 3A 50 cm	28682
	Huvudstödsfäste 3A 55 cm	28683
21	Låsratt M8x14	400118
22	Skruv M6x20 MC6LS SW5 Zn/P4	11700
23	Fäste tvärstag	
24	Ryggklädsel (se avsnitt "Ryggklädsel")	

Prio

Prio VB


Prio 16"

Ryggförlängare 3A

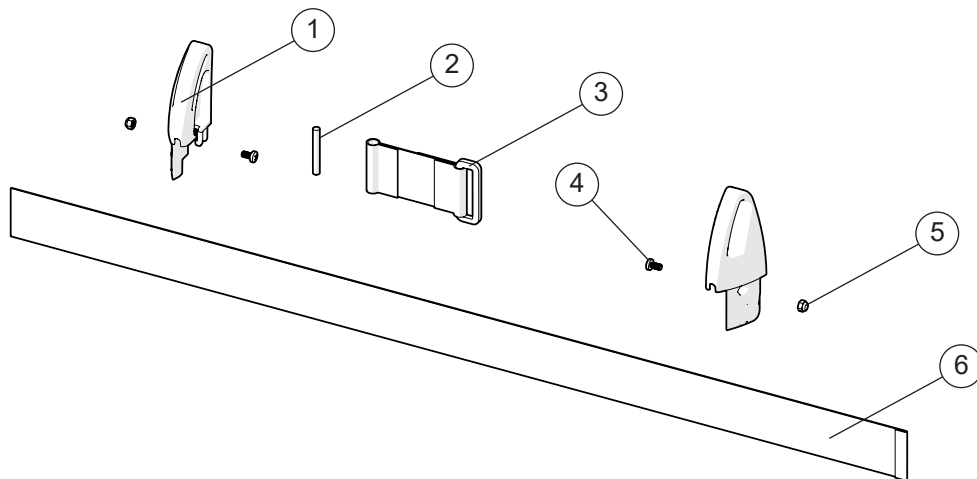


Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1-6	Ryggförlängare 3A 35-40 kpl	28658	●	●	●
	Ryggförlängare 3A 42,5-50 kpl	28659	●	●	●
	Ryggförlängare 3A 52,5-60 kpl	28660	●	●	●
1	Ryggförlängare ryggprofil hö	51223-1	●	●	●
	Ryggförlängare ryggprofil vä	51223-2	●	●	●
2	Markispinne	51222	●	●	●
3	Ögla ryggförlängare 3A kpl	63294	●	●	●
4	Skruv	11441	●	●	●
5	Låsmutter	12026	●	●	●
6	Sitsdjupförlängare 35-40 cm	63291	●	●	●
	Sitsdjupförlängare 42,5-50 cm	63292	●	●	●
	Sitsdjupförlängare 52,5-60 cm	63293	●	●	●

Körhandtag

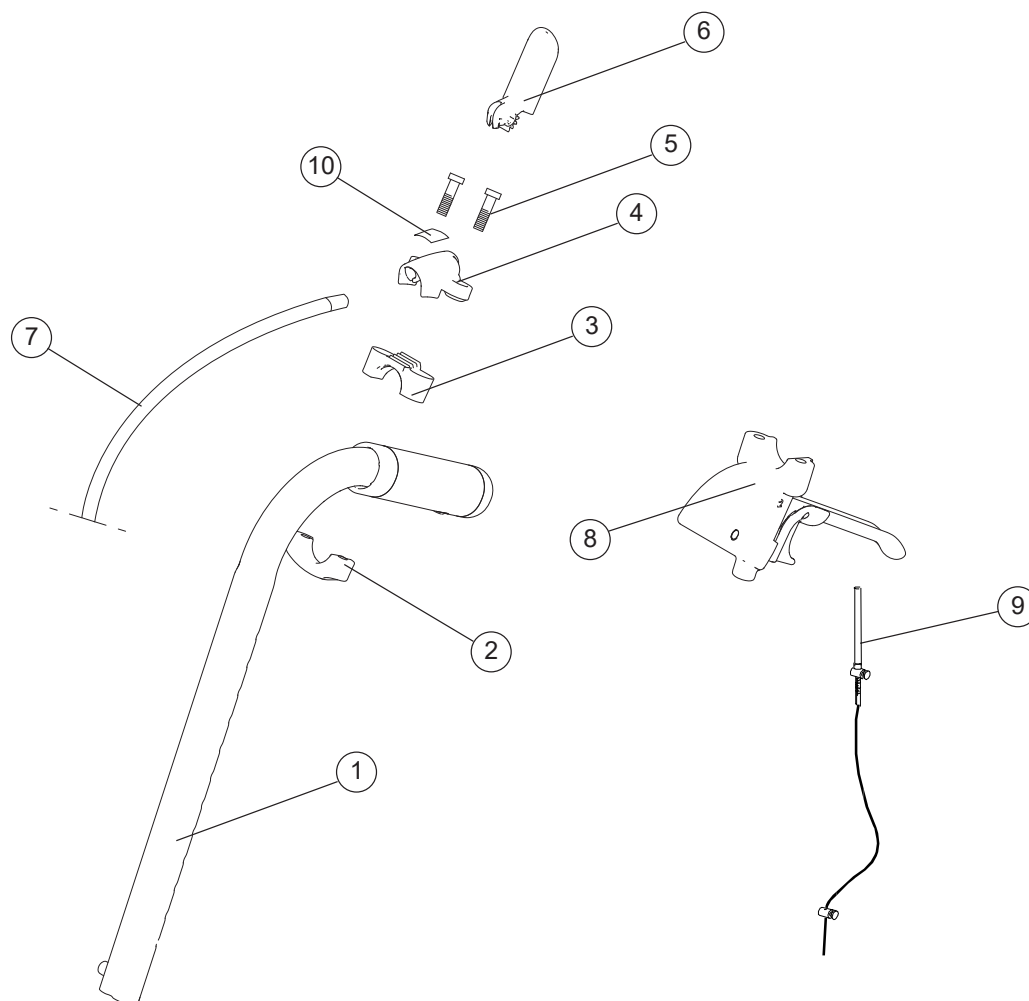


Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1-7	Körhandtag Sitsvinkelreglage Prio 100 mm	28220-01	●	●	●
	Körhandtag Ryggvinkelreglage Prio 100 mm	28219-01	●	●	●
1-9	Körhandtag sitsvinkelreglage bromsreglage	28222-01	●	●	●
	Körhandtag ryggvinkelreglage bromsreglage	28221-01	●	●	●
1	Körhandtag hrb	27588-01	●	●	●
2	Överfall reglage	51050	●	●	●
3	Undre fäste reglage sits-/ryggvinkel	51034	●	●	●
4	Övre fäste reglage sits-/ryggvinkel	51032	●	●	●
5	Skruv DG50X30 WN 1552	11655	●	●	●
6	Reglage rygg svart	51033	●	●	●
7	Vajer ryggvinkel Prio	83303	●	●	●
	Vajer sitsvinkel Prio	83302	●	●	●
8	Bromshandtag Prio kompl (se avsnitt "Vårdarbroms")		●	●	●
9	Vajerpaket vårdarbroms (se avsnitt "Vårdarbroms")		●	●	●
10	Etikett reglage tilt	71373	●	●	●
	Etikett reglage ryggvinkling	71374	●	●	●

Körbygel

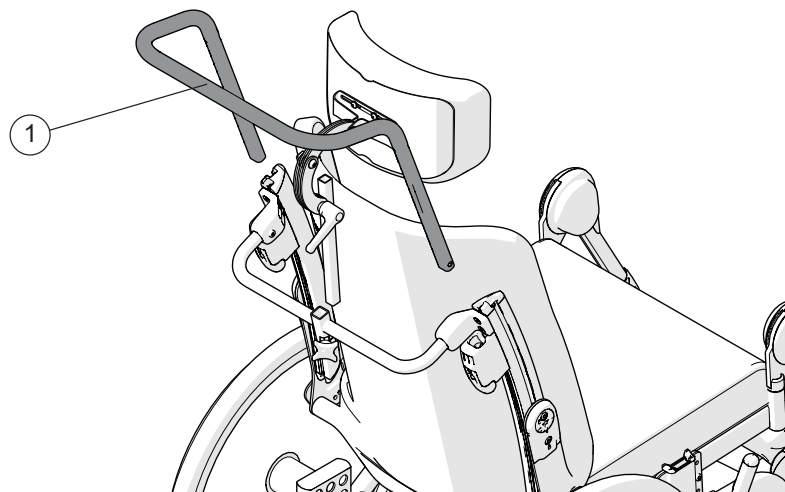


Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Körbygel hrb Cr rygg2 40 cm rygg 3A 42.5 kompl	25580-01	●	●	●
	Körbygel hrb Cr rygg2 45 cm rygg 3A 47.5 cm kompl	25582-01	●	●	●
	Körbygel hrb Cross XL 50 cm rygg 3A 52.5 cm kompl	26064-01	●	●	●
	Körbygel hrb Cross XL 55 cm rygg 3A 57.5 cm kompl	26069-01	●	●	●

Körbygel vinkelreglerbar

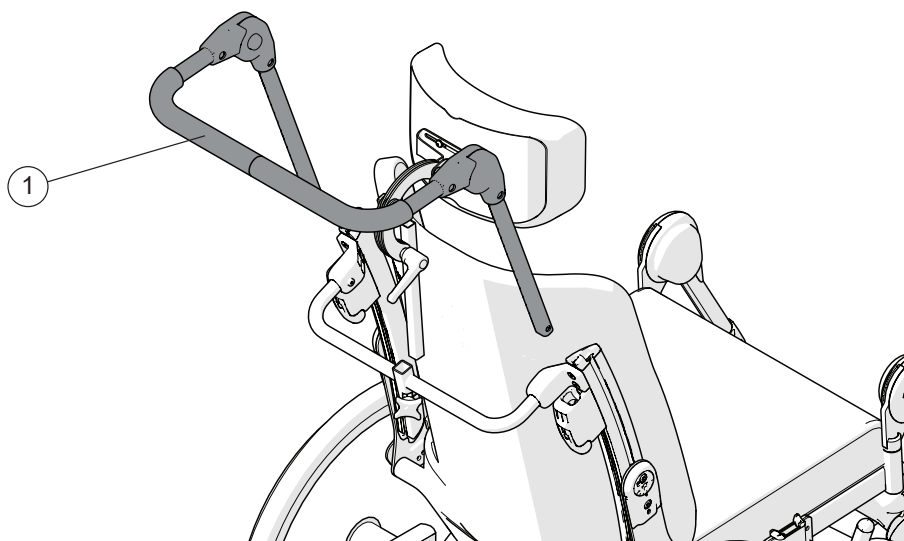

Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Körbygel vrb 40 cm	27163	●	●	●
	Körbygel vrb 45 cm	27165	●	●	●
	Körbygel vrb 50 cm	27167	●	●	●

Benstöd

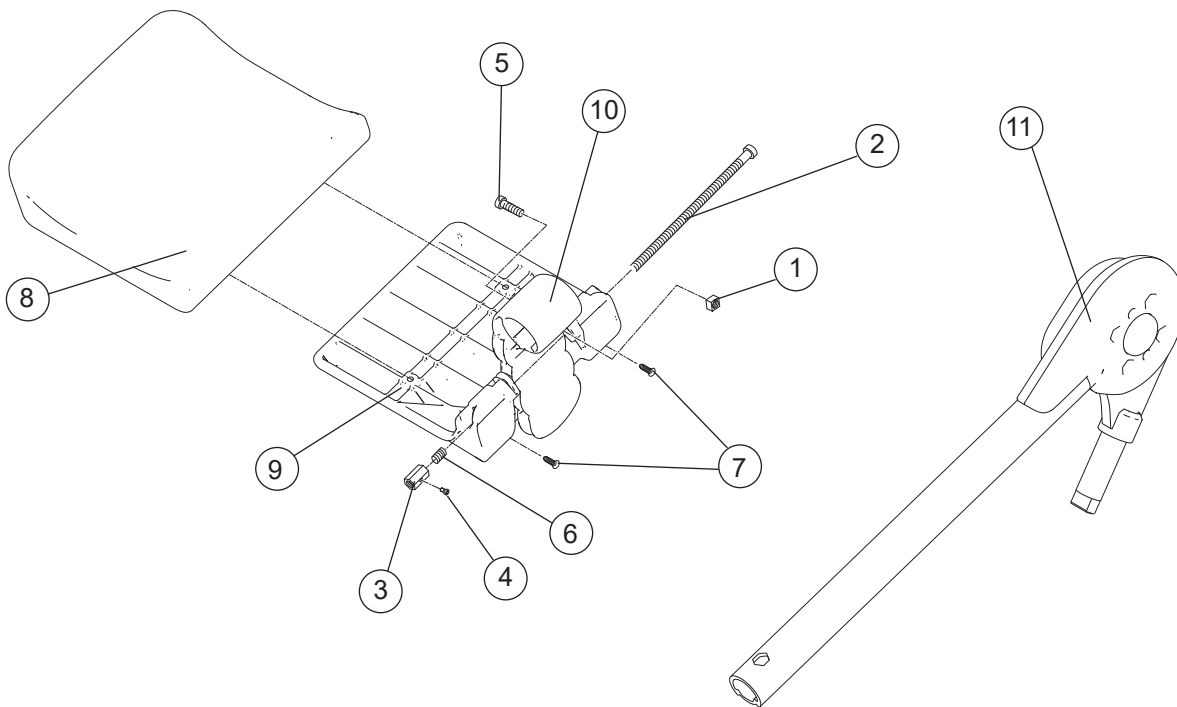


Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Mutter fäste vadplatta		●	●	●
2	Skruv MC6S M6 x 120 10.9 ISO 4762 svkr		●	●	●
3	Mutter M6 vadplatta		●	●	●
4	Skruv MC6S M4x10 8.8 svkr		●	●	●
5	Skruv MC6S M6 x 20 ISO 4762 svkr		●	●	●
6	Fjäder D12360		●	●	●
7	Skruv B8x19 RXS A2 Ph st 4.2	11064	●	●	●
8	Dyna vadplatta 40-55 cm grå hygien		●	●	●
9	Vadplatta		●	●	●
10	Fäste vadplatta		●	●	●
1-10	Vadplatta kpl 40 cm grå Hygien	27733-65	●	●	●
	Vadplatta kpl 45 cm grå Hygien	27734-65	●	●	●
	Vadplatta kpl 50 cm grå Hygien	27735-65	●	●	●
	Vadplatta kpl 55 cm grå Hygien	27736-65	●	●	●

Benstöd


Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
11	Benstöd vrb kompl hö	27730-01-1	●	●	●
	Benstöd vrb kompl vä	27730-01-2	●	●	●
1-11	Benstöd vrb Prio hö 40 cm grå Hygien	27857-65-1	●	●	●
	Benstöd vrb Prio vä 40 cm grå Hygien	27857-65-2	●	●	●
	Benstöd vrb Prio hö 45 cm grå Hygien	27858-65-1	●	●	●
	Benstöd vrb Prio vä 45 cm grå Hygien	27858-65-2	●	●	●
	Benstöd vrb Prio hö 50 cm grå Hygien	27859-65-1	●	●	●
	Benstöd vrb Prio vä 50 cm grå Hygien	27859-65-2	●	●	●
	Benstöd vrb Prio hö 55 cm grå Hygien	27860-65-1	●	●	●
	Benstöd vrb Prio vä 55 cm grå Hygien	27860-65-2	●	●	●

Amputationsbenstöd

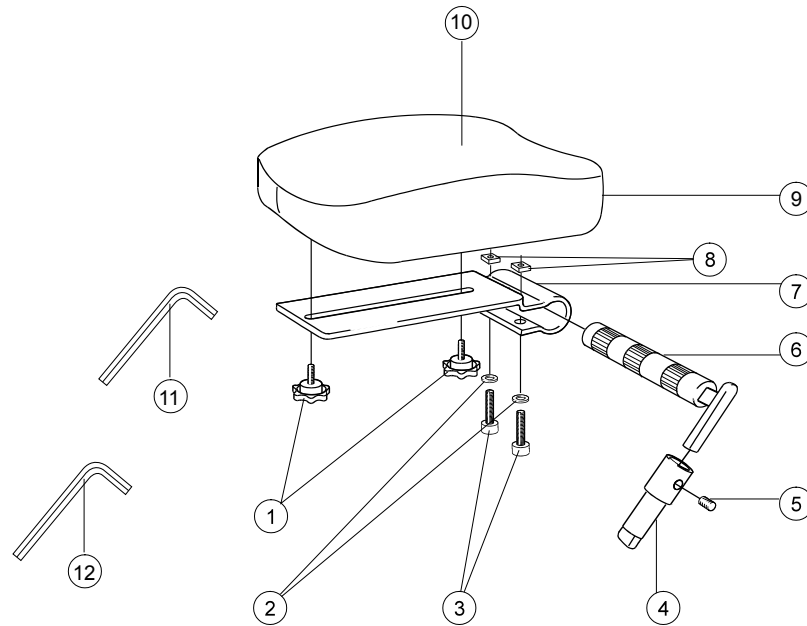


Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Ratt R3015 M5x15 S amput benstöd	80807	●	●	●
2	Bricka BRB 8.4/A2 rfr	13011	●	●	●
3	Skruv M 8x 35 MC6S fzb	11276	●	●	●
4	Låsrör amputationsbenstöd	25518-01	●	●	●
5	Stoppskruv M8x8 SK6SS svkr HRC 45	11388	●	●	●
6	Axel amputationsbenstöd kompl	25519-01	●	●	●
7	Dynkonsol amputationsbenstöd	80809	●	●	●
8	Fyrkantsmutter hög M8 fzb	12056	●	●	●
9	Stödplatta amputationsbenstöd mörkgrå	62335-60	●	●	●
	Stödplatta amputationsbenstöd Hygien	62335-63	●	●	●
	Stödplatta amputationsbenstöd mörkgrå hö	62452-60-1	●	●	●
	Stödplatta amputationsbenstöd mörkgrå vä	62452-60-2	●	●	●
	Stödplatta amputationsbenstöd Hygien hö	62452-63-1	●	●	●
	Stödplatta amputationsbenstöd Hygien vä	62452-63-2	●	●	●
10	Överdrag amp benstöd Cross mörkgrå	62893-60	●	●	●
	Överdrag amp benstöd Cross Hygien	62893-63	●	●	●
	Överdrag amp benstöd Cross XL hö mörkgrå	62450-60	●	●	●
	Överdrag amp benstöd Cross XL hö Hygien	62450-63	●	●	●
	Överdrag amp benstöd Cross XL vä mörkgrå	62761-60	●	●	●
	Överdrag amp benstöd Cross XL vä Hygien	62761-63	●	●	●
11	Insexnyckel NV4 DIN 911	80141	●	●	●
12	Insexnyckel Nv6 180 mm	82625	●	●	●
1-12	Amputationsbenstöd kompl mörkgrå plysch	25516-60	●	●	●
	Amputationsbenstöd kompl Hygien	25516-63	●	●	●
	Amputationsbenstöd Cross XL hö kompl mörkgrå plysch	26210-60-1	●	●	●
	Amputationsbenstöd Cross XL vä kompl mörkgrå plysch	26210-60-2	●	●	●
	Amputationsbenstöd Cross XL hö kompl Hygien	26210-63-1	●	●	●
	Amputationsbenstöd Cross XL vä kompl Hygien	26210-63-2	●	●	●

Fotstöd

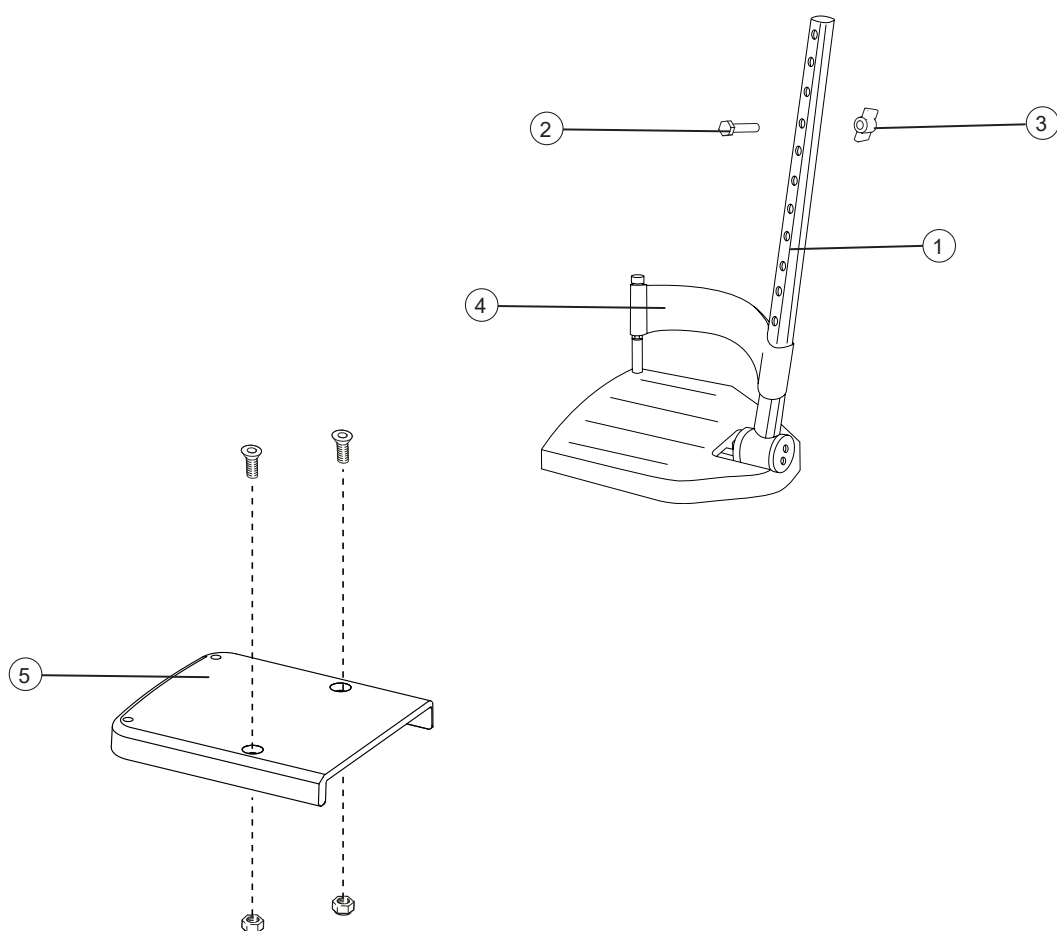


Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1-3	Fotplatta djup 13 cm 40 cm hö långt infästningsrör	25650-1	●	●	●
	Fotplatta djup 13 cm 40 cm vä långt infästningsrör	25650-2	●	●	●
	Fotplatta djup 13 cm 45 cm hö långt infästningsrör	25737-1	●	●	●
	Fotplatta djup 13 cm 45 cm vä långt infästningsrör	25737-2	●	●	●
	Fotplatta djup 13 cm 50 cm hö långt infästningsrör	25652-1	●	●	●
	Fotplatta djup 13 cm 50 cm vä långt infästningsrör	25652-2	●	●	●
	Fotplatta djup 13 cm 40 cm hö std infästningsrör	25644-1	●	●	●
	Fotplatta djup 13 cm 40 cm vä std infästningsrör	25644-2	●	●	●
	Fotplatta djup 13 cm 45 cm hö std infästningsrör	25736-1	●	●	●
	Fotplatta djup 13 cm 45 cm vä std infästningsrör	25736-2	●	●	●
	Fotplatta djup 13 cm 50 cm hö std infästningsrör	25646-1	●	●	●
	Fotplatta djup 13 cm 50 cm vä std infästningsrör	25646-2	●	●	●
2	Skruv M6x 30 M6S	11555	●	●	●
3	Vingmutter 26-M 6	80847	●	●	●
4	Hälband komplett	24458	●	●	●
5	Fotplatta breddad 52,5-60 cm kompl	28443	●	●	●

Fotstöd forts

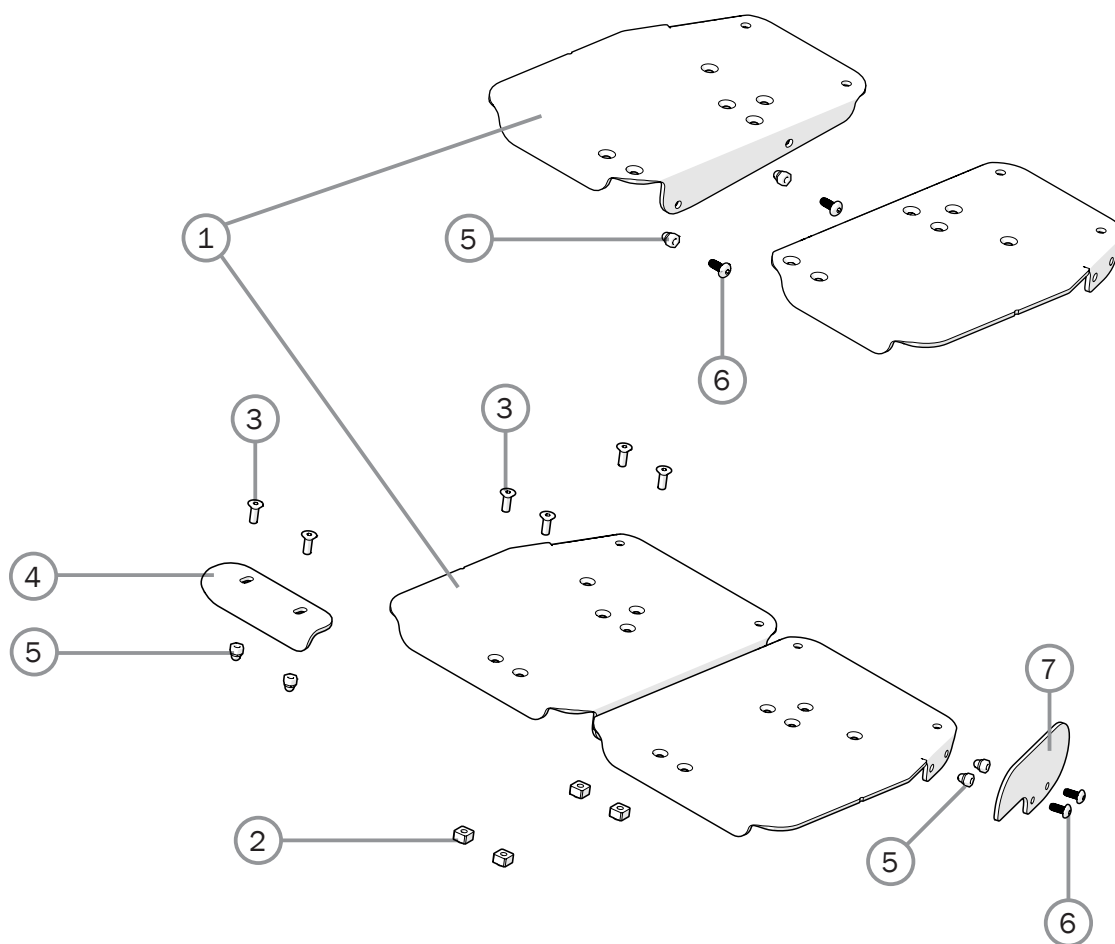


Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1-5	Förlängning fotplatta M hö	28775-1	●	●	●
	Förlängning fotplatta M vä	28775-2	●	●	●
	Förlängning fotplatta L hö	28776-1	●	●	●
	Förlängning fotplatta L vä	28776-2	●	●	●
1	Förlängning fotplatta M hö		●	●	●
	Förlängning fotplatta M vä		●	●	●
	Förlängning fotplatta L hö		●	●	●
	Förlängning fotplatta L vä		●	●	●
2	Stopplack armstöd	80661	●	●	●
3	Skruv M5x14 MF6S Zn8/P esloc	11237	●	●	●
3-6	Styrning fotplatta hel kpl	28773	●	●	●
4	Styrning fotplatta hel		●	●	●
5	Låsmutter M 5 kupol fzb	12168	●	●	●
6	Skruv M 5x 12 K6S 10.9 fzb	11208	●	●	●
7	Sidoskydd fotplatta	83420	●	●	●
5-7	Sidoskydd fotplatta kpl H35 mm	28772	●	●	●

Hel fotplatta

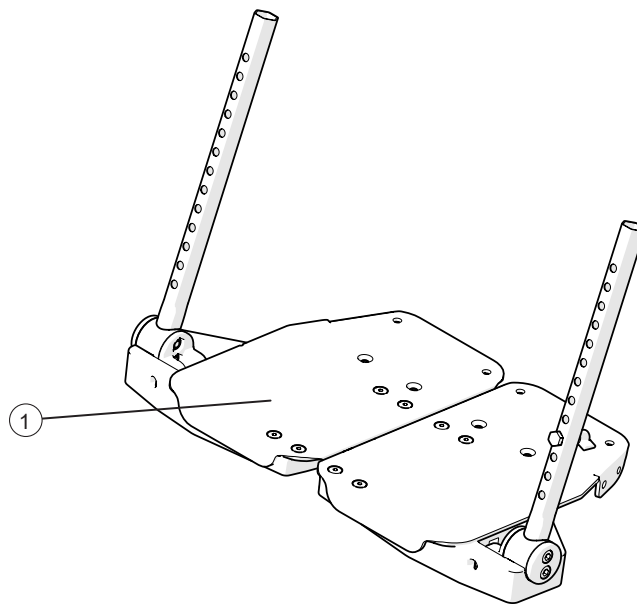


Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Fotplatta hel kompl B40 inkl fotplattor	28662	●	●	●
	Fotplatta hel kompl B45 inkl fotplattor	28663	●	●	●
	Fotplatta hel kompl B50 inkl fotplattor	28664	●	●	●
	Fotplatta hel kompl B55 inkl fotplattor	28665	●	●	●

Fotlåda

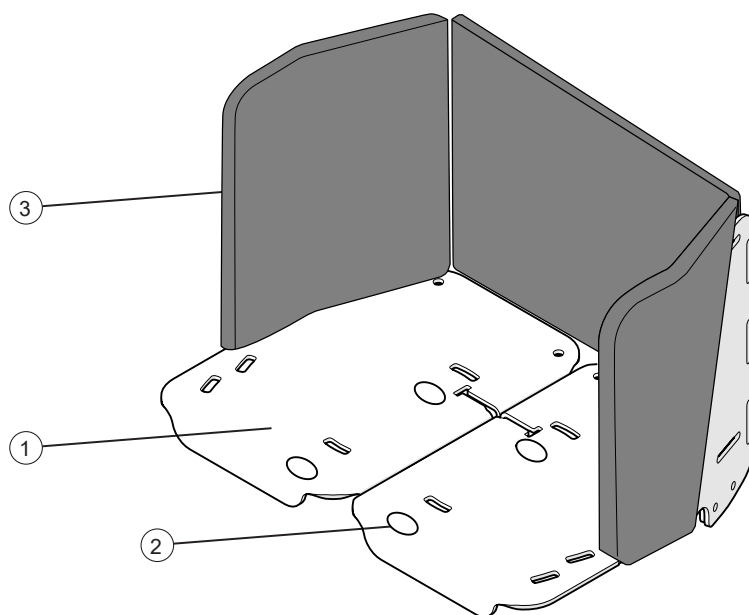


Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1-3	Fotlåda B=40-45 cm	28642	●	●	●
	Fotlåda B=50-55 cm	28643	●	●	●
1	Fotlåda B=40-45 cm		●	●	●
	Fotlåda B=50-55 cm		●	●	●
2	Skrusats		●	●	●
3	Polstring fotlåda B=40-45 cm	28778	●	●	●
	Polstring fotlåda B=50-55 cm	28779	●	●	●

Broms

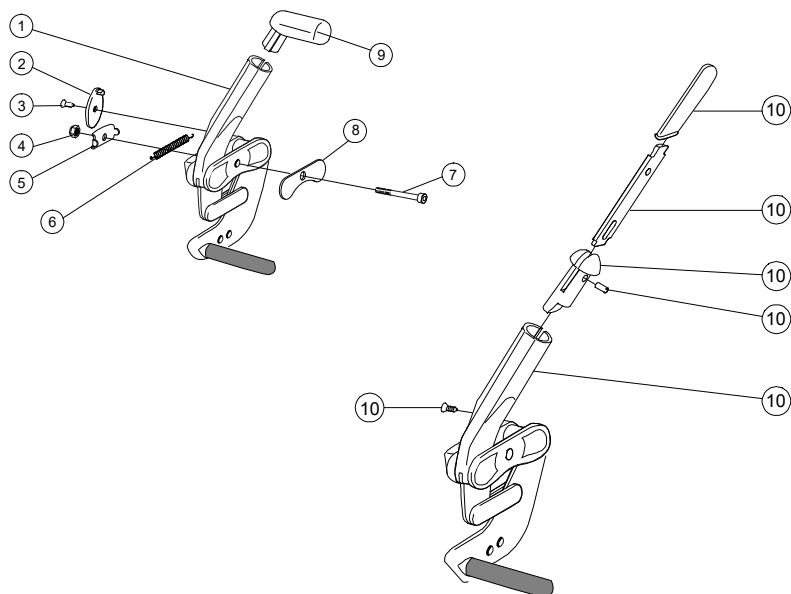


Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1-9	Brukarbroms vinkl rött handtag hö Prio	27951-1	●	●	
	Brukarbroms vinkl rött handtag vä Prio	27951-2	●	●	
	Brukarbroms vinkl svart handtag hö Prio	27894-1	●	●	
	Brukarbroms vinkl svart handtag vä Prio	27894-2	●	●	
2	Stoppdetalj mod ny	50373	●	●	
3	Skruv B6 3.5x9.5 FXS svkr	11384	●	●	
4	Låsmutter M6 DIN 985-6 fzb	12017	●	●	
5	Bricka invändig broms mod 3	82564	●	●	
6	Fjäder broms	80796	●	●	
7	Skruv M6x 60 MC6S Zn8/P4	11408	●	●	
8	Bricka utvändig broms mod 3	82575	●	●	
9	Ändavslutning broms röd	51012	●	●	
	Ändavslutning broms svart	50395	●	●	
10	Bromsspaksförlängare kompl	25515	●	●	
1-8, 10	Brukarbroms förl handtag fast hö Prio	27895-1	●	●	
	Brukarbroms förl handtag fast vä Prio	27895-2	●	●	

Bromsadapter

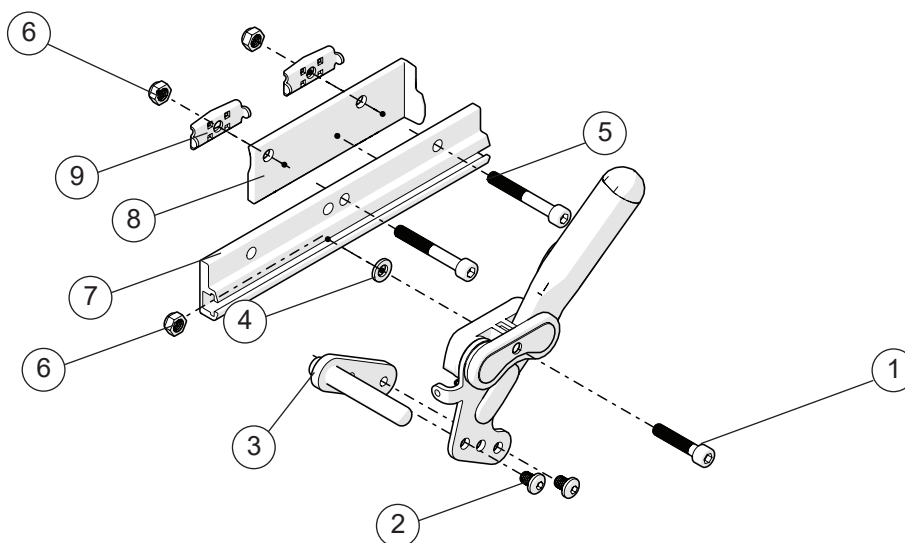


Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1-9	Adapter broms Prio 16/20	28654	●	●	●
1	Skruv M 6x 45 MC6S 12.9 svkr		●	●	
2	Skruv K6S M6 x 8 10.9 svkr		●	●	
3	Adapter bromsarm Prio 20-22		●	●	
2-3	Adapter broms Prio 22	28403	●	●	
4	Bricka 6.4x16x1,6		●	●	
5	Skruv M 6x 30 MC6S		●	●	
6	Låsmutter M6 fzb DIN 985-6		●	●	
7	Fäste knäledsbroms		●	●	
8	Distans bromsadapter hö Prio	51148-1	●	●	
	Distans bromsadapter vä Prio	51148-2	●	●	
9	Bricka invändig broms mod 3	82564	●	●	

Drivhjul 20" (C5)

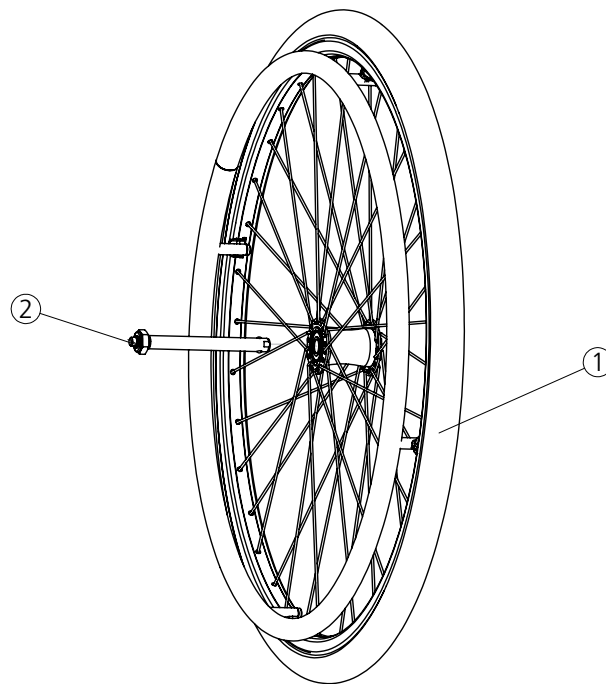


Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Drivhjul 20" massivt/alu M100	82486	●	●	
	Drivhjul 20" C5 massivt/alu grå exkl axel	27542	●	●	
	Drivhjul 20" C5 massivt/cellgummi exkl axel	27543	●	●	
	Drivhjul 20" C5 massivt/rfr exkl axel	27544	●	●	
2	QR axel M100 stålnav	82483	●	●	
	Axel QR D12 Cross	82581	●	●	

Drivhjul 22" (C5)

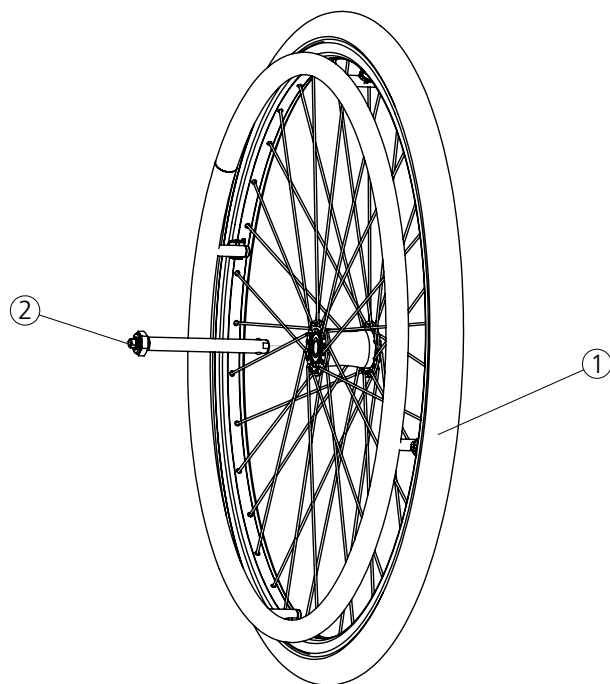

Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Drivhjul 22 massivt/alu M100	82485	●	●	
	Drivhjul 22" C5 högtr/cellgummi exkl axel	27548	●	●	
	Drivhjul 22" C5 högtryck/plastad exkl axel	27549	●	●	
	Drivhjul 22" C5 högtryck/rfr exkl axel	27550	●	●	
	Drivhjul 22" C5 massivt/alu exkl axel	27552	●	●	
	Drivhjul 22" C5 massivt/cellgummi exkl axel	27553	●	●	
	Drivhjul 22" C5 massivt/plastad exkl axel	27554	●	●	
	Drivhjul 22" C5 massivt/rfr exkl axel	27555	●	●	
2	QR axel M100 stålnav	82483	●	●	
	Axel QR D12 Cross	82581	●	●	

Drivhjul 24" (C5)

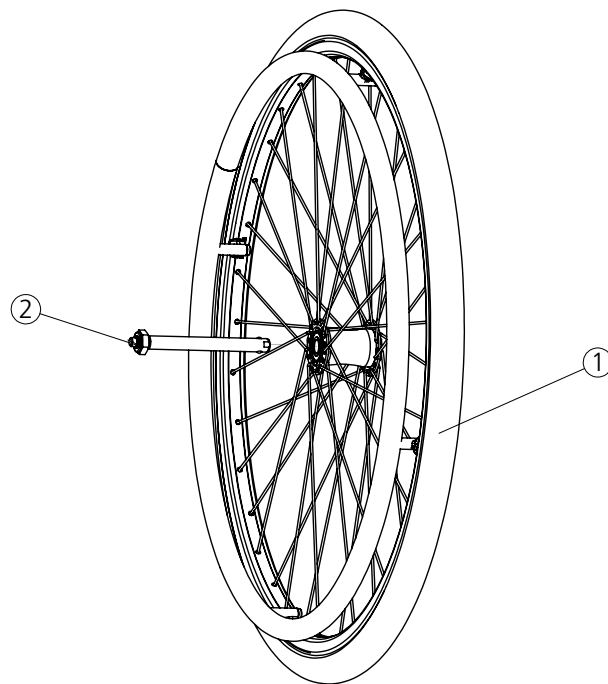


Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Drivhjul 24 massivt/alu M100	82484	●	●	
	Drivhjul 24 C5 högtr/cellgummi svart exkl axel	28862	●	●	
	Drivhjul 24 C5 högtr/plastad svart exkl axel	28863	●	●	
	Drivhjul 24 C5 högtr/rfr svart exkl axel	28864	●	●	
	Drivhjul 24" C5 massivt u drivring exkl axel	27563	●	●	
	Drivhjul 24" C5 massivt/alu exkl axel	27564	●	●	
	Drivhjul 24" C5 massivt/cellgummi exkl axel	27565	●	●	
	Drivhjul 24" C5 massivt/plastad exkl axel	27566	●	●	
	Drivhjul 24" C5 massivt/rfr exkl axel	28844	●	●	
2	QR axel M100 stålnav	82483	●	●	
	Axel QR D12 Cross	82581	●	●	

Drivhjul 20", 22", 24" (C6)

			Prio	Prio VB	Prio 16"
Pos.	Benämning	Art. nr.			
1	20" Drivhjul				
	Drivhjul 20 C6 högtr al Speedlite exkl axel	83908	●	●	
	Drivhjul 20 C6 högtr rfr Speedlite exkl axel	83909	●	●	
	Drivhjul 20 C6 högtr plastad Speedlite exkl axel	83884	●	●	
	Drivhjul 20 C6 mass al exkl axel	83885	●	●	
	Drivhjul 20 C6 mass rfr exkl axel	83910	●	●	
	Drivhjul 20 C6 mass plastad exkl axel	83911	●	●	
	22" Drivhjul				
	Drivhjul 22 C6 högtr al Speedlite exkl axel	83880	●	●	
	Drivhjul 22 C6 högtr rfr Speedlite exkl axel	83906	●	●	
	Drivhjul 22 C6 högtr plastad Speedlite exkl axel	83881	●	●	
	Drivhjul 22 C6 mass al exkl axel	83882	●	●	
	Drivhjul 22 C6 mass rfr exkl axel	83907	●	●	
	Drivhjul 22 C6 mass plastad exkl axel	83883	●	●	
	24" Drivhjul				
	Drivhjul 24 C6 högtr al Speedlite exkl axel	83873	●	●	
	Drivhjul 24 C6 högtr rfr Speedlite exkl axel	83874	●	●	
	Drivhjul 24 C6 högtr plastad Speedlite exkl axel	83875	●	●	
	Drivhjul 24 C6 mass al exkl axel	83876	●	●	
	Drivhjul 24 C6 mass rfr exkl axel	83877	●	●	
	Drivhjul 24 C6 mass plastad exkl axel	83878	●	●	
2	Axlar				
	QR-axel D12,7x110	83872	●	●	


Vårdarbroms

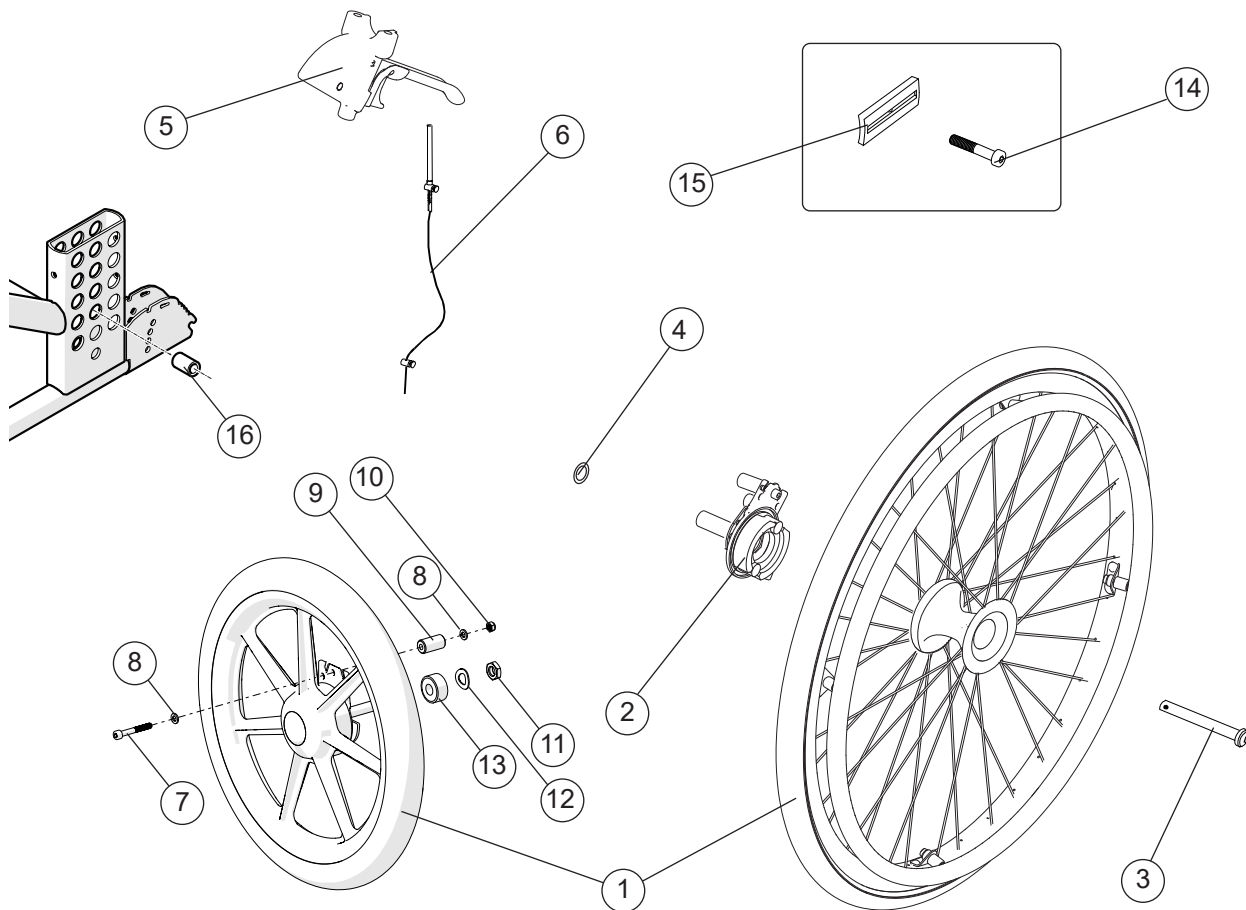

Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Drivhjul vårdarbr 20 mass/alu	81337
	Drivhjul vårdarbr 22 mass/alu	81339
	Drivhjul vårdarbr 24 mass/alu	81346
	Hjul 16" massivt hö	83283
	Hjul 16" massivt vä	83284
2	Trumbroms Vårdarbromssats Prio höger	82822
	Trumbroms Vårdarbromssats Prio vänster	82823
3	Axel vårdarbroms	81325
4	Schnorrbricka	13084
5	Bromshandtag PRIO Kompl	82585
6	Vajerpaket VB	82856
7	Skruv M6x 45 MC6S 12.9 sv	
8	Bricka brb 11.8x6.5x1.5	
9	Distans 6.5x15.9x30	
10	Mutter M6 Zn8/P4 DIN 985-6	
11	Mutter M12 FZB DIN 439B låg	12076
12	Fjäderbricka 13x24x1.2 DIN 137B fzb	
13	Distans 12x24x10	
14	Skruv M6x65 MC6S 12.9 fzb	11236
15	Adapter broms 5 mm	51019
2-6, 14-15	Monteringssats vårdarbroms Prio 20", 22", 24"	28423
5-13	Monteringssats vårdarbroms Prio 16"	28459
	Körhandtag , se avsnitt "Körhandtag"	
16	Adapterhylsa 16" Prio (2 st + monteringsanvisning). Vid montering i pos A och B	28414


Prio	Prio VB	Prio 16"
●	●	
●	●	
●	●	
		●
		●
●	●	
●	●	
		●
		●
		●
●	●	
●	●	
●	●	
		●
		●

Däck och slang (C5)

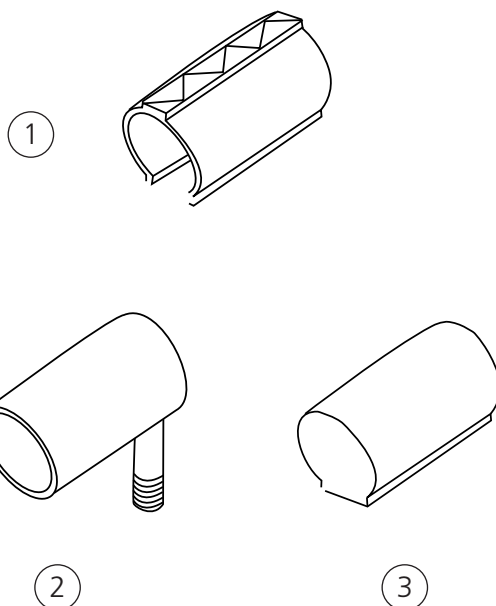


Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Däck 20" massivt	80787	●	●	
	Däck 22" massivt	81384	●	●	
	Däck 22" x 1" högtryck	81125	●	●	
	Däck 24" massivt	80768	●	●	
	Däck 24" högtryck svart	83329	●	●	
	Däck 24" Schwalbe Marathon plus	83301	●	●	
2	Slang 20" luft lågtryck	80132	●	●	
	Slang 22" luft högtryck	80136	●	●	
	Slang 24" 1" högtryck	80560	●	●	
3	Slang 20" massiv	82706	●	●	
	Slang 22" massiv	82705	●	●	
	Slang 24" massiv	82704	●	●	

Däck och slang (C6)

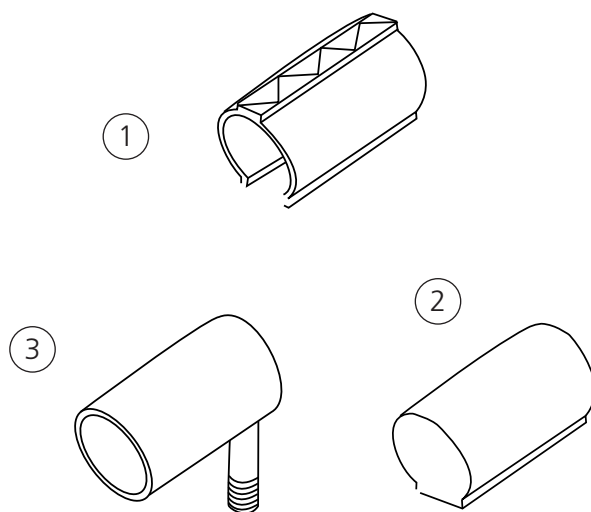


Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Däck 20x1 (25-451) Speedlite svart	83897	●	●	
	Däck 22x1 (25-501) Speedlite svart	83898	●	●	
	Däck 24x1 (25-540) Speedlite svart	83899	●	●	
2	Däck 20x1 3/8 (37-451) mass svart	83347	●	●	
	Däck 22x1 3/8 (37-501) mass svart	83348	●	●	
	Däck 24x1 1/4 (32-540) mass svart	83349	●	●	
3	Slang 20x1 (25-451) högtr	82199	●	●	
	Slang 22x1 (25-501) högtr	80136	●	●	
	Slang 24x1 (25-540) högtr	80560	●	●	
	Slang 25x1 (25-559) högtr	83904	●	●	

Drivringar C5

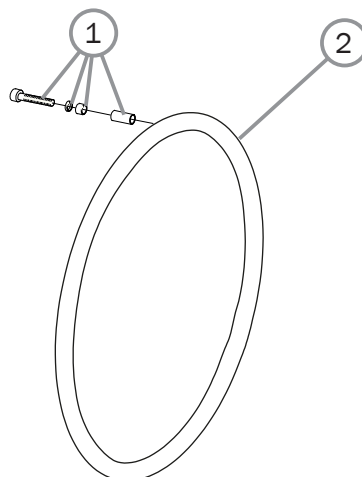


Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Monteringssats drivring titan/alu/cellgummi/rfr	24514	●	●	
2	20" Drivhjul				
	Drivring D465 hjul 20" alu	81109	●	●	
	Drivring D465 hjul 20" plastad	81229	●	●	
	Drivring D425 hjul 20" cellgummi clipsmonterat	24442	●	●	
	Drivring D465 hjul 20" rfr	21034	●	●	
	Drivring D465 hjul 20" rfr	83006	●	●	
	Drivring D465 hjul 20" plastad	83010	●	●	
	22" Drivhjul				
	Drivring D500 hjul 22" alu	25636	●	●	
	Drivring D500 hjul 22" rfr	24395	●	●	
	Drivring D500 hjul 22" plastad	80895	●	●	
	Drivring D469 hjul 22" cellgummi clipsmonterat	24551	●	●	
	Drivring D500 hjul 22" rfr	83007	●	●	
	Drivring D500 hjul 22" plastad	83011	●	●	
	24" Drivhjul				
	Drivring D540 hjul 24" alu	25181	●	●	
	Drivring D540 hjul 24" rfr	24023	●	●	
	Drivring D540 hjul 24" plastad	82998	●	●	
	Drivring D540 hjul 24" cellgummi clipsmont	80800	●	●	
	Drivring D540 hjul 24" rfr	83008	●	●	
	Drivring D540 hjul 24" plastad	83012	●	●	

Drivringar C6

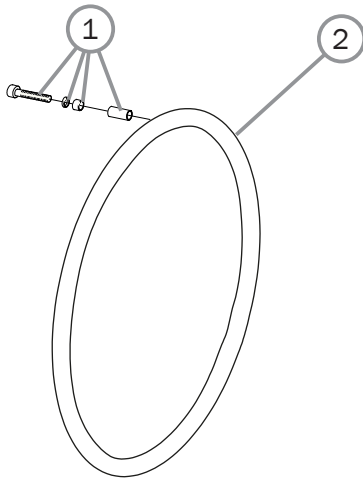

Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Monteringskit drivring 6 fp (ej plastad)	83892	●	●	
2	20" Drivhjul				
	Drivring 20" al 6 fp	83890	●	●	
	Drivring 20" rfr 6 fp	83891	●	●	
	Drivring 20" plastad 6 fp	83339	●	●	
	22" Drivhjul		●	●	
	Drivring 22 al 6 fp	83888	●	●	
	Drivring 22 rfr 6 fp	83889	●	●	
	Drivring 22 plastad 6 fp	83338			
	24" Drivhjul		●	●	
	Drivring 24 al 6 fp	83886	●	●	
	Drivring 24 rfr 6 fp	83887	●	●	
	Drivring 24 plastad 6 fp	83335	●	●	

Länkhjul 57 mm navbredd

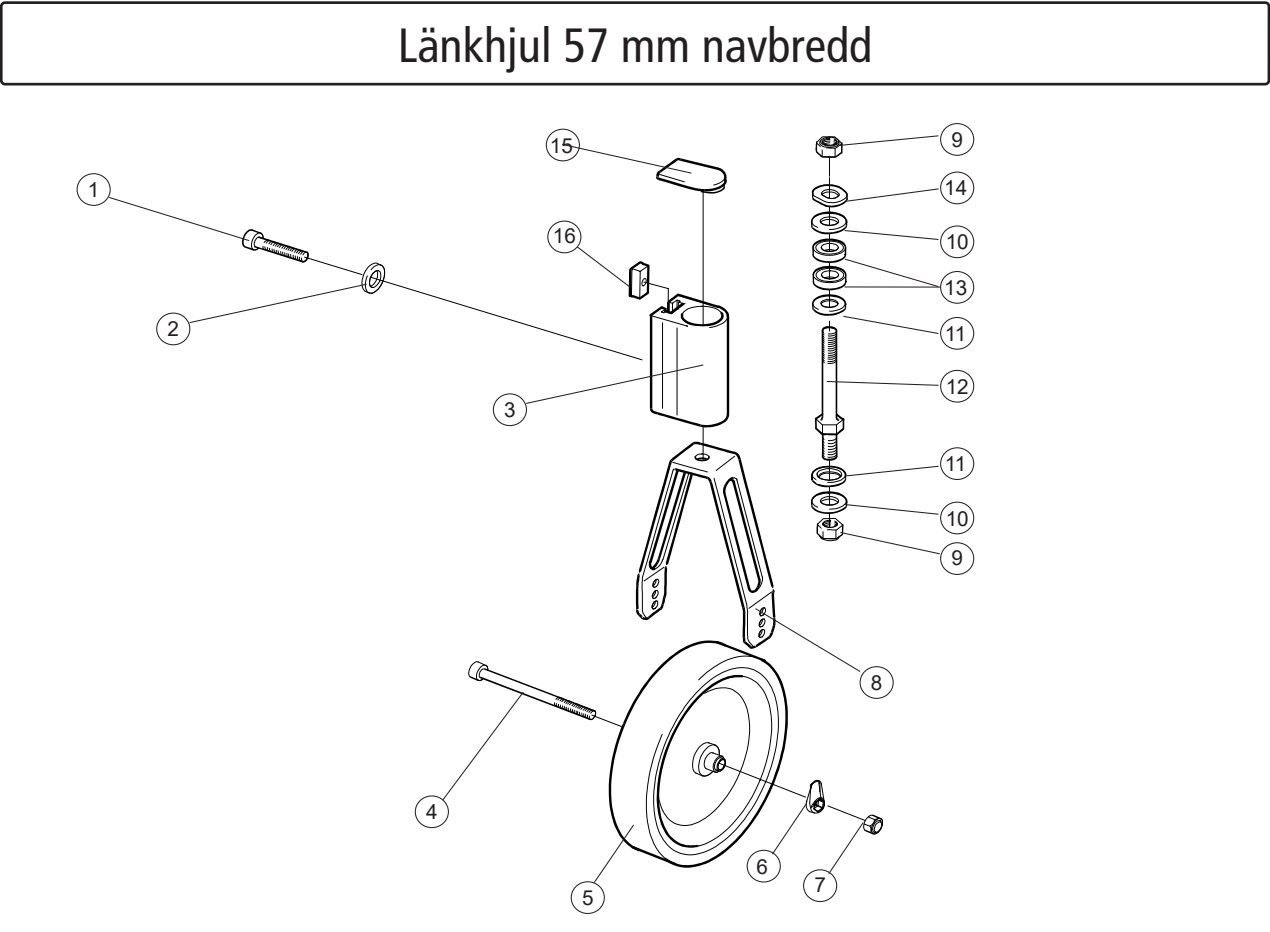

Länkhjul 57 mm navbredd


Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Skruv M8x1x40 MC6S 12.9 svkr	11305
2	Låsbricka NL8	13092
3	Framgaffelfäste 6063 HIT T6 4104-06	80606
	Framgaffelfäste breddat	80899
	Framgaffelfäste breddat kpl	25763
4	Skruv M 6x 75 MC6S 12.9 svkr	11338
5	Hjul	
6	Skydd hjulaxel	51284
7	Låsmutter M6 DIN 985-6 svkr	12035
4-7	Länkhjul 6 150x30 massivt mjukt	27863
	Länkhjul 6,5 165x30 massivt hårt	27866
	Länkhjul 7 175x45 massivt mjukt	27867
	Länkhjul 8 200x35 massivt mjukt	27864
	Länkhjul 8 200x50 massivt mjukt	27868
8	Framgaffel std	
	Framgaffel kort	
	Framgaffel Transit 8x2 exkl axel	25889-01
8-12	Framgaffel std inkl axel	28422
	Framgaffel kort inkl axel	28421
	Framgaffel Transit 8x2 stålaxel	27874
9	Låsmutter låg svkr	12077
10	Bricka BRB 13.5 svkr	13031
11	Bricka 12.7x24x2.5 med fas	13032
12	Axel framgaffel stål	83812
13	Kullager EE4 2RS	80244
14	Bricka 13x24x1.2 DIN 137B fzb	13040
15	Lock framgaffelfäste	51220
16	Spårmutter	82922

Prio

Prio VB


Prio 16"

Länkhjul 45 mm navbredd

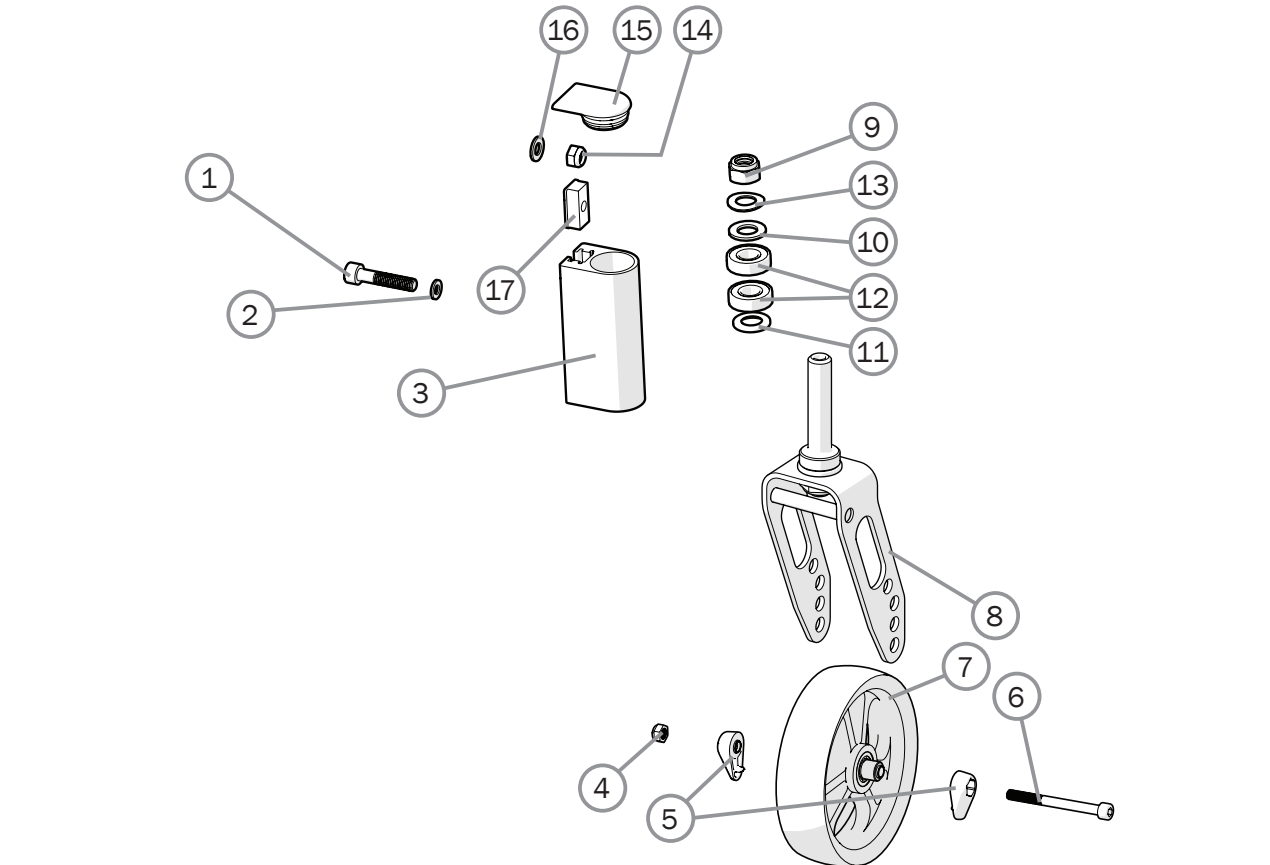

Pos.	Benämning	Art. nr.			
1	Skruv M8x1x40 MC6S 12.9 svkr	11305	●	●	●
2	Låsbricka NL8	13092	●	●	●
3	Framgaffelfäste 6063 HIT T6 4104-06	80606	●	●	●
	Framgaffelfäste breddat	80899	●	●	●
	Framgaffelfäste breddat kpl	25763	●	●	●
4	Låsmutter M6 DIN 985-6 Zn8/P4	12035	●	●	●
5	Skydd hjulaxel	51284	●	●	●
	Skydd hjulaxel (50st)	28966	●	●	●
6	Skruv M6x60 MC6S Zn8/P4 sv 12,9	11408	●	●	●
7	Hjul				
4-5, 7	Länkhjul 6 150x34 kpl	28922	●	●	●
	Länkhjul 8 200x38 kpl	28526	●	●	●
8	Framgaffel stål S m axel	24038	●	●	●
	Framgaffel stål M m axel	28969	●	●	●
9	Låsmutter låg	12077	●	●	●
10	Bricka BRB 13.5 Zn8/P4	13031	●	●	●
11	Bricka 12.7x24x2.5 med fas	13032	●	●	●
12	Kullager EE4 2RS	80244	●	●	●
13	Bricka 13x24x1.2 DIN 137B fzb	13040	●	●	●
14	Låsmutter M8x1 DIN 985 fzb	12051	●	●	●
15	Lock framgaffelfäste	51220	●	●	●
	Lock breddat framgaffelfäste	50429	●	●	●
16	Bricka BRB 8.4x16x1.6 fzb	13001	●	●	●
17	Spårmutter	82922	●	●	●

Breddningssats

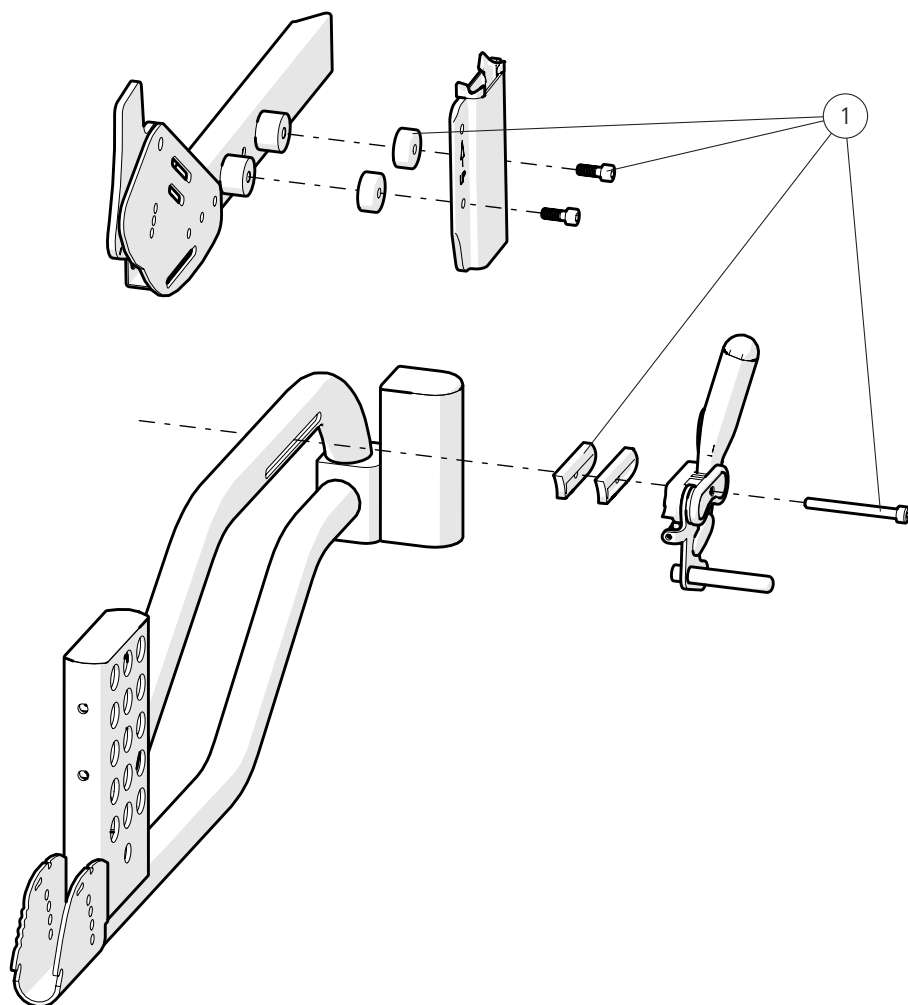

Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Breddningssats 25 mm	27892


Prio

Prio VB

Prio 16"




Hård sits

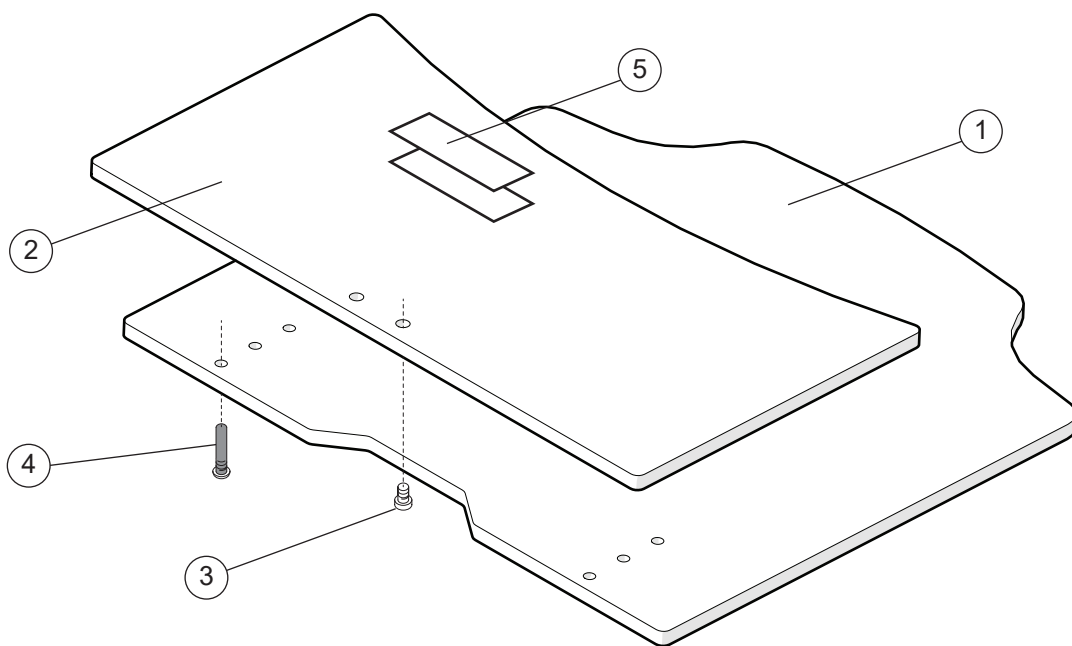

Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Sits plywood undre 40 cm	83448	●	●	●
	Sits plywood undre 45 cm	83449	●	●	●
	Sits plywood undre 50 cm	83450	●	●	●
	Sits plywood undre 55 cm	83451	●	●	●
	Sits plast undre 40 cm	51233	●	●	●
	Sits plast undre 45 cm	51234	●	●	●
	Sits plast undre 50 cm	51235	●	●	●
	Sits plast undre 55 cm	51236	●	●	●
2	Sits plywood övre KPL 40K	82952	●	●	●
	Sits plywood övre KPL 45K	82953	●	●	●
	Sits plywood övre KPL 50K	82954	●	●	●
	Sits plywood övre KPL 55K	82955	●	●	●
	Sits plast övre KPL 40	51125	●	●	●
	Sits plast övre KPL 45	51126	●	●	●
	Sits plast övre KPL 50	51127	●	●	●
	Sits plast övre KPL 55	51128	●	●	●
3	Skruv M 6x 14 MC6LS SW5 Zn8/P4 sv	11539	●	●	●
4	Fästnit	51114	●	●	●
5	Kardborrsats	28183	●	●	●

Armstöd

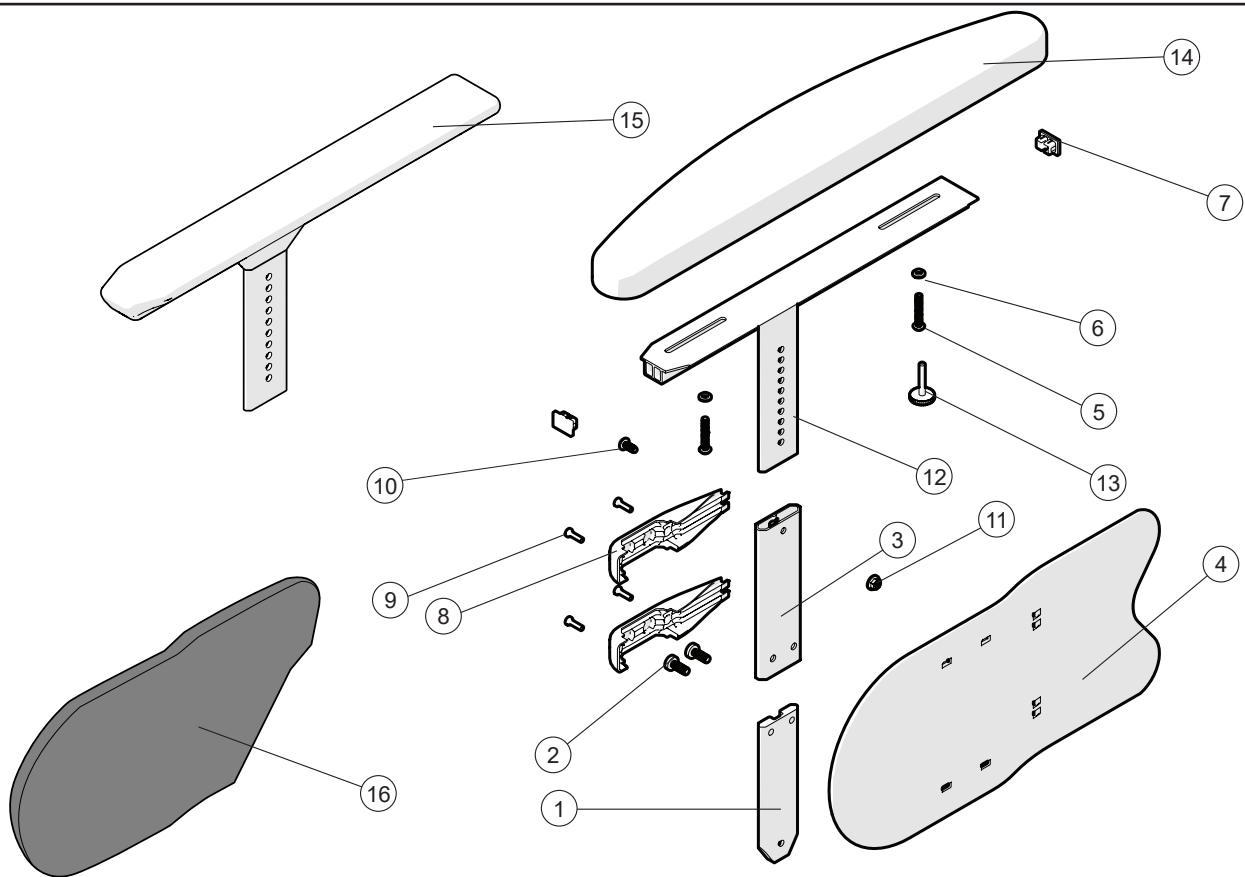


Pos.	Benämning	Art. nr.
1-14	Armstöd teleskop L49 hö	28827-1
	Armstöd teleskop L49 vä	28827-2
	Armstöd teleskop L49 hö fingerskruv	28828-1
	Armstöd teleskop L49 vä fingerskruv	28828-2
1-13, 15	Armstöd teleskop L38 hö	28826-1
	Armstöd teleskop L38 vä	28826-2
1-13	Armstöd teleskop u dyna hö	28832-1
	Armstöd teleskop u dyna vä	28832-2
1	Profil	
2	Skruv	
3	Profilhylsa	
4	Skyddsskiva	51256
5	Skruv M5x30	11446
6	Ledhylsa	50285
7	Ändavslutning	51195
8	Överfall	51208
9	Skruv K40x14	11419
10	Skruv M6x12 MC6S 8.8 fzb	11577
11	Låsmutter M6 fzb DIN 985-6	12017
12	Armstödsprofil hö	
	Armstödsprofil vä	
13	Fingerskruv	83803
14	Armstödsdyna	83266
15	Armstöd massiv platta hö	
	Armstöd massiv platta vä	
16	Polstring sidoskydd hö	63271-1
	Polstring sidoskydd vä	63271-2

Prio

Prio VB

Prio 16"

Armstöd forts

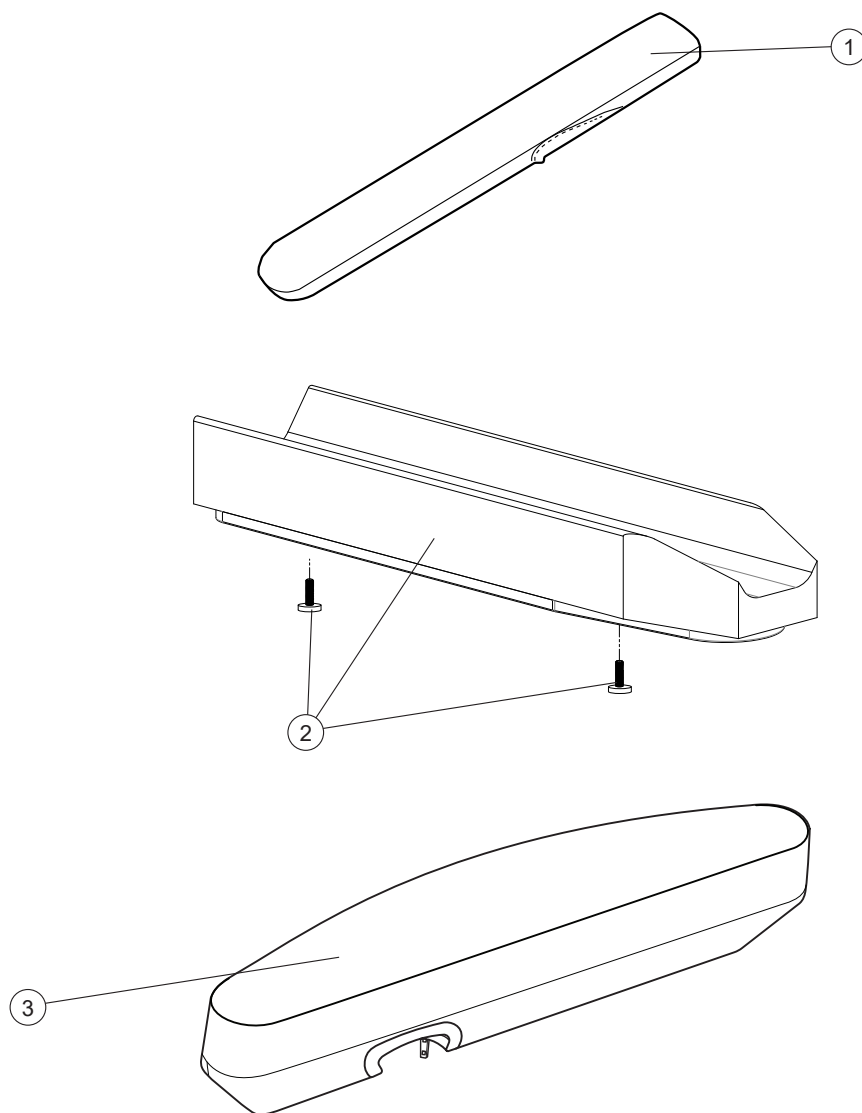

Prio


Prio VB

Prio 16"

Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Armstödsdyna polstrad lång mörkgrå	62283-60
	Armstödsdyna gel lång kompl	26241-60
	Armstödsdyna polstrad lång Dartex	62283-63
	Armstödsdyna gel lång kompl Dartex	26241-63
2	Armstödsdyna mjuk bred inkl skruv	28640
3	Armstödsdyna polstrad Prio hö	63193-60-1
	Armstödsdyna polstrad Prio vä	63193-60-2

Prio	Prio VB	Prio 16"
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●


Armstöd Hemi

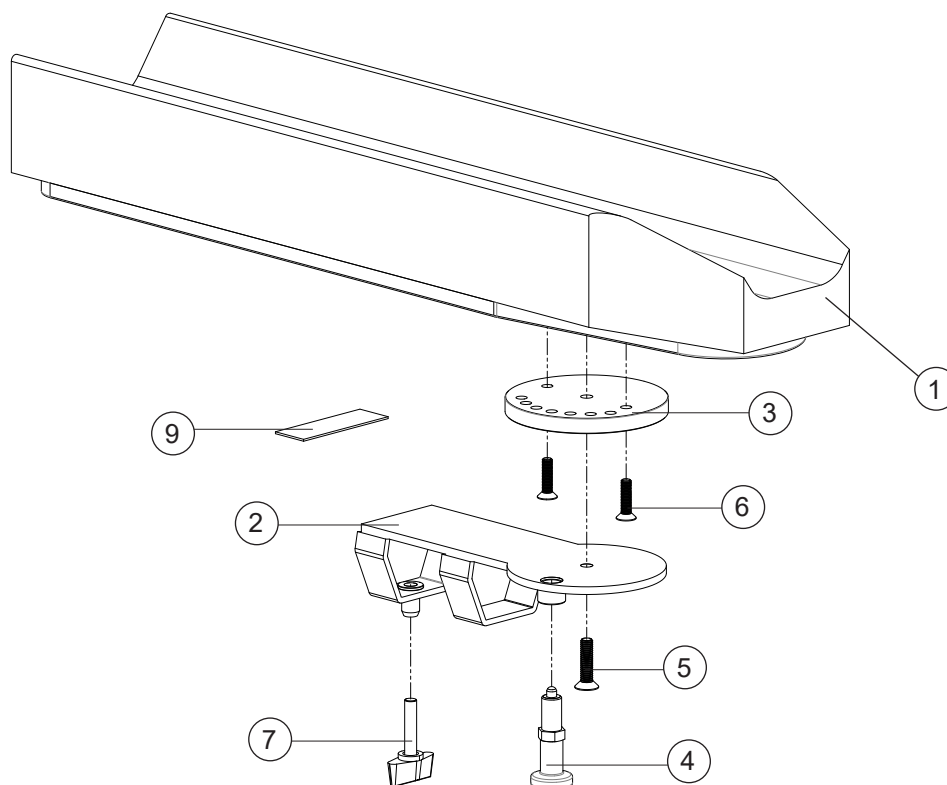

Pos.	Benämning	Art. nr.
1-7	Armstöd hemi hö	25770-60-1
	Armstöd hemi vä	25770-60-2
1	Armstödsdyna Hemi	62910-60
2	Fäste armstöd hemi hö	27265-1
	Fäste armstöd hemi vä	27265-2
3	Vridplatta hö	27280-1
	Vridplatta vä	27280-2
4	Inställningsbult M10x1 Wiberger GN617.1 Form A	82338
5	Skruv M 6x 25 MF6S svkr esloc	11430
6	Skruv M 5x 20 MF6S svkr	11526
7	Vred M 6x 30	82033

Prio	Prio VB	Prio 16"
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●


Bålstöd JB

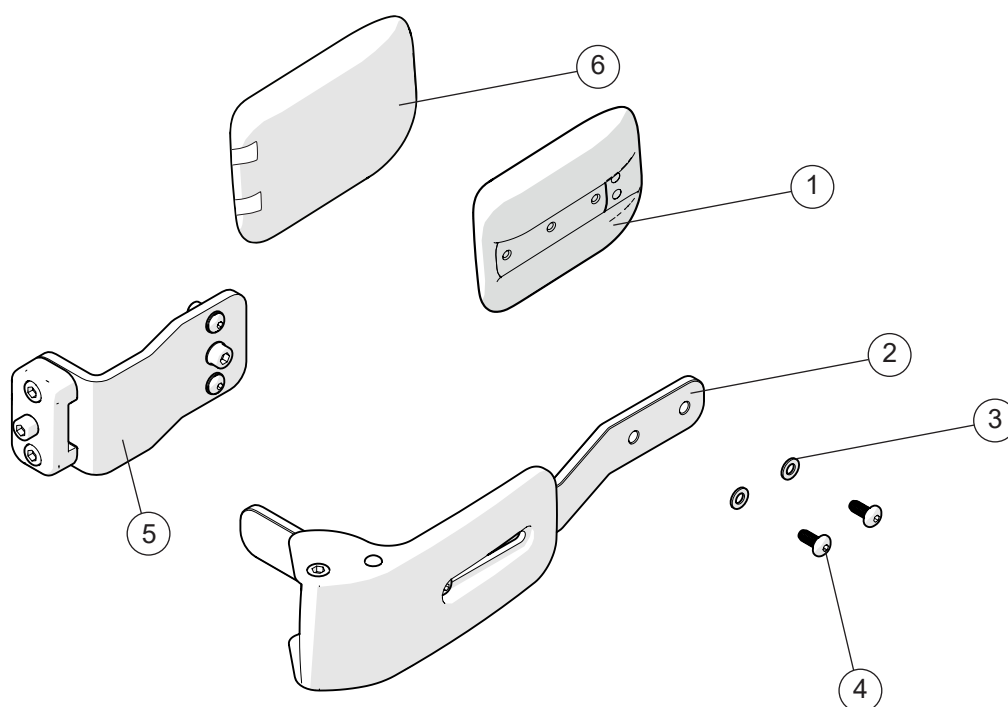

Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1-5	Båstöd Prio inkl fäste hö -0 mm	28181-1	●	●	●
	Båstöd Prio inkl fäste vä -0 mm	28181-2	●	●	●
	Båstöd 3A kompl ssb hö -15 mm	28180-1	●	●	●
	Båstöd 3A kompl ssb vä -15 mm	28180-2	●	●	●
	Båstöd 3A kompl ssb hö -45 mm	28141-1	●	●	●
	Båstöd 3A kompl ssb vä -45 mm	28141-1	●	●	●
1	Bålstödsdyna	83005	●	●	●
2	Bålstödsarm		●	●	●
3	Bricka 5.3x10x1 BRB fzb DIN 125	13017	●	●	●
4	Skruv M 5x 12 K6S 10.9 fzb	11208	●	●	●
5	Bålstödsfäste 3A kompl	28146	●	●	●
6	Överdrag bålstöd	28647	●	●	●


Se sida 36 för olika stag

Bålstöd

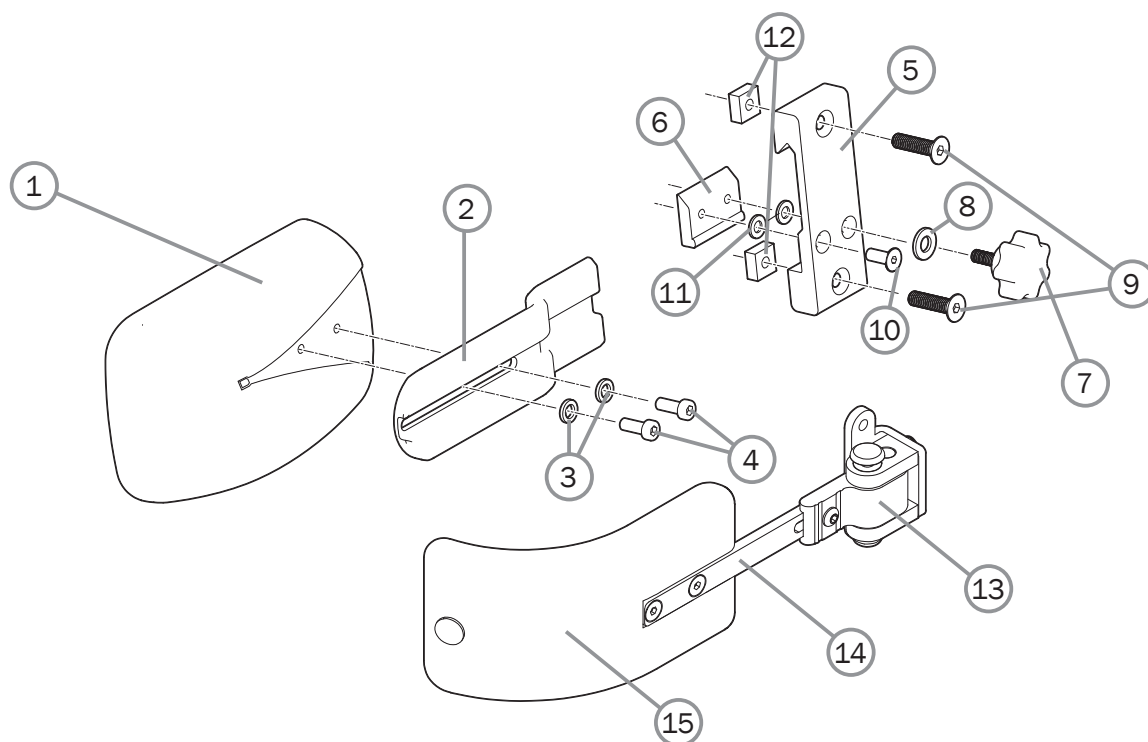

Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1-12	Bålstöd Crossrygg 3 inkl beslag	27395	●	●	●
1	Bålstödsdyna	82491	●	●	●
2	Beslag bålstöd	82507	●	●	●
3	Fjäderbricka 6.1x9.9x1.6 DIN 7980	13014	●	●	●
4	Skruv M 5x 12 K6S 10.9 fzb	11208	●	●	●
5	Armstödsfäste	80403	●	●	●
6	Låsklack armstöd	80292	●	●	●
7	Ratt M5 x 14	80807	●	●	●
8	Bricka BRB 5.3x15x1.2 svkr Din 9021	13004	●	●	●
9	Skruv M 6x 25 MF6S svkr esloc	11430	●	●	●
10	Skruv M 5x 14 MF6S svkr	11237	●	●	●
11	Vågbricka 5.3x10x0.5 DIN 137A fzb	13026	●	●	●
12	Mutter M6 FK4M blankkrom	12166	●	●	●
13	Fästbeslag ssb bålstöd hö kompl	27947-1	●	●	●
13	Fästbeslag ssb bålstöd vä kompl	27947-2	●	●	●
14	Stag bålstöd ssb rakt L 12 cm	27948	●	●	●
15	Dyna bålstöd mellan böjd svart H 6.5 cm L 17 cm	27949	●	●	●
15	Dyna bålstöd stor böjd svart H 9 cm L 19 cm	27950	●	●	●

Bålstöd

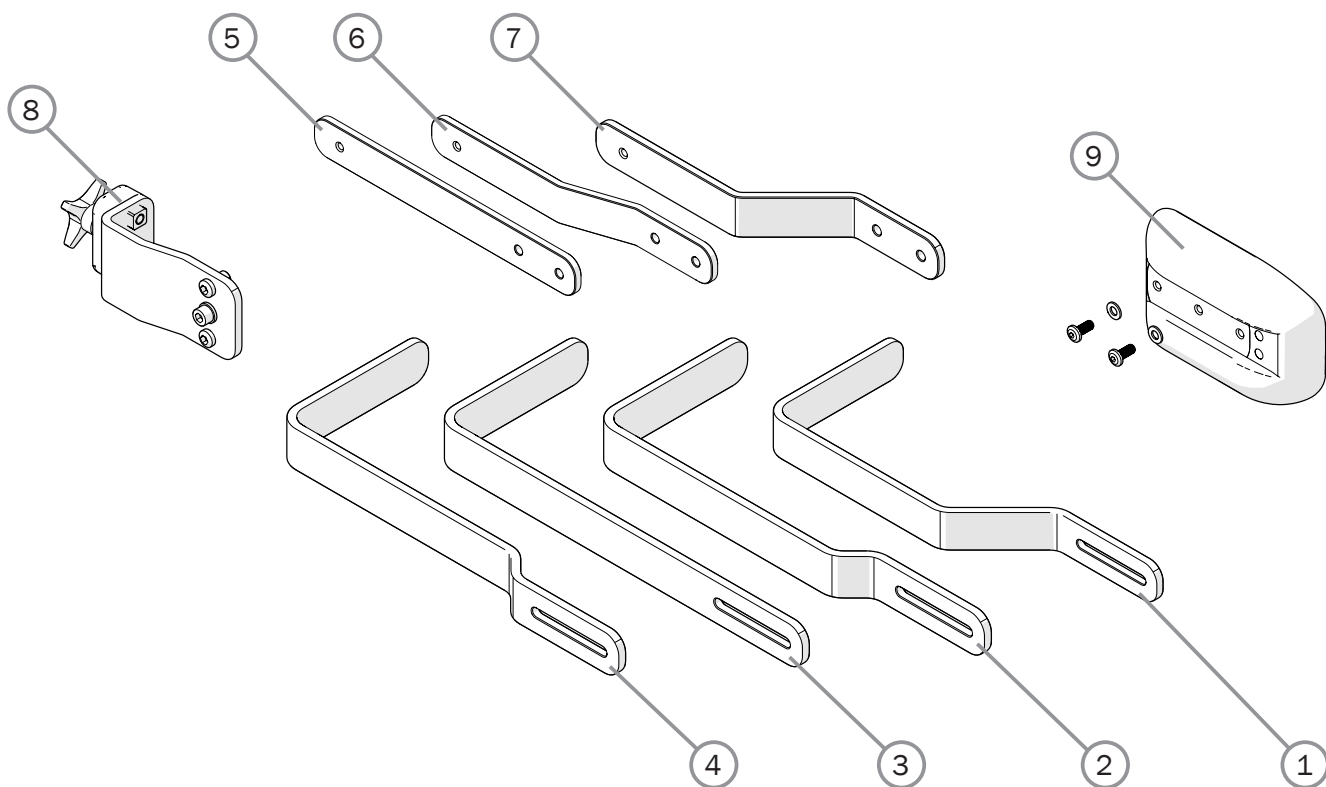


Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Bålstöd dynplåt -45 mm	83002
2	Bålstöd dynplåt -15 mm	83017
3	Bålstöd dynplåt 0 mm	83018
4	Bålstöd dynplåt +15 mm	83019
5	Bålstöd dynplåt ssb -0 mm	83046
6	Bålstöd dynplåt ssb -15 mm	83045
7	Bålstöd dynplåt ssb -45 mm	83001
8	Bålstödsfäste 3A kompl	28146
9	Bålstöd dyna rak kompl	28276

Prio
Prio VB
Prio 16"

●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●


Bålstödsadapter

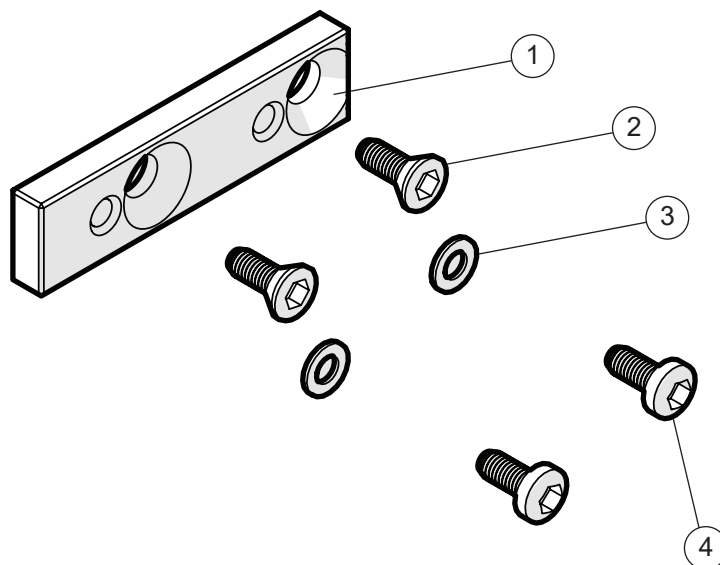

Pos.	Benämning	Art. nr.
1-4	Adapterkit bålstödsdyna R82	28240
1	Bålstödsadapter	83160
2	Skruv	11592
3	Bricka 5.3x10x1 BRB fzb DIN 125	13017
4	Skruv M 5x 12 K6S 10.9 fzb	11208


Prio	Prio VB	Prio 16"
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●

Abduktionskloss

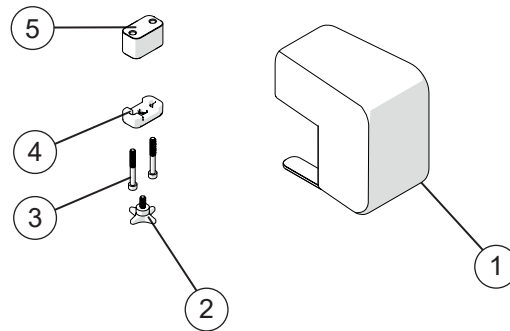


Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1-5	Abduktionskloss kompl	28022	●	●	●
1	Abduktionskloss	28194	●	●	●
2	Vred 40 M6x17	80297	●	●	●
3	Skruv	11037	●	●	●
4	Fäste Bålstöd	28305-01	●	●	●
5	Distans	83042	●	●	●

Bord

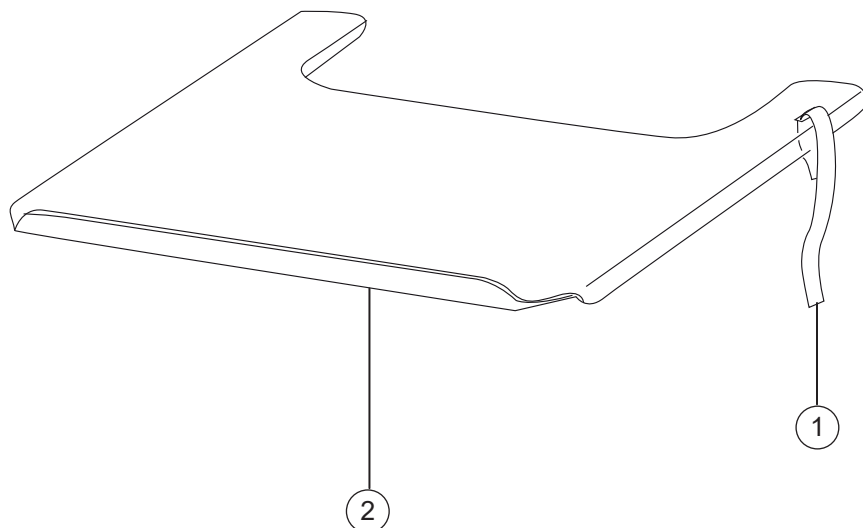

Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Fixeringsband bord	82921	●	●	●
1-2	Bord Prio 40 bordbredd 57.5cm	27971	●	●	●
	Bord Prio 45 bordbredd 62.5cm	27972	●	●	●
	Bord Prio 50 bordbredd 67.5cm	27973	●	●	●
	Bord Prio 55 bordbredd 72.5cm	27974	●	●	●

Fäste selar

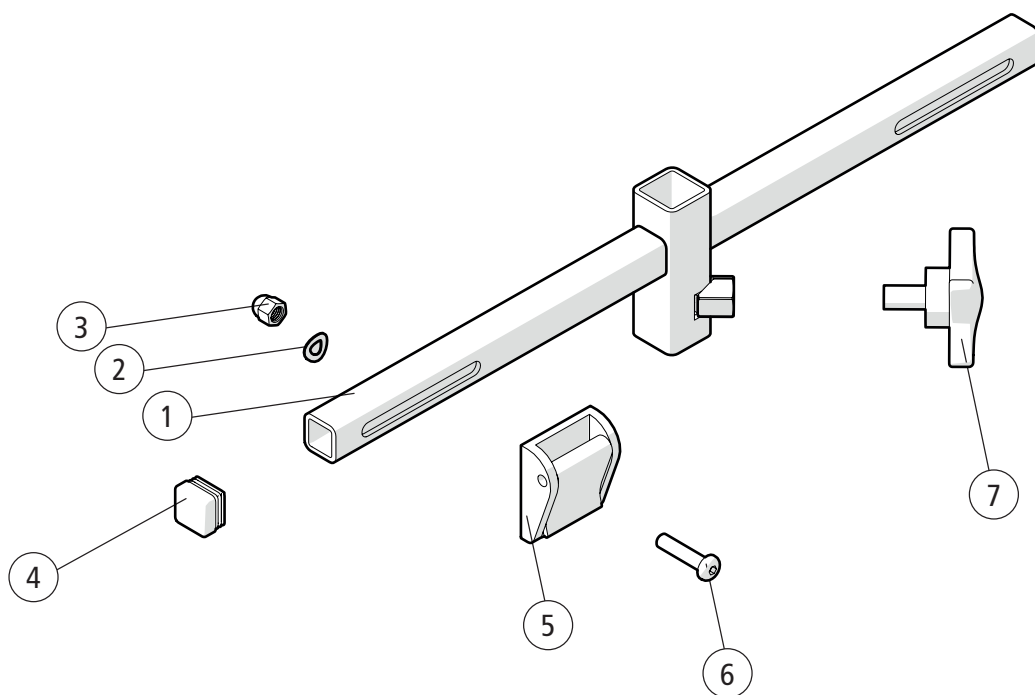

Pos.	Benämning	Art. nr.
1-7	Fäste selar kpl	28186
1	Fäste selar	
2	Vågbricka D10x5.3x0.5	13017
3	Kupolmutter M5	12167
4	Ändplugg	50972
5	Kamlås 25 mm	310445025
6	Skruv M 5x 22 MK6S fzb	11075
7	Ratt	400118


Prio

Prio VB

Prio 16"


●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●

Droppstativ

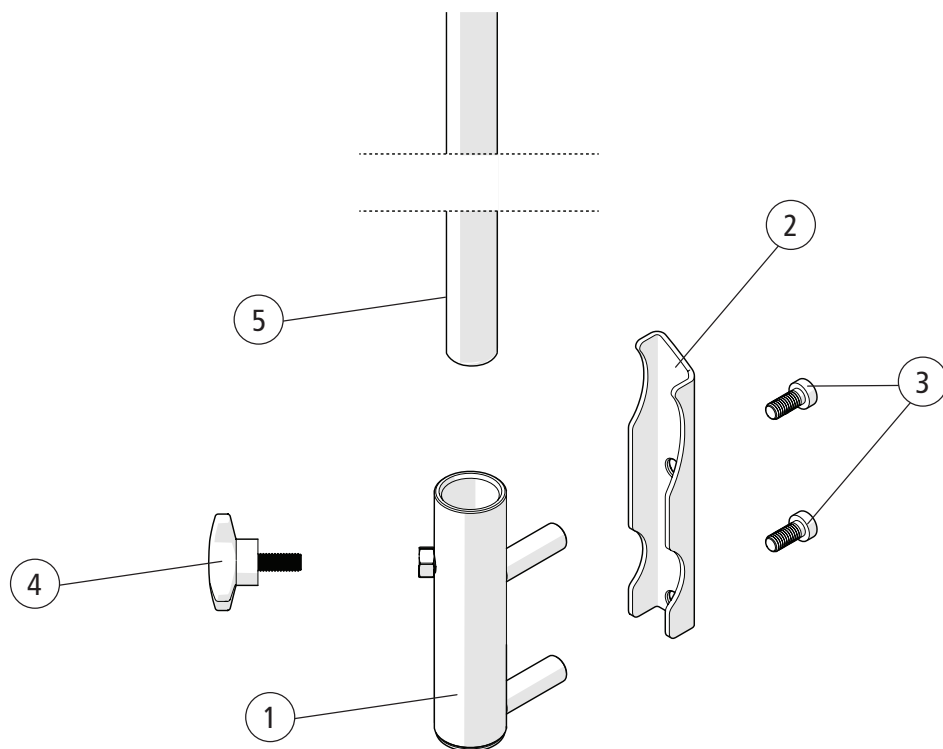

Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1-5	Droppställning kpl	28341	●	●	●
1-4	Fäste	28318	●	●	●
1	Dropphållare svetsad Prio		●	●	●
2	Dropphållare beslag		●	●	●
3	Skruv M 6x 14 MC6LS SW5 Zn8/P4 sv	11539	●	●	●
4	Vred	80297	●	●	●
5	Droppställning krok	83053	●	●	●

Korg

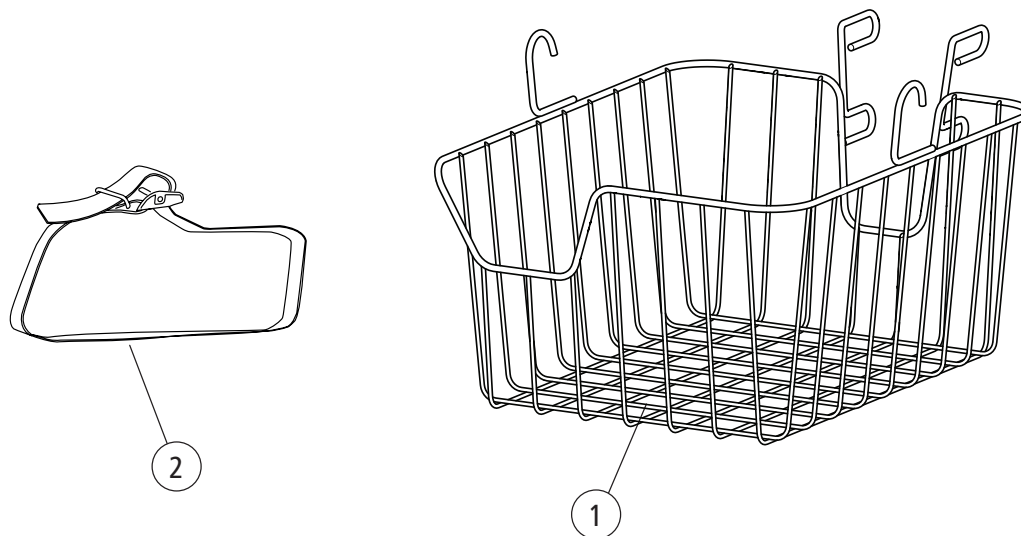

Pos.	Benämning	Art. nr.
1-2	Korg kompl Prio	28316
1	Korg	
2	Rem	80459


Prio

Prio VB

Prio 16"

●	●	●
●	●	●
●	●	●


Positioneringsbälte

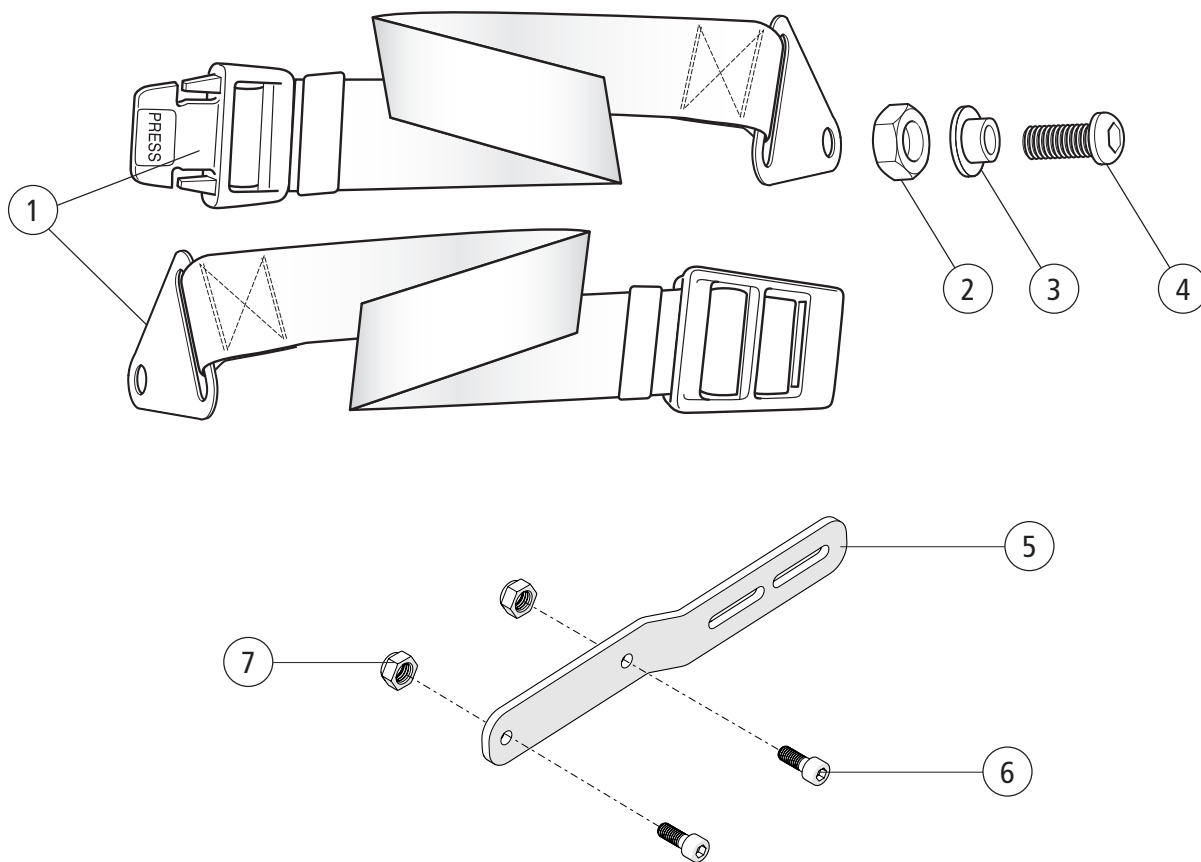

Pos.	Benämning	Art. nr.
1-4	Positioneringsbälte längd 100 mm	27904
	Positioneringsbälte längd 128 mm	28544
2	Mutter M6	
3	Distans Positioneringsbälte	
4	Skruv K6S 6x14	
5-7	Fäste positioneringsbälte	28641
6	Skruv M6x16 MC6S 12.9	11253
7	Låsmutter M6 Zn8/P4 DIN 985-6	12035

Prio	Prio VB	Prio 16"
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●


Tippskydd

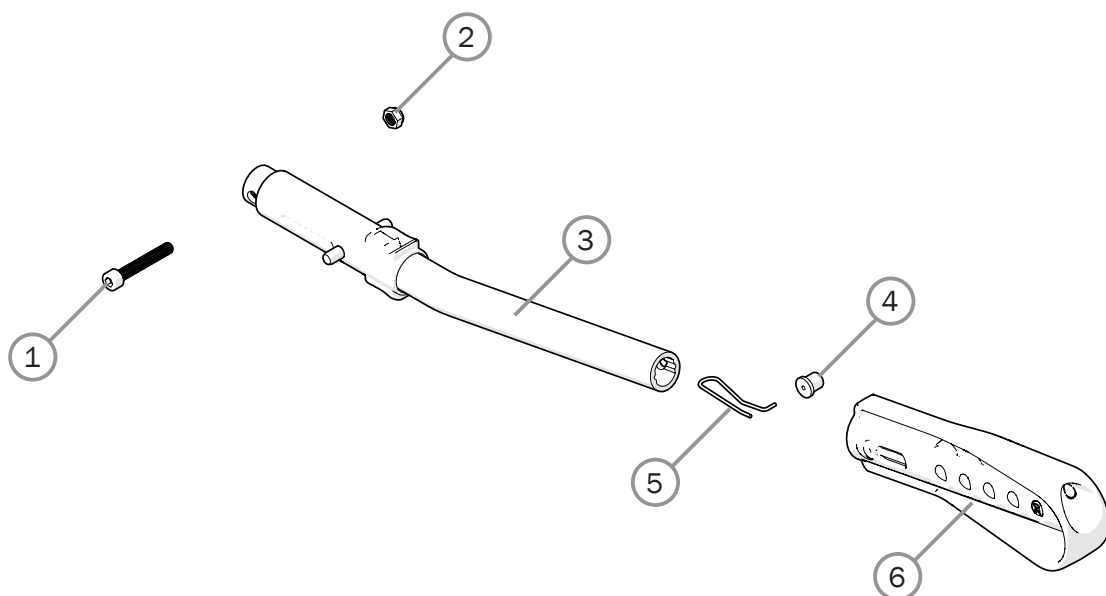

Pos.	Benämning	Art. nr.
1-6	Tippskydd multi Cross 5/6 Prio cc 59 kpl	28457
1	Skruv M6x40 MC6S 10.9 fzb	11229
2	Låsmutter M6	12017
3	Tippskyddsrör	
4	Tapp	
5	Fjäder	
6	Tippskyddsrör teleskop multi	51201


Prio	Prio AB	Prio 16"
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●

Ekerskydd

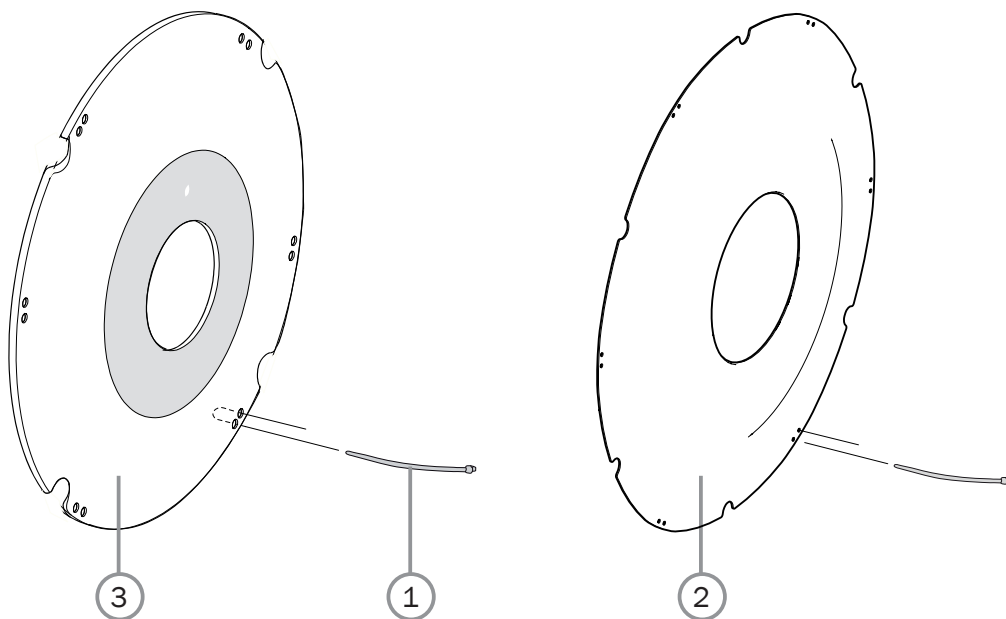


Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Monteringssats ekerskydd, 6 st buntband	26276	●	●	
1-2	Ekerskydd 20" kpl C6/Maxx	28934	●	●	
	Ekerskydd 22" kpl C6/Maxx	28935	●	●	
	Ekerskydd 24" kpl C6/Maxx	28936	●	●	
1,3	Ekerskydd 20" grå Etac	25502-28	●	●	
	Ekerskydd 20" VB grå Etac	28816-28	●	●	
	Ekerskydd 22" grå Etac	25503-28	●	●	
	Ekerskydd 22" gul Etac	25503-29	●	●	
	Ekerskydd 22" VB grå Etac	28817-28	●	●	
	Ekerskydd 24" grå Etac	25504-28	●	●	
	Ekerskydd 24" gul Etac	25504-29	●	●	
	Ekerskydd 24" VB grå Etac	28818-28	●	●	

Huvudstöd, traditionellt

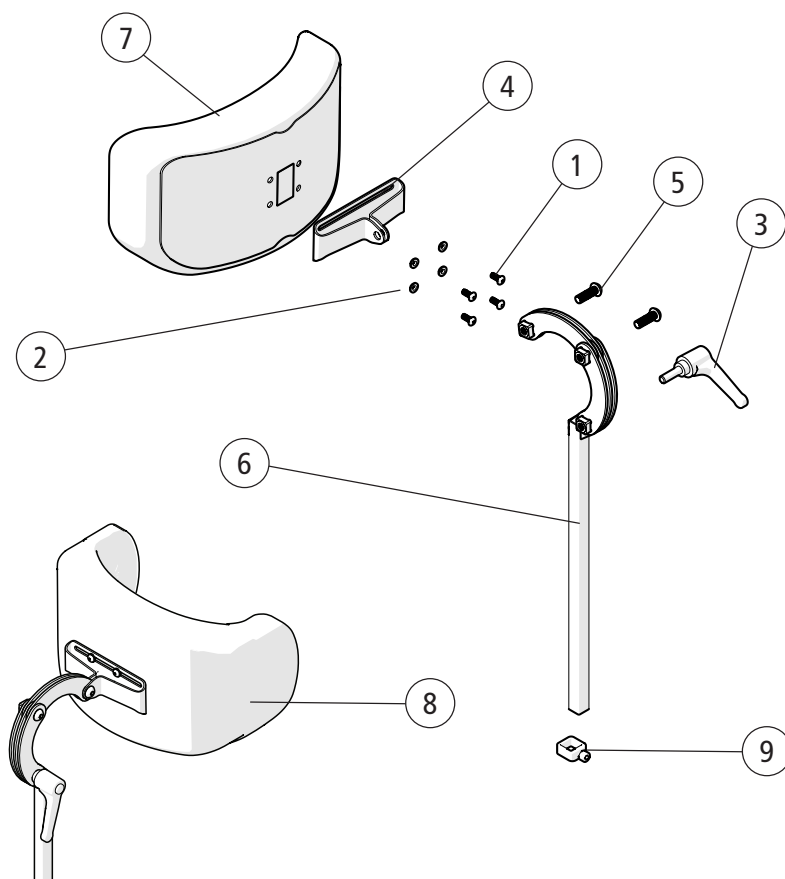


Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Skruv M5x16 MRX svkr	11208	●	●	●
2	Ledhylsa	50285	●	●	●
3	Vred M8x30 65 mm svart	80684	●	●	●
4	Fäste huvudstöd	83288	●	●	●
5	Skruv M8x25	11706	●	●	●
6	Stag 350 mm	28533	●	●	●
1-6	Huvudstöd trad jb mörkgrå plysch	28534-60	●	●	●
	Huvudstöd trad jb hygien grå	28534-65	●	●	●
	Huvudstöd med sidostöd grå hygien	28536-65	●	●	●
7	Överdrag huvudstöd trad plysch	63177-60	●	●	●
	Överdrag huvudstöd trad hygien	63177-65	●	●	●
8	Överdrag huvudstöd med sidostöd	63185-65	●	●	●
9	Minnesfunktion huvudstöd	28564	●	●	●

Sittdyna

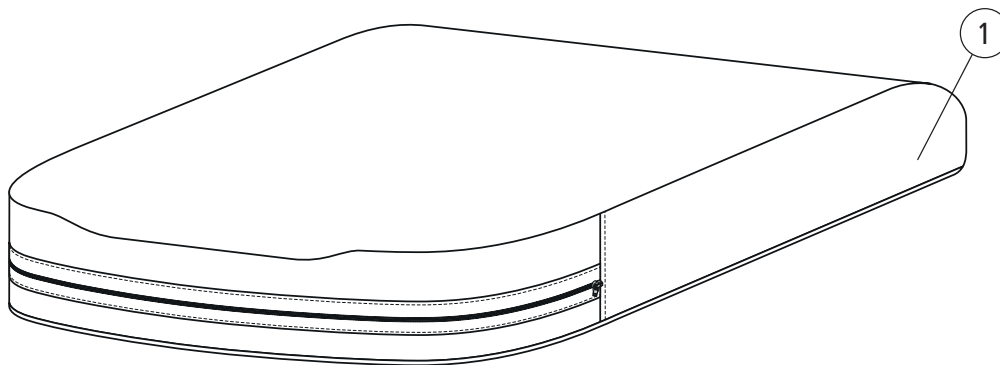


Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Sittdyna Prio 40 cm kort STD Plysch	27751-60	●	●	●
	Sittdyna Prio 40 cm kort STD Hygien grå	27751-65	●	●	●
	Sittdyna Prio 45 cm kort STD Plysch	27752-60	●	●	●
	Sittdyna Prio 45 cm kort STD Hygien grå	27752-65	●	●	●
	Sittdyna Prio 50 cm kort STD Plysch	27753-60	●	●	●
	Sittdyna Prio 50 cm kort STD Hygien grå	27753-65	●	●	●
	Sittdyna Prio 55 cm kort STD Plysch	27754-60	●	●	●
	Sittdyna Prio 55 cm kort STD Hygien grå	27754-65	●	●	●
	Sittdyna Prio 40 cm kort Komfort Plysch	27755-60	●	●	●
	Sittdyna Prio 40 cm kort Komfort Hygien grå	27755-65	●	●	●
	Sittdyna Prio 45 cm kort Komfort Plysch	27756-60	●	●	●
	Sittdyna Prio 45 cm kort Komfort Hygien grå	27756-65	●	●	●
	Sittdyna Prio 50 cm kort Komfort Plysch	27757-60	●	●	●
	Sittdyna Prio 50 cm kort Komfort Hygien grå	27757-65	●	●	●
	Sittdyna Prio 55 cm kort Komfort Plysch	27758-60	●	●	●
	Sittdyna Prio 55 cm kort Komfort Hygien grå	27758-65	●	●	●
	Sittdyna Prio kort hygien std Tidy 40 cm	28055-65	●	●	●
	Sittdyna Prio kort hygien std Tidy 45 cm	28056-65	●	●	●
	Sittdyna Prio kort hygien std Tidy 50 cm	28057-65	●	●	●
	Sittdyna Prio kort hygien std Tidy 55 cm	28058-65	●	●	●

Sittdyna forts.

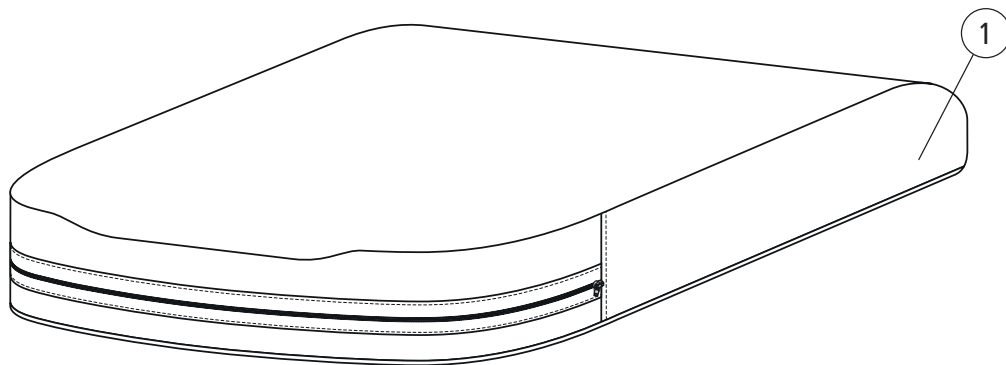


Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Sittdyna Prio 40 cm lång STD Plysch	27759-60	●	●	●
	Sittdyna Prio 40 cm lång STD Hygien grå	27759-65	●	●	●
	Sittdyna Prio 45 cm lång STD Plysch	27760-60	●	●	●
	Sittdyna Prio 45 cm lång STD Hygien grå	27760-65	●	●	●
	Sittdyna Prio 50 cm lång STD Plysch	27761-60	●	●	●
	Sittdyna Prio 50 cm lång STD Hygien grå	27761-65	●	●	●
	Sittdyna Prio 55 cm lång STD Plysch	27762-60	●	●	●
	Sittdyna Prio 55 cm lång STD Hygien grå	27762-65	●	●	●
	Sittdyna Prio 40 cm lång Komfort Plysch	27763-60	●	●	●
	Sittdyna Prio 40 cm lång Komfort Hygien grå	27763-65	●	●	●
	Sittdyna Prio 45 cm lång Komfort Plysch	27764-60	●	●	●
	Sittdyna Prio 45 cm lång Komfort Hygien grå	27764-65	●	●	●
	Sittdyna Prio 50 cm lång Komfort Plysch	27765-60	●	●	●
	Sittdyna Prio 50 cm lång Komfort Hygien grå	27765-65	●	●	●
	Sittdyna Prio 55 cm lång Komfort Plysch	27766-60	●	●	●
	Sittdyna Prio 55 cm lång Komfort Hygien grå	27766-65	●	●	●
	Sittdyna Prio lång hygien std Tidy 40 cm	28059-65	●	●	●
	Sittdyna Prio lång hygien std Tidy 45 cm	28060-65	●	●	●
	Sittdyna Prio lång hygien std Tidy 50 cm	28061-65	●	●	●
	Sittdyna Prio lång hygien std Tidy 55 cm	28062-65	●	●	●

Sittdyna - klädsel

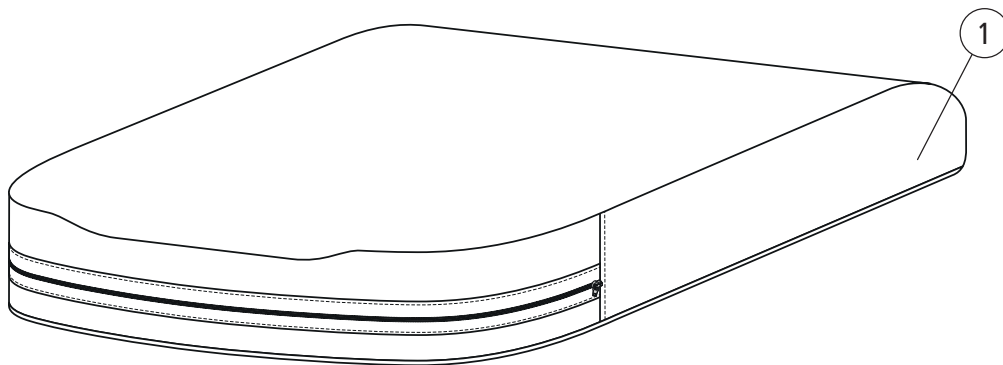


Pos.	Benämning		Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Klädsel sittdyna 40 kort	plysch Prio	63060-60	●	●	●
	Klädsel sittdyna 40 kort	hygien grå Prio	63060-65	●	●	●
	Klädsel sittdyna 45 kort	plysch Prio	63061-60	●	●	●
	Klädsel sittdyna 45 kort	hygien grå Prio	63061-65	●	●	●
	Klädsel sittdyna 50 kort	plysch Prio	63062-60	●	●	●
	Klädsel sittdyna 50 kort	hygien grå Prio	63062-65	●	●	●
	Klädsel sittdyna 55 kort	plysch Prio	63063-60	●	●	●
	Klädsel sittdyna 55 kort	hygien grå Prio	63063-65	●	●	●
	Klädsel sittdyna 40 lång	plysch Prio	63064-60	●	●	●
	Klädsel sittdyna 40 lång	hygien grå Prio	63064-65	●	●	●
	Klädsel sittdyna 45 lång	plysch Prio	63065-60	●	●	●
	Klädsel sittdyna 45 lång	hygien grå Prio	63065-65	●	●	●
	Klädsel sittdyna 50 lång	plysch Prio	63066-60	●	●	●
	Klädsel sittdyna 50 lång	hygien grå Prio	63066-65	●	●	●
	Klädsel sittdyna 55 lång	plysch Prio	63067-60	●	●	●
	Klädsel sittdyna 55 lång	hygien grå Prio	63067-65	●	●	●
	Överdrag sits 40 kort	Tidy	63159-65	●	●	●
	Överdrag sits 45 kort	Tidy	63160-65	●	●	●
	Överdrag sits 50 kort	Tidy	63161-65	●	●	●
	Överdrag sits 55 kort	Tidy	63162-65	●	●	●
	Överdrag sits 40 lång	Tidy	63163-65	●	●	●
	Överdrag sits 45 lång	Tidy	63164-65	●	●	●
	Överdrag sits 50 lång	Tidy	63165-65	●	●	●
	Överdrag sits 55 lång	Tidy	63166-65	●	●	●

Ryggdyna

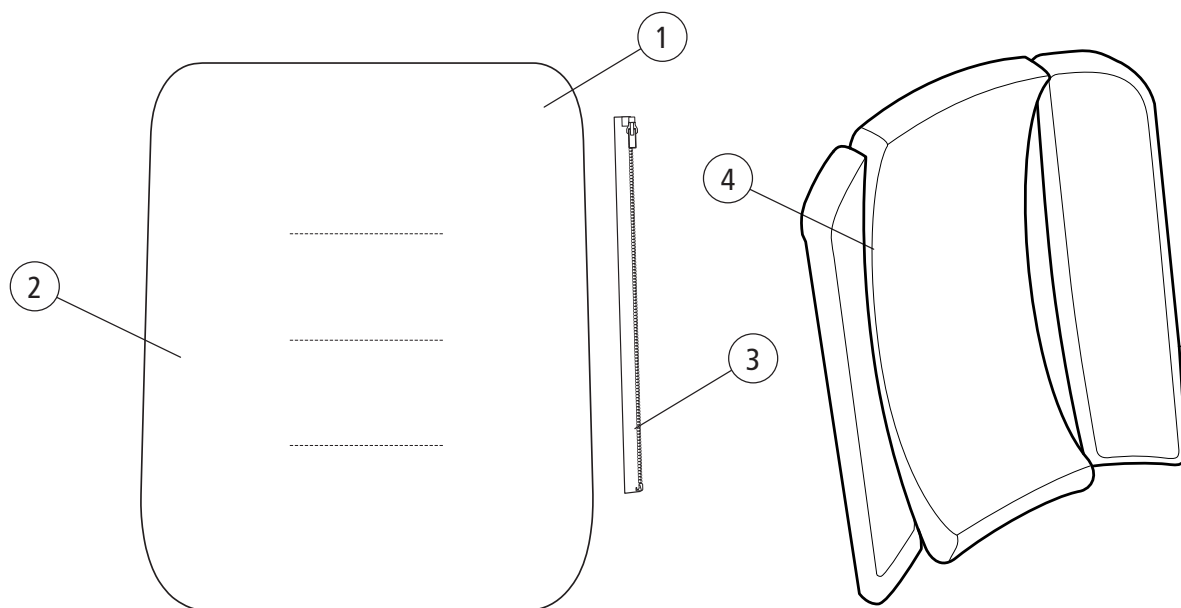


Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Ryggdyna 40 cm Plysch Prio exkl dragkedja	28410-60	●	●	●
	Ryggdyna 40 cm Hygien Prio grå exkl dragkedja	28410-65	●	●	●
	Ryggdyna 45 cm Plysch Prio exkl dragkedja	28411-60	●	●	●
	Ryggdyna 45 cm Hygien Prio grå exkl dragkedja	28411-65	●	●	●
	Ryggdyna 50 cm Plysch Prio exkl dragkedja	28412-60	●	●	●
	Ryggdyna 50 cm Hygien Prio grå exkl dragkedja	28412-65	●	●	●
	Ryggdyna 55 cm Plysch Prio exkl dragkedja	28413-60	●	●	●
	Ryggdyna 55 cm Hygien Prio grå exkl dragkedja	28413-65	●	●	●
2	Överdrag rygg plysch Prio 40 cm grå exkl dragkedja	63230-60	●	●	●
	Överdrag rygg Hygien Prio 40 cm grå exkl dragkedja	63230-65	●	●	●
	Överdrag rygg plysch Prio 45 cm grå exkl dragkedja	63231-60	●	●	●
	Överdrag rygg Hygien Prio 45 cm grå exkl dragkedja	63231-65	●	●	●
	Överdrag rygg plysch Prio 50 cm grå exkl dragkedja	63232-60	●	●	●
	Överdrag rygg Hygien Prio 50 cm grå exkl dragkedja	63232-65	●	●	●
	Överdrag rygg plysch Prio 55 cm grå exkl dragkedja	63233-60	●	●	●
	Överdrag rygg Hygien Prio 55 cm grå exkl dragkedja	63233-65	●	●	●
3	Kardborrfäste ryggklädsel Prio inkl dragkedja	83188	●	●	●
4	Ryggdyna B40 3D plysch	63343-60	●	●	●
	Ryggdyna B45 3D plysch	63344-60	●	●	●
	Ryggdyna B50 3D plysch	63345-60	●	●	●
	Ryggdyna B55 3D plysch	63346-60	●	●	●

Överdrag rygg

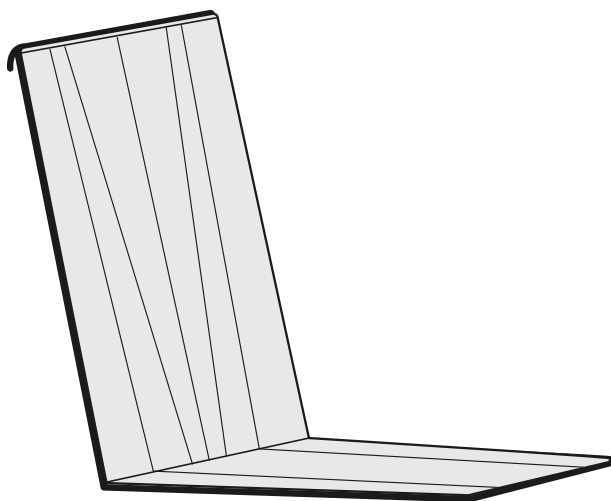



Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Överdrag rygg B40 cm plysch	63339-60	●	●	●
	Överdrag rygg B45 cm plysch	63340-60	●	●	●
	Överdrag rygg B50 cm plysch	63341-60	●	●	●
	Överdrag rygg B55 cm plysch	63342-60	●	●	●

Förlängningsdel ryggklädsel

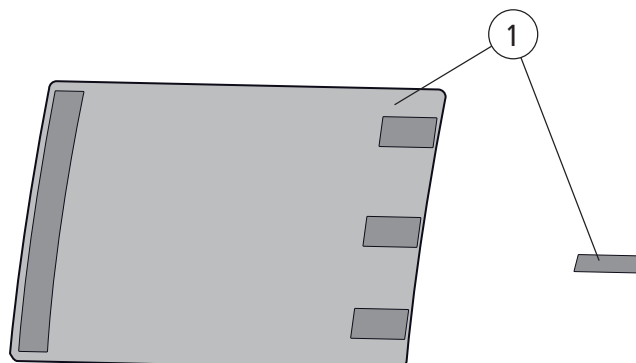

Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Förlängningsdel ryggklädsel	28657	●	●	●

Ryggklädsel

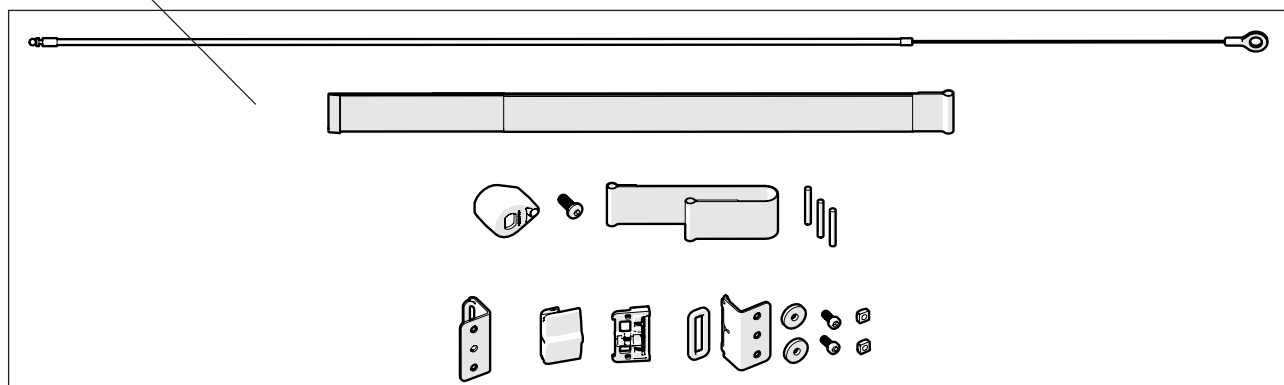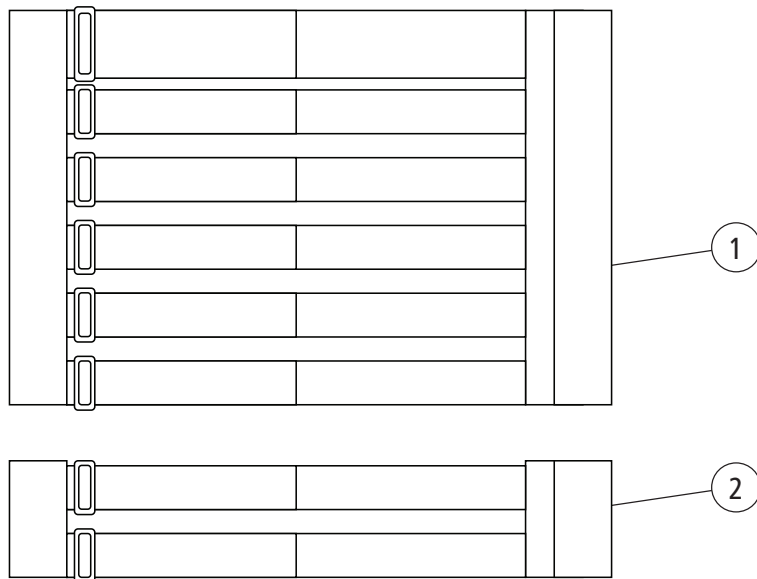


Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Klädsel rygg 3A rb 40-45 cm	62954-60
	Klädsel rygg 3A rb 50-55 cm	62955-60
2	Klädsel rygg 3A rb nedre 40-45 cm	63337-60
	Klädsel rygg 3A rb nedre 50-55 cm	63338-60
3	Bäckenstöd dynamiskt B40	28704
	Bäckenstöd dynamiskt B45	28705
	Bäckenstöd dynamiskt B50/55	28999

Prio

Prio VB

Prio 16"

Ryggvinkelbegränsning

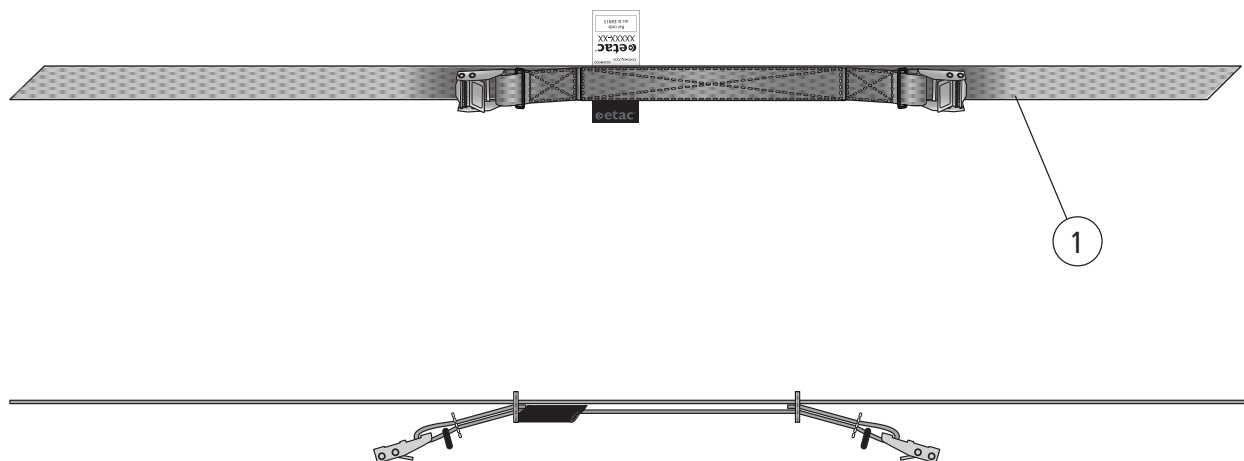

Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Ryggvinkelbegränsning kompl	28573

Prio	Prio VB	Prio 16"
●	●	●