



Molift Mover 180

Een lichte en compacte tillift, geschikt voor zowel de thuiszorg als zorginstellingen

Eenvoudig te manoeuvreren

De Molift Mover 180 heeft een licht aluminium frame, wat de tillift eenvoudig manoeuvreerbaar maakt. Dankzij het grote tilbereik van 27–163 cm kunnen transfers plaatsvinden vanaf hoge oppervlakken én vanaf de vloer. De tillift biedt keuze uit een 2- of 4-punts tiljuk, die zonder gereedschap eenvoudig te wisselen is via een quick-release koppeling.

Standaard is de tillift uitgerust met 75 mm zwenkwielen voor uitstekende wendbaarheid in krappe ruimtes. Voor verplaatsing over oneffen vloeren zijn 100 mm wielen beschikbaar, wat de stabiliteit en het gebruiksgemak vergroot.



molift®



Handbediening

Robuust en wasbaar. Indicatoren voor batterijstatus, overbelasting en service zorgen voor optimale prestaties en veiligheid.



Unieke duwbeugel

De duwbeugel biedt een ergonomische grip met meerdere greepmogelijkheden.



Tiljukopties

2- en 4-punts tiljukken zijn beschikbaar in verschillende maten



Lichtgewicht en compact

Dankzij het lichte en compacte ontwerp is de tillift eenvoudig te manoeuvreren.

Kenmerken

Ergonomische bediening

De Molift Mover 180 is uitgerust met Molift's unieke duwbeugel, die meerdere en flexibele greepmogelijkheden biedt voor verbeterde ergonomie van de verzorger.

Levensduur

De tillift heeft een verwachte levensduur van 30.000 cycli of 15 jaar, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt.

Accu

De accu is voorzien van geavanceerde Li-Ion-technologie en heeft een veilig, afgedicht ontwerp waardoor deze wasbaar is (IPX6). De accu weegt slechts 0,9 kg en kan met één hand worden vervangen. De accu kan direct op de tillift worden opgeladen en er is ook een externe lader beschikbaar. De oplaadtijd bedraagt slechts 3,5 uur. Volledig opgeladen levert de accu 160 tilbewegingen bij 75 kg en is deze compatibel met alle mobiele tilliften van Molift.

Met een verwachte levensduur van 1.700 laadcycli en 5 jaar garantie is de accu ontworpen voor langdurig gebruik.



Snelheidsboost

De tillift heeft een snelheidsboost voor sneller bewegen bij ontlastte actuator.

Handbediening


De handbediening is robuust en bewezen betrouwbaar. Indicatoren voor batterijstatus, overbelasting en service zorgen voor optimale prestaties en veiligheid.

Ontworpen voor duurzaamheid: de kabel is bij beschadiging eenvoudig te vervangen en de handbediening is wasbaar (IPX6).

Molift Service Tool

Molift Mover 180 is, net als alle Molift-tilliften, uitgerust met een uniek servicemeldingssysteem dat aangeeft wanneer onderhoud nodig is. De geïntegreerde service software toont gebruiksgegevens en ondersteunt servicetechnici bij het stellen van diagnoses.

Bovendien is de tillift uitgerust met Bluetooth, wat een draadloze verbinding met de Molift Service Tool mogelijk maakt.

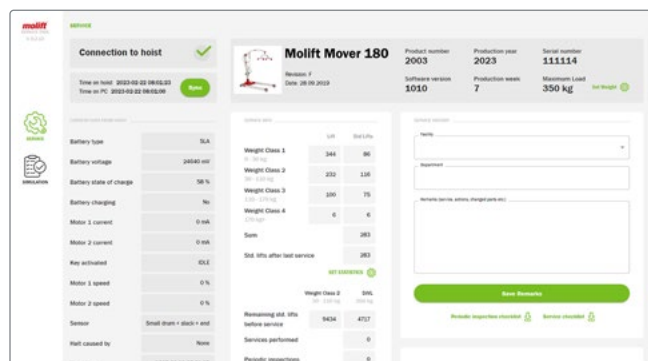

Product

Molift Mover 180
Molift Mover 180
- exclusief tiljuk (los te bestellen)

Artikelnr.

M1801
M1802

Materiaal

Aluminium, staal, plastic

Gewicht

Veilige werkbelasting (SWL) 180 kg
Gewicht van de unit (excl. accu) 31 kg

Dimensies

Hoogte 1940 mm
Lengte 1260 mm
Beenhoogte 105 mm
Maat zwenkwielen 75/100 mm
Tilinterval 1365 mm
Tilhoogte min-max met 2-punts tiljuk 360 - 1730 mm
Tilhoogte min-max met 4-punts tiljuk 265 - 1630 mm

Dimensies

Buitenmaat met gesloten onderstel 670 mm
Buitenmaat met geopend onderstel 1145 mm
Binnenmaat met gesloten onderstel 555 mm
Binnenmaat met geopend onderstel 1025 mm

Technisch

Accu Li-Ion 25.2V, 2.85Ah
Oplaadtijd accu 3.5 uur
Tilnelheid 46 mm/sec
Nominale prestatie 160 lifts/75 kg

Schoonmaken



Reinig/desinfecteer het product met een oplosmiddelvrij reinigingsmiddel met een pH-waarde tussen 5 en 9, of met een desinfectieoplossing van 70%



Voor het beoogde gebruik van de producten en de meest recente informatie, bezoek www.etac.nl

Etac

+31 (0)513 68 16 86

contact.nl@etac.com

www.etac.nl