



OBS: Buffalo er her vist med krydsgjord

Buffalo

Vipbar ståstøtte

 etac®


Buffalo

Buffalo er en vipbar ståstøtte, som giver barnet mulighed for at komme op i en stående stilling, hvilket er meget vigtigt fysisk som psykisk. Buffalo's opretstående position giver barnet et godt overblik og større psykisk velvære. Barnet kan placeres som enten front- eller rygstående. Anvendt rygstående er Buffalo især velegnet til børn hvis handicap gør, at det ellers ville være meget svært at anbringe dem i en ståstøtte.

Detaljer



Højdejusterbar plade for korrekt position.

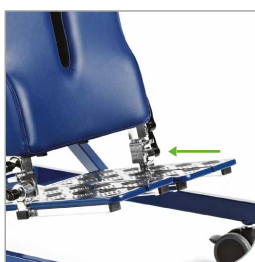

Fodpladernes konstruktion tillader placering og støtte til næsten enhver fodvinkel.



Lås på hjulene sikrer en nem og stabil forflytning



OBS: Buffalo er her vist med krydsjord

Teknisk information om Buffalo

Stel	Pulverlakeret stål
Polstring	Træplade med skum, betrukket med skai
Gjorde	3 stk. enkelte gjorde
Vinkelmåler	Viser hældningen
Fodstøtter	Delte, justerbare i højde og vinkel
Hjul	Massive 75 mm, drejelige og låsbare
Farve	Str. 1: Gul Str. 2: Blå Str. 3: Grøn





Beskrivelse	Art.nr.	HMI-nr.
Buffalo str. 1 m/gaspatron	3186001-11N48	15202
Buffalo str. 2 m/el	3186002-ELN59	19943
Buffalo str. 2 m/gaspatron*	3186002-11N59	15201
Buffalo str. 3 m/el	3186003-ELN58	19942
Buffalo str. 3 m/gaspatron*	3186003-N58	15200

* Bestillingsvare

Mål og vægt

		Str. 1	Str. 2	Str. 3
G:	Bredde	49 cm	54 cm	62 cm
	Højde lodret	85 cm	106 cm	135 cm
	Højde i vandret position uden el	60 cm	65 cm	72 cm
	Højde i vandret position med el		67 cm	74 cm
I:	Højde fra fodstøtte	75 - 115 cm	90 - 135 cm	125 - 170 cm
H:	Længde	70 cm	85 cm	111 cm
	Brystplade bredde	26 cm	32 cm	36 cm
	Brystplade højde	24 cm	27 cm	36 cm
	Basisplade bredde	31 cm	37 cm	46 cm
	Basisplade højde	44 cm	56 cm	81 cm
	Vægt uden el	19 kg	23 kg	33 kg
	Vægt med el		29 kg	36 kg
	Maks. brugervægt	50 kg	70 kg	100 kg
	Vinkling af lejeblade	0° til 90°	0° til 90°	0° til 90°

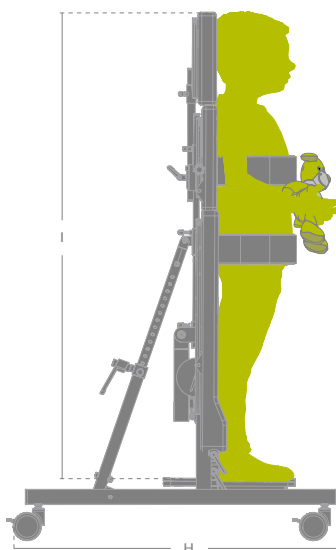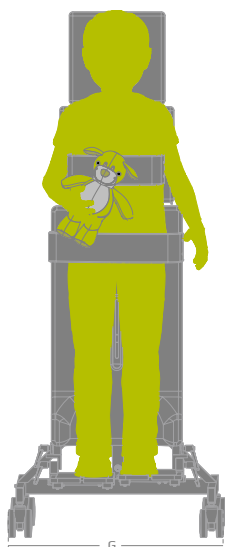

70-111 cm



0-90°



max. 100 kg



49-62 cm

Vippefunktion

Størrelse 1 er udstyret med en gasfjeder som, når den udløses ved et let tryk på fodpedalen, vipper lejet fra lodret til under vandret. Størrelse 2 og 3 er som standard udstyret med elmotor til vippefunktionen, hvorved brugeren også selv får mulighed for at styre vippefunktionen, som foregår i et roligt tempo. Størrelse 2 og 3 kan også fås med manuelt vip (teleskop). Man udløser den fastlåste position ved at løsne et greb, indstille lejet til den ønskede vinkel og fastspænde grebet igen. Skal vippefunktionen anvendes ofte anbefales størrelse 2 og 3 med elmotor af hensyn til plejepersonalet.



Stelfarver



Gul - størrelse 1



Blå - størrelse 2



Grøn - størrelse 3

Betrækfarver



Gul - størrelse 1



Blå - størrelse 2



Grøn - størrelse 3

Tilbehør



Hovedstøtter

Se brochuren "tryk og sikker" eller www.etac.dk



Beslag til hovedstøtte (ved rygståede)

Størrelse	Art. nr.
Str. 1+2	3186250-2
Str. 3	3186250-3



Enhåndsbetjent ansigtsplade

Størrelse	Mål i cm	Art. nr.
Str. 1	24x26	3186130-48
Str. 2	24x26	3186113-59
Str. 3	24x26	3186134-58



Abduktionsklods

Størrelse	HxBxD	Art. nr.
Str. 1	13x8x9	3186103-48
Str. 2	16x8x9	3186109-59
Str. 3	16x8x9	3186129-58



Hagestøtte

Størrelse	BxD cm	Art. nr.
Str. 1	32x10	3186117-48
Str. 2	36x10	3186118-59
Str. 3	42x10	3186138-58




Rygstøtte

Størrelse	HxB cm	Art. nr.
Str. 1	16x26	3186115-48
Str. 2	16x26	3186119-59
Str. 3	16x26	3186137-58



Forhøjet abduktionsklods med gjord

Størrelse	HxBxD cm	Art. nr.
Str. 1	13x8x18, gjord: 50	3186103-148
Str. 2	16x8x18, gjord: 70	3186109-259
Str. 3	16x8x18, gjord: 90	3186129-358

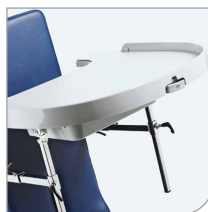

Plastbord m/balje, Ryg-/frontstående

Størrelse	Ydre mål	Art. nr.
Str. 1+2	B:61xD:57	3186230-2
Str. 3	B:61xD:57	3186230-3



Knæstøtter, multijusterbare, sæt

Størrelse	Art. nr.
Str. 1	3186153
Str. 2	3186154
Str. 3	3186155



Hælstøtter til delt fodplade, sæt

Størrelse	Art. nr.
Str. 1	3186104
Str. 2	3186110
Str. 3	3186130



Mellemstykke

Størrelse	HxB cm	Art. nr.
Str. 1	10x30	3186105-48
Str. 1	15x24	3186106-48
Str. 2	11x36	3186111-59
Str. 3	16x46	3186131-58
Str. 3	22x27	3186133-58



Kropsstøtter, sæt

Størrelse	Mål i cm	Art. nr.
Str. 1	13x9	3186102-48
Str. 2	13x9	3186102-59
Str. 2	13x18	3186108-59
Str. 3	13x9	3186102-58
Str. 3	13x18	3186128-58

Tilbehør



Andefødder, sæt

Størrelse	L cm	Art. nr.
Str. 0	17,5	3186149
Str. 1+2	21,5	3186147
Str. 3	24	3186148



Forlængerben, sæt

Størrelse	L cm	Art. nr.
Str. 2	21	3186255-59
Str. 3	21	3186255-58




Hjul, 125 mm

Størrelse	Art. nr.
Str. 2+3	313007000



Krydsgjord, sæt

Størrelse	Mål i cm	Art. nr.
Str. 1	L:62-79	3186197
Str. 2	L:73-93	3186198
Str. 3	L:86-104	3186199

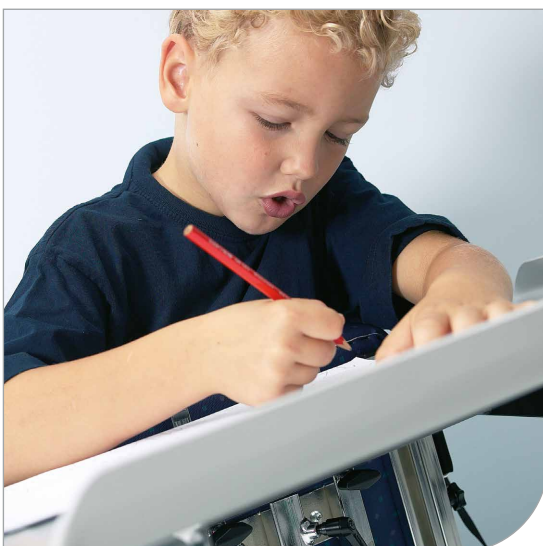

Reserve dele



Brystplade

Størrelse	HxB cm	Art. nr.
Str. 1	24x26	3186157-48
Str. 2	27x32	3186124-59
Str. 3	36x36	3186158-58



Delte fodstøtter, sæt

Størrelse	Art. nr.
Str. 1	3186141
Str. 2	3186142
Str. 3	3186143



Brystgjord

Størrelse	Mål i cm	Art. nr.
Str. 1	L:46-71	3186200
Str. 2	L:56-81	3186201
Str. 3	L:75-114	3186208



Hjul

Størrelse	Art. nr.
75 mm	313006820



Komplet gasfjedersystem

Størrelse	Art. nr.
Str. 2	3186012
Str. 3	3186013



Komplet el motor kit

Størrelse	Art. nr.
Str. 2	3186140
Str. 3	3186139



*“Alle mennesker bør have muligheden for at leve et frit og uafhængigt liv,
at kunne forfølge deres drømme, uanset fysiske forudsætninger.”*

*For seneste nyheder og løbende
produktopdateringer - besøg **www.etac.dk***

Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens
Tlf 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk

Etac showroom, Øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

etac[®]
Skaber muligheder