



Etac Cross 5, Cross 5 XL og Cross 5 Aktiv

Bedre siddekomfort og køreegenskaber

 **etac**[®]

Indhold

Etac Cross 5	3
Detaljer	4
Etac Crossryg 3A	5
Etac Cross 5 XL	6
Etac Cross 5 Aktiv	6
Tidy - hygiejneovertræk	7
Justering og tilpasning	8
Mål, vægt, HMI-nr og varenr.	9
Tilbehør og reservedele	10

 etac®



Etac Cross 5 – en kørestol med mange muligheder

Ingen er ens. Det er det enkle udgangspunkt, vi har haft for at skabe den nye Cross 5. Etac Cross 5 er mere end en all-round kørestol, den kan tilpasses individuelt helt ned til mindste detalje.

Højeste komfort med den bedste funktionalitet

Stellets unikke stabilitet gør, at Cross 5 reagerer hurtigt i alle situationer. Både ryglæn og sæde er indstillelige i forhold til højde, vinkel og form. Dette, i kombination med en fodstøtte der kan indstilles i højde, dybde og vinkel, skaber den stabilitet som er en forudsætning for mobilitet.

Det nye stel tilbyder flere forbedrede funktioner for en bedre sidde- og kørestilling. Takket være de adskillige valgmuligheder kan en Cross 5 tilpasses alle: korte og lange – smalle og brede.

Hvis dine behov ændrer sig, kan Cross 5 enkelt tilpasses eller suppleres med vores store udvalg af tilbehør. Kørestolen tilbydes også i varianten Cross 5 XL, som tillader en brugervægt op til 160 kg.

Scan koden med din smartphone og få adgang til Cross 5 på HMI-basen.dk



Stelfarve
Cross 5 standard:
mørkeblå


Stelfarve
Cross 5 XL og Cross
5 Aktiv standard:
sort



Detaljer



Enkel bremsejustering
Man justerer på ydersiden for hurtig og enkel justering.

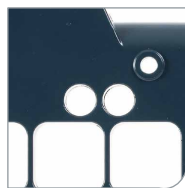

Ekstra lav sædehøjde
Med 20" drivhjul monteret i den øverste række bliver sædehøjden 34 cm. Max brugervægt for alle Cross 5 modeller bliver 90 kg ved denne indstilling.




Højere brugervægt
Krydsrammen er forstærket hvilket betyder at bruger-vægten er forhøjet til max 135 kg og 160 kg for Cross 5 XL.



Enkel Lille Viking montering
Integrerede fastgørelsespunkter i stellet/gavlen.



36 + 2 drivhjulspositioner
Drivhjulene kan monteres i 4 forskellige positioner i hvert hul. Det giver ekstra gode betingelser for indstilling af bagerste sædehøjde og tyngdepunkt.

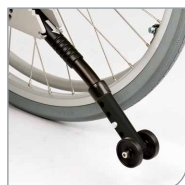

Tipsikring til alle sædehøjder
Tipsikringen er teleskopisk og foldbar. Den kan tilpasses til sædehøjder på mellem 34 og 51 cm (Cross 5 og Cross 5 XL).




Enkel at indstille
Ryghøjden og lumbalvinklen indstilles trinløst på udvendig side af rygrøret, ved hjælp af en unbraconøgle. Brugeren kan blive siddende i stolen under tilpasningen.



Regulerbar ryg
Ryggen er udstyret med seks justerbare velcrostropper. Det øverste bånd er bredere for bedre komfort og stabilitet.



Justerbar sædedybde
Med det triangulære rygrør justeres hofte- og lumbalvinkel så sædedybden kan forlænges med op til 7 cm.

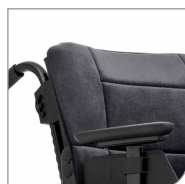

Elastisk rygovertræk
Det bløde overtræk af velour er elastisk og eftergivende og fastgøres direkte på ryggen – nemt i forhold til vask.

Drivhjulene kan monteres i 4 forskellige positioner i hvert hul. Det giver særdeles gode betingelser for indstilling af bagerste sædehøjde og balancepunkt.



Etac Crossryg 3A – med uovertruffen tilpasningsevne

3A står for Angulus, Altitudo og Altus – de latinske ord for vinkel, højde og dybde. Rygstøtten har alle potentialer for en omhyggelig og præcis justering, og det kan gøres med brugeren siddende i stolen! Rygskinnerne fæstes på sædets yderside. Det giver mere plads til hofterne i forhold til den traditionelle tilgang, hvor de bagerste rør er placeret direkte over sædet.



Angulus – Vinkel

På Etac Crossryg 3A kan du justere to vinkler. Rygstøttevinklen (hofte-vinklen) er trinløs justerbar fra -5° til +20°. Lumbal-vinklen justeres fra -2° til +18°, afhængigt af model.



Altitudo – Højde

Ryglænsenhøjden er trinløs justerbar mellem 32-45 og 38-51 cm (høj ryg).



Altus – Dybde

Sædedybden kan justeres mellem 36-42 cm (kort ramme) og 42-48 cm (lang ramme). Kan desuden forlænges yderligere 7 cm bagud på den triangulære variant.

Tekniske data – Etac Crossryg 3A

	Højde	Hoftevinkel	Lumbalvinkel	Sædedybde	Funktionel sædedybde Alt efter indstilling af ryg- og lumbalvinkel samt stroppryg)
Monoangulær	Trinløst: 32-45 cm Med høj ryg: 38-51 cm Standard 40 cm	Trinløs justerbar fra -5° til +20°	Fast 7°	Kort ramme: 36-42 cm Lang ramme: 42-48 cm	Kort ramme: 36-47 cm Lang ramme: 42-53 cm
Biangulær	Trinløst: 32-45 cm Med høj ryg: 38-51 cm Standard 40 cm	Trinløs justerbar fra -5° til +20°	Trinløs justerbar fra -2° til +13°	Kort ramme: 36-42 cm Lang ramme: 42-48 cm	Kort ramme: 36-47 cm Lang ramme: 42-53 cm
Triangulær	Trinløst: 32-45 cm Med høj ryg: 38-51 cm Standard 40 cm	Trinløs justerbar fra -5° til +20°	Trinløs justerbar fra -8° till +18°	Kort ramme: 36-42 cm Lang ramme: 42-48 cm Kan forlænges yderligere med op til 7 cm uden at ændre rygvinklen. Skal suppleres med sædeforlængere.	Kort ramme: 36-47 cm Lang ramme: 42-53 cm

Etac Cross 5 XL

Større sædebredde og højere brugervægt

Etac Cross 5 XL har samme kvaliteter og egenskaber som Cross 5. For at klare en høj belastning er ryglænet forstærket med en nedfældbar tværstang med snaplås. Cross 5 XL findes i sædebredder op til 60 cm og har en brugervægt på max. 160 kg. Den har stort set samme indstillingsmuligheder og tillbehørsprogram som Cross 5.

Sort stelfarve er standard.



Etac Cross 5 Aktiv

Etac Cross 5 har næsten uendelige muligheder og kan nemt ombygges til en allround kørestol i smart og aktivt design!

Der fokuseres på sædekomfort med den bedste funktionalitet, samt flot og aktiv design. Cross 5 Aktiv kan opfylde brugerens behov og ønske om en let og aktivt udseende kørestol til en meget fornuftig pris.

Den flotte gavl på Cross 5 Aktiv er sort og uden tipsikringsfæste. Det er dog muligt at eftermontere tip-sikringer, hvis brugerens behov ændrer sig eller når stolen skal genbruges.

For at opnå en let og aktivt udseende Cross5 Aktiv anbefaler vi, at påmontere 24" Carbon hjul med Titanium drivring samt stænkskærme, fast skubbehåndtag og fodbøjle. Alt tilbehør fra Cross-familien kan bruges på denne kørestol.

Med Cross5 Aktiv har brugeren fordele af alle indstillingsmulighederne som denne krydsramme kørestol indeholder. En flot stol med unikke muligheder for tilpasning og genbrug!

Cross 5 Aktiv leveres som standard med sort stelfarve (fås også i hvid), 2B ryg med faste kørehåndtag og rygovertræk i airmesh.

Cross 5 Aktiv på billedet er vist med en Star sædepude.



Tidy - hygiejneovertræk

Nu kan vi tilbyde et nyt smart og hygiejnisk rygovertræk og sæde-pude, som tilhører til alle kørestole med den unikke Cross 3A ryg: Etac Cross 3A, Cross 3A XL, Cross 5 og Cross 5 XL.

**NEM VASK OG
AFSPRITNING**

- ✓ Nem afspritning og vask ved høj temperatur reducerer infektionsrisiko
- ✓ Ideel for sygehuse og institutioner, og andre miljøer, hvor der stilles høje hygiejnekrav
- ✓ Fås til alle Etac kørestolsbredder



Egenskaber

Tidy er et hygiejnebetræk for ryg- og sædepude tilpasset til Cross 5 til brug i miljøer, hvor der stilles krav til enkel afspritning pga. flere brugere – f.eks. på sygehuse og i institutioner. Betrækket er vandafvisende og sømmene er svejste, så skumpuden ikke optager fugt.

Tidy fås til kørestolsbredder 35-60 cm. Skumindlægget til rygbetrækket fås som tilbehør.

Materiale og rengøring


Tidy betrækket er fremstillet i Dartex, skumpuden i polyurethan (PU) og skumindlægget til ryggen, er fremstillet af koldskum.

Tidy kan aftørres med rengøringsmiddel Ph 5-9 eller 70% rengøringsprit, samt vaskes ved 90°.

OBS! Betræk skal vaskes separat uden pude/indlæg.

Broderi

Rygbetrækket kan leveres med kundespecifikt broderi (se markering på billedet nedenfor). Rygbetrækket kan således leveres uden broderi, kun broderi eller broderi + logo.

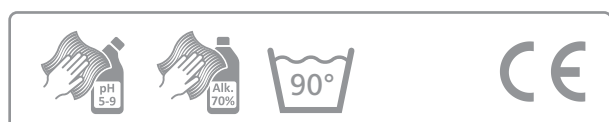

For at beskytte betrækket er dette ikke monteret på kørestolen ved levering. Betrækket leveres i separat plastemballage, sammen med kørestolen.

Justering og tilpasning

For nem justering og tilpasning af Cross 5 tilbyder Etac enkle og brugervenlige videoguides. Du kan finde videoklip og trin for trin anvisninger på vores hjemmeside eller du kan se dem på din smartphone ved at scanne QR-koderne nedenfor. Det har aldrig været nemmere at justere og tilpasse en kørestol, præcis der hvor du er lige nu!

Filmene erstatter ikke manualens instruktioner, men skal ses som et tillæg til manualen.

Justering af drivhjulets position



24 mm

Juster bremsen



5 mm

Juster forgaffelbeslag i højde og vinkel



Indstil ryglænets højde



5 mm

Juster rygoverslaget



Indstil ryglænet lumbalvinkel



5 mm

Forlæng sædedybden



Slå tipsikringerne op og ned



Mål, vægt, HMI-nr og varenr.

Kort ramme							Lang ramme				
Sæde- bredde	Total- bredde	Sædehøjde fortil	Sædehøjde bagtil	Rygglæns- højde *	Transport- bredde	Max bruger- vægt	Sæde- dybde **	Funktionel sædedybde ***	Varenr.	HMI-nr.	Vægt ****
Cross 5											
35,0 cm	56,0 cm	34-51 cm	34-51 cm	32-45 cm	32,0 cm	135 kg	36-42 cm	36-47 cm	13123001	78897	15,0 kg
									13123002	78931	15,2 kg
37,5 cm	58,5 cm	34-51 cm	34-51 cm	32-45 cm	32,0 cm	135 kg	36-42 cm	36-47 cm	13123003	78920	15,1 kg
									13123004	78930	15,3 kg
40,0 cm	61,0 cm	34-51 cm	34-51 cm	32-45 cm	32,0 cm	135 kg	36-42 cm	36-47 cm	13123005	78921	15,2 kg
									13123006	78929	15,4 kg
42,5 cm	63,5 cm	34-51 cm	34-51 cm	32-45 cm	32,0 cm	135 kg	36-42 cm	36-47 cm	13123007	78922	15,3 kg
									13123008	78928	15,5 kg
45,0 cm	66,0 cm	34-51 cm	34-51 cm	32-45 cm	32,0 cm	135 kg	36-42 cm	36-47 cm	13123009	78919	15,5 kg
									13123010	78927	15,7 kg
47,5 cm	68,5 cm	34-51 cm	34-51 cm	32-45 cm	32,0 cm	135 kg	36-42 cm	36-47 cm	13123011	78923	15,6 kg
									13123012	78926	15,8 kg
50,0 cm	71,0 cm	34-51 cm	34-51 cm	32-45 cm	32,0 cm	135 kg	36-42 cm	36-47 cm	13123013	78924	15,7 kg
									13123014	78925	15,9 kg
52,5 cm	73,5 cm	34-51 cm	34-51 cm	32-45 cm	32,0 cm	135 kg	36-42 cm	36-47 cm	13123015	83689	15,8 kg
									13123016	83690	16,0 kg
55,0 cm	76,0 cm	34-51 cm	34-51 cm	32-45 cm	32,0 cm	135 kg	36-42 cm	36-47 cm	13123017	84722	15,9 kg
									13123018	84723	16,1 kg
Cross 5 XL											
47,5 cm	68,5 cm	40-51 cm	40-51 cm	32-45 cm	32,0 cm	160 kg	36-42 cm	36-47 cm	13123111	78951	15,9 kg
									13123112	78972	16,1 kg
50,0 cm	71,0 cm	40-51 cm	40-51 cm	32-45 cm	32,0 cm	160 kg	36-42 cm	36-47 cm	13123113	78953	16,0 kg
									13123114	78971	16,2 kg
52,5 cm	73,5 cm	40-51 cm	40-51 cm	32-45 cm	32,0 cm	160 kg	36-42 cm	36-47 cm	13123115	78962	16,1 kg
									13123116	78970	16,3 kg
55,0 cm	76,0 cm	40-51 cm	40-51 cm	32-45 cm	32,0 cm	160 kg	36-42 cm	36-47 cm	13123117	78963	16,3 kg
									13123118	78969	16,5 kg
57,5 cm	78,5 cm	40-51 cm	40-51 cm	32-45 cm	32,0 cm	160 kg	36-42 cm	36-47 cm	13123119	78965	16,4 kg
									13123120	78968	16,6 kg
60,0 cm	81,0 cm	40-51 cm	40-51 cm	32-45 cm	32,0 cm	160 kg	36-42 cm	36-47 cm	13123121	78966	16,5 kg
									13123122	78967	16,7 kg
Cross 5 Aktiv											
35,0 cm	56,0 cm	34-51 cm	34-51 cm	32-45 cm	32,0 cm	135 kg	36-42 cm	36-49 cm	13123501	89662	12,0 kg
									13123502	100196	12,2 kg
37,5 cm	58,5 cm	34-51 cm	34-51 cm	32-45 cm	32,0 cm	135 kg	36-42 cm	36-49 cm	13123503	100195	12,3 kg
									13123504	100194	12,5 kg
40,0 cm	61,0 cm	34-51 cm	34-51 cm	32-45 cm	32,0 cm	135 kg	36-42 cm	36-49 cm	13123505	100193	12,4 kg
									13123506	100192	12,6 kg
42,5 cm	63,5 cm	34-51 cm	34-51 cm	32-45 cm	32,0 cm	135 kg	36-42 cm	36-49 cm	13123507	100191	12,5 kg
									13123508	100190	12,7 kg
45,0 cm	66,0 cm	34-51 cm	34-51 cm	32-45 cm	32,0 cm	135 kg	36-42 cm	36-49 cm	13123509	100189	12,6 kg
									13123510	100188	12,8 kg
47,5 cm	68,5 cm	34-51 cm	34-51 cm	32-45 cm	32,0 cm	135 kg	36-42 cm	36-49 cm	13123511	100187	12,7 kg
									13123512	100186	12,9 kg
50,0 cm	71,0 cm	34-51 cm	34-51 cm	32-45 cm	32,0 cm	135 kg	36-42 cm	36-49 cm	13123513	100185	12,8 kg
									13123514	100184	13,0 kg

* Gælder Crossryg 3A standard. For Crossryg 3A høj gælder 38-51 cm.

** Målt fra rygrør. Med Triangular ryg kan sædedybden forlænges yderligere op til 7 cm.

*** Alt efter indstilling af ryg- og lumbalvinkel samt stroppryg.

**** Med massive dæk og rustfri drivring, +1,3 kg.

Tilbehør og reservedele



Hovedstøtte

Monteres med hovedstøttebeslag direkte på 3A-ryggen. (Alternativt på skubbebøjle eller høj komfortryg). Hovedstøttebeslag bestilles separat. Hovedstøtten kan justeres i højde, dybde, sideværts og vinkel. Betrækket er nemt at tage af og fås i mørkegråt velour eller hygiejne.

Hovedstøtte mørkegrå velour 28223-60
Hovedstøtte mørkegrå hygiejne 28223-65



Etac Crossryg 3A Ryg – høj

Højde 38-51 cm


Kontakt Etac for nærmere info.



Hovedstøtte med sidestøtte

For bedre støtte til hovedet. Betræk: Mørkegrå hygiejne.

Hovedstøtte med sidestøtte, inkl. betræk 28325-65
Betræk 63185-65

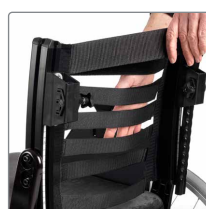

Stropryg

Seks velcrostropper. Den øverste er bredere og med mere støtte. SB = sædebredde. Ønskes høj ryg benyttes nedenstående rygforlænger (øger højden med 6 cm).

Til SB 35,0-40,0 cm 62953-60
Til SB 42,5-50,0 cm 62954-60
Til SB 52,5-60,0 cm 62955-60
Rygforlænger til SB 35-40 cm 28658
Rygforlænger til SB 42,5-50 cm 28659
Rygforlænger til SB 52,5-60 cm 28660



Hovedstøttebeslag

Beslag til montering på kørebøjle 25795
Beslag til montering på komfortryg 406256



Rygovertræk, standard

Blødt elastisk rygovertræk. Mørkegrå velour. SB = sædebredde.

Til SB 35 cm 62941-60
Til SB 37,5 cm 62942-60
Til SB 40 cm 62943-60
Til SB 42,5 cm 62944-60
Til SB 45 cm 62945-60
Til SB 47,5 cm 62946-60
Til SB 50 cm 62947-60
Til SB 52,5 cm 62948-60
Til SB 55 cm 62949-60
Til SB 57,5 cm 62950-60
Til SB 60 cm 62951-60



Hovedstøttebeslag til 3A-ryg, Model 4

Montering på 3A-ryg 35 cm 28125
Montering på 3A-ryg 37,5 cm 28126
Montering på 3A-ryg 40 cm 28127
Montering på 3A-ryg 42,5 cm 28128
Montering på 3A-ryg 45 cm 28129
Montering på 3A-ryg 47,5 cm 28130
Montering på 3A-ryg 50 cm 28131
Montering på 3A-ryg 52,5 cm 28132
Montering på 3A-ryg 55 cm 28133
Montering på 3A-ryg 57,5 cm 28134
Montering på 3A-ryg 60 cm 28135



Komfortovertræk

Ekstra tyk polstring. Mørkegrå velour. Findes også til høj ryg. SB = sædebredde.

Til SB 35 cm 62956-60
Til SB 37,5 cm 62957-60
Til SB 40 cm 62958-60
Til SB 42,5 cm 62959-60
Til SB 45 cm 62960-60
Til SB 47,5 cm 62961-60
Til SB 50 cm 62962-60
Til SB 52,5 cm 62963-60
Til SB 55 cm 62964-60
Til SB 57,5 cm 62965-60
Til SB 60 cm 62966-60


Tilbehør og reservedele



Rygovertræk Airmesh

Det sorte Airmesh overtræk er ventilerende og giver et aktivt udtryk. Overtrækket kan anvendes til både 3A ryggen (fås kun til standardhøjde) og til 2B ryggen. SB = sædebredde.

Til SB 35 cm.....	63204-68
Til SB 37,5 cm.....	63205-68
Til SB 40 cm.....	63206-68
Til SB 42,5 cm.....	63207-68
Til SB 45 cm.....	63208-68
Til SB 47,5 cm.....	63209-68
Til SB 50 cm.....	63210-68
Til SB 52,5 cm.....	63211-68
Til SB 55 cm.....	63212-68
Til SB 57,5 cm.....	63213-68
Til SB 60 cm.....	63214-68

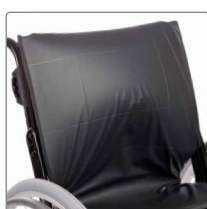

Rygovertræk Tidy - hygiejneovertræk

Nem afspritning og vask ved høj temperatur. Fås til alle Etac kørestolsbredder. SB = sædebredde.

Tidy rygovertræk

Cross 3A ryg	
Til SB 35,0 cm.....	63087-63
Til SB 37,5 cm.....	63088-63
Til SB 40,0 cm.....	63089-63
Til SB 42,5 cm.....	63090-63
Til SB 45,0 cm.....	63091-63
Til SB 47,5 cm.....	63092-63
Til SB 50,0 cm.....	63093-63
Til SB 52,5 cm.....	63094-63
Til SB 55,0 cm.....	63095-63
Til SB 57,5 cm.....	63096-63
Til SB 60,0 cm.....	63097-63

Tidy rygovertræk

Cross 3A ryg med broderi uden logo

Til SB 35,0 cm.....	63108-63
Til SB 37,5 cm.....	63109-63
Til SB 40,0 cm.....	63110-63
Til SB 42,5 cm.....	63111-63
Til SB 45,0 cm.....	63112-63
Til SB 47,5 cm.....	63113-63
Til SB 50,0 cm.....	63114-63
Til SB 52,5 cm.....	63115-63
Til SB 55,0 cm.....	63116-63
Til SB 57,5 cm.....	63117-63
Til SB 60,0 cm.....	63118-63

Tidy rygovertræk

Cross 3A ryg med broderi og logo

Til SB 35,0 cm.....	63119-63
Til SB 37,5 cm.....	63120-63
Til SB 40,0 cm.....	63121-63
Til SB 42,5 cm.....	63122-63
Til SB 45,0 cm.....	63123-63
Til SB 47,5 cm.....	63124-63
Til SB 50,0 cm.....	63125-63
Til SB 52,5 cm.....	63126-63
Til SB 55,0 cm.....	63127-63
Til SB 57,5 cm.....	63128-63
Til SB 60,0 cm.....	63129-63



Sædepude Tidy - hygiejneovertræk

Nem afspritning og vask ved høj temperatur. Fås til alle Etac kørestolsbredder. SB = sædebredde.

Tidy sædepude

Til SB 35,0 cm.....	63130-63
Til SB 37,5 cm.....	63131-63
Til SB 40,0 cm.....	63132-63
Til SB 42,5 cm.....	63133-63
Til SB 45,0 cm.....	63134-63
Til SB 47,5 cm.....	63135-63
Til SB 50,0 cm.....	63136-63
Til SB 52,5 cm.....	63137-63
Til SB 55,0 cm.....	63138-63
Til SB 57,5-60 cm.....	63139-63



Sædepude

Anatomisk formet sædepude - kan tilpasses sædedybden. Betræk: mørkegrå velour. SB = sædebredde.

Til SB 35 cm.....	62230-60
Til SB 37,5 cm.....	62231-60
Til SB 40 cm.....	62232-60
Til SB 42,5 cm.....	62233-60
Til SB 45 cm.....	62234-60
Til SB 47,5 cm.....	62374-60
Til SB 50 cm.....	62266-60
Til SB 52,5 cm.....	62420-60
Til SB 55 cm.....	62421-60
Til SB 57,5-60 cm.....	62422-60



Sædeklæde

Dybdejusterbart fortil. SB = sædebredde.


Kort, SB 35 cm	62718-60
Kort, SB 37,5 cm.....	62719-60
Kort, SB 40 cm.....	62720-60
Kort, SB 42,5 cm	62721-60
Kort, SB 45 cm.....	62722-60
Kort, SB 47,5 cm.....	62978-60
Kort, SB 50 cm.....	62979-60
Kort, SB 52,5 cm	62980-60
Kort, SB 55 cm.....	62981-60
Kort, SB 57,5 cm.....	62982-60
Kort, SB 60 cm.....	62983-60
Lang, SB 35 cm.....	62728-60
Lang, SB 37,5 cm.....	62729-60
Lang, SB 40 cm.....	62730-60
Lang, SB 42,5 cm	62731-60
Lang, SB 45 cm.....	62732-60
Lang, SB 47,5 cm.....	62984-60
Lang, SB 50 cm.....	62985-60
Lang, SB 52,5 cm	62986-60
Lang, SB 55 cm.....	62987-60
Lang, SB 57,5 cm.....	62988-60
Lang, SB 60 cm.....	62989-60

Tilbehør og reservedele



Sædeforlængerstrop + ombygningssæt
Sædeforlængerstrop anvendes kun ved triangulær ryg og øger sædedybden med 7 cm.

Sæde 35-40 cm, strop.....	63291
Sæde 42,5-50 cm, strop.....	63292
Sæde 52,5-60 cm, strop.....	63293
Ombygningssæt biangulær til triangulær ...	27629
Ombygningssæt triangulær til biangulær ...	27637
Ombygningssæt biangulær og triangulær til monoangulær.....	27437

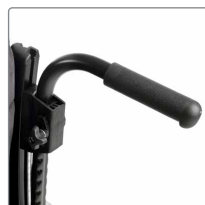


Kørehåndtag, justerbare
Højderegerbare og aftagelige.

Cross 5.....	27338-01
Cross 5 XL	27341-01




Sædeplade
Aftagelig. Supplér med sædepude.
SB = Sædebredde

Kort, SB 35-37,5 cm.....	26720
Kort, SB 40-42,5 cm	26721
Kort, SB 45-47,5 cm.....	26722
Kort, SB 50-52,5 cm	26723
Kort, SB 55-57,5 cm.....	26724
Kort, SB 60 cm.....	26660
Lang, SB 35-37,5 cm.....	26725
Lang, SB 40-42,5 cm	26726
Lang, SB 45-47,5 cm.....	26727
Lang, SB 50-52,5 cm	26728
Lang, SB 55-57,5 cm.....	26729
Lang, SB 60 cm.....	26662

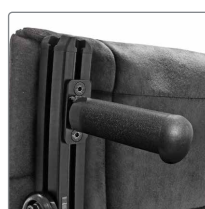

Kørehåndtag, faste
Benyttes til 3A-ryg.

Kørehåndtag	27644
-------------------	-------

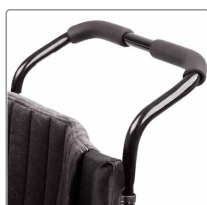


Kørebøjle
Højdejusterbar og aftagelig. Kørebøjlen til Cross XL er forstærket. SB = Sædebredde.

Cross 5 SB 35,0 cm.....	27433-01
Cross 5 SB 37,5 cm	25578-01
Cross 5 SB 40,0 cm.....	25579-01
Cross 5 SB 42,5 cm.....	25580-01
Cross 5 SB 45,0 cm.....	25581-01
Cross 5 SB 47,5 cm	25582-01
Cross 5 SB 50,0 cm.....	25730-01
Cross 5 XL SB 47,5 cm	27434-01
Cross 5 XL SB 50,0 cm	26063-01
Cross 5 og Cross 5 XL SB 52,5 cm	26064-01
Cross 5 og Cross 5 XL SB 55,0 cm	26068-01
Cross 5 XL SB 57,5 cm	26069-01
Cross 5 XL SB 60,0 cm	26070-01



Tværstang 3A, gammel model
Nedfældbar med snaplås på den ene side. Tværstang er standard på Cross 5 XL. SB = sædebredde.


SB 35,0 cm, Cross 3A gammel model.....	27431
SB 37,5 cm, Cross 3A gammel model.....	25610
SB 40,0 cm, Cross 3A gammel model.....	25611
SB 42,5 cm, Cross 3A gammel model	25612
SB 45,0 cm, Cross 3A gammel model.....	25613
SB 47,5 cm, Cross 3A gammel model.....	25614
SB 50,0 cm, Cross 3A gammel model.....	25739
SB 52,5 cm, Cross 3A gammel model.....	25615
SB 55,0 cm, Cross 3A gammel model	26030
SB 57,5 cm, Cross 3A gammel model.....	26031
SB 60,0 cm, Cross 3A gammel model	26032
SB 35,0 cm, Cross 3A model 4	28114
SB 37,5 cm, Cross 3A model 4.....	28115
SB 40,0 cm, Cross 3A model 4	28116
SB 42,5 cm, Cross 3A model 4	28117
SB 45,0 cm, Cross 3A model 4	28118
SB 47,5 cm, Cross 3A model 4	28695
SB 50,0 cm, Cross 3A model 4	28696
SB 52,5 cm, Cross 3A model 4	28697
SB 55,0 cm, Cross 3A model 4	28698
SB 57,5 cm, Cross 3A model 4.....	28699
SB 60,0 cm, Cross 3A model 4	28700

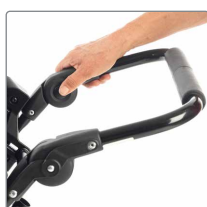

Kørebøjle, vinkelregulerbar
*Ikke til Cross 5 XL modellerne.
SB = sædebredde.

SB 37,5 cm	27161
SB 40,0 cm.....	27162
SB 42,5 cm.....	27163
SB 45,0 cm.....	27164
SB 47,5 cm*	27165
SB 50,0 cm*.....	27166
SB 52,5 cm*	27167

Tilbehør og reservedele

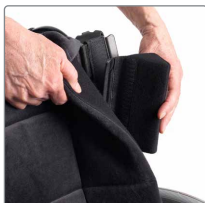

Rygekile

Blød kile i velour. Kan kombineres med sidestop. Kilerne fastgøres med velcro bagved overtrækket.

Kort (15 cm) 1 stk.....63012-60
Lang (30 cm) 1 stk..... 63013-60



Sidepude

Puderne kan vendes og giver dermed mulighed for to forskellige former. Betrækket har lynlås, således det er muligt at ilægge kiler. Kombiner med armlæn eller en sidestop.

Sidepude Højre 63171-60-1
Sidepude Venstre 63171-60-2



Kiler

Kilerne kan kombineres og klippes til fås i 3 størrelser. Leveres i sæt med 2 stk. Kilerne fastgøres med velcro bagved overtrækket.

Small (L:13 x B9,5 x H: 2 cm) 2 stk..... 28030
Medium (L:19 x B12 x H: 2 cm) 2 stk28139
Large (L:20 x B17 x H: 2,5 cm) 2 stk28140



Sidestop, vinklet

Sidestop anvendes for at få ekstra støtte og stabilitet efter ønske. Sidestop monteres nemt i rygrøret, hvor den skrues fast i den ønskede højde.

Sidestop, vinklet + 30 mm..... 28173



Sædekile

Giver øget siddekødfort og modvirker at bruger glider frem i sædet. SB = sædebredde.

Kile SB 35-37,5 cm.....80714
Kile SB 40-45 cm.....80715
Kile SB 47,5-57,5 cm.....80779



Sidestop, flad/lige

Sidestop anvendes for at få ekstra støtte og stabilitet efter ønske. Sidestop monteres nemt i rygrøret, hvor den skrues fast i den ønskede højde.

Sidestop, flad + 40 mm28136



Trykfordeler

Denne trykfordeler kan fastgøres med velcro bag rygovertækket, præcis hvor der er brug for den. Brug den evt. til at fordele trykket over rygprofilerne eller til at gøre ryggen bredere.

Trykfordeler (L20 x B15 x H1 cm).....28637

Tilbehør og reservedele



Kropsstøtte, fast - Pur

Kropsstøtte i sort PUR. Justerbar i dybden og højden. H9 x L19 cm.

Kropsstøtte, Pur, 1 stk.27917



Kropsstøtte, svingbar

Svingbar kropsstøtte i sort PUR. Justerbar i højde og dybde. Fås med lille eller stor pude.

Kropsstøtte svingbar, lille, højre27915-1
Kropsstøtte svingbar, lille, venstre27915-2
Kropsstøtte svingbar, stor, højre27916-1
Kropsstøtte svingbar, stor, venstre27916-2



Kropsstøtte, fast - Dartex

Blød kropsstøtte beklædt med sort Dartex. Regulerbar i højden/dybden. To alternative breddepositioner. H10 x L15 cm.

Kropsstøtte, Dartex, 1 stk 27395



Armlæn med fast armlæns pude

Aftagelige og højdejusterbare armlæn med massiv plade. Fås i 2 versioner, hhv. højdejustering vha. værktøj eller fingerskrue.


Kort 25 cm, højre, fingerskrue26379-1
Kort 25 cm, venstre, fingerskrue26379-2
Lang 38 cm, højre, fingerskrue26380-1
Lang 38 cm, venstre, fingerskrue26380-2
Kort 25 cm, højre*25172-1
Kort 25 cm, venstre*25172-2
Lang 38 cm, højre*25173-1
Lang 38 cm, venstre*25173-2
*Højdejusteres vha. umbraconøgle



Kropsstøtte, fast

Justerbar i højde og længde og monteres nemt i rygrørene. Puden kan roteres, så der er to forskellige former. Stangen der holder puden kan leveres i 4 versioner.

Kropsstøtte fast, komplet 0 mm 28142
Kropsstøtte fast, komplet +15 mm 28143
Kropsstøtte fast, komplet -15 mm 28144
Kropsstøtte fast, komplet -45 mm 28145

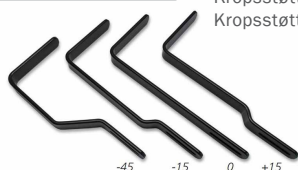

Armlæn med aftagelig armlæns pude (M100)

Aftagelige og højdejusterbare armlæn med massiv plade. Fås i 2 versioner, hhv. højdejustering vha. værktøj eller fingerskrue.

Kort 25 cm, højre, fingerskrue27349-1
Kort 25 cm, venstre, fingerskrue27349-2
Lang 35 cm, højre, fingerskrue27350-1
Lang 35 cm, venstre, fingerskrue27350-2
Kort 25 cm, højre*27230-1
Kort 25 cm, venstre*27230-2
Lang 35 cm, højre*27231-1
Lang 35 cm, venstre*27231-2
*Højdejusteres vha. umbraconøgle



Svingbar kropsstøtte

Justerbar i højde og dybde. Kan fjernes uden brug af værktøj. Komplet kropsstøtte med pude af polyurethan.

Kropsstøtte 3A (0 mm) Højre 28181-1
Kropsstøtte 3A (0 mm) Venstre 28181-2
Kropsstøtte 3A (-15 mm) Højre28180-1
Kropsstøtte 3A (-15 mm) Venstre28180-2
Kropsstøtte 3A (-45 mm) Højre 28141-1
Kropsstøtte 3A (-45 mm) Venstre 28141-2




Hemiplegiarmlæn

Monteres på langt armlæn, 35 cm. Polstret, aftageligt betræk. Mørkegrå velour.

Montering på fast armlæns pude:
Højre 25770-60-1
Venstre25770-60-2
Montering på aftagelig armlæns pude:
Højre27313-60-1
Venstre27313-60-2
Betræk 62449-60


Tilbehør og reservedele

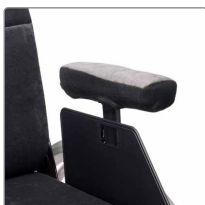

Betræk til armlæn

Indlæg af koldskum eller gel. Aftageligt. Findes i kort (25 cm) og lang (38 cm) model. Betræk i mørkegrå velour – alternativt sort Dartex.

Kort 25 cm, koldskum og velour62282-60
 Lang 38 cm, koldskum og velour62283-60
 Kort 25 cm, koldskum og Dartex.....62282-63
 Lang 38 cm, koldskum og Dartex62283-63
 Kort 25 cm, med gel indlæg og velour...26240-60
 Lang 38 cm, med gel indlæg og velour..26241-60
 Kort 25 cm, med gel indlæg og Dartex..26240-63
 Lang 38 cm, med gel indlæg og Dartex.26241-63

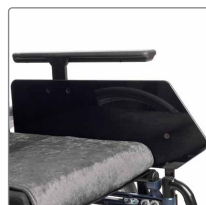

Lårstøtte

Monteres på eksisterende armlæn.

Kort, 50 cm, højre..... 27391-1
 Kort, 50 cm, venstre..... 27391-2
 Lang, 57 cm, højre..... 27392-1
 Lang, 57 cm, venstre..... 27392-2



Brede armlænsputer


Monteres på armlæn med fast armlæns-pude. Sælges stykvis.

Str. 8 x 40 cm.....26873



Polstring til lårstøtte

Højre.....82488-1
 Venstre.....82488-2

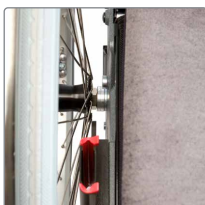

Bredningssæt til armlæn

Øger afstanden mellem armlæn med 1 cm.

Sæt.....27533



Sidepuder

Mindske sædebredden med 2 cm. Til montering på sidepladerne. Klippes/skæres til efter eget ønske.

1 sæt med 2 stk28021



Sidebeskytter

Aftageligt og justerbart i højden.

Højre.....50316
 Venstre.....50317



Stænkskærm i kulfiber

Vinkel-, højde- og dybdejusterbar.

Højre.....27397-1
 Venstre.....27397-2

Tilbehør og reservedele



Benstøtte, vid vinkel

Aftagelige og til siden svingbare.
Universal, sælges stykvis. Fodplade
bestilles separat.

Universal, sort.....25574-01
Universal hvid farve til Cross Aktiv25574-92
Universal, låsbar, sort 25575-01



Benstøtte, eleverbar med polstret lægplade

Benstøtte model Prio. Både benstøtte og
lægpude kan justeres individuelt i højde og
vinkel. Blød polstret lægpude. Fodplade og
hælremme bestilles separat.
SB = sædebredde.

Til SB 42,5-45 cm, højre27857-65-1
Til SB 42,5-45 cm, venstre27857-65-2
Til SB 47,5-50 cm, højre..... 27858-65-1
Til SB 47,5-50 cm, venstre 27858-65-2
Til SB 52,5-55 cm, højre 27859-65-1
Til SB 52,5-55 cm, venstre 27859-65-2
Til SB 57,5-60 cm, højre 27860-65-1
Til SB 57,5-60 cm, venstre 27860-65-2



Benstøtte, snæver vinkel

Fodpladen kommer ca. 6 cm tættere på
sædet. Universal, sælges stykvis. Fodplade
bestilles separat.

Universal (31 cm)..... 25570-01
Universal, hvid farve til Cross Aktiv 25570-92
Universal, kort (21 cm).....25571-01
Universal, låsbar (31 cm) 25573-01
Universal, kort låsbar (21 cm)25572-01



Polstring til benstøtte

Højre.....3144030H
Venstre..... 3144030V



Benstøtte, eleverbar med lægpude

Både benstøtte og lægpude kan justeres
individuelt i højde og vinkel. Den bløde læg-
pude er betrukket med velour. Universal,
sælges stykvis. Benstøtte, konsol, lægpude
og fodplade bestilles separat.

Universal benstøtte25660-01
Konsol.....24544-01
Lægpude 35,0 - 37,5 cm.....62105-60
Lægpude 40,0 - 47,5 cm.....62104-60
Lægpude 50 - 60 cm62451-60



Amputationsbenstøtte

Justerbar i højde, dybde, vinkel samt
sideværts. Mørkegrå velour eller sort
Dartex.

Cross 5, velour, universal.....25516-60
Cross 5, Dartex, universal.....25516-63
Cross 5 XL, Dartex, højre 26210-63-1
Cross 5 XL, Dartex, venstre 26210-63-2



Benstøtte, eleverbar med lægplade

Både benstøtte og lægpude kan justeres
individuelt i højde og vinkel. Lægpladen er
udført i skålformet plast, og polstring kan
tilkøbes. OBS: Passer ikke til sædebredde
35-37,5 cm. Universal, sælges stykvis.
Fodplade bestilles separat.

Universal.....26100
Polstring til lægplade, Dartex62762-63



Amputationsvægt

Modvirker risikoen for at vælte og forbed-
rer køreegenskaberne. Aftagelig og vinkel-
regulerbar. Vægt: 3 kg.

Universal.....26876

Tilbehør og reservedele



Gipsbenstøtte

Til helbensgips. Med tre separate puder der alle kan reguleres i højde/dybde/længde samt sideværts. Fås både til højre og venstre side. Fodplade bestilles separat.

Højre, L 50 x B 20 cm 27417-1
Venstre, L 50 x B 20 cm 27417-2



Hælrem

Regulerbar i længden. Passer både til højre og venstre side. Kan ikke kombineres med fodpladeforlænger.

Universal 24458



Delte fodplader

Justerbar i dybde/vinkel/højde. Leveres med standard indfæstningsrør 25 cm, kort 17 cm eller langt 35 cm. Højre (x=1) og Venstre (x=2). SB = Sædebredde.

Standard 25 cm, SB 35 cm 25641-x
Standard 25 cm, SB 37,5 cm 25642-x
Standard 25 cm, SB 40 cm 25643-x
Standard 25 cm, SB 42,5 cm 25644-x
Standard 25 cm, SB 45 cm 25645-x
Standard 25 cm, SB 47,5 cm 25736-x
Standard 25 cm, SB 50-60 cm 25646-x
Kort 17 cm, SB 35 cm 25653-x
Kort 17 cm, SB 37,5 cm 25654-x
Kort 17 cm, SB 40 cm 25655-x
Kort 17 cm, SB 42,5 cm 25656-x
Kort 17 cm, SB 45 cm 25657-x
Kort 17 cm, SB 47,5 cm 25738-x
Kort 17 cm, SB 50-60 cm 25658-x

Langt 35 cm, SB 35 cm 25653-x
Langt 35 cm, SB 37,5 cm 25654-x
Langt 35 cm, SB 40 cm 25655-x
Langt 35 cm, SB 42,5 cm 25656-x
Langt 35 cm, SB 45 cm 25657-x
Langt 35 cm, SB 47,5 cm 25738-x
Langt 35 cm, SB 50-60 cm 25658-x

Indfæstningsrør standard 25 cm 81997
Indfæstningsrør langt 35 cm (+10 cm) 81998
Indfæstningsrør kort 17 cm (-8 cm) 81999



Fodpladeforlænger (dybde) til delt fodplade

Monteres ovenpå eksisterende fodplade. Forøger dybden 8 cm. SB = Sædebredde.

SB 40,0 - 42,5 cm 50798
SB 45,0 - 47,5 cm 50799
SB 50,0 cm 50800



Fodpladeforlænger (bredde) til delt fodplade

Monteres ovenpå eksisterende fodplade for at øge bredden. Standard på Cross XL. SB = Sædebredde.

SB 52,5 - 60 cm 28443



Polstring delte fodplader

En blød polstring til Cross delte fodplader. Højre (x=1) og Venstre (x=2). SB = Sædebredde

SB 35-40 cm 63188-60-x
SB 42,5-50 cm 63189-60-x
SB 52,5-60 cm 63192-60-x

Tilbehør og reservedele



Hel fodplade, aftagelig

Justerbar i højde og dybde. Vinkelregulerbar. Aftagelig. SB = Sædebredde.

SB 35,0 cm	26306
SB 37,5 cm	26307



Polstring til lægbånd

Blød støtte til læggene. Findes i længderne 20, 30 og 40 cm. SB = Sædebredde.


Længde 20 cm	26845
Længde 30 cm	26846
Længde 40 cm	26847



Hel fodplade

Opklappelig og indstillelig i højde, dybde og vinkel. SB = Sædebredde.

SB 35-37,5 cm - B 21 x D 17 cm.....	25936
SB 40-50 cm - B 26 x D 17 cm.....	25937
SB 50-60 cm B 37 x D 17 cm.....	26853

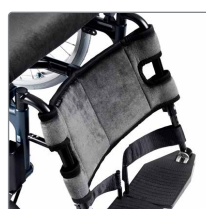

Polstret lægstøtte

Lægstøtte i blødt velour og i to bredder. Passer til Prio og Cross benstøtter. SB = sædebredde.

75 cm til SB: 35-47,5 cm.....	63186-60
90 cm til SB: 50-60 cm	63187-60



Polstring til hel fodplade

Blød polstring til Cross hel fodplade. SB = Sædebredde.


Polstring til SB: 40-47,5 cm	63190-60
Polstring til SB: 50-60 cm	63191-60



Enhåndsdraft

Passer til både højre og venstre side. Kan ikke kombineres med ledsagerbremse. Både drivhjul og teleskopaksel skal monteres. SB = sædebredde.


Enhåndsdraft 20" drivhjul.....	26534
Enhåndsdraft 22" drivhjul.....	26533
Enhåndsdraft 24" drivhjul.....	26522
Teleskopaksel Cross SB: 35-37,5 cm	27317
Teleskopaksel Cross SB: 40-42,5 cm	27318
Teleskopaksel Cross SB: 45-50 cm	27319
Teleskopaksel Cross SB: 52,5-57,5 cm	27320
Teleskopaksel Cross SB: 60 cm	27321

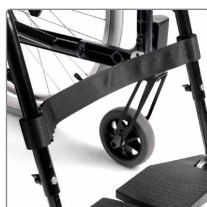

Lægbånd

Aftageligt, regulerbart i længden. SB = Sædebredde.

SB 35,0 - 37,5 cm	25356
SB 40,0 - 42,5 cm	25357
SB 45,0 - 47,5 cm	25358
SB 50,0 - 52,5 cm	25359
SB 55,0 - 60,0 cm	26062

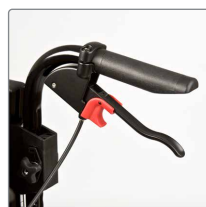

Ledsagerbremse

Fås både som standard og med reduceret åbningsvinkel der passer til personer med mindre hænder. Reduceret åbningsvinkel måler 75 mm mellem håndtag og bremsegreb.

Kontakt Etac for nærmere info.

Tilbehør og reservedele



Bremse med vinklet håndtag

Giver en større gribeblade. Komplet bremse med sort eller rødt håndtag.

Rødt, komplet højre.....	27528-1
Rødt, komplet venstre.....	27528-2
Sort, komplet højre	27532-1
Sort, komplet venstre	27532-2
Håndtag (kun det yderste led):	
Rødt, sæt til både højre og venstre side.....	27574
Sort, sæt til både højre og venstre side	25537



Bord

Transparent. Monteres på lange armlæn. SB = sædebredde.

SB 35,0 cm (Bord 45,0 cm)	24417
SB 37,5 cm (Bord 47,5 cm).....	25187
SB 40,0 cm (Bord 50,0 cm)	24418
SB 42,5 cm (Bord 52,5 cm)	25188
SB 45,0 cm (Bord 55,0 cm)	24419
SB 47,5 cm (Bord 57,5 cm).....	25731
SB 50,0 cm (Bord 60,0 cm)	24601
SB 52,5 cm (Bord 62,5 cm).....	26020
SB 55,0 cm (Bord 65,0 cm)	26021
SB 57,5 cm (Bord 67,5 cm)	26022
SB 60,0 cm (Bord 70,0 cm)	26907



Bremseforlænger

Kan foldes sammen.

One size	25515
----------------	-------



Hoftebælte

Med plastlås, justerbart i længden.


To-delt, totallængde 100 cm	25668
To-delt, totallængde 128 cm	26163
Med autolås (ej delt), totallængde 170 cm.....	62190



Enhåndsbremse

Kan kombineres m/drivhjul til ledsagerbremse.

Højre.....	27531-1
Venstre.....	27531-2

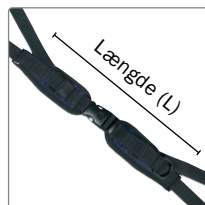

Polstret hoftese, Y-model

25 mm endegjort og plastlås. Reguleringsstrop ved spændet til finjustering af bespændingen.


Hoftese str 2. L: 32-35 cm	3185427-2
Hoftese str 3. L: 37-40 cm	3185427-3
Hoftese str 4. L: 46-51 cm	3185427-4



Halvbord

Justerbart i dybde og bredde. Monteres på langt armlæn.

Højre.....	27352-1
Venstre.....	27352-2

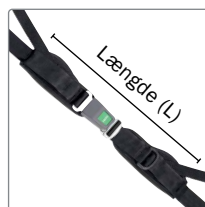

Polstret hoftese, Y-model

40 mm endegjort og snaplås. Reguleringsstrop ved spændet til finjustering af bespændingen.

Hoftese str 2. L: 35-48 cm	3185427-240
Hoftese str 3. L: 37-50 cm	3185427-340
Hoftese str 4. L: 45-57 cm	3185427-440

Tilbehør og reservedele



Selefæste og seler

Selefæstet monteres på hovedstøttestangen.

Se vores hjemmeside for det store udvalg af veste og seler.

Selefæste.....28186



Tipsikring

Opklappelig, justerbar i højde og regulerbar i længde og vinkel. Passer alle sædehøjder.

Cross 5 og Cross 5 XL teleskop tipsikring27526
Cross 5 Aktiv sædehøjde 34-37 cm..... 28471
Cross 5 Aktiv sædehøjde 37-55 cm.....28470



Stokkeholder

Velegnet til både højre og venstre side.

Universal komplet, dobbelt.....27327



Lavt forgaffelfæste

Til 4" og 5" forhjul. Ved montering af ekstra kort forgaffel, 4" forhjul og 20" drivhjul i G-rækken, sættes sædehøjden ned til 34 cm. Max brugervægt ændres herved til 90 kg.


Lavt forgaffelfæste..... 27207



Dropstativ

Komplet med beslag.

One size28323

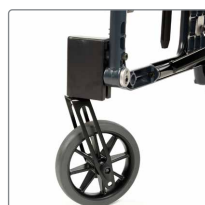

Bredt forgaffelfæste


Flytter forhjulet 3 cm udad. Sædets totalbredde bliver ikke påvirket.

Bredt forgaffelfæste.....25763



Iltflaskeholder

Iltflaskeholder 2 liter AL200520
Iltflaskeholder 2,5 liter AL200525
Iltflaskeholder 5 liter AL200550
Fæste til iltflaske Cross/Cross 5..... AL200245
Fæste til iltflaske Next AL200222

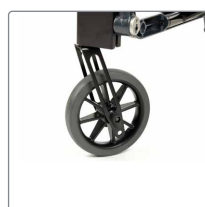

Forgafler

Ekstra kort, kun til 4" forhjul.....26238
Std. Cross 5 Kort 13 cm, stålaksel24677
Std. Cross 5 Mellem 18 cm, stålaksel.....24678
Std. Cross 5 XL kort 13 cm, forstærket24834
Std. Cross 5 XL Mellem 18 cm, forstærket24835
Forgaffel model Transit* 27874

* Anvendes ved montering af 8" forhjul (200x50 mm halvmassivt)

Tilbehør og reservedele



Forhjul

4", 100x30 mm massivt*	27870
5", 125x30 mm massivt	27865
6", 150x30 mm halvmassivt	27863
6½", 165x30 mm massivt	27866
7", 175x45 mm halvmassivt	27867
8", 200x35 mm halvmassivt	27864
8", 200x50 mm halvmassivt**	27868
8", 200x30 mm luft	27872

* Kun til ekstra kort forgaffel

** Kræver montering af forgaffel model Transit.



Drivhjul

Massivt dæk eller luftpumpet højtryks-slange. Alle med stål drivring.
OBS! Alle drivhjul leveres uden aksel.

20" massivt dæk (PUR)	27544
22" massivt dæk (PUR)	27555
24" massivt dæk (PUR)	27567
20" lavtryk	27540
22" højtryk	27550
24" højtryk	27561
20" halvmassivt (Flexel)	27683
22" halvmassivt (Flexel)	27687
24" halvmassivt (Flexel)	27691
24" Carbon med titan drivring	82534
Quick Release aksel	82483



Cambervinkel

Standard 2°, optional 0°.

Inderste brik 2° (standard)	82568
Yderste brik 2° (standard)	82567
Inderste brik 0°	82570
Yderste brik 0°	82569



Schwalbe drivhjul

Alle drivhjul leveres uden aksel.

24" Schwalbe Rightrun med højtryksdæk:	
- med alu drivring	28581
- med rustfri stål drivring	28584
- med plastbelagt drivring	28583
- med Titan drivring	28585

24" Schwalbe Marathon Plus

(grovere dæk mønster) med højtryksdæk:

- med alu drivring	28603
- med rustfri stål drivring	28606
- med plastbelagt drivring	28605
- med titan drivring	28607

Quick Release akse 82483



Egerbeskytter


Med gråt eller gult tryk og Etac logo.

Egerbeskytter 20" - Grå Etac	25502-28
Egerbeskytter 22" - Grå Etac	25503-28
Egerbeskytter 24" - Grå Etac	25504-28
Egerbeskytter 20" - Gul Etac	25502-29
Egerbeskytter 22" - Gul Etac	25503-29
Egerbeskytter 24" - Gul Etac	25504-29
Egerbeskytter 20" m. ledsagerbremse	28818-28
Egerbeskytter 22" m. ledsagerbremse	28817-28
Egerbeskytter 24" m. ledsagerbremse	28816-28



Dæk og slanger

Dæk, lavtryk 20"	80133
Dæk, højtryk 22"	81125
Dæk, højtryk 24"	80558
Dæk, massivt 20"	80787
Dæk, massivt 22"	81384
Dæk, massivt 24"	80768
Slange, lavtryk 20"	80132
Slange, højtryk 22"	80136
Slange, højtryk 24"	80560
Slange, højtryk til Carbon drivhjul 24"	82908

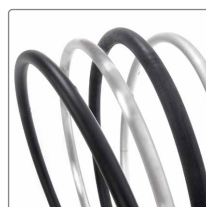

Drivringe

20" aluminium	81109
22" aluminium	25636
24" aluminium	25181
20" plastbelagt	81229
22" plastbelagt	80895
24" plastbelagt	82998
20" stål	21034
22" stål	24395
24" stål	24023
20" mosgummi	24442
22" mosgummi	24551
24" mosgummi	80800
24" Titan	24540
Monteringssæt til drivring	24514

Tilbehør og reservedele



Værktøjssæt

Indeholder 3 ringgaffelnøgler, 5 unbrac-nøgler, 1 topnøgle og 1 stjerneskrue-trækker.

Sæt..... 25174



Vaterpas til indstilling af forhjulsophæng/forgaffel

Vi har udviklet et vaterpas, som gør det enkelt og nemt at indstille forhjulsophæng/forgaffel i korrekt vinkel. En forgaffel i lod sikrer de bedste køreegenskaber for kørestolen. Vaterpasset klemmes let ned over forhjulsophænget, og man har således begge hænder fri til at bruge værktøj.

One size 28524



Hjælpemotor Lille Viking

Med Lille Viking gøres kørestolen el-drevet og ledsagerstyret, og betjenes via en trinløs håndbetjening monteret på stolens skubbehåndtag. OBS: Der vil kunne forekomme indstillinger på stole, hvor der kan være behov for at vælge en anden type motor eller monteringsæt. Bemærk også, at det kan være nødvendigt at justere stolens højde. Kontakt venligst Etac. SB = sædebredde.

Lille Viking til Cross 5.....(HMI-nr. 88194) 27940

Monteringsæt til SB 37,5-47,5 cm..UB200624K

Monteringsæt til SB 50,0-60,0 cm . UB200624L



Lille Viking

Den ledsagerstyrede hjælpemotor, Lille Viking, giver elektrisk fremdrift af kørestolen og betjenes nemt via en håndbetjening, monteret på kørestolens skubbehåndtag.

Med Lille Viking bliver det ikke nemmere - og der er mange fordele:

- ✓ Brugervenlig og stærk hjælpemotor, der kører godt i terræn
- ✓ Unik stabilitet i kørestolen med god sidde- og kørestilling
- ✓ En komfortabel løsning til gavn for både bruger og hjælper.



Version 2 - 2022 · Forbehold for trykfejl og evt. ændringer

Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering.

Vi ønsker at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder og produktinformationer på www.etac.dk.

Etac A/S
Parallelvej 3, 8751 Gedved
Tlf 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk

Etac, afdeling øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup


Creating Possibilities