

2014
NYHED!



Etac Prio

Ny innovativ komfortkørestol

 **etac**®

Etac Prio - komfort er vores topprioritet

Komfort er dynamisk, -ligesom Prio. Ved at ændre sæde- og rygvinkel og justere de eleverbare benstøtter, kan du variere siddestillingen og trykpunkterne, hvilket er vigtigt for siddekomforten.

Men Prio kan mere end det. Når ryggen lægges tilbage, slækkes bækkenstøtten, hvilket giver brugeren en afslappet hvilestilling. Hovedstøtten følger det samme dynamiske princip: den bevæges lidt bagud, når man placerer kørestolsbrugeren i en mere opret position, hvilket giver bruger frihed, til at bevæge hovedet.

Takket være det patenterede Comfort Tilt Lock system, er der ingen risiko for, at man utilsigtet, kommer til at placere bruger i en for opret position, idet Tilt Lock automatisk stopper tiltet i en forudindstillet vinkel, som sikrer en afslappet og sikker position.

Etac Prio har hele 3 patenterede funktioner:

- ✓ Dynamisk bækkenstøtte
- ✓ Dynamisk hovedstøtte
- ✓ Comfort Tilt Lock



Unikke og smarte funktioner

Dynamisk bækkenstøtte

Denne innovative funktion yder både stabilitet i opret siddestilling og komfort i hvilestilling. Det fungerer således:



Når ryggen er placeret i en opret position, vil Dynamic Pelvic Support give bækkenet optimal og fast støtte.



Når ryggen er placeret i hvilestilling, vil stroppen ved bækkenet slækkes automatisk, således bruger synker tilbage i stoleryggen.



Rygpolstringen er med stroppryg og har 5 stropper.

Comfort Tilt Lock

Når bruger tiltes frem til en opret position, vil det patenterede Comfort Tilt Lock stoppe tiltet i en komfortabel, let bagudklippet position. For at justere tiltet længere fremad, aktiveres tiltgrebet blot igen.



Flere smarte forbedringer

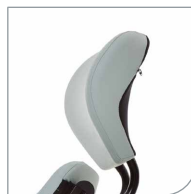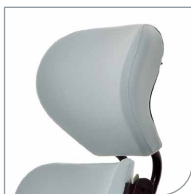


Dynamisk hovedstøtte

Giver komfort i alle positioner. Det patenterede system gør, at hovedstøtten automatisk flyttes lidt bagud, når man sidder opret, således man undgår, at hovedet presses fremad. Hovedstøtten er blød og den tillader hovedet at synke ind i polstringen.



Nyt betræk

Det nye hygiejne-/inkontinens-betræk er yderst komfortabelt og rengøringsvenligt. Det kan vaskes ved 60° og hverdagsrengøring klares let med en våd klud.

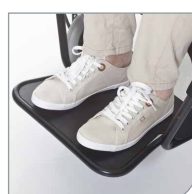


Fodplade

Fodpladen giver frihed til at flytte og bevæge fødderne.



Justering af sædedybde

Sædet dybdejusteres ved bagkanten, hvilket betyder, at forholdet mellem sæde og benstøtte ikke påvirkes.

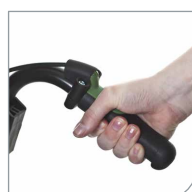

Tilt grebet

Tilt funktionen er let, kontrolleret og sikker. Det er muligt for hjælper, at stå ved siden af stolen når den tiltes, således der er øjenkontakt med bruger.

Mange muligheder med Etac Prio



Sædepude

Standard skumpude med hygiejne- (inkontinens) eller velourbetræk.



Komfortsædepude

Sædepuden er udført i Memory foam. Udformet med lårstyring. Hygiejne- (inkontinens) eller velourbetræk.



Armlæn

Kan justeres i højde og dybde, aftageligt.



Rygpude

Polstret, monteret med lynlåse i siderne. Hygiejne- (inkontinens) eller velourbetræk.



Komfort rygpude

Polstret, monteret med lynlåse i siderne. Med ekstra side- og lumbal støtte. Hygiejne- (inkontinens) eller velourbetræk.



Rygstøtte standard

Polstret, justerbar stroppryg med 5 stropper og Dynamic Pelvic Support.




Rygstøtte komfort

Polstret, justerbar stroppryg med 5 stropper og med højderjusterbar Dynamic Pelvic Support.



Kørebøjle

Højdejusterbar og aftagelig.

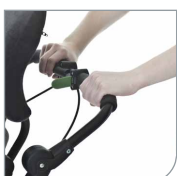

Justerbar kørebøjle

Højde- og vinkeljusterbar. Aftagelig.



Dynamisk hovedstøtte, smal

Højdejusterbar, blød. Bredde 31 cm. Hygiejne- (inkontinens) eller velourbetræk.



Dynamisk hovedstøtte, bred

Højdejusterbar, blød. Bredde 37 cm. Hygiejne- (inkontinens) eller velourbetræk.



Dynamisk hovedstøtte, komfort

Højdejusterbar, blød. Bred med vinger for øget komfort. Bredde 41 cm. Hygiejne- (inkontinens) eller velourbetræk.



Traditionel hovedstøtte

Inkl. monteringsbøjle i 45°, 90° eller svane- hals. Kan justeres i højde, dybde og vinkel. Velour eller Dartex betræk. Bestilles separat.



Fodbremse

Kun i kombination med 16" hjul. Er også udstyret med bremsestang til bruger, se billede nedenfor.



Fodbremse, brugergreb

Fodbremsen ovenfor er udstyret med fodbremse, brugergreb.



Bremse

Justerbar i alle drivhjulpositioner og hjulstørrelser.



Vinklet bremsehåndtag


Giver et bedre greb.



Bremseforlænger

Forlænger kan vinkles fremad, således sideværts forflytning lettes.

Mange muligheder med Etac Prio

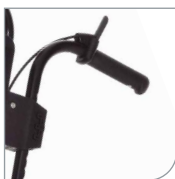

Skubbehåndtag

Højdejusterbar og aftagelig.



Tipsikring

Kan højdejusteres og svinges ind under stolen.



Benstøtte

Fast vinkel, svingbare og aftagelige.




Hælstrop

Dybdejusterbar.



Eleverbar benstøtte

Svingbare, aftagelige med opfældbare lægpuder, som kan justeres i højde og dybde.

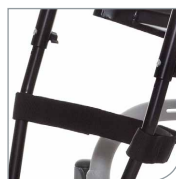


Lægbånd

Dybdejusterbar og aftagelig.



Fodstøtte, stor

Opklapbar, kan justeres i højde og vinkel.

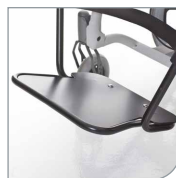

Fodplade

Kan klappes op og justeres i højden. Aftagelig. Lægbånd medfølger.



Fodstøtte

Opklapbar, kan justeres i højde og vinkel.



Forhjul

6" eller 8".



Fodpladeforlænger

Monteres på fodstøtten ovenfor.



Driv/baghjul

16", 20", 22" og 24". Massive og med Quick release.



Mange muligheder med Etac Prio



Hjælperbremse

Med glidende stop. 100 mm mellem håndtag og bremsegreb.



Bredningssæt

Øger afstanden 2½ cm mellem armlæn.



Sidestøtte

Justerbar i højde og dybde. Aftagelig. Dartex betræk.



Sikkerhedsbælte

Monteres på sæderammen.



Bord

Transparent. Monteres på armlæn.



Egerbeskyttere

Gråt eller gult tryk.



Værktøj

Indeholder 4 ringgafler, 3 unbraconøgler og 1 topnøgle.



Etac Prio kan monteres med hjælperbremse, som letter manøvringen for den person der skubber kørestolen = større sikkerhed for både bruger og hjælper.

Mål og vægt



Sædebredde	Total bredde	Sædehøjde 20", 22", 24"	Sædehøjde 16"	Sædedybde*	Transport bredde	Vægt**	Transport vægt***	HMI-nr.	Art.nr.
40 cm kort	59 cm	43.5-52.5 cm	45-47.5 cm	43-48 cm	56 cm	32.3 kg	21.7 kg	84609	13420105
40 cm lang	59 cm	43.5-52.5 cm	45-47.5 cm	49-54 cm	56 cm	32.6 kg	22.0 kg	84610	13420106
45 cm kort	64 cm	43.5-52.5 cm	45-47.5 cm	43-48 cm	61 cm	32.6 kg	22.0 kg	84611	13420109
45 cm lang	64 cm	43.5-52.5 cm	45-47.5 cm	49-54 cm	61 cm	32.9 kg	22.3 kg	84612	13420110
50 cm kort	69 cm	43.5-52.5 cm	45-47.5 cm	43-48 cm	66 cm	32.9 kg	22.3 kg	84616	13420113
50 cm lang	69 cm	43.5-52.5 cm	45-47.5 cm	49-54 cm	66 cm	33.2 kg	22.6 kg	84613	13420114
55 cm kort	74 cm	43.5-52.5 cm	45-47.5 cm	43-48 cm	71 cm	33.2 kg	22.6 kg	84614	13420117
55 cm lang	74 cm	43.5-52.5 cm	45-47.5 cm	49-54 cm	71 cm	33.5 kg	22.9 kg	84615	13420118

* Målt fra midten af rygrynden

** Med armlæn, eleverbare fodstøtter og drivhjul

*** Uden armlæn, eleverbare fodstøtter og drivhjul.

Fakta

Ryglæn højde 60 cm

Max. brugervægt 135 kg

Tilt vinkel -3° til +20°

Ryglæn justerbart 0° til 30°

Balancepositioner Etac Prio med 20", 22" eller 24" drivhjul har tre alternative balancepositioner for hver sædehøjde.

Vaskeinstruktion Betræk kan vaskes ved 60° C. Hygiejnebetræk (inkontinens) er yderst rengøringsvenligt, og kan som oftest rengøres med en våd klud.



Prio standard leveres med:

- Standard sædepude
- Dynamisk bækken støtte
- Comfort tilt lock
- Dynamisk hovedstøtte
- Højdejusterbare armlæn
- Eleverbare benstøtter
- Højdejusterbare skubbehåndtag
- Tipsikringer
- Stelfarve: Coral
- Betræk: Mørkegrå Hygiejnebetræk
- 24" drivhjul m. aludrivringe og 8" forhjul, begge massive.

Stelfarve



Pearl grey - 94



Coral - 96

Betræk



Mørkegrå,
velourbetræk



Lagune grøn,
Hygiejnebetræk
(inkontinens)



Mørkegrå,
Hygiejnebetræk
(inkontinens)



Etac har sat nye standarder i 40 år og vi fortsætter...

Skandinavisk design og innovation er fundamentet. Tilføj kvalitet, enkelthed, komfort og funktionalitet - så har du opskriften. I mere end 40 år har Etac udviklet produkter og services, der skaber muligheder. Vores produkter er udviklet i tæt samarbejde med brugere og industrielle designere og resultatet er et ergonomisk og prisvindende design og høj kvalitet, som er unik på markedet.



red**dot**



Good Design
Award



Excellent
Swedish Design

Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens, Danmark
Tlf. 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57
info@etac.dk www.etac.dk

etac®

Skaber muligheder