

Lifte og sejl
til børn og
voksne!



Molift lifte og sejl

Sikkert, effektivt og enestående

 **etac**[®]

Etac skaber muligheder

Skandinavisk design, innovation og teknologi er vores grundlag hos Etac. I mere end 40 år har Etac udviklet produkter og services, som skaber muligheder for brugere og hjælpere. I løbet af det sidste årti er Etacs portefølje vokset via adskillige virksomhedsovertagelser. I dag kan vi tilbyde et bredt udvalg af mobilitetsløsninger med manuelle og elektriske kørestole, avancerede sædeløsninger, løsninger til både manuel og mekanisk forflytning samt løsninger til hverdagslivet, inklusive klassiske produkter til bad og toilet. Vi har også et sortiment i verdensklasse af avancerede løsninger til pædiatrisk brug. Alle vores produkter er udviklet i tæt samarbejde med eksperter på genoptræningsområdet, industrielle designere og brugere. Resultatet er ergonomisk design og produkter af højeste kvalitet, som er unikke på markedet.

HOLDBARHED OG KVALITET

Alle vores produkter har én ting til fælles – de er de bedste på markedet, når det kommer til kvalitet, enkelhed, funktion, driftssikkerhed og design. Vores store engagement i arbejdet med innovation og høj kvalitet har placeret Etac i en position som nutidens og fremtidens brand.

SIKKERHED I ALLE DETALJER

Hver enkelt produkt detalje er designet med velvære og sikkerhed for øje. Etac tilbyder sikre løsninger med stor komfort og funktionalitet. Vi stræber efter at forblive på forkant med design og funktion. Vores vision er, at alle skal kunne leve et frit og uafhængigt liv og forfølge sine drømme uafhængig af de fysiske omstændigheder.

Velkommen til Etacs verden, hvor Molift er en vigtig del!



Torben Helbo

Torben Helbo
CEO, Etac AB

“Vores kunders engagement er det, der inspirerer os mest til at fortsætte med at skabe muligheder!”

VI SKABER MULIGHEDER OVER HELE VERDEN



Produkter fra Etac forhandles i mere end 40 lande over hele verden.

ETAC SALGSFIRMA

ETAC DISTRIBUTIONSPARTNER

USA	SCHWEIZ
CANADA	ESTLAND
BRASILJEN	LETLAND
ISLAND	LITAUEN
IRLAND	RUSLAND
STORBRITANNIEN	UNGARN
PORTUGAL	RUMÆNIEN
SPANJEN	GRÆKENLAND
FRANKRIG	ISRAEL
BELGIEN	OMAN
HOLLAND	FORENEDE ARABISKE EMIRATER
SVERIGE	SAUDI ARABIEN
NORGE	HONG KONG
DANMARK	JAPAN
TYSKLAND	SYDKOREA
TJEKKIET	TAIWAN
FINLAND	THAILAND
POLEN	MALAYSIA
SLOVENIEN	SINGAPORE
ITALIEN	AUSTRALIEN
ØSTRIG	NEW ZEELAND

MILJØHENSYN

Vi stræber efter at holde vores produktion så miljørigtig som muligt. Materialerne vælges, og produkterne udvikles med genbrug for øje. Vi stiler efter at minimere materialeforbruget og optimere pakkelsesløsningerne i forbindelse med transport og håndtering.

ETAC UDDANNELSE

Lær mere om vores produkter, så du kan forbedre dine evalueringsfærdigheder! Vi tilbyder produkttræning, kliniske applikationer og seminarer, der relaterer til vores produktsortiment. Vores uddannelsesledere er produktspecialister med lang, klinisk erfaring.

For yderligere information, se etac.dk - eller kontakt din lokale Etac-repræsentant.

Kvalitet giver sikkerhed

Pleje finder sted i mange miljøer. Private hjem, genoptræningsklinikker, plejehjem og hospitaler er bare nogle eksempler. Vi er ikke i tvivl om, at sikkerhed og velvære gør plejen mere effektiv. Det sparer også arbejdstimer og fremmer kommunikationen mellem bruger og hjælper.

FUNKTION DER LÆTTER

I 70'erne blev Etac de første på området, der samarbejdede med industrielle designere om at reformere produkter til hjemmepleje. Funktionelle produkter til brug på badeværelset tog form, og kort efter fulgte produkter til køkken og påklædning. Ti år senere præsenterede Bo Lindkvist, der selv er kørestolsbruger, en ny, innovativ generation af kørestole hos Etac, der snart blev et af vores kerneprodukter. Siden 2004 er Etac vokset via en række virksomhedsovertagelser – HandPro, Immedia, Molift og senest R82 i 2012. Alle disse virksomheder har samme baggrund i og med, at de er grundlagt af entreprenører med en stor passion for produkter. Alle vores produktudviklere arbejder ud fra samme engagement.

HØJTEKNOLOGI PÅ PLEJEOMRÅDET

I dag har vi både manuelle og elektriske kørestole med højteknologiske funktioner. Etac tilbyder også mekaniske og manuelle forflytningsprodukter, som er meget velansete og vigtige på plejeområdet. Vi har et stort sortiment inden for pædiatriske produkter og et bredt udvalg af tilbehør. For mere specifik information om vores produktsortiment, se etac.dk.



PRISVINDENDE DESIGN I FIRE ÅRTIER

Etacs produkter udvikles i tæt samarbejde med industrielle designere, eksperter på genoptræningsområdet og brugere. Resultatet er et ergonomisk design og en kvalitet, som er unik på markedet. Alle de designpriser, vi har vundet – både skandinaviske og internationale – er en anerkendelse af vores succes.



Reddot



Good Design
Award



Excellent Swedish
Design



Award for
Design Excellence

ETAC SKABER MULIGHEDER SIDEN 1973

- 1973 *RFSU Rehab, senere Etac, grundlægges.
- 1985 Etac lancerer Nova, det første firkulede gangstativ i verden med svinghjul fortil.
- 1992 Etac lancerer Cross, den første multifunktionelle krydsrammekørestol i verden.
- 2004 Etac overtager HandPro, der fremstiller el-kørestolen Balder.
- 2008 Etac overtager Immedia, der fremstiller manuelle forflytningsprodukter.
- 2010 Etac overtager Molift, der har skabt den første batteridrevne patientlift i verden.
- 2011 Etac overtager R82, verdenssetter inden for produktion af tekniske og andre hjælpemidler til handicappede børn.
- 2012 Etac ejes 100 % af Nordstjernan.
- 2013 Etac lancerer Cross 5, en kørestol til en ny generation.
- 2014 Etac lancerer bl.a. den smukke Relax brusebadestol og sejlserien Molift RgoSling

Nordstjernan ejer Etac. Shippingfirmaet "Rederiaktiebolaget Nordstjernan" blev grundlagt i 1890 af Axel Johnson. Det er et familieejt investeringsfirma med en strategi fokuseret på langsigtede investeringer. I dag er Etac en international virksomhed med salgsorganisationer og forhandlere over hele verden.

Molifts produkter er udviklet til livet

Produkterne fra Molift er udviklet til at give brugerne et bedre liv og samtidig give hjælperne den bedste støtte og et optimalt arbejdsmiljø. Vores mål er at skabe løsninger, der forbedrer livskvaliteten for hjælpere hver dag, så vi får en sund arbejdsstyrke med mere energi til at yde opmærksomhed, kærlighed og pleje både på arbejde og hjemme.

DEN BEDSTE I SIN KLASSE – LANG HOLDBARHED

Produkterne fra Molift giver handicappede mennesker mulighed for at leve et normalt liv, gå i skole, arbejde og rejse – et bedre liv via sikre, effektive og komfortable forflytningsløsninger. Molift forflytningsløsninger er udviklet til at være de bedste i sin klasse, når det handler om produktkvalitet, driftssikkerhed og holdbarhed.

SIKKERHED I ALLE DETALJER

Molift blev en del af Etac i 2010. Mærket blev grundlagt for mere end 30 år siden af Hans Kasper Andresen. Han var en norsk opfinder, ingeniør og designer, som via sin egen erfaring (han kom på hospitalet efter et hjerteanfald) så behovet for at løfte og flytte patienter på en sikker måde. Det er en af hjørnestenene, som Molift bygger på.



Produkterne fra Molift har modtaget priser for deres innovative og konkurrencedygtige design. Ovenfor: Molift Smart.

NYT
PRODUKT!



LILLE, KOMPAKT, STÆRK OG NEM AT INSTALLERE

Nu lanceres den lille, kompakte og stærke motor, Molift Air. Den er nem at håndtere, nem at køre og nem at installere. Og den passer naturligvis perfekt i Molift skinneresystemet. Lær mere om Molift Air og skinner på etac.com.

STABILE LØFT OG ØGET VÆRDIGHED

Alle lifte fra Molift er som standard udstyret med 4-punktsåg. Det giver mere stabile løft og forhindrer, at brugerne svinger fra side til side. Brugere opnår en fri, åben siddestilling med masser af plads til hovedet, så fornemmelsen af at blive indeklemmt undgås, og de kan føle sig sikre og godt tilpas, mens de sidder. Kombineret med Molift RgoSling yder de exceptionel komfort og korrekt positionering fra liggende til siddende stilling og omvendt, eftersom sejlets løkker glider naturligt i position i forbindelse med løftet.



Sikkert, effektivt og enestående

Med det øgede behov for effektivitet i sundhedssektoren og et voksende fokus på brugere og hjælpers behov og sikkerhed, er forflytningsprodukter af højeste kvalitet helt essentielle.

OMKOSTNINGSEFFEKTIVE LØSNINGER

Studier viser, at manuelle løft og andre forflytningsopgaver er højrisikoaktiviteter for både hjælpere og brugere. Målet med Molift-produkterne er at give den bedste og sikreste patientpleje og undgå tunge løftesituationer, hvor hjælperens ryg kommer i farezonen, mens sundhedssektoren samtidig får den mest omkostningseffektive løsning. Forskning og studier i de seneste 20 år har vist, at omkostningerne ved ordentligt udstyr er meget mindre end de omkostninger, der opstår som følge af hjælpernes arbejdsskader.



Molift RgoSlings har et anatomisk design med glideløkker. Molift RgoSlings er komfortable, åbne og rummelige.



MOLIFT RGOSLINGS

Med Molift RgoSlings får du af de bedste sejl på markedet med mange avancerede løsninger:

- Nemt at håndtere
- Anatomisk designet ryg
- Indbygget polstring
- Glideløkker
- Positioneringslomme bagpå og på benstøtterne
- Specialdesignede bendele for øget komfort
- Positioneringsstropper
- Klar og synlig information

KLAR OG SYNLIG INFORMATION

Molift RgoSlings har nye mærkeskilte med et klart og synligt design. Det gør Molift RgoSlings nemme at forstå og anvende. Det har også en unik beskyttelse af mærkeskiltene.

INDHOLD

MOBILE LIFTE, AKTIVE

Molift Raiser	7
Molift Quick Raiser 1	8
Molift Quick Raiser 2	10
Molift Quick Raiser 2+	11
Molift aktive sejl	14

MOBILE LIFTE, PASSIVE

Molift Smart 150	16
Molift Mover 180	18
Molift Partner 255	20
Løfteåg	23

LOFTLIFTE

Molift Air	25
Molift Skinnesystem	27

MOLIFT RGOSLING (SEJL)

Molift RgoSling MediumBack og HighBack	32
Molift RgoSling Toilet LowBack og HighBack	33
Molift RgoSling Amputation, MediumBack og HighBack	34
Molift RgoSling Comfort HighBack	35
Molift RgoSling Stå/Gå-vest	36

SERVICE OG STANDARDER

Molift Service Tool	37
Vores standarder	37

OVERSICHT

Oversigt over alle RgoSling sejl	38
----------------------------------	----

”Vi er stolte af, at vores Molift-produkter forbedrer livskvaliteten for hjælpere og brugere hver dag.”



Molift Forflytningsplatform & Aktive Lifte

Molift Raiser og Molift Quick Raiser er baseret på samme ergonomiske principper. Begge produkter efterligner det naturlige bevægelsesmønster og opfylder behovet for forflytning hos brugere, som i nogen grad selv kan deltage under forflytningen. Molift har fået en pris af Norwegian Design Council for Design Excellence for sit banebrydende design og funktionalitet.

Molift Raiser

Forflytningsplatform til aktiv forflytning.



Unikke egenskaber

Molift Raiser forflytningsplatform er udviklet til at flytte brugeren sikkert fra siddende til stående position under opretholdelse af de bedste og mest ergonomiske manøvreringsomstændigheder for hjælperen. Den unikke underbensstøtte er udviklet, så den nemt justeres med én hånd. Centralbremsen, som bremser begge hjul samtidig, kan aktiveres både i højre og venstre side – en sikker bremseløsning i miljøer med begrænset plads. Fodpladen har en ru, non-slip overflade, og håndtaget giver mulighed for mange forskellige greb. Disse egenskaber betyder, at brugeren kan føle sig sikker under hele forflytningen.


Molift Raiser samlet let, uden brug af værktøj.



En Raiser Strap kan give støtte omkring ryggen eller hofterne, når brugeren står op.



Hvis brugeren har svært ved at nå håndtaget, kan de bløde håndtag anvendes, så brugeren kan nå hele vejen.

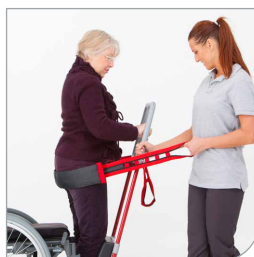


Når brugeren har behov for hjælp, kan en eller to hjælpere anvende en Raiser Strap+ med glidemuffe.

Molift Raiser

HMI-nr. 71251 Art.nr. 16090202

Total vægt
14.2 kg

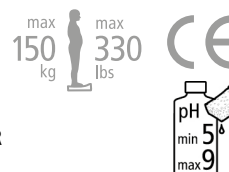

Tilbehør

Soft Handles (Oprejsningshåndtag) 2 stk		82511
Raiser Strap str. S/M (Tryghedsbånd, Junior)	71253	82508
Raiser Strap str. L/XL (Tryghedsbånd, Senior)	71254	82509
Raiser Strap+ str. S/M (Tryghedsbånd, Junior) (består af 82508 & 82537)	71255	82528
Raiser Strap+ str. L/XL (Tryghedsbånd, Senior) (består af 82509 & 82537)	71256	82529
Glidemuffe til Raiser Strap+		82537

Materiale

Stål, plastik, aluminium, TPR

Rengøring

Anvend et rengøringsmiddel uden opløsningsmidler med et pH-niveau mellem 5 og 9. Kan vaskes ved 80°C i 3 minutter (ikke med underbenstøtte). Anvend en våd klud til underbenstøtten. Skyl ikke direkte på kuglelejerne og underbenstøtten med højtrykrenser.

Molift Quick Raiser 1

Kompakt design og enestående manøvredugtighed, selv i små rum.



Kompakt og nem

I kraft af sit kompakte design og lave egenvægt er Molift Quick Raiser 1 stabil og nem at manøvrere. Hjulenes unikke position og understellets næsten perfekte vægtfordeling giver en lille svingradius med stor manøvredugtighed, selv i små rum.

Naturligt bevægelsesmønster

Den skråstillede løftesøjle giver et naturligt bevægelsesmønster og opfylder behovene for løft for brugere, som i nogen grad selv kan deltage under løftet. Molift Quick Raiser 1 har en max. belastning på 160 kg.

Det meget lave understel (7 cm) og smalle front (34 cm) passer godt omkring toiletter og under de fleste senge, stole og kørestole.

Se detaljeret information på side 12-13.

Egenskaber



Ekstra lavt understel

Ekstra lavt understel med smal front for nem adgang.




Kompakt og nem at manøvrere

Molift Quick Raiser 1 har en lav egenvægt og er stabil og nem at manøvrere.



Molift Service Tool - integreret servicesoftware

Automatisk servicevarsling bestemmer, hvornår liften har brug for service og vedligehold.

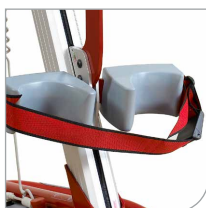

Multijusterbare knæpuder

Knæpuderne er højdejusterbare og kan vinkles for bedre pasform samt for at give alternativ støtte til benene.



Molift Quick Raiser 2

Lift til forflytninger fra siddende til stående med elektrisk justerbart understel.



Stabil og nem at manøvrere

Molift Quick Raiser 2 med elektrisk justerbart understel er kompakt, stabil og nem at manøvrere. Hjulenes unikke position og understellets næsten perfekte vægtfordeling giver en god svingradius og stor manøvreedygtighed, selv i små rum.

Passer næsten overalt

Den skråtstillede løftesøjle giver et naturligt bevægelsesmønster og opfylder behovene for løft for brugere, som i nogen grad selv kan deltage under løftet. Molift Quick Raiser 2 har en max. belastning på 160 kg.

Det lave understel (10 cm) passer under de fleste senge og stole, mens det elektrisk justerbare understel muliggør adgang næsten overalt.

Se detaljeret information på side 12-13.

Egenskaber




Elektrisk justerbart understel

Det perfekte alternativ, når liften anvendes sammen med stole uden adgang underenden, såsom elektriske kørestole og lænestole.



Naturligt bevægelsesmønster

Den skråtstillede løftesøjle giver et naturligt bevægelsesmønster.

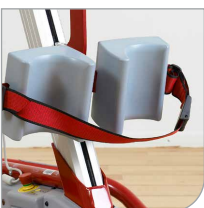

Multijusterbare knæpuder

Knæpuderne er højdejusterbare og kan vinkles for bedre pasform samt for at give alternativ støtte til benene.



Molift Service Tool - integreret servicesoftware

Automatisk servicevarsling bestemmer, hvornår liften har brug for service og vedligehold.

Molift Quick Raiser 2+

Når der er behov for større max. belastning.



Stor max. belastning

Molift Quick Raiser 2+ er tilpasset en højere max. belastning, op til 200 kg. Den har forstærket løftesøjle og ophæng samt elektrisk justerbart understel. Hjulenes unikke position og understellets perfekte vægtfordeling giver en god svingradius og stor manøvredegtighed, selv i små rum.

Naturligt bevægelsesmønster

Den skråtstillede løftesøjle giver et naturligt bevægelsesmønster og opfylder behovene for løft for brugere, som i nogen grad selv kan deltage under løftet.

Det lave understel (10 cm) passer under de fleste senge og stole, mens det elektrisk justerbare understel muliggør adgang næsten overalt.


Se detaljeret information på side 12-13.

Egenskaber



Øget max. belastning

Molift Quick Raiser 2+ har en max. belastning på 200 kg.

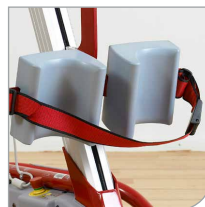

Multijusterbare knæpuder

Knæpuderne er højdejusterbare og kan vinkles for bedre pasform samt for at give alternativ støtte til benene.



Molift Service Tool - integreret servicesoftware

Automatisk servicevarsling bestemmer, hvornår liften har brug for service og vedligehold.



Naturligt bevægelsesmønster

Den skråtstillede løftesøjle giver et naturligt bevægelsesmønster.

Egeskaber – Molift Quick Raiser



Miljøvenligt NiMH-batteri

Alle Molift lifte er udstyret med et miljøvenligt NiMH-batteri.



Sikkerhedsfunktioner

Utallige sikkerhedsfunktioner som nødstop, overbelastningsbeskyttelse samt elektrisk og mekanisk nødsænkning er standardudstyr.



Batteriindikator

Alle Molift lifte har integreret batteriindikator med lys- og lydsignal.



Strømsparefunktion


Elektronikken har en strømsparefunktion, som sætter systemet i standby efter en periode uden aktivitet.




Unik hjulpositionering

Kombinationen af letvægtskonstruktionen og hjulenes unikke position giver exceptionel manøvredegtighed.


Dimensioner

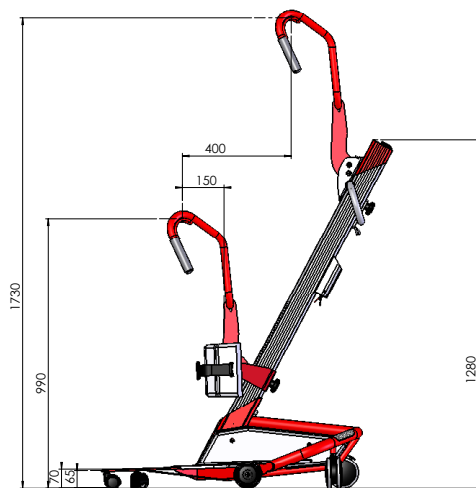

Molift Quick
Raiser 1

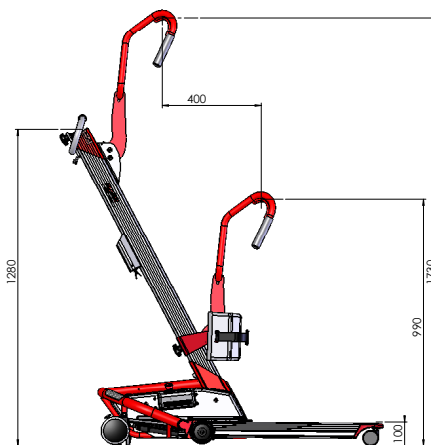

Molift Quick
Raiser 2

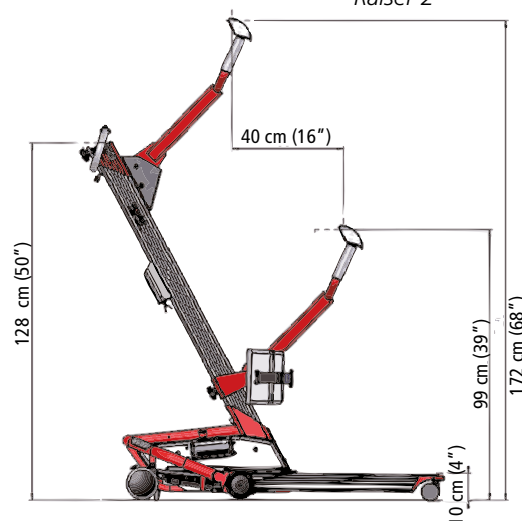

Molift Quick
Raiser 2+

Tilbehør



Molift Quick Raiser justerbar fodplade

Fodplade til justering af fodpladehøjden på Molift Quick Raiser; ideel til lave brugere eller børn. Max. belastning 75 kg.
Art.nr. 0451000




Molift Quick Raiser sandaler

Udviklet til at sikre, at fødderne holdes på plads under løftet.
Sandaler Small 0452100
Sandaler Medium 0452200
Sandaler Large 0452300



Ekstra bløde puder til knæstøtte


Til brugere med ekstra følsomme ben
Bløde puder Small 0455111
Bløde puder Large 0455114

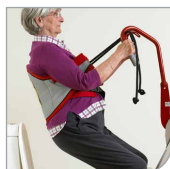

Molift Rgo StandUp sejl

Se detaljeret information i Molift Sejlbrochuren

Tilvalg

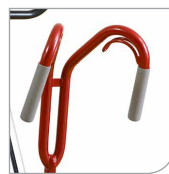


Molift Quick Raiser Arm V-form

Den originale løftearm. Nem at bruge, passer til de fleste brugere.
Art.nr. 0458107



Molift Quick Raiser Arm U-form

Løftearmen har mere plads mellem fastgørelsespunkterne til sejlet.
Art.nr. 0458010

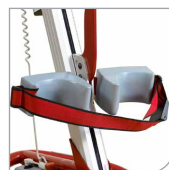

Molift Quick Raiser knæstøtte Lille

Quick Raiser 1 0455000
Quick Raiser 2 & 2+ 0455012



Molift Quick Raiser knæstøtte Stor

Quick Raiser 1 0455001
Quick Raiser 2 & 2+ 0455011

	HMI-nr.	Art.nr.
Molift QR1, V-form Arm	20633	M21030
Molift QR2, U-form Arm	35517	M23021
Molift QR2+, U-form Arm	41850	M04450

Service Software

Inkluderet

Materiale

Aluminium, stål

Total vægt

QR1: 29 kg
QR2: 36 kg
QR2+: 37 kg

Længde

QR1: 955 mm
QR2 og QR2+: 1150 mm

Benhøjde

QR1: 70 mm
QR2: 100 mm
QR2+: 100 mm

Stelbredde

610 mm

Batteri

NiMH 14.4 V - 2.2 Ah
Art.nr. 0541000

Batteriladetid

ca. 3 timer

Løftehastighed

5 cm / sek ved 75 kg

Estimeret ydelse pr. opladning

40 hejs á 75 kg og 50 cm

Standardmodel inkluderer

Stel, Oprensningssøjle, Knæstøtte og enten V- eller U-formet Arm

QR1 and 2

QR 2+

max
160 kg

max
353 lbs

max
200 kg

max
440 lbs

Rengøring

Anvend pH-neutrale rengøringsmidler. Hvis der er behov for desinfektion, skal der anvendes isopropylalkohol. Anvend ikke slibende eller ætsende midler til rengøring.



Molift Aktive sejl til Quick Raiser

Det ideelle sejl til aktiv forflytning med Molift Quick Raiser.

NY
LABEL!

Molift RgoSling StandUp


Molift RgoSling StandUp er et polstret sejl, som er udviklet til aktive løft i kombination med Molift Quick Raiser. Det giver en perfekt støtte til lænden og er det ultimative valg ved løft og forflytning fra siddende til siddende. RgoSling StandUp placeres hurtigt og nemt på brugeren.

Sejlets design gør det ideelt til toiletbesøg. Molift RgoSling StandUp har en effektiv, skridsikker belægning på indersiden for at forhindre, at sejlet glider op. Den brede rygstøtte fordeler vægt og belastning jævnt over en stor flade og giver brugeren større komfort. Mavebæltet er med til at give ekstra støtte og stabilitet.



Molift RgoSling StandUp med støtte

Molift RgoSling StandUp med støtte giver yderligere bækkenstøtte, hvis brugeren har brug for lidt ekstra hjælp til at rejse sig.

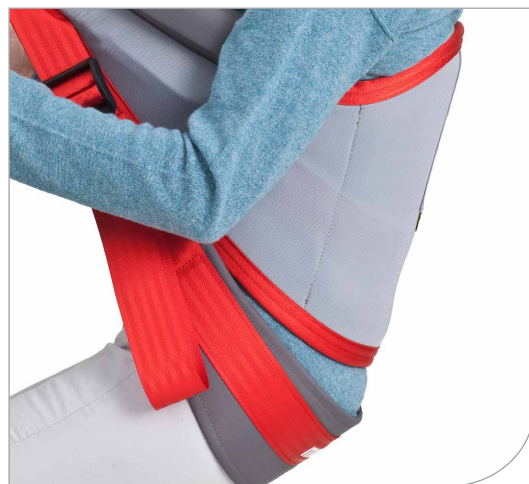

Uden støtte

Størrelse	HMI-nr.	Art.nr.
XS	77625	1720710
S	77626	1720720
M	77627	1720730
L	77628	1720740
XL	77629	1720750

Med støtte

HMI-nr.	Art.nr.
77630	1720810
77631	1720820
77632	1720830
77634	1720840
77633	1720850

Inspektion

Sejlene skal efterses regelmæssigt, specielt efter vask. Undersøg sejlene omhyggeligt for slitage. Vær specielt opmærksom på sømme, stof, stropper og løkker. Beskadede sejl skal udskiftes øjeblikkeligt.

Størrelse (taljemål)

XS	55–60 cm
S	60–75 cm
M	75–100 cm
L	100–150 cm
XL	150–175 cm

Materiale

Polyester

Rengøring



max
300 kg
max
660 lbs





Molift Mobile Passive Lifte

Molift mobile passive lifte er velkendte for deres innovative og intuitive løsninger såsom standard 4-punktsåg, Molift Service Tool integreret servicesoftware, et kompakt letvægtsdesign og en ergonomisk, brugervenlig skubbebøjle. Den succesrige Molift Smart 150 er også blevet tildelt en pris af The Norwegian Design Council for banebrydende design og funktionalitet.

Molift Smart 150

Let, sammenklappelig og transportabel uden værktøj.



Kompakt og smart

Molift Smart 150 er let at køre og transportere til det sted, den skal anvendes. Den er udviklet til hjemmepleje, rejsebrug og nem opbevaring.

Molift Smart 150 har en unik konstruktion, som fordeler vægten jævnt. Vægtfordelingen sammen med det smalle understel gør den nem at manøvrere, selv i små rum.

Komfortabel og sikker forflytning

Løfteområdet på 27-168 cm giver et fantastisk stort løfteområde, hvilket letter løft fra såvel gulv som høje flader. Standard 4-punktsåg sikrer en komfortabel og rummelig løfteposition for brugeren.

Molift Smart 150 er blevet tildelt en pris for Design Excellence af The Norwegian Design Council.

Art. nr.
M10153

HMI-nr.
32332

Service Software
Inkluderet

Materiale
Aluminium, stål

Totalvægt
25 kg

Vægt, adskilt
Del 1: 11,5 kg
Del 2: 13,5 kg

Længde
1160 mm

Benhøjde
110 mm

Stelbredde
660 - 920 mm

**Dimensioner
sammenfoldet**
1160 x 475 x 355 mm

Løftehøjde
270-1680 mm

Hejseinterval
1410 mm

Batteri
NiMH 14.4 V – 2.2 Ah
Art.nr. 0541000

Batteri ladetid
ca. 3 timer

Hejsehastighed
6 cm/ sek

**Estimeret ydelse pr.
opladning**
40 hejs á 75 kg og 50 cm

Rengøring

Anvend pH-neutrale rengøringsmidler. Hvis der er behov for desinfektion, skal der anvendes isopropylalkohol. Anvend ikke slibende eller ætsende midler til rengøring.



Egenskaber



4-punktsåg

Standard 4-punktsåg sikrer en komfortabel og mere rummelig løfteposition for brugeren.



Løfter nemt fra gulvet

Molift Smart har et stort løfteområde, der gør, at den kan løfte såvel fra gulv som fra høje flader.

Tilbehør



Rejsekuffert – Molift Smart 150

Praktisk, hård kuffert giver yderligere beskyttelse ved transport med fly. Den er TSA-godkendt til flyrejser og ideel til brugere med et aktivt liv.

Art.nr.

0990200



Molift Smart foldes nemt sammen og ud igen uden brug af værktøj. Kan deles i to dele, hvor den tungeste del kun vejer 13,5 kg.

Molift Mover 180

Molift Mover 180 er en kompakt og let lift, som passer perfekt til private hjem såvel som i institutioner.


En favorit i hverdagen

Liftens letvægtskonstruktion i aluminium gør Molift Mover 180 meget let at manøvrere. Med et stort løfteområde på 27-163 cm er det ikke kun muligt at løfte højt – liften kan også løfte direkte fra gulv. Molift Mover 180 har mulighed for både 2- og 4-punktsåg.

Ergonomisk håndtering

Molift Mover 180 er udstyret med unikke, buede håndtag, som giver mange muligheder og stor fleksibilitet i håndteringen af liften. En ergonomisk finesse, der gør arbejdet nemmere for hjælperen.

Molift Mover 180 er, som alle andre Molift lifte, udstyret med Molift Service Tool - en unik, automatisk serviceindikator, der giver besked, når der er behov for service. Den integrerede servicesoftware kan også anvendes til at hente data omkring liftens brug og løftemønstre.

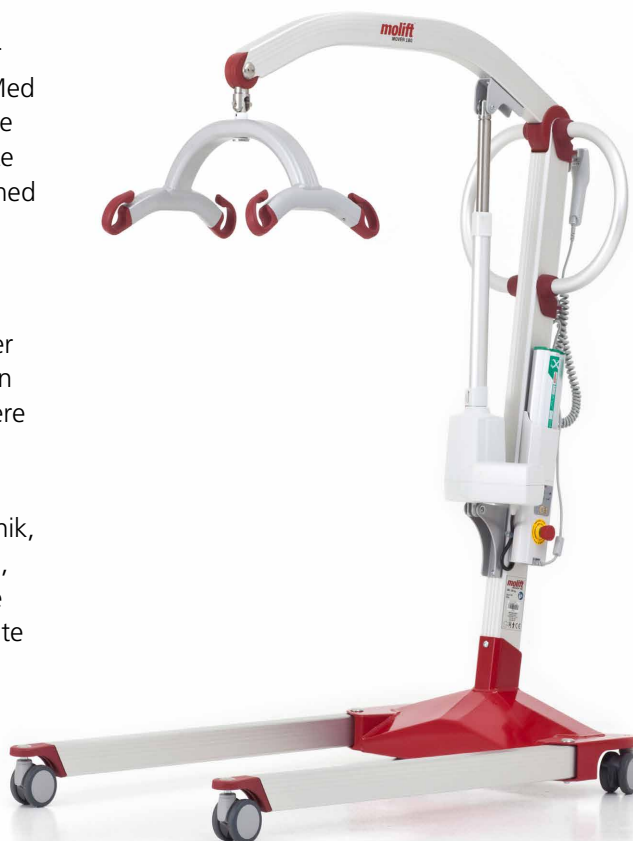

Find løfteåg og detaljeret information på side 22-23.

Molift Mover 180 inkl.
2-punktsåg (medium):

Art. nr.
M1800-DK

HMI-nr.
77688

Materiale
Aluminium, Stål

Service Software
Inkluderet

Totalvægt
32 kg

Længde
1260 mm

Stelbredde
670 - 1025 mm

**Løftehøjde
4-punktsåg**
265-1630 mm

Løfteinterval
1365 mm

Benhøjde
105 mm

Batteri
NiMH 14.4 V – 2.2 Ah
Art.nr. 054100

Batteri ladetid
Ca 3 timer

Hjulstørrelse
7.5 cm

Løftehastighed
4 cm/ sek

**Estimeret ydelse pr.
opladning**
50 hejs á 75 kg og 50 cm

Rengøring

Anvend pH-neutrale rengøringsmidler. Hvis der er behov for desinfektion, skal der anvendes isopropylalkohol. Anvend ikke slibende eller ætsende midler til rengøring.



Egenskaber



Unikt skubbehåndtag

Unikt buet håndtag med mange grebsmuligheder. Gennemtænkt ergonomi giver et naturligt og sikkert greb.



Let håndtering

Molift Mover 180 har en totalvægt på kun 32 kg, som sammen med liftens enkle design gør den meget let at manøvrere.



Indbygget serviceindikator

Automatisk varslingsystem giver signal, når det er tid til service og vedligehold.



Mange anvendelsesmuligheder

Molift Mover 180 kan anvendes med både 2- og 4-punktsåg. Ågene fås i seks varianter og skiftes let uden brug af værktøj.



Vægt

Molift Mover 180 vægt er godkendt Klasse III udstyr og overholder alle gældende tekniske standarder. Den kan også udregne BMI (Body Mass Index) med ét enkelt tryk.

Molift Mover 180 har et stort løfteinterval, som gør det muligt at løfte fra gulv, såvel som fra høje flader.



Molift Partner 255

Flagskibet blandt Molifts mobile lifte.



Se valgfri løfteåg og
detaljeret information på
side 22-23.

Vertikalt løftemønster og fremragende

løfteområde

Molift Partner 255 er den ideelle løsning til løft i komplekse situationer ved akut og kritisk pleje på hospitaler og i plejefaciliteter. Med et enestående løfteområde på 37-179 cm er det muligt at udføre såvel løft direkte fra gulv som høje løft.

Den lige, lodrette løftesøjle sammen med det faste løfteåg giver virkelig høj stabilitet og holder brugeren i god afstand fra søjlen.

Stabilitet, manøvredegtighed og løftekapacitet

Med en samlet vægt på 42,5 kg er Molift Partner 255 en af de letteste lifte i kategorien, og kombineret med den fremragende konstruktion og hjulløsning er den utrolig nem at manøvrere med en max. belastning på 255 kg. Udstyret med miljøvenlige NiMH-batterier.

Molift Partner 255
inkl. 4-punktsåg str. L

Art.nr.
M13018

HMI-nr.
69164

Materiale
Aluminium, Stål

Service Software
Inkluderet

Totalvægt
Standard: 42.5 kg
Lav understel: 45 kg
Med støttearme: 50 kg

Længde
1285 mm

Stelbredde
690 - 1065 mm

Hejsehøjde
370 - 1790 mm

Hejseinterval
1290 mm

Benhøjde
115 mm
Lavt understel: 6 cm
Med støttearme: 11.5 cm

Batteri
NiMh 26.4 V – 2.2 Ah

Batteri ladetid
Ca 3 timer

Løfthastighed
3 cm/ sek

Estimeret ydelse pr. opladning
50 hejs á 75 kg og 50 cm

Rengøring
Anvend pH-neutrale rengøringsmidler.
Hvis der er behov for desinfektion, skal der anvendes isopropylalkohol. Anvend ikke slibende eller ætsende midler til rengøring.




Egenskaber



Høj max. belastning

Molift Partner 255 har en max. belastning på 255 kg.

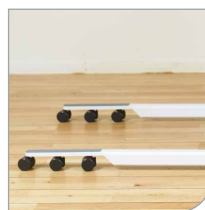

Lavt understel

Molift Partner 255 fås også med ekstra lavt understel. En understelshøjde på kun 6 cm er en af de laveste på markedet



Støttearme

Molift Partner 255 fås med ekstra støttearme. Kombineret med den maksimale højde gør det liften til en ideel løsning som støtte ved gangtræning.



4-punktsåg

Sikrer komfortabel og rummelig løfteposition. Kombineret med det vertikale løftemønster giver det en sikker og stabil forflytning.

Tilbehør



Vægtarm - Molift Partner 255

Molift Partner 255 vægt placeres øverst på løftearmen, og dermed fastholdes løftehøjden. Vægten er godkendt Klasse III udstyr og kan også udregne BMI (Body Mass Index).

Art.nr.

1331002



Molift Partner 255 har et vertikalt løftemønster, som holder brugeren på en konstant afstand fra søjlen under hele forflytningen. Dermed skabes en sikker og stabil position.

Tilbehør – Molift passive lifte

(Kan ikke anvendes med Molift Smart 150)



Molift vægt

Molift vægte er godkendt Klasse III udstyr og overholder alle gældende tekniske standarder. Vægtene kan også udregne BMI (Body Mass Index).




Molift Stretcher

Molift Stretcher er en brugervenlig og fleksibel scoopbåre til sygehuse og institutioner. Godkendt til og kompatibel med røntgen, CT-scanninger og MRI og kan anvendes direkte med Molift 4-punktsåg.


Art.nr. M25200 HMI-nr. 48652

Dimensioner



Molift Mover 180

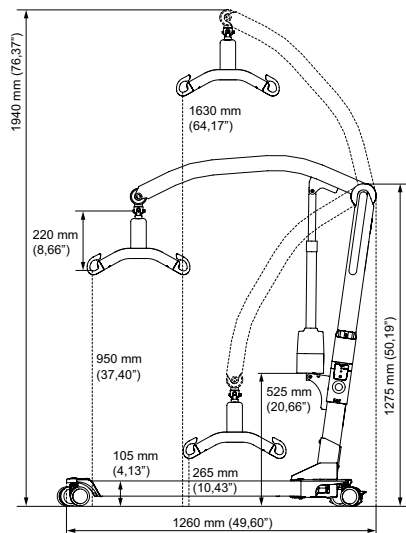

Molift Partner 255

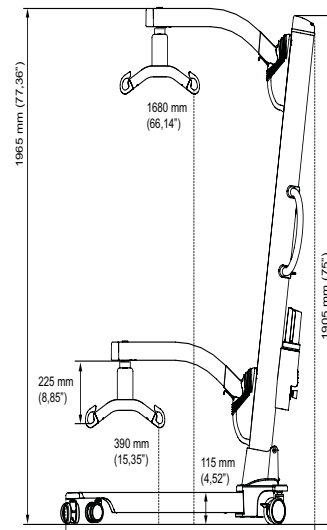


Molift Smart 150

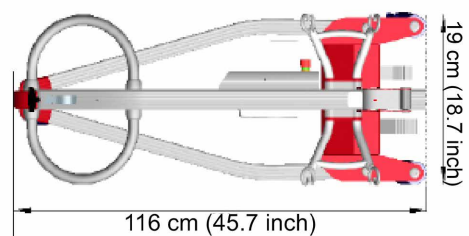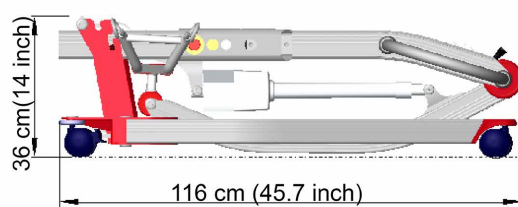

Løfteåg

De nye Molift aluminiumsåg passer til nye og eksisterende lifte. Letvægtsågene understøtter liftens lave totalvægt, og de er desuden lettere for hjælperen at skifte og bære.

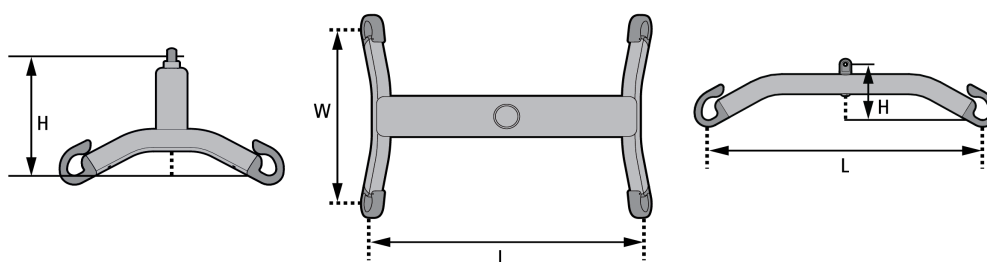

Beskrivelse

Mover 180 og Air, 4-punkt, M
Mover 180 og Air, 4-punkt, L
Mover 180 og Air, 2-punkt, S
Mover 180 og Air, 2-punkt, M
Mover 180 og Air, 2-punkt, L
Partner 255, 4-punkt, M
Partner 255, 4-punkt, L

Art.nr.

1830011
1830010
1830003
1830002
1830001
1330060
1330061

Dimensioner L x B x H

420 x 300 x 240 mm
530 x 360 x 295 mm
340 x 130 mm
440 x 130 mm
540 x 130 mm
420 x 300 x 240 mm
530 x 360 x 295 mm



Molift loftliftsystemer

Loftliftsystemer fra Molift er fremtidens løsning til hjælpere. Molift loftlifte er enkle og sikre at anvende og kan løse alle løftebehov for handicappede. Molift loftliftsystemernes funktionelle og enkle design giver bedre adgang til brugeren og øger sikkerheden for såvel hjælper som bruger. Skinnesystemet Molift Rail System sammen med løftmotoren Molift Air gør systemet til en meget fleksibel, innovativ, omkostningseffektiv og fordelagtig investering.

Molift Air

En ny generation af loftlift

Molift Air er en stærk og innovativ loftlift, der gør det muligt at forflytte brugere komfortabelt og sikkert.

NYT
PRODUKT!



God og funktionel

Molift Air er en innovativ, funktionel og gennemdesignet loftlift til alle typer af brugere. Kombineret med skinnerystemet Molift RailSystem klarer Molift Air alle løftesituationer inden for plejen.

Let og fleksibel

Molift er en stærk loftlift, der er velegnet til siddende og vandrette forflytninger såvel som stå- og gangtræning sammen med det omfattende tilbehørsprogram fra Molift. Den anvendes med faste loftskinner, men kan også anvendes med flytbare, fritstående systemer.

Med den meget lave vægt og det smarte quick release koblingssystem er Molift Air nem at håndtere i forbindelse med installation og service. Molift Air fås med fleksible løsninger såsom fjernbetjening, skinneoplading (In-Rail-Charging, IRC) og mulighed for forflytning fra rum til rum. Hertil kan tilføjes sikkerhedsfunktionerne, det store løfteområde og de mange forskellige løfteåg. Her er den komplette løsning til alle områder inden for sundhedssektoren.

Variant	HMI-nr.	Art.nr.
Molift Air 205	84693	M25205
Molift Air 300	84694	M25300
Molift Air 205 t/køremotor	84695	M26205
Molift Air 300 t/køremotor	84696	M26300
Molift Air 205 IRC*	84697	M27205
Molift Air 300 IRC*	84698	M27300
Molift Air 205 IRC* t/køremotor	84699	M28205
Molift Air 300 IRC* t/køremotor	84700	M28300

* IRC= In rail Charging (lader i skinnen)

Max brugervægt

Molift Air 205: 205 kg
Molift Air 300: 300 kg

Service Software

Service Tool 4 inkluderet

Vægt af løftemotor

7.5 KG

Batterioplader

100-240 V AC, 40-60 Hz

Batteri

26.4 V NiMH 2.2 Ah

Motor

24 V DC 12 A

Løfthastighed

35mm/s 90kg belastning

Tæthedsgrad

Håndkontrol IPX4
Løftemotor IPX4

Løfteinterval

3.0 m

Nødfir

Mekanisk og elektrisk

Nødstop

Tilgængelig fra gulvniveau (snor)
Kan nulstilles fra gulvniveau.



Egenskaber



Montering i skinne

Quick release-funktion uden behov for værktøj gør service og vedligehold så meget lettere.



Håndbetjening

Med ledning som standard. Fjernbetjening som tilvalg.



Molift Service Tool

Automatisk servicevarsling informerer når liften har brug for service og vedligehold.



Batteriindikator


På fjernbetjening og løftemotor.



Batterilader

Vægmonteret lader eller skinneopladning (In-Rail-Charging, IRC).

Dimensioner

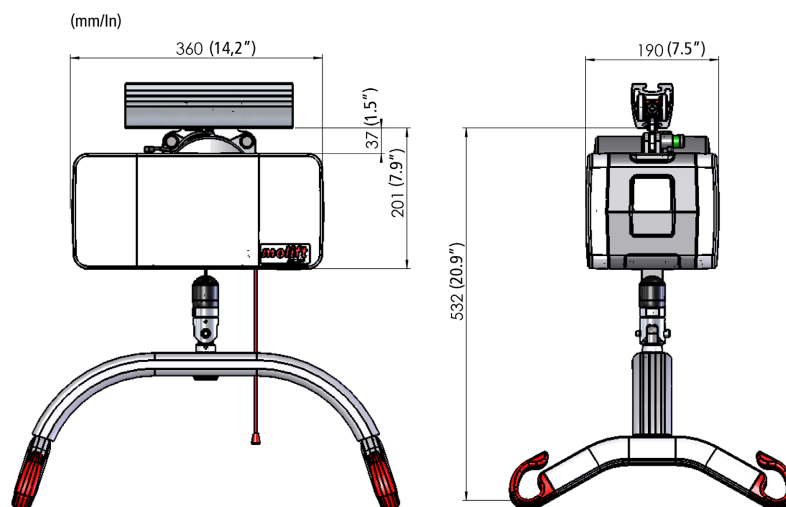

Tilbehør



Løfteåg

Flere forskellige 2- og 4-punkts-aluminiumsåg med quick release kobling til løftestrop. Se s. 23.



Vægt

Molift Air vægt er godkendt Klasse III Medicinsk Udstyr og overholder alle gældende tekniske standarder. Den kan også udregne BMI (Body Mass Index) med ét enkelt tryk.



Molift fremdriftsmotor

Kørende vandret forflytning langs skinnen.

Molift skinnesystem

Kan installeres i alle former for lofter og vægge.

Nemt at installere

Skinnesystemet Molift Rail System (MRS) er en omkostningseffektiv løsning til hospitaler, institutioner, plejehjem og private hjem. Det integreres let og er æstetisk tilpasset rummets indretning og arkitektur, så det bliver et praktisk arbejdssted for hjælpere såvel som et attraktivt miljø for brugere og deres besøgende. MRS-håndbogen er en effektiv guide til hele projektet – fra planlægningsstadiet til installation af skinnesystemet. Den indeholder detaljerede forklaringer til alle komponenter, materialekrav, betingelser for installation, monteringsinstruktioner og sikkerhedsaspekter.



En af de mest effektive installationsprocesser på markedet

MRS skinnesystemet er udviklet og godkendt i overensstemmelse med ISO 10535. MRS har skinneprofiler med innovative løsninger til integration i loftet. Det inkluderer også sporskifter og andre transitionsmuligheder, hvilket gør skinnesystemet utrolig fleksibelt. MRS består af meget få dele, og det giver en af de mest effektive installationsprocesser på markedet.

Alle disse egenskaber gør vores system meget konkurrencedygtigt hvad angår profitable investeringer. MRS kan integreres i alle former for lofter og vægge. MRS kan sammensættes fra 160 til 300 kg og endda endnu højere løftekapacitet til bariatriske brugere, afhængig af valget af loftløftmotor.



Egenskaber

- Nemt at installere.
- Forskellige vægtklasser.
- Mange forskellige installationsmuligheder – integreret i nedsænket loft, under nedsænket loft, på væggen, på gulvet med opretstående støtter etc.
- Kan installeres i alle former for lofter, vægge og gulve.

Max brugervægt
160-300 kg

Farver
Hvid eller anodiseret aluminium

Skinner
3 dimensioner: H62, H112 og H142

Max distance mellem fixpunkter
Op til 600 cm

Skiftespor



Molift RgoSling

Komfortable sejl er essentielle for brugerens velbefindende. Vi arbejder hårdt og engageret for at udvikle de mest komfortable og fleksible sejl til både brugere og hjælpere.



NYT
DESIGN!

Maksimal komfort

Alle vores sejl er designet til at fordele vægt og belastning jævnt, så de bliver så komfortable og brugervenlige som mulige. Der er et bredt udvalg af forskellige modeller og størrelser, og da Molift altid fokuserer på komfort og sikkerhed, anbefaler vi individuel afprøvning. En farvekode indikerer sejlstørrelsen, og den gør det også hurtigere og nemmere at vælge rigtig størrelse.

Anatomisk form gør forskellen!

Molift RgoSling har en anatomisk form og et specielt tilpasset snit med fast polstring både bagpå og på benstøtterne. Det anatomiske design tager hensyn til ryggens naturlige krumning, samtidig med at det forhindrer, at brugeren glider. Sammen med den balancerede vægtfordeling opnås hermed et komfortabelt løft.

Unik glideløkkefunktion

Den unikke glideløkkefunktion i skulderstropperne balancerer vægtfordelingen i alle løftets stadier og gør løft fra liggende til siddende og omvendt meget komfortable, uden at benstropperne skrider op.

Skandinavisk design

Molift sejl er designet i Norge efter den samme høje standard som Molift liftene. Alle sejl er godkendt i henhold til kvalitetsstandarden EN ISO 10535. Vi anbefaler brug af 4-punktsåg, fordi det giver et komfortabelt løft, men sejlene kan også anvendes med 2-punktsåg.

Unikke egenskaber

Placeringslommen på sejlet, sammen med den specielle foldeteknik - udviklet af Molift - gør sejlet let at placere på brugeren.




Baglomme/ placeringslomme

Baglommen gør det nemt og komfortabelt at placere sejlet.



Benstøtter

De polstrede benstøtter med den unikke stropplacering fordele trykket på låret, og dermed øges komforten. Med placeringslommen lettes pålægning af benstøtterne.

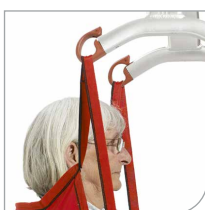

Glideløkker

Glideløkkerne giver en balanceret vægtfordeling.




Mange muligheder

Sejlene fås som HighBack og MediumBack.



Flip-op mærkningssystem

Klar og tydelig information til brug i hverdagen. Vedligeholdsinformation findes bag hovedmærkaten.

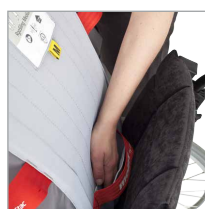


Placeringslomme på bagsiden

Lomme på bagsiden gør det let at sætte placere sejlet.



Placeringslomme på benstøtten

Placeringslommen gør det nemt og komfortabelt at placere benstøtten korrekt.

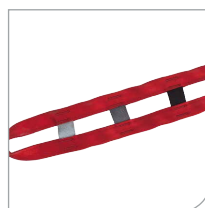

Farvekoder for nem tilpasning

Benstroppernes farvekode-system gør det nemt at finde de forskellige højder, når stroppen fastgøres til løfteåget.

Løftestropper

Mange farvekodede løkker hjælper med at finde den rette størrelse.

Anti-slip

RgoSling Amputation, RgoSling Toilet og RgoSling StandUp er forsynet med anti-slip polstring på indersiden for yderligere sikkerhed.

Bælte

Molift RgoSling Amputation og RgoSling Toilet har bælte for komfort og sikkerhed.

Benstøtte

Polstret benstøtte for brugerens komfort. En placeringslomme gør det nemt og komfortabelt at placere benstøtten korrekt.

RgoSling Medium Polstret.

Mærkning

Flip-op mærkningssystem med klar og tydelig information til brug i hverdagen. Vedligeholdelsesinformation findes bag hovedmærkaten.

Polstring

Polstringen fordeler vægten og giver brugeren større komfort.

Placeringslomme

Lomme, der letter placering af sejlet, primært i siddende stilling.



Molift RgoSling MediumBack og HighBack

Indbygget ergonomi til komfortable løft.

Til hjemmepleje og institutionsbrug

Molift RgoSling MediumBack og Molift RgoSling HighBack er allround-sejl, der passer til de fleste brugere og løftesituationer i hjemmeplejen og til institutionsbrug.

Molift RgoSling

RgoSling MediumBack yder støtte til kroppen, og RgoSling HighBack støtter derudover også hovedet. Det giver brugeren en let tilbagelænet stilling, som er velegnet til brugere med nedsat styrke i kroppen og nedsat hovedstabilitet. Det er specielt velegnet til løft til og fra liggende stilling samt løft fra gulvet.

Molift RgoSling i net

RgoSling MediumBack og RgoSling HighBack fås også i blødt netmateriale i polyester. Materialet har god åndbarhed og tørrer meget hurtigt. Sejlet er specielt velegnet til bruse- og badesituationer. Netudgaven har samme form og egenskaber som de polstrede sejl såsom: glideløkker, placeringslomme på bagsiden og stropper til øget vægtfordeling i bendelene.



RgoSling HighBack Net.

Molift RgoSling MediumBack Polstret

Størrelse	HMI-nr.	Art.nr.	Net	
			HMI-nr.	Art.nr.
XXS	82218	1720100	77077	1720300
XS	77071	1720110	77078	1720310
S	77072	1720120	77079	1720320
M	77073	1720130	77083	1720330
L	77074	1720140	77080	1720340
XL	77075	1720150	77081	1720350
XXL	77076	1720160	77082	1720360

Molift RgoSling HighBack Polstret

Størrelse	HMI-nr.	Art.nr.	Net	
			HMI-nr.	Art.nr.
XXS	82217	1720200	77084	1720400
XS	77030	1720210	77085	1720410
S	77060	1720220	77086	1720420
M	77067	1720230	77087	1720430
L	77068	1720240	77088	1720440
XL	77069	1720250	77089	1720450
XXL	77070	1720260	77090	1720460

Anbefalet brugervægt

XXS	12 – 17 kg
XS	17 – 25 kg
S	25 – 50 kg
M	45 – 95 kg
L	90 – 160 kg
XL	160 – 240 kg
XXL	230 – 300 kg

Materiale

Polyester,
PE -cellfoam

Rengøring




60 – 85° C



Molift RgoSling Toilet LowBack og HighBack

Et fleksibelt sejl med optimale funktioner til toiletbesøg.

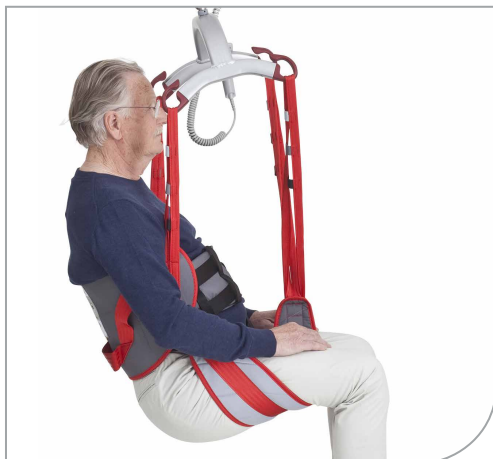

Lever op til store krav ved toiletbesøg

RgoSling Toilet yder fremragende støtte til kroppen og er sikret med dobbelte spænder på bæltet. De fleksible benstøtter letter individuel tilpasning og kan placeres på flere måder for at tilgodese brugerens funktioner og behov.

Komfort og sikkerhed til brugeren

Molift RgoSling Toilet har flere alternative løkker på både skulder og benstropper, så siddevinklen kan tilpasses brugerens behov, inklusive en oprejst siddestilling. Sejlet giver fremragende støtte i siddende stilling. Bæltespænderne kan justeres i længden for optimal fordeling af vægt og belastning, mens der samtidig opretholdes god stabilitet og sikkerhed.

Fås som HighBack og LowBack

Molift RgoSling Toilet HighBack giver yderligere støtte til brugere med nedsat/uden hovedstabilitet.

Alternativ påsætning som giver mere plads til af- og påtagning af benklæder. Unik fastgørelse af benstøtten letter fleksibel og individuel påsætning.

	LowBack		HighBack	
Størrelse	HMI-nr.	Art.nr.	HMI-nr.	Art.nr.
XXS	77611	1720500	77618	1720600
XS	77612	1720510	77619	1720610
S	77613	1720520	77621	1720620
M	77614	1720530	77620	1720630
L	77615	1720540	77622	1720640
XL	77616	1720550	77623	1720650
XXL	77617	1720560	77624	1720660

Rengøring




Materiale

Polyester, PE-cellfoam

Anbefalet brugervægt

XXS	12 – 17 kg
XS	17 – 25 kg
S	25 – 50 kg
M	45 – 95 kg
L	90 – 160 kg
XL	160 – 240 kg
XXL	230 – 300 kg

Farvekode

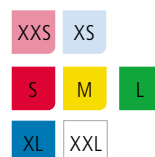

Molift RgoSling Amputation MediumBack og HighBack

Ekstra sikkerhed med indbygget bælte i taljen.

Smal åbning for øget sikkerhed

Molift RgoSling Amputation yder den ekstra støtte, som er nødvendig i forbindelse med løft og forflytning af brugere med lav muskeltonus eller amputerede ben. RgoSling Amputation har et anatomisk snit og polstring, der giver fremragende støtte gennem hele løfte- og forflytningssituationen. Benstropperne er delt og har ekstra længde, så de kan placeres under begge ben samtidig. Yderligere stropper forhindrer, at benene glider fra hinanden, så brugeren kan føle sig tryk.

Fås som HighBack og MediumBack

Molift RgoSling Amputation HighBack giver yderligere støtte til brugere med lav muskeltonus og nedsat hovedstabilitet. Sejlet kan anvendes til løft til og fra vandrette positioner og siddende stilling.



Egenskaber



Ekstra kropsstøtte

Bæltet med dobbelte bæltespænder og anti-slip materiale på indersiden giver yderligere kropsstøtte til brugere med lav muskeltonus og dårlig stabilitet.



Mindre åbning

Smallere sædeåbning omkring bagdelen end på standardversionen af sejlet, så brugeren ikke glider ned i sejlet.

	MediumBack		HighBack	
Størrelse	HMI-nr.	Art.nr.	HMI-nr.	Art.nr.
XXS	77635	1721100	77668	1721200
XS	77641	1721110	77669	1721210
S	77636	1721120	77670	1721220
M	77639	1721130	77671	1721230
L	77637	1721140	77672	1721240
XL	77638	1721150	77674	1721250
XXL	77640	1721160	77675	1721260

Rengøring



Materiale

Polyester, PE-cellfoam

Anbefalet brugervægt

XXS	12 – 17 kg
XS	17 – 25 kg
S	25 – 50 kg
M	45 – 95 kg
L	90 – 160 kg
XL	160 – 240 kg
XXL	230 – 300 kg

Farvekode

XXS	XS
S	M
XL	XXL

Molift RgoSling Comfort HighBack

Tilpasser sig kroppens form.

Støtte til hele ryggen

Molift RgoSling Comfort HighBack er et helsejl fremstillet i netmateriale i polyester, der kan ånde og tørrer hurtigt. Det er specielt velegnet, når sejlet skal blive liggende under brugeren i en stol eller kørestol samt til brugere med smerter i muskler eller knogler. Molift RgoSling Comfort giver god støtte til hele ryggen. Sejlet er med høj ryg, som placerer brugeren i en mere bagudlænet stilling. Skulderstropperne har de unikke glideløkker, som giver en blød overgang fra liggende til siddende stilling og omvendt. Placeres mens brugeren ligger ned.



Størrelse	HMI-nr.	Art.nr.
XS	88156	1721410
S	77649	1721420
M	77650	1721430
L	77651	1721440
XL	88157	1721450
XXL	88158	1721460

Materiale
Polyester

Anbefalet brugervægt

XS	17–25 kg
S	25–50 kg
M	45–95 kg
L	90–160 kg
XL	160–240 kg
XXL	230–300 kg

Rengøring



Farvekode

XS	S
M	L
XL	XXL



Molift RgoSling Stå/Gå-vest

Til gangtræning, selvstændigt eller med hjælp.

Sikker og komfortabel gangtræning

Molift RgoSling Stå/Gå-vest er udviklet til tryk og sikker genoptræning såsom gangtræning, ståtræning og balanceøvelser.

Molift RgoSling Stå/Gå-vest har et bredt, polstret bælte med dobbelte spænder, som fordeler trykket jævnt over en stor flade. De polstrede lyskestrapper forhindrer vesten i at glide op og ud af position.

Adoptererede træk fra professionel klatring

Molift RgoSling Stå/Gå-vest har adopteret flere træk fra professionelt klatreudstyr for at tilgodese komfort og sikkerhed på bedst mulig måde. Selvstrammende ophængsløkker forhindrer, at brugeren glider eller falder på gulvet.

Bæltet åbnes og lukkes fortil og giver brugeren øgede muligheder for at træne gang eller gå på toilettet selvstændigt, måske endda uden hjælp.

Tilbehør



Lyskestrapper

Lyskestrapperne er placeret i en vinkel udad, hvilket minimerer risikoen for, at de klemmer, når der lægges mere vægt på vesten.



Størrelse	HMI-nr.	Art.nr.
XXS	77642	1721300
XS	77643	1721310
S	77645	1721320
M	77644	1721330
L	77647	1721340
XL	77646	1721350
XXL	77648	1721360

Tilbehør

Lyskestrapper (Bestil to for et komplet par)

Størrelse	HMI-nr.	Art.nr.
XXS-XS	79213	1721700
S-M	79214	1721720
L-XL	79215	1721740

Anbefalet brugervægt

XXS	12–17 kg
XS	17–25 kg
S	25–50 kg
M	45–95 kg
L	90–160 kg
XL	160–240 kg

Materiale


Polyester, PE-cellofoam

Rengøring



60–85° C

Farvekode

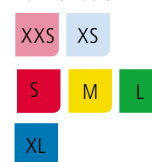

Molift Service Tool

Software, der arbejder sammen med liften

Alle lifte fra Molift har en integreret, automatisk servicevarsling, der angiver, hvornår liften har brug for service. Det sikrer, at bruger og hjælper ved, at liften er sikker i forhold til gældende lovgivning og regler.

Sikrer korrekt service og vedligehold

Molift Service Tool udregner antallet af løft og giver et advarselssignal, når service er påkrævet.

Med Molift Service Tool 4 kan en certificeret Molift-tekniker forbinde sig til og kommunikere med liften for at udføre service og teknisk fejlsøgning. Med softwaren er der også mulighed for at læse, kontrollere og justere nøgleparametre i liften såvel som læsning og print af servicehistorikken.

Registrer og analyser brug af lifte og løftemønstre

Molift Service Tool 4 kan også anvendes til at hente data omkring brug af liften samt løftemønstre. Når data kædes sammen med arbejdsskader blandt de ansatte, kan det være et nyttigt redskab for ledelsen i arbejdet med at reducere skader. Ydermere kan Molift Service Tool forbedre effektiviteten, eftersom den angiver, hvorvidt de typer lifte, der anvendes, er egnede til brugergruppen og deres behov.



Molift Service Tool 4 gør det muligt for os at samle data om Molift lifte i hele verden og forbedre vores produkter kontinuerligt.

Vores standarder

Molift er certificeret i overensstemmelse med ISO-standarderne for vores branche. Det har indflydelse på vores drift og på kvalitetssikringen af vores produkter og vores processer.

KVALITETSSIKRINGSSYSTEMER

(EN-ISO 9001:2008) Vi er certificerede i henhold til ISO 9001:2008, hvilket betyder, at alle vores arbejdsprocesser, fra produktudvikling og produktion til produkterne og leveringen af disse, lever op til de strengeste kvalitetskrav.

SPORBARHED

(EN-ISO 13485-2003) Molift lever op til alle krav i ISO 13485 med hensyn til produkternes sporbarhed. Alle vores lifte og sejl har stregkoder for at lette sporbarheden for vores distributører på deres marked.


MILJØKRAV

(EN-ISO 14001:2004) Vi arbejder kontinuerligt på at minimere miljøpåvirkningen fra vores produktion, og vi er certificerede i henhold til ISO 14001. Denne standard indeholder lovmæssige krav til råmaterialer, emission, genanvendelse og strømforbrug. Vi anvender genanvendelige nikkel-metalhydridbatterier (NiMH) i vores lifte.




Molift RgoSlings

RgoSling MediumBack Polstret

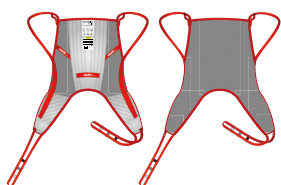


Størrelse	HMI-nr.	Art.nr.
XXS	82218	1720100
XS	77071	1720110
S	77072	1720120
M	77073	1720130
L	77074	1720140
XL	77075	1720150
XXL	77076	1720160

RgoSling HighBack Polstret

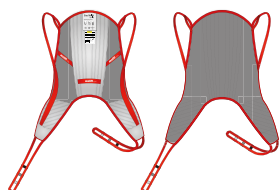


Størrelse	HMI-nr.	Art.nr.
XXS	82217	1720200
XS	77030	1720210
S	77060	1720220
M	77067	1720230
L	77068	1720240
XL	77069	1720250
XXL	77070	1720260

RgoSling MediumBack Net

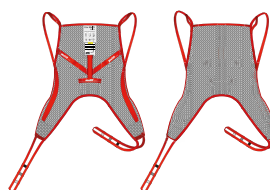

Størrelse	HMI-nr.	Art.nr.
XXS	77077	1720300
XS	77078	1720310
S	77079	1720320
M	77083	1720330
L	77080	1720340
XL	77081	1720350
XXL	77082	1720360

RgoSling HighBack Net

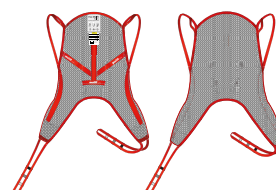

Størrelse	HMI-nr.	Art.nr.
XXS	77084	1720400
XS	77085	1720410
S	77086	1720420
M	77087	1720430
L	77088	1720440
XL	77089	1720450
XXL	77090	1720460

RgoSling Toilet LowBack




Størrelse	HMI-nr.	Art.nr.
XXS	77611	1720500
XS	77612	1720510
S	77613	1720520
M	77614	1720530
L	77615	1720540
XL	77616	1720550
XXL	77617	1720560

RgoSling Toilet HighBack




Størrelse	HMI-nr.	Art.nr.
XXS	77618	1720600
XS	77619	1720610
S	77621	1720620
M	77620	1720630
L	77622	1720640
XL	77623	1720650
XXL	77624	1720660

RgoSling Amputation MediumBack

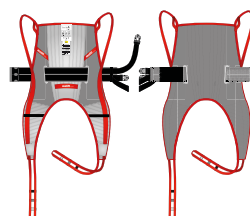


Størrelse	HMI-nr.	Art.nr.
XXS	77635	1721100
XS	77641	1721110
S	77636	1721120
M	77639	1721130
L	77637	1721140
XL	77638	1721150
XXL	77640	1721160

RgoSling Amputation HighBack

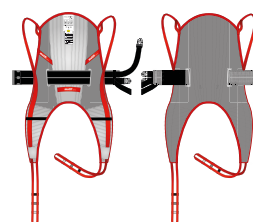

Størrelse	HMI-nr.	Art.nr.
XXS	77668	1721200
XS	77669	1721210
S	77670	1721220
M	77671	1721230
L	77672	1721240
XL	77674	1721250
XXL	77675	1721260

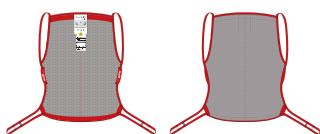

Størrelse	HMI-nr.	Art.nr.
XS	88156	1721410
S	77649	1721420
M	77650	1721430
L	77651	1721440
XL	88157	1721450
XXL	88158	1721460

RgoSling StandUp




Størrelse	HMI-nr.	Art.nr.
XS	77625	1720710
S	77626	1720720
M	77627	1720730
L	77628	1720740
XL	77629	1720750

RgoSling StandUp med støtte



Størrelse	HMI-nr.	Art.nr.
XS	77630	1720810
S	77631	1720820
M	77632	1720830
L	77634	1720840
XL	77633	1720850

RgoSling Stå/Gå-vest

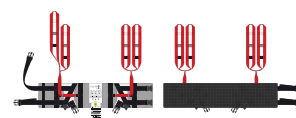


Størrelse	HMI-nr.	Art.nr.
XXS	77642	1721300
XS	77643	1721310
S	77645	1721320
M	77644	1721330
L	77647	1721340
XL	77646	1721350
XXL	77648	1721360

RgoSling Forlængerstropper




Størrelse	HMI-nr.	Art.nr.
One size	77652	1721600

RgoSling Stå/Gå-vest lyskestrapper

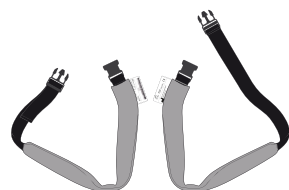

Størrelse	HMI-nr.	Art.nr.
XXS-XS	79213	1721700
S-M	79214	1721720
L-XL	79215	1721740

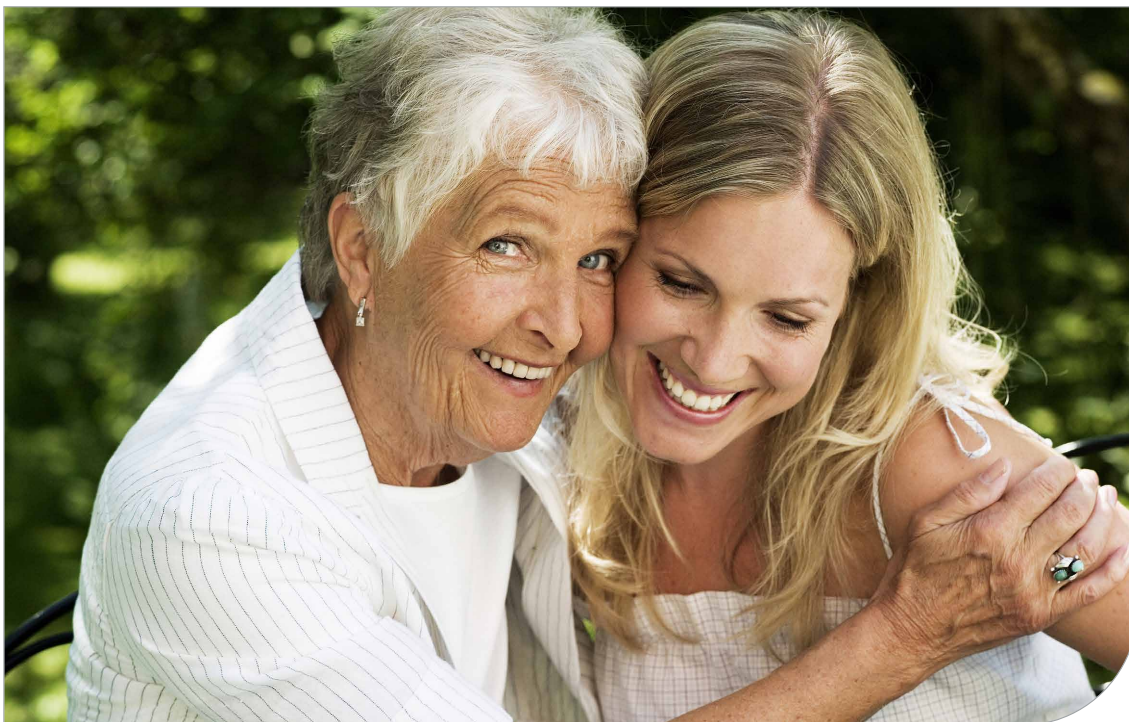

“Alle skal kunne leve et frit og uafhængigt liv og forfølge sine drømme,
uanset de fysiske omstændigheder.”



Etac har mange muligheder:

- Manuelle kørestole og siddestillinger
- Forflytningsløsninger
- Elektriske kørestole
- Komfort på badeværelset og løsninger til hverdagen
- Juniorudstyr

Du kan finde nyheder og opdateret information på
vores hjemmeside www.etac.dk.